

## ProCare

Dent 11 A

### Produit de lavage

#### Utilisation :

Poudre, alcaline. Pour le traitement en machine d'instruments dentaires dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professionnal.

*ProCare Dent 11 A* favorise l'élimination de toutes les salissures organiques, telles que le sang, la salive et empêche la réapparition de dépôts. Il est recommandé d'éliminer grossièrement les restes des composites, le ciment et le matériau d'empreinte avant durcissement.

*ProCare Dent 11 A* n'est pas adapté pour le nettoyage des instruments rotatifs. À cet effet, nous recommandons le nettoyant liquide *ProCare Dent 10 MA*.

#### Caractéristique de qualité :

*ProCare Dent 11 A* est conforme aux exigences de la législation en matière de dispositifs médicaux en vigueur. **CE MD**

Le fabricant et les autorités compétentes doivent signaler tout incident grave lié à ce produit.

#### Caractéristiques produit :

- Plus grande protection des matériaux
- Protection contre la corrosion pour les instruments et les plaques en acier inoxydable


#### Utilisation et dosage :

*Miele ProCare Dent 11 A* est adapté aux procédures des laveurs-désinfecteurs Miele Professionnal.

- Concentration utilisée : 3 g/l sur le doseur de porte pour le détergent en poudre
- Sélection du programme : Vario TD

Toujours doser la même quantité de produit de lavage, de préférence en utilisant la cuillère de dosage fournie avec le produit.

#### Déroulement de programme :

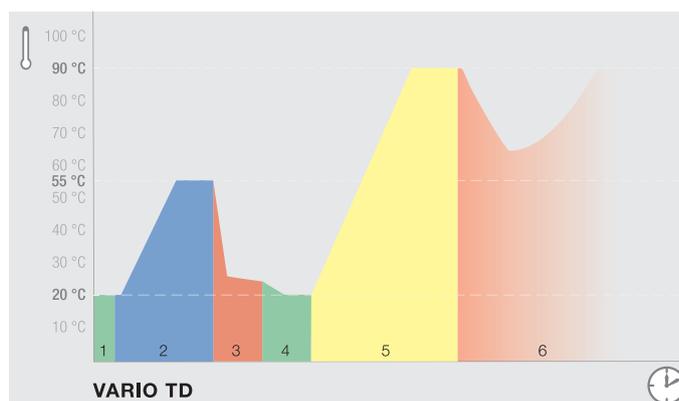

**Procédure Vario TD :**  
1 **Pré-lavage**  
à l'eau froide, pour éliminer le plus gros des salissures (ex : le sang)  
2 **Nettoyage**  
avec *ProCare Dent 11 A* à 55 °C (température de dosage 40 °C)  
3 **Neutralisation**  
avec *ProCare Dent 30 P*  
4 **Rinçage intermédiaire**  
à l'eau froide  
5 **Désinfection thermique**  
à 93 °C pendant 5 minutes, rinçage final inclus  
6 **Séchage**

La solution doit être complètement rincée à l'eau. À la fin de la procédure, aucun résidu de produit de lavage ne doit être visible. Lorsque l'agent neutralisant est utilisé correctement (ex : tri correct de la charge) dans des laveurs-désinfecteurs Miele Professionnal, celui-ci est distribué par le programme Vario TD. Une vérification a lieu lors de la mesure d'augmentation de la conductance pendant le rinçage final dans le cadre de la mise en service ou de la maintenance de routine du laveur-désinfecteur. Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final afin d'empêcher l'apparition de dépôts et de taches d'eau.

#### Attention !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Le traitement doit être effectué selon les dispositifs médicaux et les réglementations en vigueur avec un processus validé et adapté.
- Les recommandations de traitement du fabricant du dispositif médical doivent être respectées conformément aux directives de la norme DIN EN ISO 17664.
- Respecter les modes d'emploi des laveurs-désinfecteurs de Miele Professionnal.
- Uniquement à usage professionnel.

## ProCare

### Dent 11 A

## Produit de lavage

#### Caractéristiques techniques :

- Densité de chargement : env. 1015 g/l jusqu'à 1065 g/l
- Valeur pH (définie en eau déminéralisée, env. 20 °C) 3 g/l : env. 11,5

#### Substances pour produit de lavage conformes à la directive européenne sur les détergents 648/2004 :

- < 5 % de tensio-actifs non ioniques
- > 30 % de phosphates

#### Conseils de stockage :

- Température de stockage conseillée : 0 °C à 30 °C
- Fermer de nouveau le couvercle après l'avoir retiré. Le produit peut s'agglutiner en raison de l'humidité et peut perdre de son efficacité
- En cas de stockage approprié : utilisable 2 ans
- Utilisable jusqu'en : voir mention sur l'étiquette derrière le symbole 

#### Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les containers vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

#### Unité d'emballage livrable :

Désignation	Containers	Numéro de matériel
ProCare Dent 11 A	seau de 10 kg	12 186 990

#### Contact :

##### Allemagne

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Téléphone +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Luxembourg

Miele S.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339 Luxembourg  
Téléphone +352 (0) 4971125  
info@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional/index.htm

##### Importateur pour la Suisse

Miele AG  
Limmatstrasse 4,  
8957 Spreitenbach  
Téléphone +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

##### France

Miele S.A.S.  
9, avenue Albert Einstein  
93150 Le Blanc-Mesnil  
Téléphone +33 1 49394400  
advpro@miele.fr  
www.miele.fr/professional

##### Belgique

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Téléphone +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/nl/professional/index.htm



##### Allemagne

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
www.drweigert.de