

ProCare Dent 11 A

Reinigingsmiddel



Gebruik:

Poedervormig, alkalisch reinigingsmiddel. Voor de machinale herverwerking van tandheelkundige instrumenten in Miele Professional thermodesinfectoren.

ProCare Dent 11 A ondersteunt het verwijderen van organische verontreinigingen, zoals bloed en speeksel, en voorkomt dat er opnieuw afzettingen hiervan ontstaan. Aanbevolen wordt om grove resten van composieten, cement en afdruk materiaal voor het uitharden te verwijderen.

ProCare Dent 11 A is niet geschikt voor het reinigen van transmissie-instrumenten. Hiervoor adviseren wij het vloeibare reinigingsmiddel *ProCare Dent 10 MA*.

Kwaliteitskenmerk:

ProCare Dent 11 A voldoet aan de voorschriften vanuit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.  

Als zich met dit product een ernstig incident voordoet, moet dit aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit worden gemeld.

Producteigenschappen:

- Zeer goede materiaalbescherming
- Bescherming tegen corrosie voor instrumenten en trays van roestvrij staal


Toepassing en dosering:

Miele ProCare Dent 11 A is afgestemd op de procedures in thermodesinfectoren van Miele Professional.

- Concentratie: 3 g/l via het doseerapparaat voor poedervormig reinigingsmiddel in de deur
- Programmakeuze: Vario TD

Er moet altijd dezelfde hoeveelheid reinigingsmiddel worden gedoseerd, bij voorkeur door de doseerschep te gebruiken die bij het product wordt geleverd.

Programmaverloop:

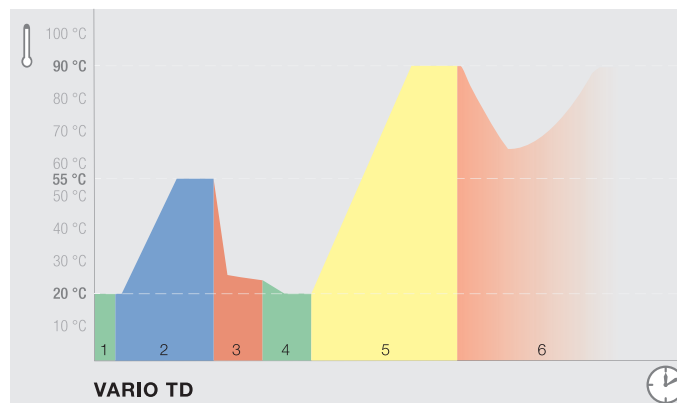

Procesverloop Vario TD:

- 1 **Voorspoelen**
met koud water om grove vervuilingen (bijv. bloed) te verwijderen
- 2 **Reinigen**
met *ProCare Dent 11 A* op 55 °C (doseertemperatuur 40 °C)
- 3 **Neutraliseren**
met *ProCare Dent 30 P*
- 4 **Tussenspoelen**
met koud water
- 5 **Thermische desinfectie**
op 93 °C gedurende 5 minuten incl. laatste spoeling
- 6 **Drogen**

De te gebruiken oplossing kan volledig met water worden afgespoeld. Aan het einde van het proces mogen er geen resten van het reinigingsmiddel meer zichtbaar zijn. Bij gebruik in thermodesinfectoren van Miele Professional is dit het geval als het Vario TD-programma correct wordt gebruikt (bijv. juiste sortering en belading van het spoelgoed). Verificatie vindt plaats door meting van de geleidingsstijging in de laatste spoelcyclus tijdens de inbedrijfstelling of het routineonderhoud van de thermodesinfecteur. Het gebruik van gedemineraliseerd water in de laatste spoeling wordt aanbevolen om aanslag en watervlekken te voorkomen.

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- De herverwerking dient met geschikte, gevalideerde processen te worden uitgevoerd volgens de wetgeving voor medische hulpmiddelen en geldende regels.
- Neem de herverwerkingsaanbevelingen van de fabrikant van het medisch hulpmiddel overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO 17664 in acht.
- De gebruiksaanwijzingen van de thermodesinfectoren van Miele Professional moeten in acht worden genomen.
- Alleen voor commerciële toepassingen.

ProCare

Dent 11 A

Reinigingsmiddel


Technische gegevens:

- Stortgewicht: ca. 1.015 g/l tot 1.065 g/l
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, ca. 20 °C) 3 g/l: ca. 11,5

Inhoudsstoffen van reinigingsmiddelen volgens de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia:

- < 5 % niet-ionische tensiden
- > 30 % fosfaat

Opslaginstructies:

- De aan te houden opslagtemperatuur: is: 0 °C tot 30 °C
- Deksel na gebruik weer sluiten Door vocht kan het product gaan klonteren en kan de werking afnemen
- Bij correcte opslag 2 jaar te gebruiken
- Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool 

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheid:

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
ProCare Dent 11 A	10-kg-emmer	12 186 990

Contactgegevens:

Duitsland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefoon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Telefoon +31 (0) 347378911
info@miele.nl
www.miele.nl/professional/index.htm

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/nl/professional/index.htm



Duitsland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
www.drweigert.de