

ProCare Lab 10 AP

Detergente

Utilizzo:

Concentrato liquido, alcalino. Per il lavaggio di utensili e vetreria di laboratorio nelle lavavetreria Miele Professional.

Applicazioni principali:

ProCare Lab 10 AP è utilizzato nei laboratori medici, biologici, microbiologici e chimici, nei laboratori di analisi acqua, dell'industria alimentare e dei fosfati, dell'industria cosmetica e farmaceutica, degli oli minerali e in altri settori.

Proprietà del prodotto:

- Detergente alcalino con un'elevata percentuale di disperdenti.
- Buona efficacia di lavaggio contro i residui ostinati o essiccati, come oli e grassi, su vetreria di laboratorio e materiale di laboratorio riutilizzabile.
- Non contiene fosfati, tensioattivi e ossidanti.
- Può essere utilizzato con durezza dell'acqua fino a 3 °dH (0,5 mmol/l).

Adatto a: acciaio inossidabile, vetreria di laboratorio¹, ceramica, plastiche² (PE, PP, PVDF, PTFE)

Non adatto a: metalli leggeri e metalli non ferrosi, leghe di metalli leggeri, alluminio, alluminio anodizzato


Uso e dosaggio:

ProCare Lab 10 AP è formulato per essere utilizzato nelle lavavetreria Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite pompa di dosaggio.
- È necessario utilizzare dosatori adeguati.
- Concentrazione di applicazione: la quantità di dosaggio dipende dal grado di sporco e dovrebbe essere compresa tra 2 e 4 ml/l.
- Nella fase del programma di neutralizzazione degli acidi, il residuo alcalino viene neutralizzato usando *ProCare Lab 30 P* o *ProCare Lab 30 C*.
- I residui di nutrienti devono essere rimossi prima del lavaggio in una lavavetreria.
- Temperatura minima di dosaggio: ≥ 15 °C, temperatura massima consigliata durante l'uso: ≤ 95 °C

Svolgimento del programma:

Esempio basato su un programma di laboratorio universale.

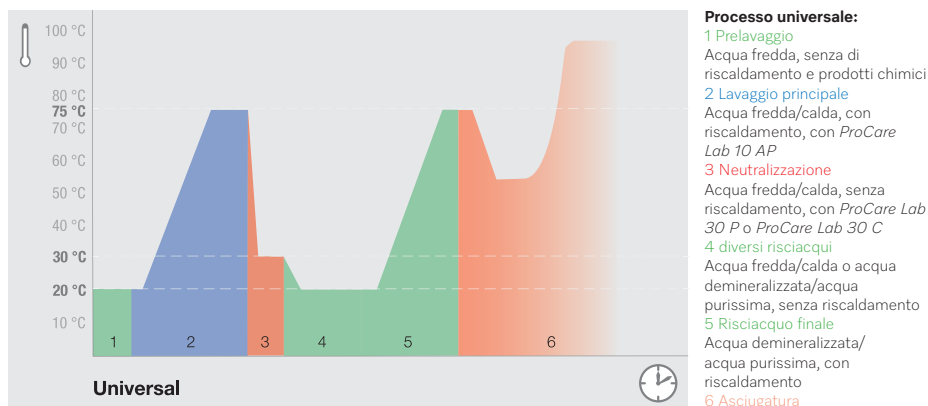

Attenzione!

- La soluzione di lavaggio *ProCare Lab 10 AP* deve essere risciacquata completamente con acqua (preferibilmente acqua demineralizzata).
- Non mischiare con altri prodotti.
- Prima di cambiare prodotto, risciacquare il sistema di dosaggio, compresi i tubi di aspirazione, con acqua.
- Osservare le raccomandazioni di pulizia fornite dai produttori di vetreria di laboratorio.
- Si raccomanda l'uso di acqua demineralizzata nel risciacquo finale per evitare macchie d'acqua.
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavavetreria Miele Professional.
- Solo per uso professionale.

¹Tipi di vetro e ²plastiche adatti al lavaggio alcalino in macchina secondo le istruzioni del produttore.

ProCare Lab 10 AP

Detergente

Dati tecnici:

- Densità (20 °C): ca. 1,4 g/cm³
- Valore pH (determinato usando acqua demineralizzata, 20 °C) da 2 ml/l a 4 ml/l: da 12,3 a 12,6 ca.

Componenti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004 sui detersivi:

- < 5 % poliacarbossilati

Informazioni sulla conservazione:

- Temperatura di conservazione: 0–30 °C
- Può essere utilizzato per 3 anni in condizioni di conservazione adeguate.
- Data di scadenza: vedere l'etichetta accanto al simbolo della clessidra .

Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze:

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza. Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito.

Smaltire i contenitori solo quando sono vuoti e sigillati. Smaltimento dei residui del prodotto: fare riferimento alla scheda tecnica di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di eseguire le proprie prove ed esperimenti. Non può essere considerato una garanzia legale delle caratteristiche o delle proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio e accessori:

Designazione	Unità di imballaggio
<i>ProCare Lab 10 AP</i>	Tanica da 5 l e 10 l
Chiave per tanica	per taniche da 5 l, 10 l e 20 l
Vaschetta di raccolta DTD2	per taniche da 5 l e 10 l

Informazioni di contatto:

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H.
Umfahrungsstr. 27
39057 Eppan (BZ)
Tel.: +39 0471 666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional



Germania

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Amburgo
www.drweigert.de

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional