

## ProCare

Dent 30 C

### Produit de neutralisation

#### Utilisation:

Liquide concentré, acide, à base d'acide citrique. Pour le traitement en machine d'instruments dentaires, y compris des pièces à main dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

*ProCare Dent 30 C* est adapté aux instruments qui ne doivent pas être traités avec un produit de neutralisation à base d'acide phosphorique comme des pièces à main par exemple.

#### Particularité:

*ProCare Dent 30 C* répond aux exigences européennes sur les dispositifs médicaux.  

Si un incident grave se produit avec le produit, signalez-le au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

#### Caractéristiques produit:


- Soins des matériaux
- Ne contient pas d'agents tensio-actifs

#### Application et dosage:

Miele *ProCare Dent 30 C* est adapté au traitement des instruments dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à une pompe doseuse
- Les instruments et les conduites d'évacuation doivent être résistants aux acides
- Des doseurs appropriés doivent être utilisés pour le dosage.
- Concentration : 1 ml/l (0,1 %)
- Choix de programme Vario TD

#### Déroulement du procédé:

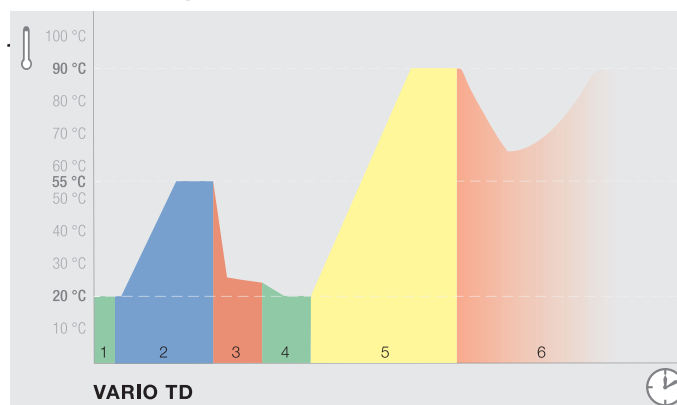

#### Déroulement du procédé Vario TD:

- 1 Prélavage à l'eau froide pour éliminer les salissures grossières (par ex. sang)
- 2 Lavage
- 3 Neutralisation avec *ProCare Dent 30 C* avec de l'eau froide
- 4 Rinçage intermédiaire avec de l'eau froide
- 5 Désinfection thermique à 93 °C avec temps de maintien pendant 5 minutes dans le rinçage final
- 6 Séchage

La solution doit être complètement rincée avec de l'eau. Lors d'une utilisation dans un laveur-désinfecteur Miele cela se fait automatiquement par le programme Vario TD si toutes les conditions sont réunies (disposition adaptée des instruments dans l'appareil).

Une vérification est effectuée par la mesure de l'augmentation de la conductibilité au cours du rinçage final dans le cadre de la mise en service ou d'une maintenance de routine du laveur-désinfecteur.

Nous conseillons l'utilisation d'eau déminéralisée pour la phase de rinçage final afin d'éviter les dépôts et les taches d'eau et de protéger l'aluminium anodisé.

#### Attention!

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Contactez le Service Miele pour un remplacement de produit.
- Le traitement doit répondre à toutes les exigences relatives à la directive sur les dispositifs médicaux et doit s'effectuer selon des procédés adaptés validés.
- Veuillez suivre les indications des fabricants d'instruments conformément à la norme CAN/CSA-Z17664 (DIN EN ISO 17664).
- Tenez compte des indications des modes d'emploi des laveurs-désinfecteurs Miele Professional.
- *ProCare Dent 30 C* est réservé à une utilisation professionnelle.

## ProCare

Dent 30 C

### Produit de neutralisation


#### Caractéristiques techniques:

- Densité (20 °C) : ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- Valeur pH (déterminée pour de l'eau déminéralisée, 20 °C) 1 ml/l : env. 3,0

#### Composants dangereux conformément au décret CE 648/2004:

- Agent conservateur (2-octyl-2H-isothiazol-3-one)

#### Conseils de stockage:

- Température de stockage : -3 °C à 30 °C
- Stockage jusqu'à 3 ans si les consignes de stockage sont respectées.
- Utilisable jusqu'au : voir étiquette derrière le symbole 

Au cours de l'entreposage, des variations de couleur peuvent se produire dans les contenants scellés à l'origine. Ceci n'affecte pas les propriétés de l'application.

#### Consignes de sécurité:

Vous trouverez d'autres informations concernant la sécurité et l'environnement dans la fiche de données de sécurité. Ceux-ci sont disponibles sur les sites Web de Miele.

N'éliminez l'emballage que lorsqu'il est vide et fermé. Élimination des restes de produit: voir la fiche des données de sécurité.

Les informations de cette fiche se réfèrent à nos connaissances actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer ses propres contrôles et ses propres tests. Ces informations ne doivent pas servir de base légale faisant référence.

#### Unité d'emballage et accessoire livrables:

Désignation	emballage	numéro de produit
• ProCare Dent 30 C	• Bidon de 1 l	• 12 187 230
• ProCare Dent 30 C	• Bidon de 5 l	• 12 187 250
• Clé ouvre-bidon	• Pour bidons de 5 l et 20 l	• 11 851 600
• Plat récupérateur DTD 2	• Pour des bidons de produit de 5 l et 10 l	• 10 695 460

#### Contact information:

##### Germany

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
D 33332 Gütersloh  
Tel.: +49 800 22 44 644  
www.miele-professional.de

##### Canada

Miele Limited Canada Headquarters  
Professional Division  
161 Four Valley Drive  
Vaughan, ON L4K 4V8  
Tel: 1-888-325-3957  
Fax: 1-800-803-3366  
mieleprofessional.ca  
professional@miele.ca



Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
www.drweigert.de