

⚠ Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar desinfectar G 7827/G 7828 ou PG 8527/PG 8528. Lave e desinfecte somente instrumentos/dispositivos médicos que tenham a indicação do fabricante de que podem ser lavados na máquina e siga as indicações específicas. O programa de lavagem utilizado, de preferência com desinfectação térmica, poderá ter de ser ajustado à qualidade do material dos produtos considerados dispositivos médicos. A última enxaguagem deve ser sempre efectuada com água desmineralizada. Ao utilizar o reconhecimento automático do carro a codificação deve estar adaptada.

Equipamento fornecido:

Carro base E 900-6 com seis níveis sendo dois amovíveis, A 553, L 636, P 790 mm, com uma régua magnética para reconhecimento automático do carro e ímanes do braço de lavagem para controle do braço de lavagem (só PG 8527/PG 8528).

Acessórios que podem ser adquiridos

- E 142, Caixa em rede normalizada DIN
- E 473/1, Complemento para peças pequenas
- E 476, Apoios para instrumentos Ø 4 - 8 mm
- E 479, Suporte para instrumentos Ø até 4 - 4 mm
- E 492, Complemento para reniformes
- E 518, Ligação para mangueira

Áreas de aplicação:

No carro E 900-6 podem ser colocados até 18 caixas em rede normalizada DIN com instrumentos de cirurgia Adicionalmente existem nos 4 níveis, 4 ligações em cada um, para instrumentos ocios.

Dimensões de carga* [A x L x P em mm]	E 900-6	sem o nível 2	sem o nível 2 e nível 4
Nível 1	71 x 555 x 780	162 x 555 x 780	162 x 555 x 780
Nível 2	71 x 565 x 780	–	–
Nível 3	71 x 555 x 780	71 x 555 x 780	162 x 555 x 780
Nível 4	71 x 565 x 780	71 x 565 x 780	–
Nível 5	71 x 580 x 780	71 x 580 x 780	71 x 580 x 780
Nível 6	71 x 595 x 780	71 x 595 x 780	71 x 595 x 780

* Numeração dos níveis a contar de baixo

Efectue um controle ao carregar/antes de iniciar o programa:

- os braços de lavagem rodam livremente,
- os injectores dos braços de lavagem estão limpos/isentos de sujidade que provoque obstruções,
- os níveis amovíveis estão bloqueados
- o carro introduzido na máquina está bem acoplado à ligação de entrada de água da máquina de lavar e desinfectar.

Manter a disposição da carga no contexto da validação.

Para que todos os dispositivos de lavagem apresentem uma pressão de lavagem padronizada, é necessário que os diversos conjuntos aparafusáveis sejam equipados com injectores, adaptadores, bicos de aspersão ou parafusos falsos. Não é permitido utilizar dispositivos de lavagem danificados como sejam os injectores, adaptadores ou bicos de aspersão. Injectores que não estejam ocupados não necessitam de ser substituídos por parafusos falsos.



E 900-6



E 900-6 sem 2º e 4º nível


Níveis amovíveis



O segundo e quarto nível do carro são amovíveis Desta forma e quando for necessário, fica com uma altura de carga maior no nível 1 e 3.


Retirar o nível

- Levantar e puxar para fora

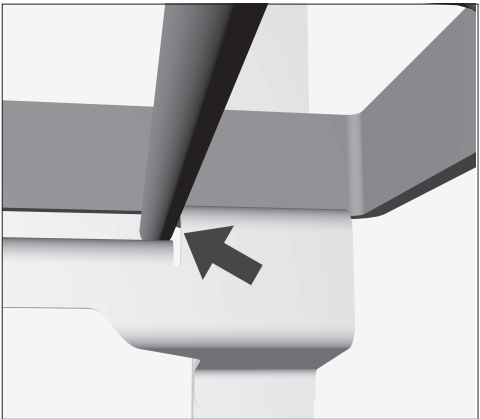


Colocar o nível


- Colocar o nível na calha do carro e deslizar para o interior. Os ganchos situados na base do nível encaixam nos dois lados por trás de uma saliência da calha do carro. O nível tem de acoplar correctamente para que fique bem posicionado.
- Controlar a fixação do nível na calha.

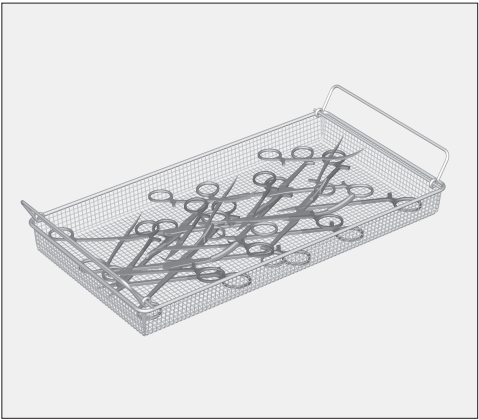

■ Instrumentos articulados devem ser colocados abertos nos complementos em rede para minimização das áreas cobertas.

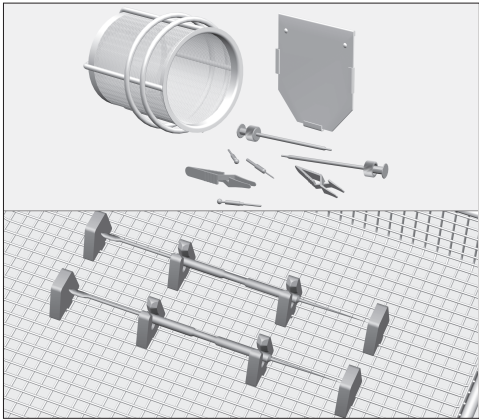


■ Instrumentos leves ou peças pequenas, que podem facilmente ser deslocados pela mecânica de lavagem devem ser fixos através dos complementos E 473 ou por apoios de silicone tais como o E 476.

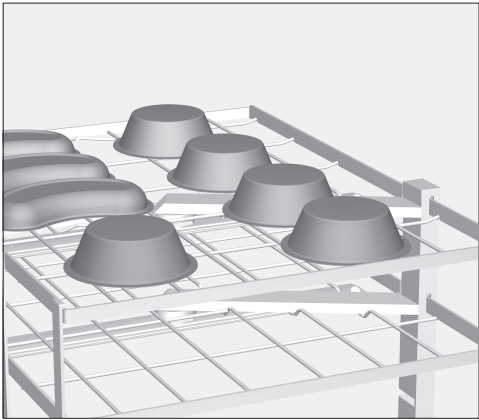

■ Arrumar os utensílios no carro, como por ex. caixas, copos, reniformes, com a abertura voltada para baixo de forma que a lavagem não seja prejudicada e não sejam deslocados ou voltados devido à mecânica de lavagem.

Se os recipientes ociosos forem colocados com a abertura voltada para cima, a água de enxágue fica acumulada e o resultados de enxágue pode ficar prejudicado.

Ligações para mangueiras E 518 (acessórios opcionais).

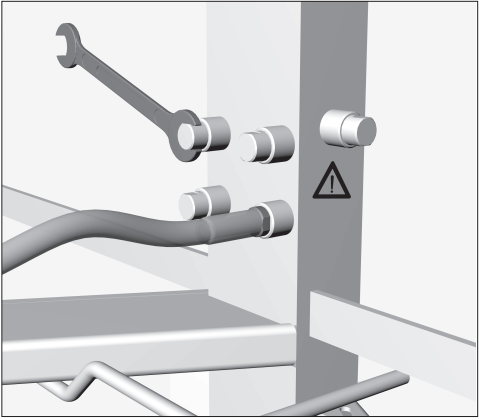


Colocar as ligações das mangueiras

As ligações das mangueiras E 518 podem ser adaptadas às condutas de água do carro. Instrumentos ociosos, podem ser ligados aí e colocados numa caixa em rede no nível do carro.

Para isso:

- Desaparafusar os parafusos falsos das ligações utilizando uma chave de bocas SW 9.
- Aparafusar as ligações da mangueira às ligações e apertar com uma chave de bocas.

⚠ Nas ligações de mangueiras, não é possível ligar derivações ou extensões. A pressão seria bastante reduzida .

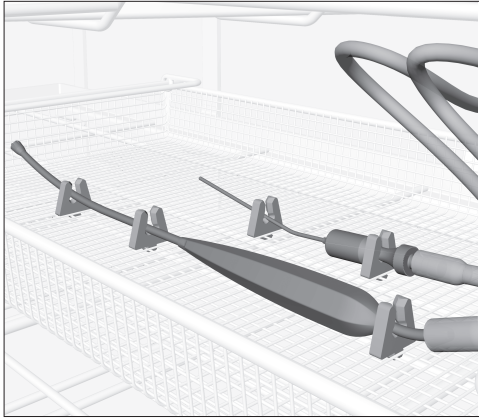


Ligar instrumentos ociosos

⚠ Antes de ligar os instrumentos ociosos deve ficar assegurada a passagem de água através dos canais Lúmen.

- Fixar os instrumentos ociosos com os apoios 476 ou E 479 numa caixa em rede.
- Colocar a caixa em rede sobre um nível do carro e ligar os instrumentos ociosos a uma ligação da mangueira.
- Soltar os instrumentos ociosos das ligações, após o processamento.

⚠ Instrumentos que se tenham soltado das ligações das mangueiras durante a lavagem devem voltar a ser processados.

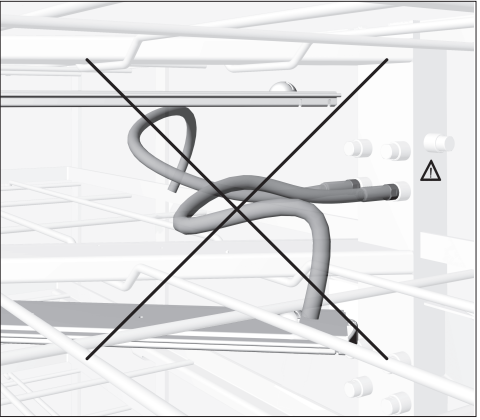

⚠ As ligações para mangueiras que não são utilizadas devem ser substituídas por parafusos falsos E 362.

As pontas finais soltas das ligações da mangueira rodam devido à pressão de lavagem. O que poderá provocar o bloqueio dos braços de lavagem.

Acesso de medição para medir a pressão de lavagem

⚠ No âmbito das análises de desempenho e validação conforme a norma DIN EN ISO 15883 neste acesso, pode ser medida a pressão de lavagem.

- Para efectuar medições à pressão de lavagem deve substituir o parafuso de fecho por um adaptador Luer-Lock, por ex. E 447.

⚠ No acesso de medição não podem ser ligados instrumentos, régulas de lavagem, etc.