

## ProCare Dent 11 A

### Détergent

#### Utilisation :

Poudre, agent alcalin. Pour le traitement automatisé des instruments dentaires dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

*ProCare Dent 11 A* garantit l'élimination des salissures organiques telles que le sang et la salive et empêche leur redéposition. Les résidus grossiers issus de composites, ciment dentaire et produits de prise d'empreintes dentaires doivent être éliminés sans attendre afin d'éviter leur incrustation.

*ProCare Dent 11 A* n'est pas adapté au nettoyage des pièces à main. L'utilisation du détergent liquide *ProCare Dent 10 MA* est recommandée à cet effet.

#### Caractéristiques :

*ProCare Dent 11 A* est conforme aux lignes directrices européennes concernant les dispositifs médicaux.  

En cas d'incident sérieux relatif au produit, veuillez le signaler au fabricant ainsi qu'à l'autorité nationale compétente.

#### Propriétés du produit :

- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Protection contre la corrosion pour les instruments et plateaux en acier inoxydable.


#### Utilisation et dosage :

*ProCare Dent 11 A* de Miele est formulé pour être utilisé dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

- Concentration d'application : 3 g/l (0,3 %) via le compartiment de dosage pour les détergents en poudre
- Sélection de programme : Vario TD

Une quantité de détergent identique devrait être utilisée à chaque fois, de préférence en utilisant la cuillère de dosage fournie.

#### Déroulement du programme :

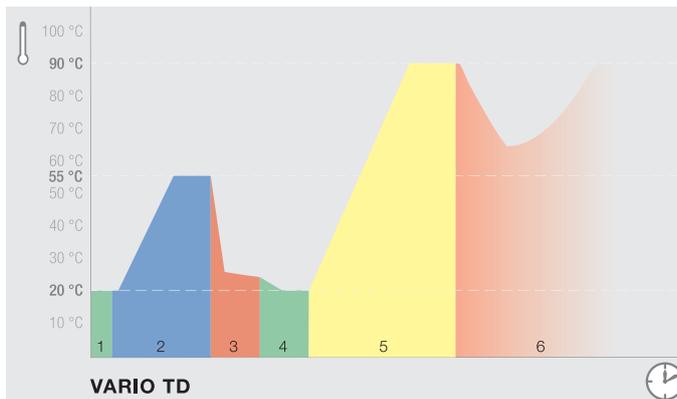

**Processus Vario TD :**  
1 **Prélavage**  
à l'eau froide pour éliminer toutes les salissures grossières (par ex. du sang).  
2 **Lavage principal**  
avec *ProCare Dent 11 A* à 55 °C (température de dosage 40 °C)  
3 **Neutralisation**  
avec *ProCare Dent 30 P*  
4 **Rinçage intermédiaire**  
à l'eau froide  
5 **Désinfection thermique**  
à 93 °C avec temps de maintien de 5 minutes pour le rinçage final  
6 **Séchage**

La solution doit être entièrement rincée à l'eau. Aucune trace de détergent ne devrait rester à la fin du processus. Sur les laveurs-désinfecteurs Miele Professional, cela est garanti par une utilisation correcte du programme Vario TD (par ex. chargement correct).

La vérification est assurée en mesurant l'augmentation de la conductivité lors du rinçage final au moment de la mise en service et des interventions d'entretien programmées.

Miele recommande d'utiliser de l'eau totalement déminéralisée pour le rinçage final afin de protéger la charge et le laveur-désinfecteur contre les taches et les dépôts.

#### Remarques importantes !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Le traitement doit être conforme à toutes les ordonnances concernant la réglementation relative aux dispositifs médicaux et doit être effectué selon des processus appropriés et validés.
- Suivez les recommandations des fabricants de dispositifs médicaux sur le traitement en ce qui concerne les dispositions de la norme CAN/CSA-Z17664 (ISO 17664).
- Les indications du mode d'emploi des laveurs-désinfecteurs Miele Professional doivent être respectées.
- Pour applications commerciales uniquement.

# ProCare

**Dent 11 A**

## Détergent

**Données techniques :**

- Masse par litre : env. 1,015 g/l à 1,065 g/l
- Valeur de pH (déterminée avec de l'eau totalement déminéralisée à env. 20 °C) 3 g/l : env. 11,5

**Ingrédients selon le règlement (CEE) 648/2004 relatif aux détergents :**

- < 5 % de tensioactifs non ioniques
- > 30 % de phosphates

**Informations sur le stockage :**

- Température de stockage : 0 °C à 30 °C
- Remettez le couvercle en place après son utilisation. Le produit tend à devenir grumeleux s'il est exposé à l'humidité, ce qui peut entraîner une perte d'efficacité.
- Peut être utilisé pendant 2 ans dans les conditions de stockage adéquates
- Date limite d'utilisation : consulter l'étiquette à côté du symbole du sablier 

**Consignes de sécurité et mises en garde :**

Consultez les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele listés ci-dessous.

Éliminez uniquement les réservoirs vides et fermés. Élimination des restes de produit : consultez la fiche de données de sécurité.

Toutes les informations fournies dans ce document sont actualisées et correctes à notre connaissance. Cela ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer ses propres essais et expériences. Ces informations ne peuvent pas être considérées comme une garantie des caractéristiques et propriétés du produit.

**Unité d'emballage :**

Désignation	Unité d'emballage	N° mat.
ProCare Dent 11 A	seau de 10 kg	12 186 990

**Coordonnées :****Allemagne**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Tél. : 49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Canada**

Miele Limited  
161 Four Valley Drive  
Vaughan, ON L4K 4V8  
Tél. : 1-888-325-3957  
professional@miele.ca  
www.mieleprofessional.ca

**Allemagne**

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg, Allemagne  
www.drweigert.de