

ProCare

Dent 30 P

Produit de neutralisation

Utilisation :

Concentré liquide, acide, à base d'acide phosphorique. Pour le traitement automatisé des instruments dentaires dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

ProCare Dent 30 P n'est pas adapté à une utilisation sur les pièces à main, les métaux non ferreux, l'aluminium anodisé et les articles nickelés et chromés. L'agent de neutralisation *ProCare Dent 30 C* est recommandé pour une utilisation sur les pièces à main.

Caractéristiques :

ProCare Dent 30 P est conforme aux lignes directrices européennes concernant les dispositifs médicaux.  

En cas d'incident sérieux relatif au produit, veuillez le signaler au fabricant ainsi qu'à l'autorité nationale compétente.

Propriétés du produit :


- Élimine le ternissement et la salissure soluble dans les acides
- Excellentes propriétés de rinçage
- Ne contient aucun tensio-actif

Utilisation et dosage :

ProCare Dent 30 P de Miele est formulé pour être utilisé dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

- Dosage précise et économique grâce à la pompe de dosage.
- Des distributeurs de dosage appropriés doivent être utilisés.
- Vérifiez que la charge et les conduits d'évacuation soient suffisamment résistants aux acides
- Concentration d'application : 1 ml/l (0,1 %)
- Sélection de programme : Vario TD

Déroulement du programme :

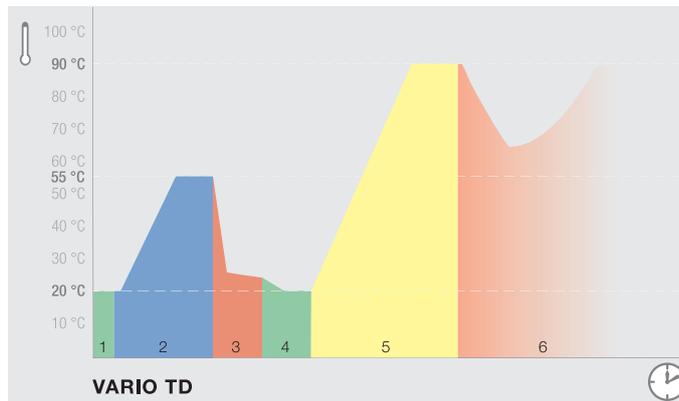

Processus Vario TD :

- 1 Prélavage à l'eau froide pour éliminer toutes les salissures grossières (par ex. du sang)
- 2 Lavage principal
- 3 Neutralisation avec *ProCare Dent 30 P*
- 4 Rinçage intermédiaire à l'eau froide
- 5 Désinfection thermique à 93 °C avec temps de maintien de 5 minutes pour le rinçage final
- 6 Séchage

La solution doit être entièrement rincée à l'eau. Sur les laveurs-désinfecteurs Miele Professional, cela est garanti par une utilisation correcte du programme Vario TD (par ex. chargement correct). La vérification est assurée en mesurant l'augmentation de la conductivité lors du rinçage final au moment de la mise en service et des interventions d'entretien programmées. Miele recommande d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final afin de protéger la charge et le laveur-désinfecteur contre les taches et les dépôts.

Remarques importantes!

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Appelez le service technique Miele si vous changez de produit.
- Le traitement doit être conforme à toutes les ordonnances concernant la réglementation relative aux dispositifs médicaux et doit être effectué selon des processus appropriés et validés.
- Suivez les recommandations des fabricants de dispositifs médicaux sur le traitement en ce qui concerne les dispositions de la norme CAN/CSA-Z17664 (ISO 17664).
- Les indications du mode d'emploi des laveurs-désinfecteurs Miele Professional doivent être respectées.
- Pour applications professionnelles uniquement.

ProCare

Dent 30 P

Produit de neutralisation

Données techniques :

- Densité (à 20 °C) : env. 1,5 g/cm³
- Valeur de pH (déterminée avec de l'eau totalement déminéralisée à 20 °C) 1 ml/l : env. 2,3

Ingrédients selon le règlement (CEE) 648/2004 relatif aux détergents :

- > 30 % de phosphates

Informations sur le stockage :

- Température de stockage : -15 °C à 30 °C
- Peut être utilisé pendant 3 ans dans les conditions de stockage adéquates
- Date limite d'utilisation : consulter l'étiquette à côté du symbole du sablier 

Consignes de sécurité et mises en garde :

Consultez les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Web de Miele indiqués ci-dessous.

Éliminez uniquement les contenants vides et fermés. Élimination des restes de produit : consultez la fiche de données de sécurité.

Toutes les informations fournies dans ce document sont actualisées et correctes à notre connaissance. Cela ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer ses propres essais et expériences. Ces informations ne peuvent pas être considérées comme une garantie légale des caractéristiques et propriétés du produit.

Unités d'emballage et accessoires :

Désignation	Unité de conditionnement	N° mat.
<i>ProCare Dent 30 P</i>	Bouteille d'1 l	12 187 370
<i>ProCare Dent 30 P</i>	Bidon de 5 l	12 187 380
Clé ouvre-bidon	Pour bidon de 5 l et 20 l	11 851 600
Plat récupérateur DTD 2	Pour des bidons de produit de 5 l et 10 l	10 695 460

Coordonnées :

Allemagne

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tél.: 49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Canada

Miele Limited
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
Tél. : 1-888-325-3957
E-mail : professional@miele.ca
www.mieleprofessional.ca



Allemagne

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg, Allemagne
www.drweigert.de