

ProCare

Dent 30 P


Neutralisatiemiddel

Gebruik:

Vloeibaar concentraat, zuur, op basis van fosforzuur. Voor de machinale - herverwerking van tandheelkundige instrumenten in thermodesinfectoren van Miele Professional.

ProCare Dent 30 P is niet geschikt voor transmissie-instrumenten, materialen van non-ferrometaal, geanodiseerd aluminium en verchroomde en vernikkelde onderdelen. Het neutralisatiemiddel *ProCare Dent 30 C* is bestemd voor de herverwerking van transmissie-instrumenten.

Kwaliteitskenmerk:

ProCare Dent 30 P voldoet aan de voorschriften vanuit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. 

Als zich met dit product een ernstig incident voordoet, moet dit aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit worden gemeld.

Producteigenschappen:


- Verwijdert aanloopkleuren en in zuur oplosbare verontreinigingen
- Zeer goed afspoelbaar
- Vrij van tensiden

Toepassing en dosering:

Miele *ProCare Dent 30 P* is afgestemd op de procedures in thermodesinfectoren van Miele Professional

- Gebruik geschikte doseertoestellen voor de dosering.
- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd
- Let op de zuurbestendigheid van het spoelgoed en de afvoerleidingen
- Concentratie: 1 ml/l
- Programmakeuze: Vario TD

Programmaverloop:

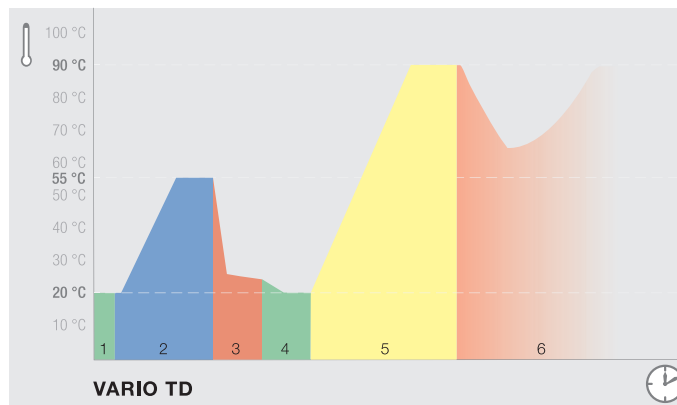

Procesverloop Vario TD:

- 1 Voorspoelen met koud water om grove vervuilingen (bijv. bloed) te verwijderen
- 2 Reinigen
- 3 Neutraliseren met *ProCare Dent 30 P*
- 4 Tussenspoelen met koud water
- 5 Thermische desinfectie op 93 °C gedurende 5 minuten incl. laatste spoeling
- 6 Drogen

De te gebruiken oplossing kan volledig met water worden afgespoeld. Bij gebruik in thermodesinfectoren van Miele Professional is dit het geval als het Vario TD-programma correct wordt gebruikt (bijv. juiste sortering en belading van het spoelgoed). Verificatie vindt plaats door meting van de geleidingsstijging in de laatste spoelcyclus tijdens de ingebruikneming of het routineonderhoud van de thermodesinfector. Het gebruik van gedemineraliseerd water in de laatste spoeling wordt aanbevolen om aanslag en watervlekken te voorkomen.

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Neem voor vervanging van het product contact op met de Miele Service.
- De herverwerking dient met geschikte, gevalideerde processen te worden uitgevoerd volgens de wetgeving voor medische hulpmiddelen en geldende regels.
- Neem de herverwerkingsaanbevelingen van de fabrikant van het medisch hulpmiddel overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO 17664 in acht.
- De bedieningsinstructies van de thermodesinfectoren van Miele Professional moeten in acht worden genomen.
- Alleen voor commerciële toepassingen.

ProCare Dent 30 P

Neutralisatiemiddel

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,5 g/cm³
- pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 1 ml/l: ca. 2,3

Inhoudsstoffen van reinigingsmiddelen volgens de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia:

- > 30% fosfaat

Opslaginstructies:

- De aan te houden opslagtemperatuur: is: -15 °C tot 30 °C
- Bij correcte opslag 3 jaar te gebruiken
- Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool 

Waarschuwingen en veiligheidstips:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheden en toebehoren:

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
<i>ProCare Dent 30 P</i>	Fles van 1 l (deksel met vultuit)	12 187 370
<i>ProCare Dent 30 P</i>	Jerrycan van 5 l	12 187 380
Opener	Voor jerrycans van 5 l en 20 l	11 851 600
DTD 2 Lekbak	Voor jerrycans van 5 l en 10 l	10 695 460

Contactgegevens:

Duitsland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefoon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Telefoon +31 347378911
info@miele.nl
www.miele.nl/professional/index.htm



Duitsland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlhagen 85
D-20539 Hamburg
www.drweigert.de

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/nl/professional/index.htm