

ProCare

Dent 40

Produit de rinçage

Utilisation :

Concentré liquide. Pour un traitement en machine d'instruments dentaires et d'instruments rotatifs dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professionnal.

Caractéristique de qualité :

ProCare Dent 40 est conforme aux exigences de la législation en matière de dispositifs médicaux en vigueur.  

Le fabricant et les autorités compétentes doivent signaler tout incident grave lié à ce produit.

Caractéristiques produit :


- Améliore et accélère le séchage d'instruments dentaires lors d'un traitement en machine
- Les résidus alcalins et les eaux alcalines sont neutralisés

Utilisation et dosage :

Miele ProCare Dent 40 est adapté aux procédures des laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

- Pour le dosage, il faut utiliser des doseurs appropriés.
- Concentration utilisée : 0,3 ml/l sur le doseur de porte pour le produit de rinçage
- Sélection du programme : Vario TD

Déroulement de programme :

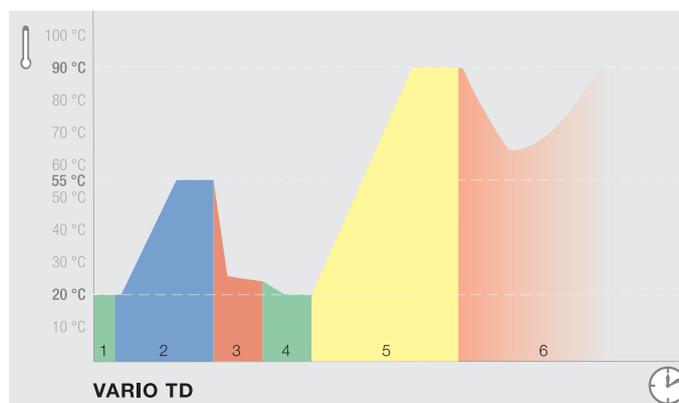

Procédure Vario TD :

- 1 Pré lavage à l'eau froide, pour éliminer le plus gros des salissures (ex : le sang)
- 2 Nettoyage
- 3 Neutralisation
- 4 Rinçage intermédiaire à l'eau froide
- 5 Désinfection thermique à 93 °C pendant 5 minutes, dernier rinçage inclus avec ProCare Dent 40 (température de dosage 70 °C)
- 6 Séchage

Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final afin d'empêcher l'apparition de dépôts et de taches d'eau ainsi que de protéger l'aluminium anodisé.

Attention !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- S'adresser au service après-vente Miele pour un remplacement du produit.
- Le traitement doit être effectué selon les dispositifs médicaux et les réglementations en vigueur avec un processus validé et adapté.
- Les recommandations de traitement du fabricant du dispositif médical doivent être respectées conformément aux directives de la norme DIN EN ISO 17664.
- Respectez les instructions de fonctionnement des laveurs-désinfecteurs de Miele Professional.
- Uniquement à usage professionnel.

ProCare

Dent 40

Produit de rinçage

Caractéristiques techniques :

- Masse volumétrique (20 °C) : env. 1,1 g/cm³
- Valeur pH (définie en eau déminéralisée, 20 °C) 0,3 ml/l : env. 3,8

Substances pour produit de lavage conformes à la directive européenne sur les détergents 648/2004 :

- < 5 % de phosphonate
- 15 à 30 % de tensio-actifs non ioniques
- Contient aussi des agents de conservation (méthylchloroisothiazolinone/méthylisothiazolinone)

Conseils de stockage :

- Température de stockage conseillée : 0 °C à 30 °C
- En cas de stockage approprié : utilisable 3 ans
- Utilisable jusqu'en : voir mention sur l'étiquette derrière le symbole 

Indications de danger et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les containers vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage livrable :

Désignation	Containers	Numéro de matériel
ProCare Dent 40	Bouteille de 1 l	12 187 410

Contact :

Allemagne

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxembourg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Téléphone +352 (0) 4971125
info@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/nl/professional/index.htm



Allemagne

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de