

ProCare

Dent 30 P



Agent neutralisant

Utilisation :

Concentré liquide, acide, à base d'acide phosphorique. Pour le traitement en machine d'instruments dentaires dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

ProCare Dent 30 P ne convient pas pour les instruments rotatifs, les matériaux en métal non ferreux, en aluminium anodisé ainsi que les pièces chromées et nickelées. L'agent neutralisant *ProCare Dent 30 C* est prévu pour le traitement des instruments rotatifs.

Caractéristique de qualité :

ProCare Dent 30 P est conforme aux exigences de la législation en matière de dispositifs médicaux en vigueur.  

Le fabricant et les autorités compétentes doivent signaler tout incident grave lié à ce produit.

Caractéristiques produit :


- Permet d'éliminer les couleurs de revenu et les salissures solubles dans l'acide
- Excellente capacité de rinçage
- Sans tensioactifs

Utilisation et dosage :

Miele *ProCare Dent 30 P* est adapté aux procédures des laveurs-désinfecteurs Miele Professional

- Pour le dosage, il faut utiliser des doseurs appropriés.
- Dosage exact et économique via une pompe de dosage
- Respecter la résistance à l'acidité de la charge et des conduites d'évacuation
- Concentration utilisée : 1 ml/l
- Sélection du programme : Vario TD

Déroulement de programme :

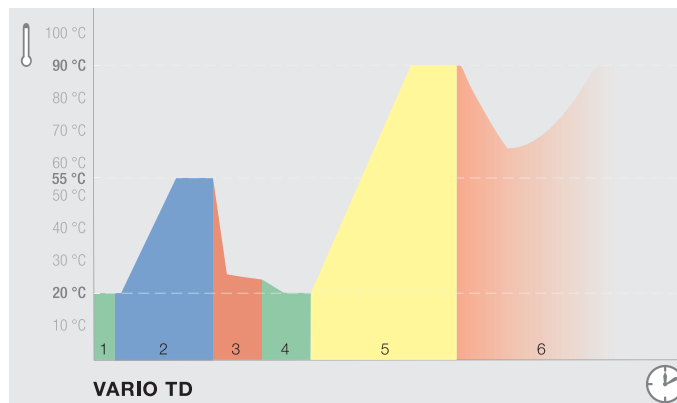

Procédure Vario TD :

- 1 Prélavage à l'eau froide, pour éliminer le plus gros des salissures (ex : le sang)
- 2 Nettoyage
- 3 Neutralisation avec *ProCare Dent 30 P*
- 4 Rinçage intermédiaire à l'eau froide
- 5 Désinfection thermique à 93 °C pendant 5 minutes, rinçage final inclus
- 6 Séchage

La solution doit être complètement rincée à l'eau. Lorsque l'agent neutralisant est utilisé correctement (ex : tri correct de la charge) dans des laveurs-désinfecteurs Miele Professional, celui-ci est distribué par le programme varioTD. Une vérification a lieu lors de la mesure d'augmentation de la conductance pendant le rinçage final dans le cadre de la mise en service ou de la maintenance de routine du laveur-désinfecteur. Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final afin d'empêcher l'apparition de dépôts et de taches d'eau.

Attention !

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- S'adresser au service après-vente Miele pour un remplacement du produit.
- Le traitement doit être effectué selon les dispositifs médicaux et les réglementations en vigueur avec un processus validé et adapté.
- Les recommandations de traitement du fabricant du dispositif médical doivent être respectées conformément aux directives de la norme DIN EN ISO 17664.
- Respectez les instructions de fonctionnement des laveurs-désinfecteurs de Miele Professional.
- Uniquement à usage professionnel.

ProCare

Dent 30 P

Agent neutralisant


Caractéristiques techniques :

- Masse volumétrique (20 °C) : env. 1,5 g/cm³
- Valeur pH (définie en eau déminéralisée, 20 °C) 1 ml/l : env. 2,3

Substances pour produit de lavage conformes à la directive européenne sur les détergents 648/2004 :

- > 30 % de phosphates

Conseils de stockage :

- Température de stockage conseillée : -15 °C à 30 °C
- En cas de stockage approprié : utilisable 3 ans
- Utilisable jusqu'en : voir mention sur l'étiquette derrière le symbole 

Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les containers vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unités d'emballage et accessoires livrables :

Désignation	Containers	Numéro de matériel
<i>ProCare Dent 30 P</i>	Bouteille de 1 l (couvercle avec raccord de remplissage)	12 187 370
<i>ProCare Dent 30 P</i>	Bidon de produit de 5 l	12 187 380
Clé pour bidon	Pour bidon de produit de 5 l et de 20 l	11 851 600
DTD2 Bac collecteur	Pour des bidons de produit de 5 l et 10 l	10 695 460

Contact :

Allemagne

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxembourg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Téléphone +352 (0) 4971125
info@lux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/nl/professional/index.htm



Allemagne

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de