



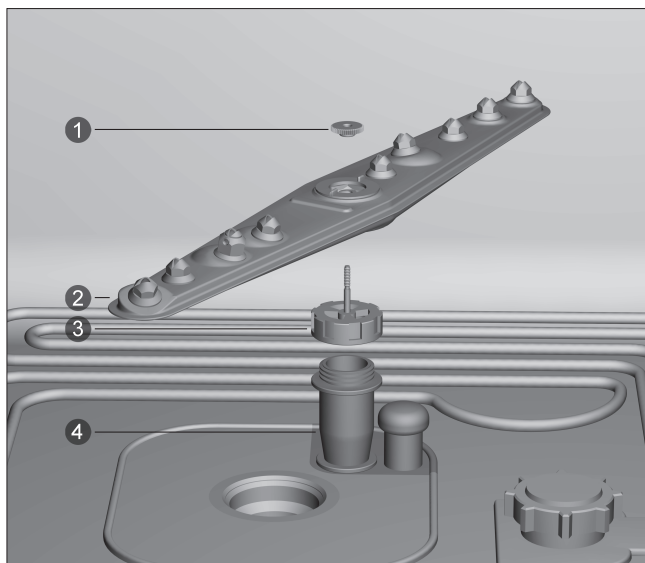


Para el suministro de agua del carro móvil debe sustituirse el brazo aspersor inferior de la termodesinfectora por un adaptador especial. Para ello:

- Suelte la tuerca moleteada ① en la parte central del brazo aspersor.
- Retire el brazo aspersor ②.
- Desatornille la tuerca de racor con el eje del brazo aspersor ③ del tubo de alimentación ④.

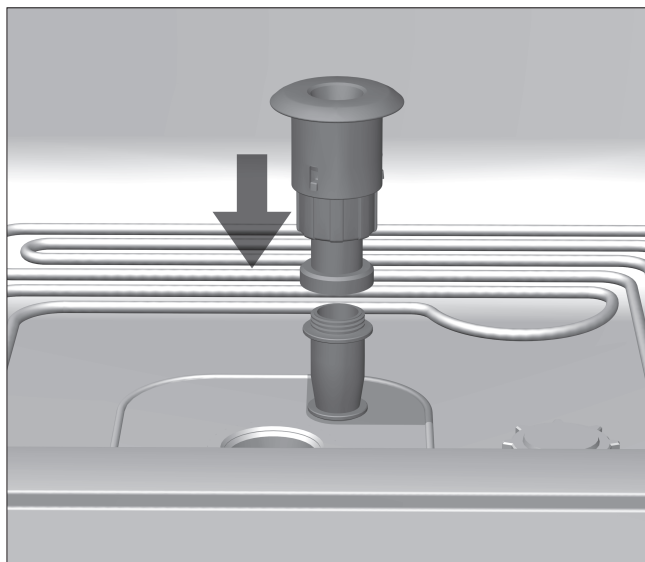

- Atornille el adaptador en el tubo de alimentación.

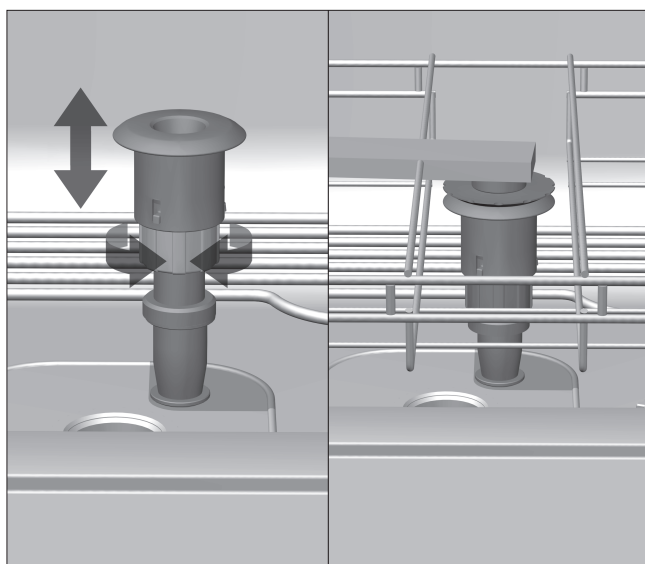


El adaptador con resorte debe acoplarse correctamente a la conducción de agua del carro móvil introducido. Para ello debe estar ajustado de 4 a 5 mm por encima de la conducción de agua del carro móvil.

Para adaptar la altura del adaptador:


- Suelte la parte superior del adaptador.
- Desplace el adaptador hacia arriba o hacia abajo, para ajustar la altura.
- Apriete firmemente la parte superior del adaptador.

⚠ En la práctica, debe comprobarse regularmente el ajuste correcto del adaptador.

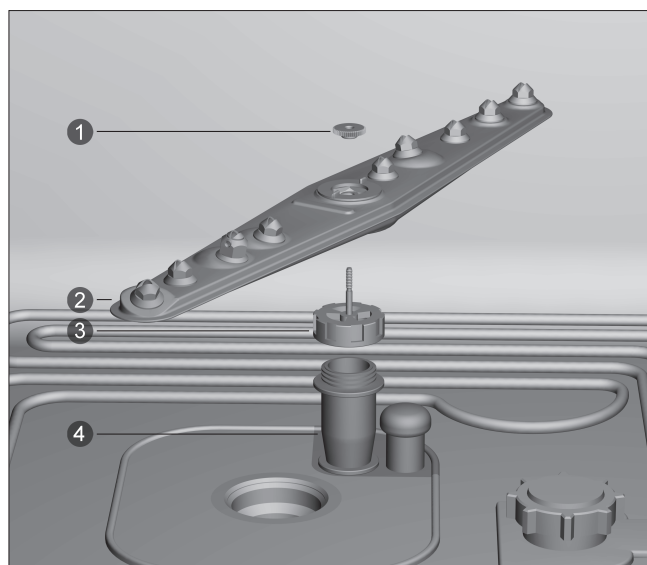


Para o abastecimento de água do carro injector o braço de lavagem inferior da máquina de lavar e desinfetar deve ser substituído por um adaptador especial. Para isso:

- Solte a porca ❶ situada ao centro do braço de lavagem.
- Retire o braço de lavagem ❷
- Desaperte a porca com o eixo do braço de lavagem ❸ do tubo de passagem ❹.

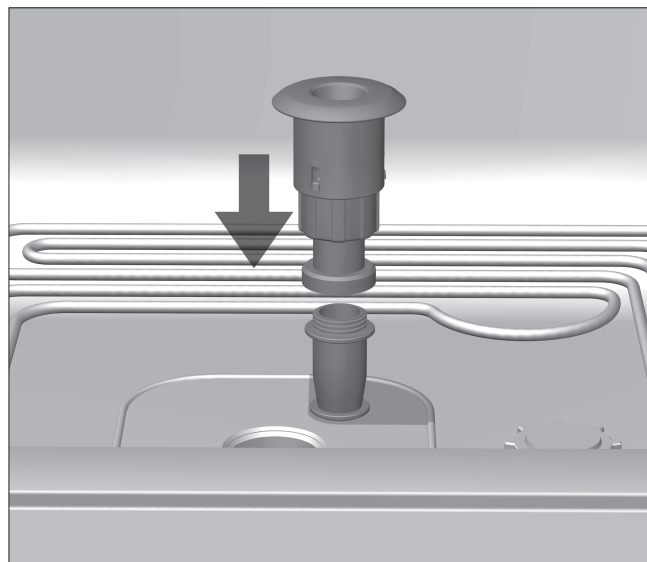

- Aparafusar o adaptador ao tubo de admissão.

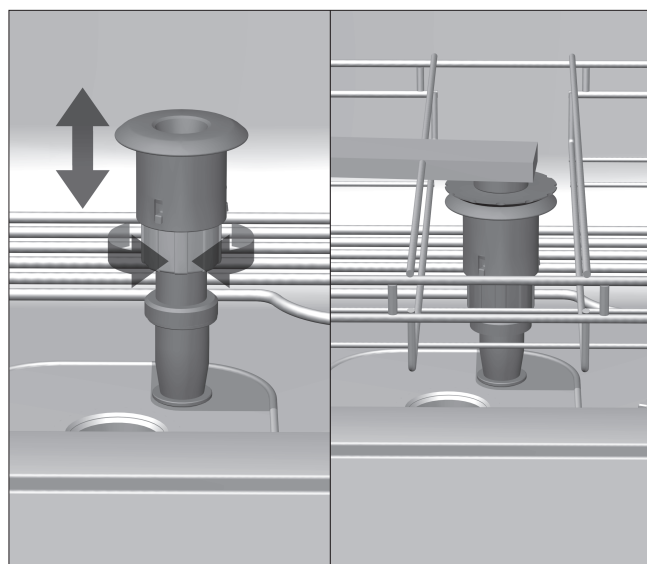

O adaptador com mola deve estar bem encaixado no tubo de passagem do carro injector encaixado na máquina. Para isso deve estar regulado numa posição 4 a 5 mm mais elevada do que a passagem de água do carro injector.

Adaptar a altura do adaptador:

- Soltar a parte superior do adaptador.
- Deslizar o adaptador para cima ou para baixo, para regular a altura.
- Aparafusar a parte superior devidamente.

⚠ O ajuste correcto do adaptador deve ser controlado regularmente.