

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskine G 7827/G 7828 eller PG 8527/PG 8528 skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinrengøring, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl skal så vidt muligt altid foretages med totalt afsaltet vand.
Ved anvendelse af automatisk vognidentifikation skal kodningen være tilpasset!

Leverancen omfatter:

Basisvogn E 900-6 med seks etager, heraf to udtagelige, H 553, B 636, D 790 mm, med magnetliste til automatisk vognidentifikation og spulearmsmagneter til spulearmsovervågning (kun PG 8527/PG 8528)

Ekstraudstyr

- E 142, DIN trådkurv
- E 473/1, indsats til smådele
- E 476, holdere til instrumenter Ø 4 - 8 mm
- E 479, holdere til instrumenter Ø op til 4 mm
- E 492, indsats til nyreskåle
- E 518, slangetilslutning

Anvendelsesområde:

I vognen E 900-6 kan der anbringes op til 18 DIN-trådkurve med OP-instrumenter. Derudover er 4 af etagerne udstyret med hver 4 tilslutninger til hulrumsinstrumenter.

Påfyldningsmål* [H x B x D i mm]	E 900-6	Uden 2. etage	Uden 2. og 4. etage
1. etage	71 x 555 x 780	162 x 555 x 780	162 x 555 x 780
2. etage	71 x 565 x 780	–	–
3. etage	71 x 555 x 780	71 x 555 x 780	162 x 555 x 780
4. etage	71 x 565 x 780	71 x 565 x 780	–
5. etage	71 x 580 x 780	71 x 580 x 780	71 x 580 x 780
6. etage	71 x 595 x 780	71 x 595 x 780	71 x 595 x 780

* etagenummerering nedefra

Kontroller ved hver fyldning/inden hver programstart:

- Kan spulearmene drejes frit?
- Er dyseåbningerne i spulearmene rene og fri for tilstopninger?
- Er de udtagelige etager fastgjort?
- Er den indskubbede vogn koblet rigtigt til rengørings- og desinfektionsmaskinens vandforsyning?

Overhold altid det påfyldningseksempel, der er fastlagt i valideringen.

For at sikre et ensartet skylletryk i de forskellige faser skal alle tilslutningsmuligheder være forsynet med dyser, adaptere, hylstre eller blindskruer.
Der må ikke anvendes beskadigede dyser, adaptere eller hylstre.

Tilslutninger, der ikke bruges til utensilier, skal ikke erstattes med blindskruer.



E 900-6



E 900-6 uden 2. og 4. etage


Udtagelige etager



Vognens 2. og 4. etage kan tages ud. Herved kan 1. og 3. etages påfyldningshøjde om nødvendigt øges.


Etage tages ud

- Løft etagen, og træk den ud.

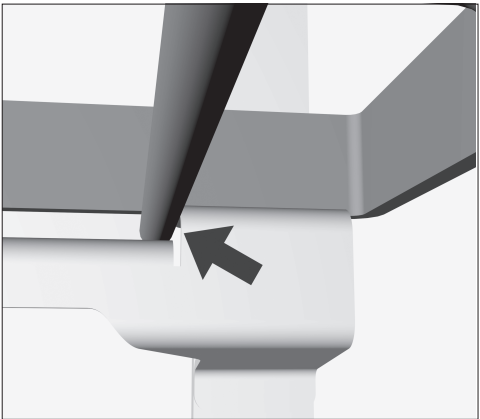


Etage sættes i


- Anbring etagen på vognens styreskinne, og skub den ind.
Trådene på undersiden af etagen griber i begge sider fat bag en laske på vognens styreskinner.
Etage skal gå tydeligt i hak for at være anbragt korrekt.
- Kontroller etagens fastgørelse på styreskinnen.

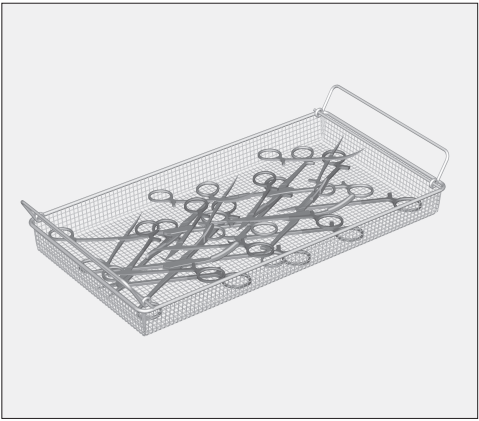

■ Leddelte instrumenter skal anbringes i trådkurvene i åben tilstand, så de flader, der er dækket, minimeres.

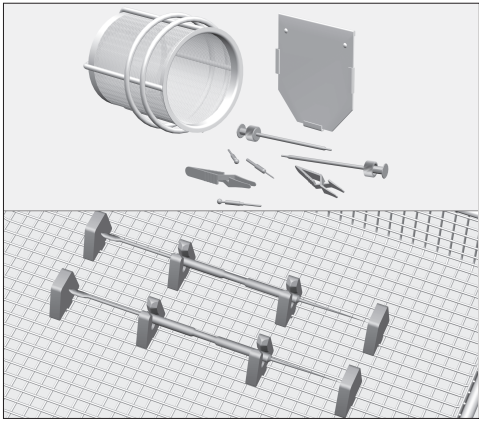




■ Lette instrumenter såsom bulldog-klemmer eller smådele, som let kan kastes omkring af skyllemekanikken, skal sikres med lukbare indsatser som f.eks. E 473 eller silikoneholdere som f.eks. E 476.

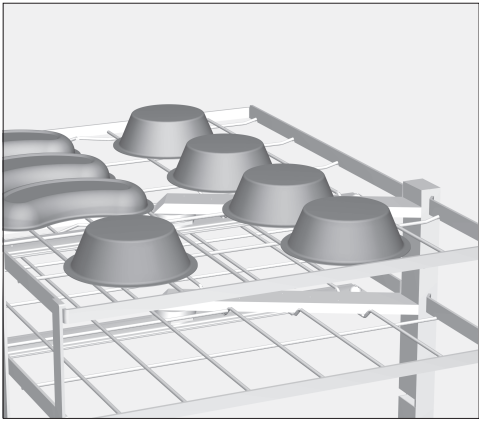

■ Beholdere som f.eks. dåser, bægge og nyreskåle skal anbringes med åbningen nedad, så de ikke hæmmer rengøringen af instrumenterne og ikke væltes om af skyllemekanikken.

Hvis hule beholdere anbringes med åbningen opad, optager de noget af skyllevandet, hvilket kan forringe slutskyllesultatet.

Slangetilslutninger E 518 (ekstraudstyr)

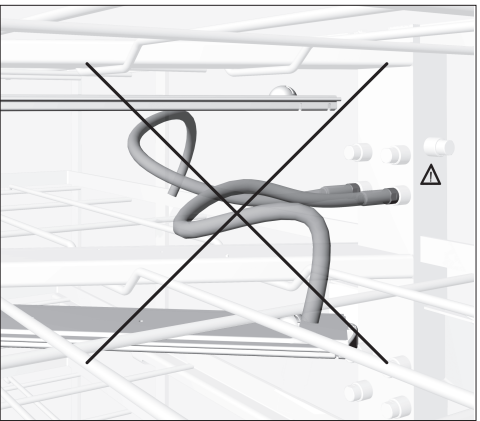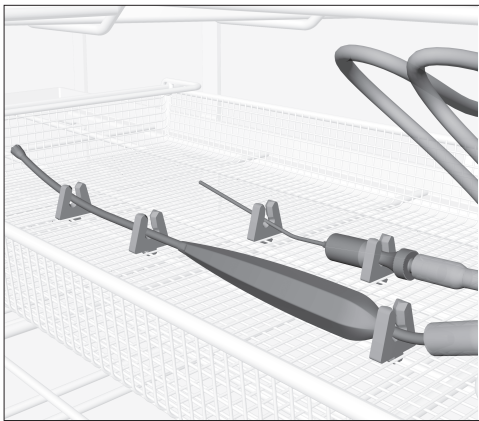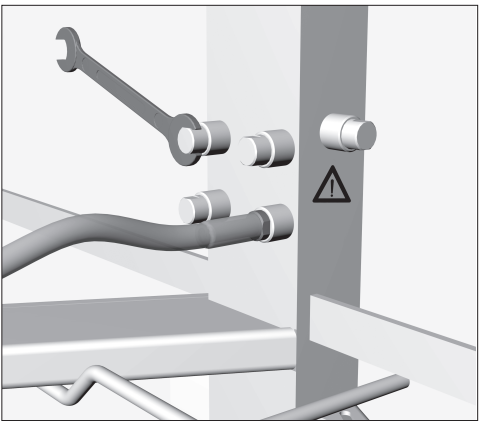

Slangetilslutninger monteres

Ved behov kan slangetilslutninger E 518 anbringes i vognens vandtilførsel. Hulrumsinstrumenter, f.eks. kirurgiske sug, kan tilsluttes til disse og lægges i en trådkurv på etagen ud for de anvendte slangetilslutninger.

Fremgangsmåde:

- Skru blindskrueerne af tilslutningerne med en skrueøgler SW 9.
- Skru slangetilslutningerne i tilslutningerne, og stram dem med en skrueøgler.

⚠ Der må ikke være tilsluttet forgreninger eller forlængelser til slangetilslutningerne, da dette reducerer flydetrykket for meget.

Hulrumsinstrumenter tilsluttes

⚠ Inden tilslutningen af hulrumsinstrumenter skal det sikres, at vandet kan trænge igennem lumener/kanaler.

- Fastgør hulrumsinstrumenterne i en trådkurv med holdere E 476 eller E 479.
- Stil trådkurven på en af vognens ribber, og forbind hulrumsinstrumenterne med en slangetilslutning.
- Frigør hulrumsinstrumenterne fra slangetilslutningerne efter endt rengøring.

⚠ Hulrumsinstrumenter, som har løsnet sig fra slangetilslutningerne under rengøringen, skal rengøres på ny.

Måletilgang til måling af skylletryk

⚠ I forbindelse med effektkontroller og valideringer iht. DIN EN ISO 15883 kan skylletrykket måles ved denne tilgang.

- Til skylletryksmålinger udskiftes lukkeskruen med en luer-lock-adapter, f.eks. E 447.

⚠ Der må under ingen omstændigheder tilsluttes instrumenter, skyllelister etc. til målestedet!

⚠ Slangetilslutninger, der ikke anvendes, skal erstattes af blindskrue E 362.

Løse ender af slangetilslutninger hvirvles omkring af skylletrykket. Dette kan blokere vognens spulearme.