

Geleverd:

Basiswagen E 901/2 met vier niveaus, H 590, B 640, D 790 mm, voorzien van een magneetstrip voor de automatische wagenherkenning en sproeiarmen met sproeiarmmagneten voor de sproeiarmbewaking (alleen PG 8527/28).

Los bijgevoegd:

- 2 E 447, Luer-Lock-adapters ♀ voor Luer-Lock ♂
- 2 E 449, Luer-Lock-adapters ♂ voor Luer-Lock ♀
- 3 E 362, blindschroeven
- 3 E 980, hoekadapters
- 4 inspuisers Ø 4,0 mm, lengte 110 mm
- 3 inspuisers met klemveer Ø 4,0 mm, lengte 120 mm

Bij te bestellen accessoires

- DIN-zeefschal E 142
- Houders voor micro-instrumenten E 476
- Slangaansluitingen Luer-Lock ♂ E 448
- Inzet voor kleine voorwerpen E 473/1
- Inzet 1/2 voor nierschalen E 492



Controleer bij het beladen/voor elke programmastart:

- of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
- of de openingen van de inspuisers van de sproeiarmen schoon/niet verstopt zijn.
- of de ingeschoven wagens goed op de watertoevoer van de reinigings-/desinfectieautomaat zijn aangesloten.

Houdt u zich aan de beladingsvoorschriften die in het kader van de validatie zijn vastgelegd.


⚠ Om te kunnen waarborgen dat alle spoelsystemen over voldoende (gestandaardiseerde) spoeldruk beschikken, moet u op alle schroefaansluitingen inspuisers, adapters, spoelhulzen of blindschroeven plaatsen. Gebruik geen beschadigde spoelsystemen zoals inspuisers, adapters en spoelhulzen.

Spoelsystemen die u niet voor spoelgoed gebruikt, hoeft u niet door blindschroeven te vervangen.


Toepassing:

Op de drie onderste niveaus kunt u DIN- of ISO-zeefschalen met OK-instrumentarium plaatsen. Naast de zeefschalen kunt u maximaal 8 holle instrumenten / zuiginstrumenten aansluiten.


Beladingsafmetingen (nummering niveaus van onderen)	[H x B x D in mm]
Niveau 1	80 x 593 x 780
Niveau 2	80 x 593 x 780
Niveau 3	80 x 593 x 780
Niveau 4	210 x 520 x 780

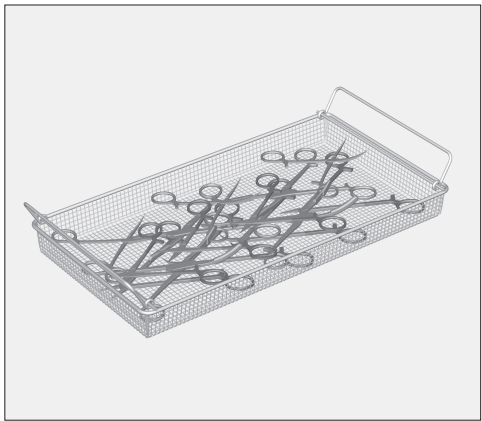

- Scharnierende instrumenten moeten geopend in de zeefschalen worden geplaatst, zodat het afgedekte vlak zo klein mogelijk is.

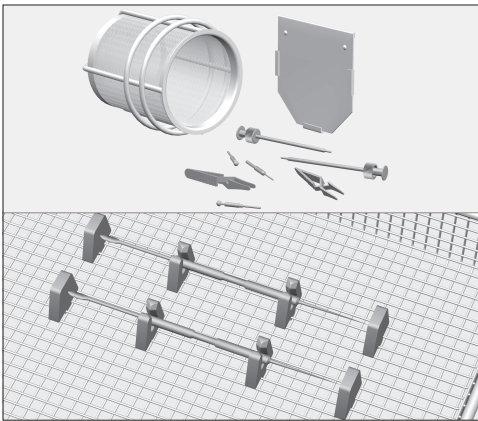


- Lichte instrumenten, zoals bulldogklemmen en kleine voorwerpen die gemakkelijk kunnen worden weggespoeld, kunt u in afsluitbare inzetten plaatsen (o.a. E 473) of met siliconen houders vastzetten (o.a. E 476).

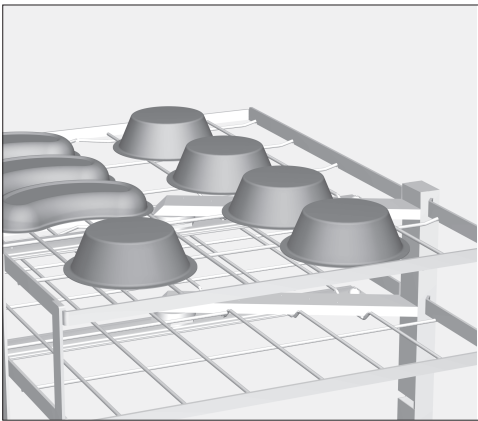


- Reservoirs (zoals bakken, bekers en nierschalen) moeten met de opening naar beneden in de wagen worden geplaatst (bij voorkeur op het hoogste niveau). De reiniging van de instrumenten mag niet wordt belemmerd. Voorkom dat de reservoirs kunnen kantelen.

Als holle voorwerpen met de opening naar boven worden ingeruimd, kan spoelwater in de voorwerpen achterblijven. Dit kan van invloed zijn op het naspoelresultaat.

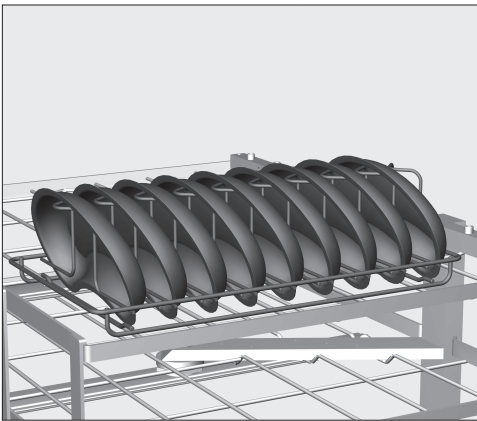

- Gebruik bij omgekeerd geplaatste schalen en dergelijke zo nodig een afdeknet of een speciale inzet, zoals de E 492 voor nierschalen.

Aansluiting voor holle instrumenten

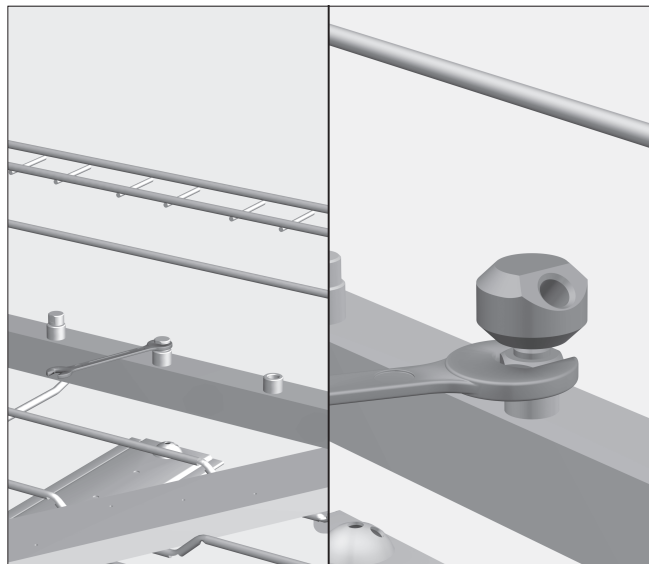


Hoekadapters plaatsen

Desgewenst kunt u inspuiters of Luer-Lock-adapters op het bovenste niveau van de wagen inschroeven. U moet dan de bijgevoegde hoekadapters gebruiken.

Ga als volgt te werk:

- Verwijder de blindschroeven met een sleutel 9 van de aansluitpunten.
- Schroef de hoekadapters met een Luer-Lock-adap-ter of inspuiters in de aansluitingen en justeer het geheel.
- Fixeer de positie met de contraoer (sleutel 13).

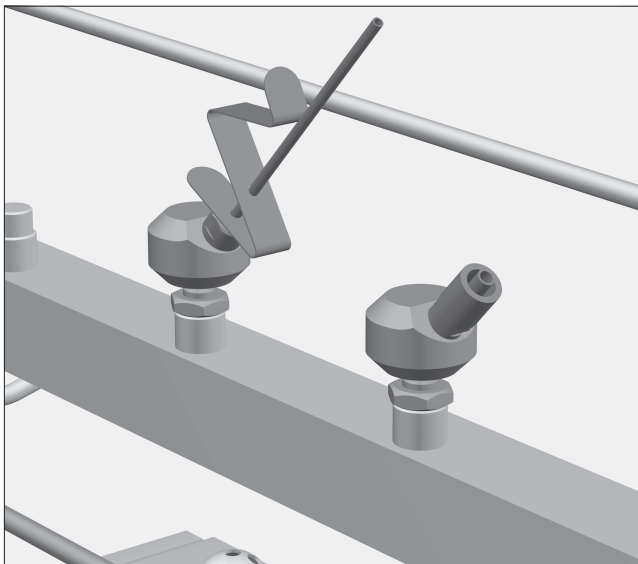


Hoekadapters en inspuiters in elkaar zetten

Om lange zuiginstrumenten of holle instrumenten te kunnen aansluiten, moet u inspuiters met klemveren of Luer-Lock-adapters aan de hoekadapters vast-schroeven.

Ga als volgt te werk:

- Schroef de Luer-Lock-adapters of de inspuiters in de hoekadapters en zet deze met een sleutel 7 of 9 (afhankelijk van de inspuiters) vast.

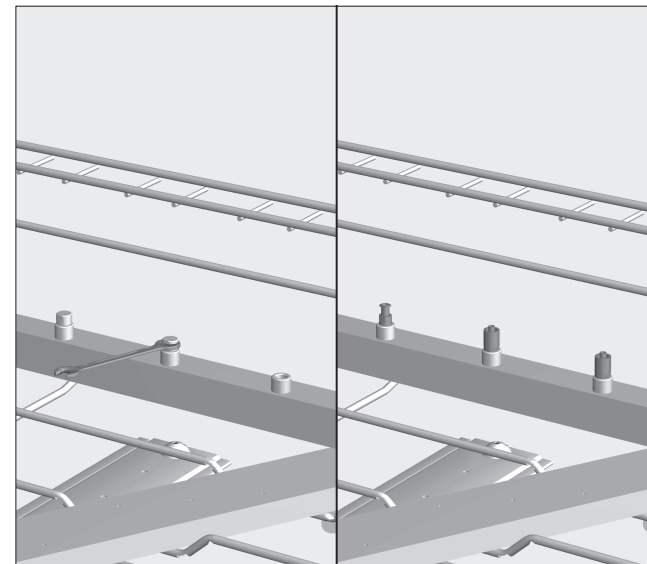


Inspuiters en Luer-Lock-adapters plaatsen

Indien gewenst kunt u maximaal 8 holle instrumenten op het bovenste niveau van de wagen behandelen. Hiervoor moet u de bijgevoegde inspuiters en Luer-Lock-adapters gebruiken.

Ga als volgt te werk:

- Verwijder de blindschroeven met een sleutel 9 van de aansluitpunten.
- Schroef de Luer-Lock-adapters of de inspuiters in de aansluitingen en zet deze met een steeksleutel vast.

Holle instrumenten aansluiten

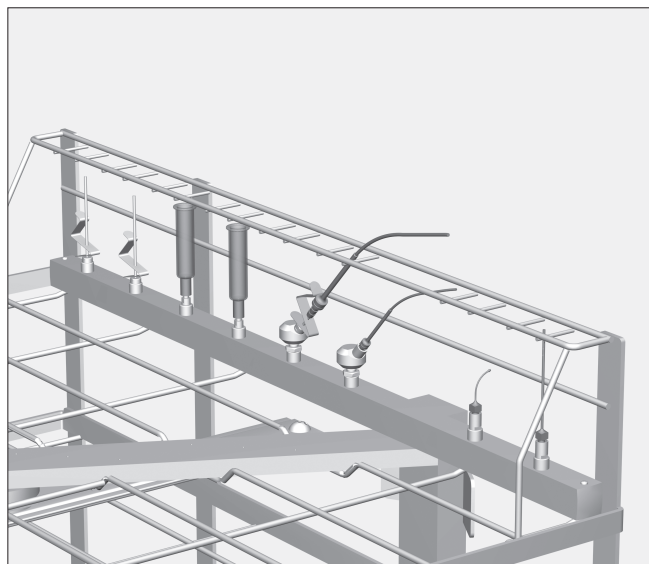


⚠ Vóór het aansluiten van de holle instrumenten moet zijn gewaarborgd dat de lumina/de kanalen goed doorgespoeld kunnen worden.

- Sluit canules met Luer-Lock-aansluitingen aan op de betreffende Luer-Lock-adapters van de injector-wagen.
- Steek chirurgische zuiginstrumenten (o.a. volgens Cooley) op de inspuiters op de hoekadapters.

⚠ Holle instrumenten die tijdens de behandeling zijn losgeraakt, moeten opnieuw worden behan-deld.

Slangaansluitingen E 448 (niet bijgeleverd)

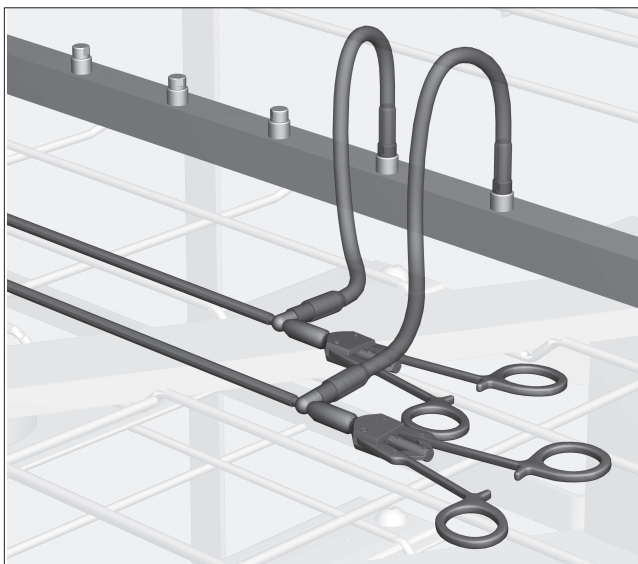


Indien gewenst kunt u slangaansluitingen E 448 op het bovenste niveau van de wagen monteren. Lange holle instrumenten kunt u daarop aansluiten en op het bovenste niveau van de wagen leggen.

Holle instrumenten aansluiten

- Sluit lange holle instrumenten met een Luer-Lock-adap-ter op een siliconen slang aan.
- Leg de holle instrumenten op het rooster van de injectorwagen. Gebruik zo mogelijk een zeef-schaal.
- Schroef de holle instrumenten na de reiniging weer los.

⚠ Holle instrumenten die tijdens de behandeling zijn losgeraakt, moeten opnieuw worden behan-deld.

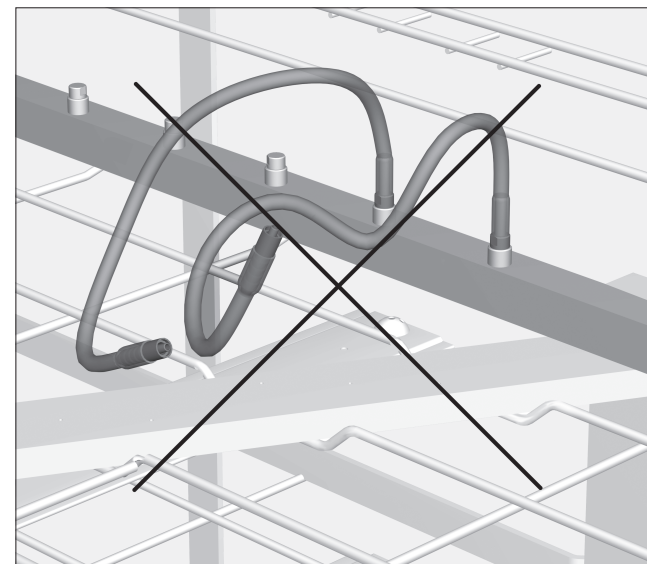

⚠ Niet gebruikte slangaansluitingen moeten door blindschroeven E 362 of inspuiters met een kleine diameter worden vervangen.

De losse uiteinden van de slangaansluitingen worden anders door de waterdruk heen en weer geslingerd. Dit kan beschadigen tot gevolg hebben (bijvoorbeeld aan de glazen deur van de reinigings- en desinfectieautomaat).