

⚠ Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de las termodesinfectoras / G 7827/28 o PG 8527/28. Para el tratamiento utilice exclusivamente instrumentos/productos médicos que hayan sido declarados por el fabricante como retratables y tenga en cuenta las indicaciones específicas. El programa de tratamiento utilizado, preferiblemente con desinfección térmica, deberá ajustarse a la calidad del material de los productos médicos. El último aclarado debe realizarse con agua completamente desalinizada, siempre que ésto sea posible. ¡Si se utiliza el reconocimiento del carro deberá ajustarse la codificación!

## Volumen de suministro:

Carro base E 902/1 con seis opciones de aplicación para módulos quirúrgicos MIC, H 620, B 640, T 790 mm, con barra magnética para la detección automática de carro y brazos aspersores.

## accesorios suministrados

- 3 módulos con conexiones para instrumentos MIC cortos E 905/1
- 3 módulos con conexiones para instrumentos MIC largos E 906/1
- 3 complementos E 444 para cable de luz fría y manguera de succión

Con los módulos y complementos se adjuntan las respectivas instrucciones de manejo.


- 2 m manguera de silicona Ø 5 mm
- 6 tornillos ciegos E 362
- 24 tapas E 445 para manguitos de lavado E 442, orificio con Ø 6 mm
- 12 tapas E 446 para manguitos de lavado E 443, orificio con Ø 10 mm

## Campo de aplicación:

En el carro pueden colocarse hasta seis módulos para instrumentos MIC. Los cables de luz fría y las mangueras de succión pueden esterilizarse con un máximo de seis complementos E 444; los soportes para ello están en la parte delantera y trasera del carro. Hay seis opciones de conexión para el lavado interior de mangueras de succión o para conectar instrumentos largos.

Asimismo, en el nivel superior del carro pueden disponerse complementos especiales para aparatos ópticos y cestos. En el nivel inferior pueden disponerse cestos.

Dimensiones de carga	E 902/1 [Al x An x Fo en mm]
nivel superior	65 x 593 x 780
nivel inferior	53 x 593 x 780

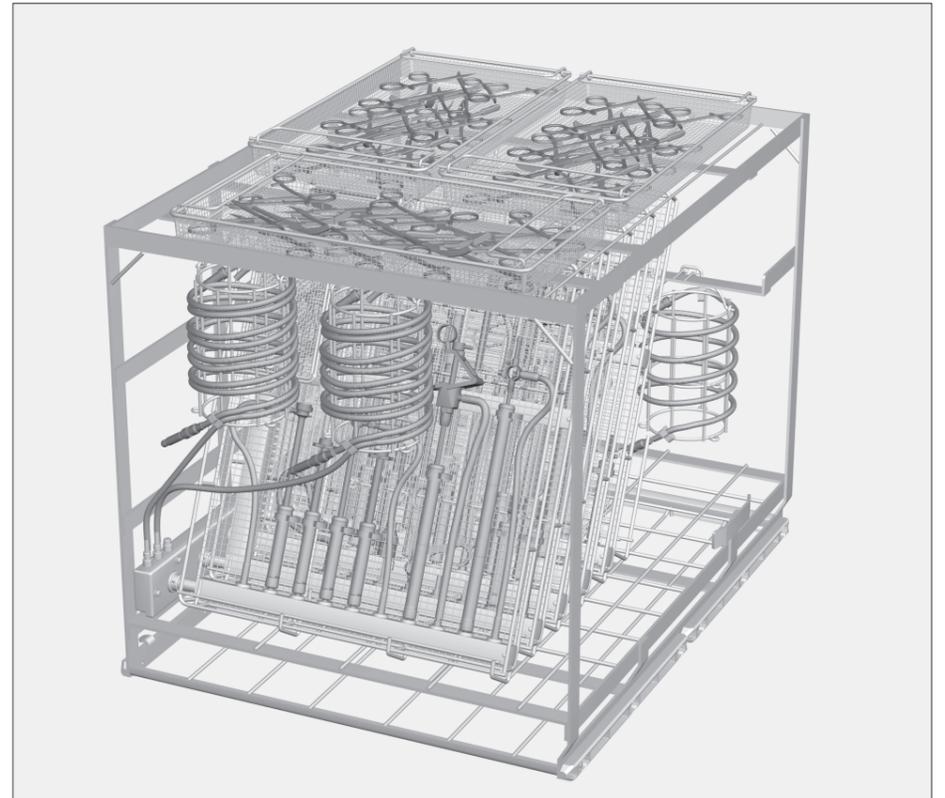

⚠ En los niveles superior e inferior del carro no coloque artículos para lavar que cubran o cestos recargados, porque el baño de lavado no llegará a los instrumentos en los módulos.

## Compruebe en la carga/antes del inicio del programa:

- si funcionan las tapas de cierre de la toma de agua de cada módulo,
- si están debidamente conectados los módulos a la toma de agua del carro,
- si el carro introducido está bien acoplado al suministro de agua de la termodesinfectora.


⚠ Para que en todos los dispositivos de lavado haya una presión de lavado estándar suficiente, todos los juegos de atornillado deben estar provistos de toberas, adaptadores, manguitos de lavado o tornillos ciegos. No debe utilizarse ningún dispositivo de lavado dañado, como toberas, adaptadores o manguitos de lavado.

Los alojamientos que no estén ocupados con instrumental no deben sustituirse por tornillos ciegos.

Aténgase siempre a la muestra de carga determinada para la validación.


⚠ Para la esterilización de los instrumentos MIC, todos ellos deben desmontarse según las indicaciones del fabricante. Los instrumentos de vástago de lumen estrecho no desmontables deben pre-limpiarse según las indicaciones del fabricante.

⚠ Antes de la conexión del instrumental con cavidades huecas debe garantizarse que no están obstruidos los lumen/canales para el agua de lavado. Los instrumentos no deben estar en contacto unos con otros durante la limpieza y desinfección.

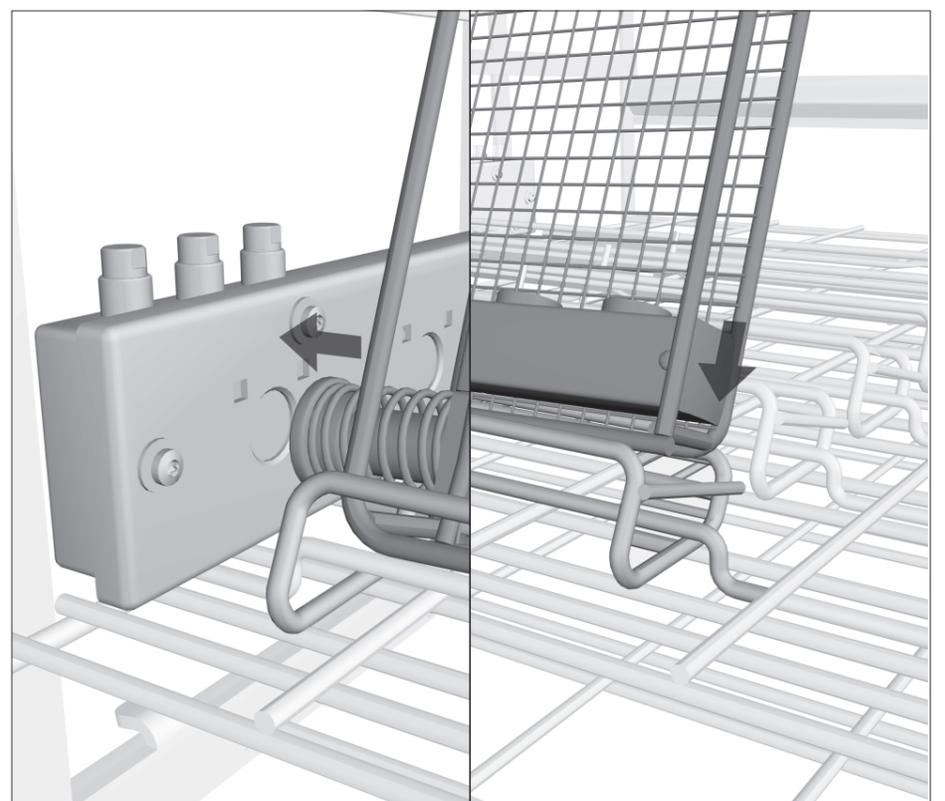

## Instalar módulos en el carro

- Meta la toma de agua del módulo en el acoplador de módulo del carro; la tapa de cierre quedará así apretada hacia atrás.
- Apriete el módulo por detrás del estribo de sujeción del bastidor.

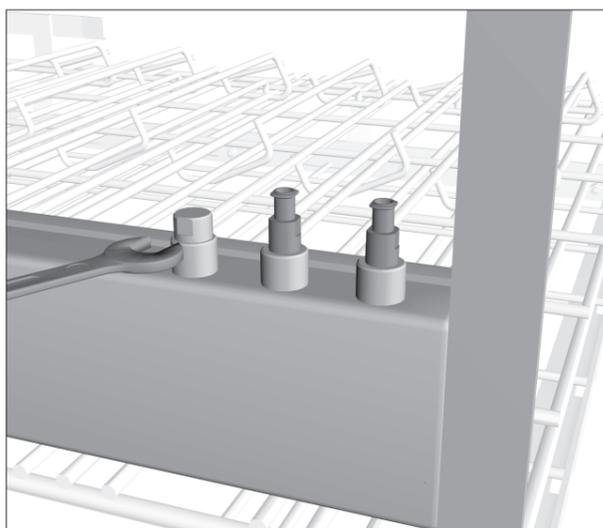

### Ajuste de las toberas de inyección y los adaptadores Luer-Lock


En cada uno de los dos lados del carro hay tres conexiones para difusores inyectores, adaptadores de manguera o mangueras de succión.

- Desatornille los tornillos ciegos de las conexiones con una llave de boca 9 mm.
- Atornille los adaptadores Luer-Lock o las toberas de inyección a las conexiones y apriételes con una llave de boca.



### Cables de luz fría y mangueras de succión

Los cables de luz fría y las mangueras de succión pueden esterilizarse con el complemento E 444. Con el complemento se adjunta una Guía de Uso aparte.

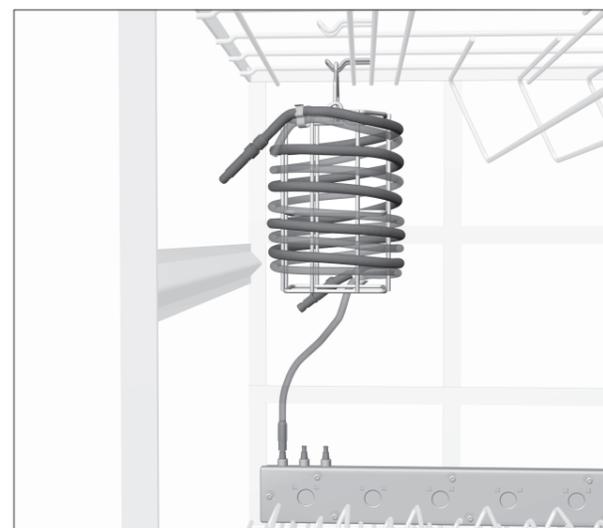

- Cuelgue el complemento E 444 con el estribo en el alojamiento del carro.
- Conecte el extremo de la manguera de succión a un adaptador adecuado en el lateral del carro para que el lumen se lave hacia arriba.


Los extremos que sobresalgan del cable de luz fría o de la manguera de succión no deben fijarse al carro o a la puerta de la termodesinfectora.



### Aparatos ópticos

⚠ ¡Los aparatos ópticos deben esterilizarse siempre en los complementos del fabricante de éstos o en el complemento especial E 460 (accesorio no incluido en el volumen de suministro) para protegerlos de los daños mecánicos!


- Coloque el complemento con los aparatos ópticos en el nivel superior del carro.

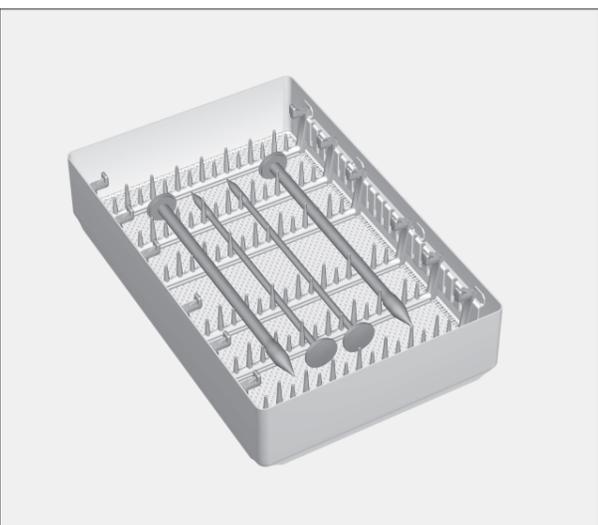

### Mandriles de trocar sin lumen

Los trocares sin lumen o microinstrumentos pueden esterilizarse en el complemento E 441/1 (accesorio no incluido en el volumen de suministro).

- Apriete los trocares en los puentes.
- Coloque bien el complemento en el nivel superior o inferior del carro.

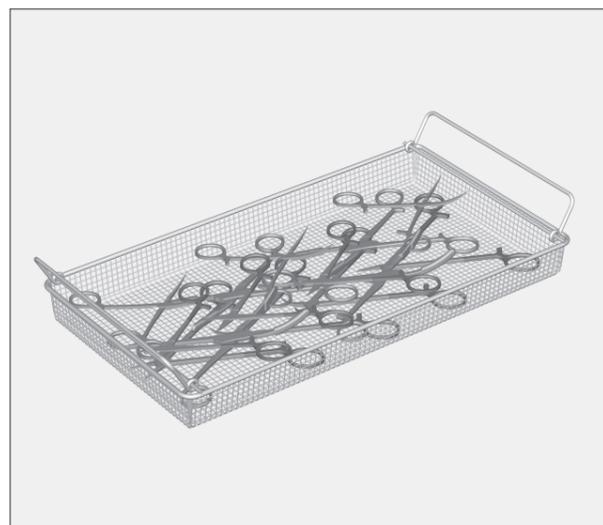


### Cestos

El instrumental articulado deberá colocarse abierto en las jaulas de malla metálica (minimización de la superficie que se cubre).

- Coloque los cestos en el nivel superior del carro.


No sobrecargue los cestos para que el baño de lavado pueda llegar a todas las superficies.

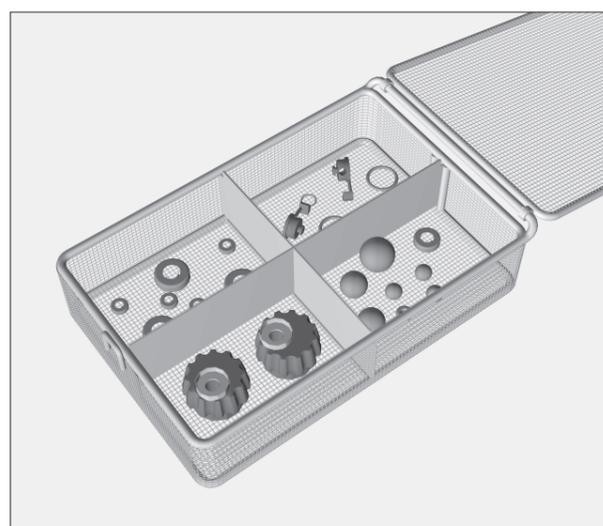

### Piezas pequeñas

Coloque las piezas pequeñas como, p. ej., juntas y llaves en el cesto cerrable E 451 (accesorio no incluido en el volumen de suministro).

- Coloque el cesto cerrado en el nivel inferior del carro.

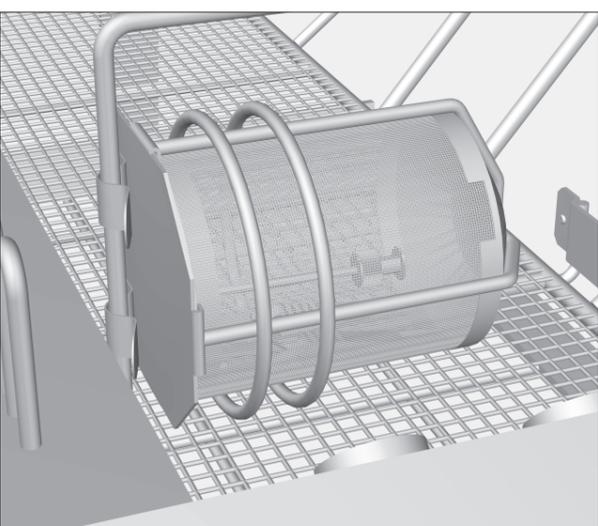

Asegure las piezas más pequeñas que puedan colarse por la malla del cesto o el hueco entre el cesto y la tapa, p. ej., en el complemento E 473/1 (accesorio no incluido en el volumen de suministro).

- Fije el complemento E 473/1 a un nervio del carro.