

⚠ Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- / desinfectieautomaten G 7827/28 of PG 8527/28. Behandel alleen instrumenten/medische producten die volgens de fabrikant van die producten geschikt zijn voor machinale behandeling. Houdt u zich aan de specifieke behandelingsvoorschriften van de fabrikant. Het te gebruiken programma, met bij voorkeur thermische desinfectie, moet indien nodig op het materiaal van de medische producten worden afgestemd. Gebruik voor het laatste spoelen bij voorkeur gedemineraliseerd water. Bij gebruik van de automatische wagenherkenning moet de codering worden aangepast!

Geleverd:

Basiswagen E 902/1 met zes plaatsen voor MIC-OK-modules, H 620, B 640, D 790 mm, voorzien van een magneetstrip voor de automatische wagenherkenning.

Bijgeleverde accessoires

- 3 modules met aansluitingen voor korte MIC-instrumenten E 905/1
- 3 modules met aansluitingen voor korte MIC-instrumenten E 906/1
- 3 inzetten E 444 voor lichtkabels en zuigslangen


Bij de modules en inzetten horen aparte gebruiksaanwijzingen.

- 2 m siliconen slang Ø 5 mm
- 6 blindschroeven E 362
- 24 kapjes E 445 voor spoelhulzen E 442, opening met Ø 6 mm
- 12 kapjes E 446 voor spoelhulzen E 443, opening met Ø 10 mm

Toepassing:

In de wagen kunt u maximaal zes modules voor MIC-instrumenten plaatsen. Lichtkabels en zuigslangen kunt u in maximaal zes inzetten E 444 behandelen. De houders hiervoor vindt u in het voorste en achterste gedeelte van de wagen. Voor het spoelen van de binnenkant van de slangen en voor het aansluiten van lange instrumenten zijn zes aansluitingen aanwezig. Daarnaast kunt u op het bovenste niveau van de wagen speciale inzetten voor optieken en zeefschalen plaatsen. Het onderste niveau is geschikt voor zeefschalen.

Afmetingen belading	E 902/1 [H x B x D in mm]
Bovenste niveau	65 x 593 x 780
Onderste niveau	53 x 593 x 780

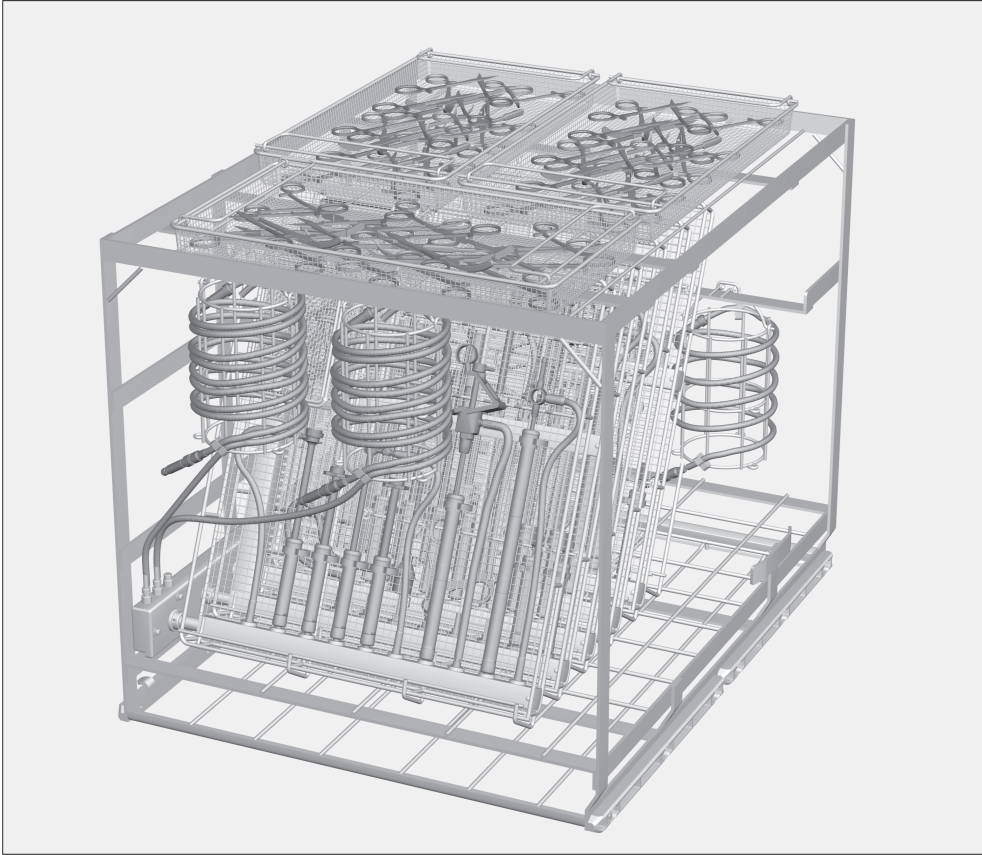

⚠ Ruim op het bovenste en onderste niveau van de wagen geen spoelgoed in dat ander spoelgoed afdekt en plaats ook geen overvolle zeefschalen. De instrumenten in de modules worden anders niet goed door het water bereikt.

Controleer bij het beladen/voor elke programmastart:

- of de afsluitkleppen van de watertoevoer van de afzonderlijke modules functioneren.
- of de geplaatste modules correct op de watertoevoer van de wagen zijn aangesloten.
- of de ingeschoven wagen goed op de watertoevoer van de reinigings-/desinfectieautomaat is aangesloten.


⚠ Om te kunnen waarborgen dat alle spoelsystemen over voldoende (gestandaardiseerde) spoeldruk beschikken, moet u op alle schroefaansluitingen inspuiters, adapters, spoelhulzen of blindschroeven plaatsen. Gebruik geen beschadigde spoelsystemen zoals inspuiters, adapters en spoelhulzen.

Spoelsystemen die u niet voor spoelgoed gebruikt, hoeft u niet door blindschroeven te vervangen.

Houdt u zich aan de beladingsvoorschriften die in het kader van de validatie zijn vastgelegd.


⚠ Alle MIC-instrumenten moeten voorafgaand aan de behandeling volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gedemonteerd. Nauwe, niet-demonteerbare schachtinstrumenten moeten volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden voorgereinigd.

⚠ Vóór het aansluiten van de holle instrumenten moet zijn gewaarborgd dat de lumina/de kanalen goed doorgespoeld kunnen worden. De afzonderlijke instrumenten mogen tijdens de reiniging en desinfectie niet met elkaar in aanraking komen.

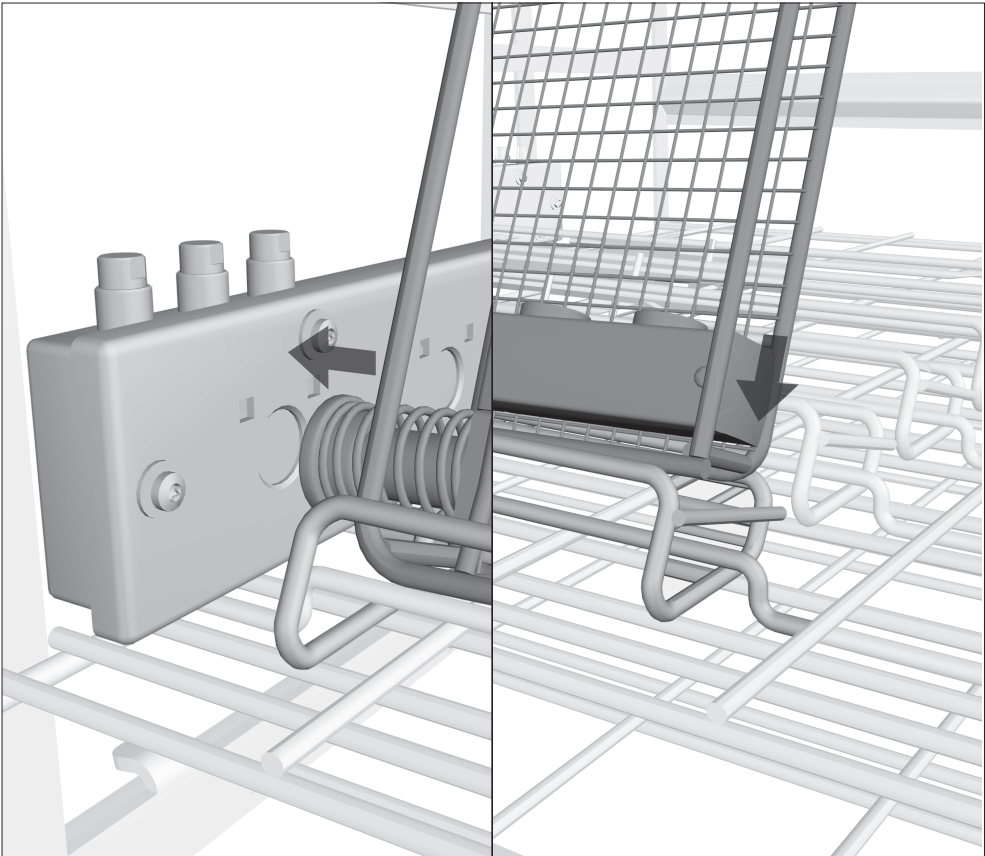

Modules in de wagen zetten

- Schuif de watertoevoer van de module in de module-aankoppeling van de wagen. De afsluitklep wordt daarbij naar achteren gedrukt.
- Druk de module achter de beugel van het frame.

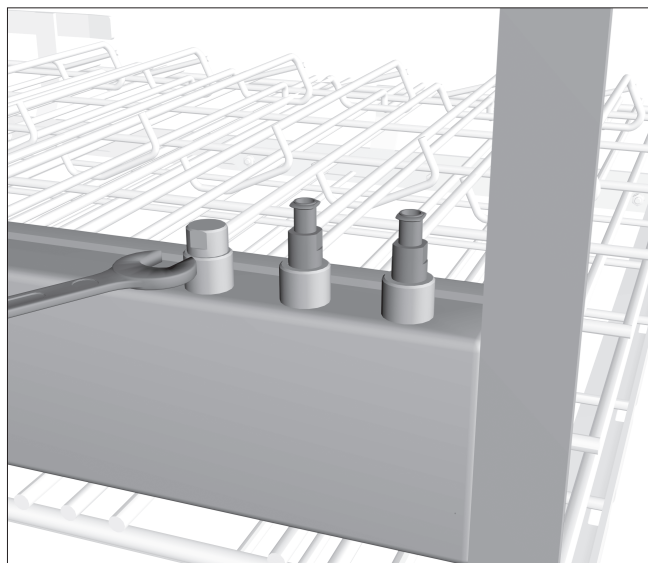

Inspuiters en Luer-Lock-adapters plaatsen


Aan beide kanten van de wagen bevinden zich telkens drie aansluitingen voor inspuiters, slangadapters en zuigslangen.

- Verwijder de blindschroeven met een sleutel 9 van de aansluitpunten.
- Schroef de Luer-Lock-adapters of de inspuiters in de aansluitingen en zet deze met een steeksleutel vast.




Lichtkabels en zuigslangen

Lichtkabels en zuigslangen kunt u in de inzet E 444 behandelen. Bij de inzet hoort een aparte gebruiksaanwijzing.

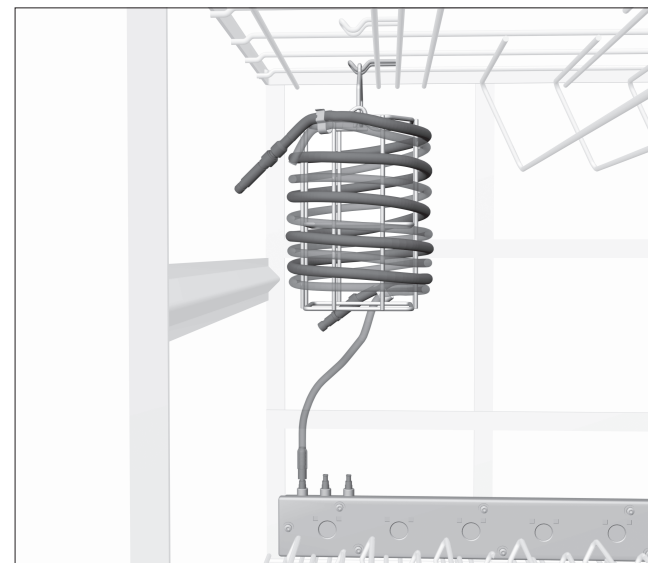

- Hang de inzet E 444 met de beugel aan het haakje van de wagen.
- Sluit het uiteinde van de slang aan op een geschikte adapter aan de zijkant van de wagen. De slang wordt zo van beneden naar boven doorgespoeld.


Een uitstekend gedeelte van een lichtkabel of slang mag niet in de wagen of tussen de deur van de reinigings- en desinfectieautomaat ingeklemd raken.

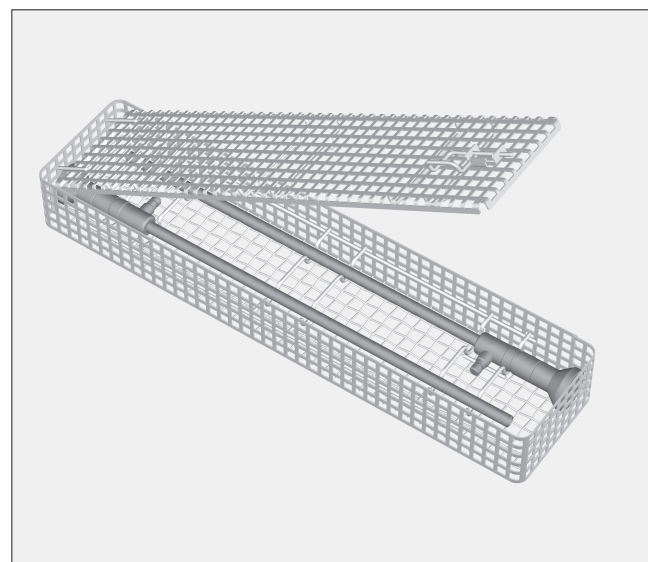

Optieken

⚠ Om mechanische beschadigingen te voorkomen, mogen optieken alleen worden behandeld in inzetten van de fabrikant van de optieken of in de speciale inzet E 460 (niet bijgeleverd).


- Plaats de inzet met de optieken op het bovenste niveau van de wagen.

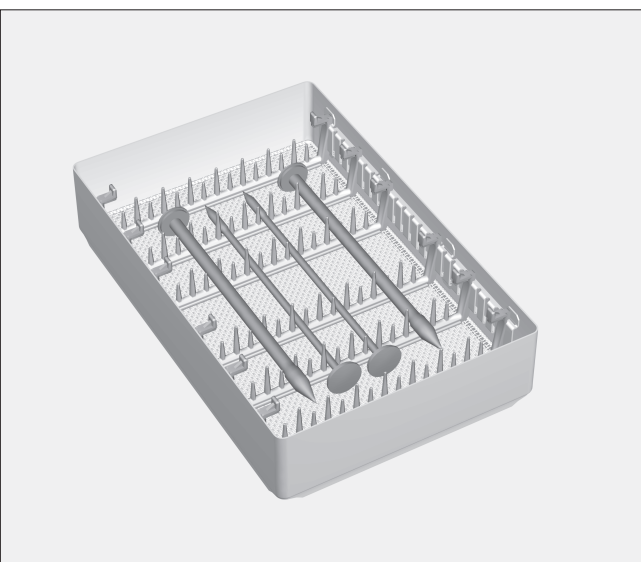

Trocarts zonder holtes

Trocarts zonder holtes en micro-instrumenten kunt u in de inzet E 441/1 behandelen (niet bijgeleverd).

- Druk de trocarts in de houders.
- Plaats de inzet op het bovenste of onderste niveau van de wagen.

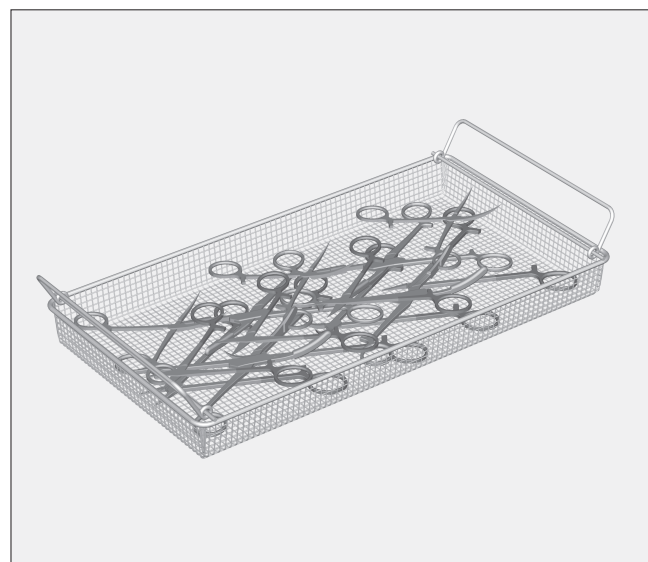


Zeefschalen

Scharnierende instrumenten moeten geopend in de zeefschalen worden geplaatst, zodat het afgedekte vlak zo klein mogelijk is.

- Plaats zeefschalen op het bovenste niveau van de wagen.


Laad de zeefschalen niet te vol, zodat het water alle oppervlakken goed kan bereiken.

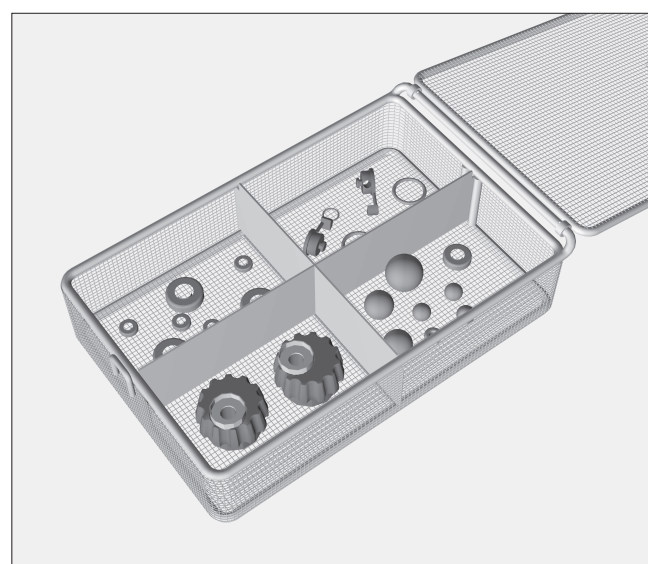

Kleine onderdelen

Leg kleine onderdelen, zoals dichtingen en kraantjes, in de afsluitbare zeefschaal E 451 (niet bijgeleverd).

- Plaats de afgesloten zeefschaal op het onderste niveau in de wagen.

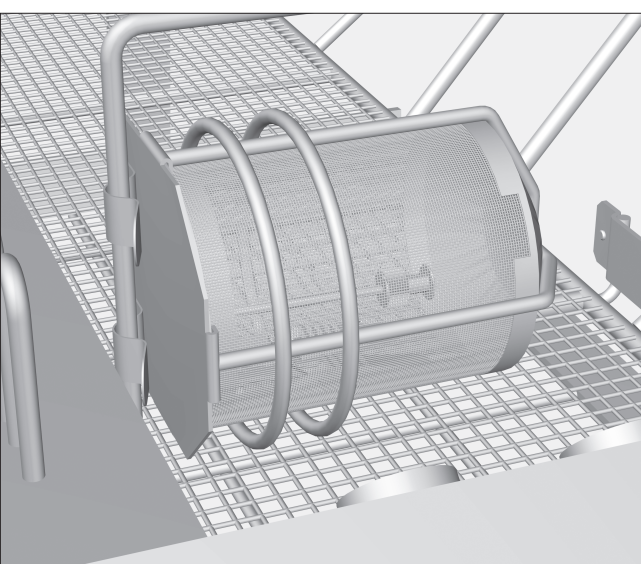

Voorkom dat zeer kleine onderdeeltjes worden weggespoeld die door de mazen van de zeefschaal of door de spleet tussen de zeefschaal en het deksel passen. Gebruik bijvoorbeeld inzet E 473/1 (niet bijgeleverd).

- Bevestig de inzet E 473/1 aan een spijl van de wagen.