

Ved levering medfølger:

Basisvogn E 901/2 med fire etager, H 590, B 640, D 790 mm, med magnetliste til automatisk vognregistrering og spulearme med magneter til spulearmsovervågning (kun PG 8527/28).

Vedlagt løst er:

- 2 E 447, luer-lock-adaptre ♀ til luer-lock ♂
- 2 E 449, luer-lock-adaptre ♂ til luer-lock ♀
- 3 E 362, blindskruer
- 3 E 980, vinkeladaptre
- 4 injektordyser Ø 4,0 mm, længde 110 mm
- 3 injektordyser med spændfjeder Ø 4,0 mm, længde 120 mm

Ekstraudstyr

- DIN trådkurv E 142
- Holdere til mikroinstrumenter E 476
- Slangetilslutninger luer-lock ♂ E 448
- Indsats til smådele E 473/1
- Indsats 1/2 til nyreskåle E 492

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinerne G 7827/28 eller PG 8527/28 skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl bør altid så vidt muligt foretages med totalt afsaltet vand. Ved anvendelse af den automatiske vognregistrering skal kodningen være tilpasset!

Anvendelsesområde:

På de tre nederste etager kan der anbringes DIN- eller ISO-trådkurve med OP-instrumenter. Foruden trådkurvene kan der tilsluttes op til 8 hulrumsinstrumenter / sugeinstrumenter.

Påfyldningsmål (etagenummerering nedefra)	[H x B x D i mm]
1. etage	80 x 593 x 780
2. etage	80 x 593 x 780
3. etage	80 x 593 x 780
4. etage	210 x 520 x 780




Kontroller ved hver fyldning/inden hver programstart:

- kan spulearmene drejes frit,
- er dyseåbningerne i spulearmene rene/fri for tilstopninger,
- er de indskubbede vogne koblet rigtigt til vandforsyningen på rengørings-/desinfektionsmaskinen.


Overhold altid det påfyldningseksempel, der er fastlagt i valideringen.

⚠ For at sikre et ensartet skylletryk i de forskellige faser skal alle tilslutningsmuligheder være forsynet med dyser, adaptre, hylstre eller blindskruer. Der må ikke anvendes beskadigede dyser, adaptre eller hylstre.


Tilslutninger, der ikke bruges til utensilier, skal ikke erstattes med blindskruer.

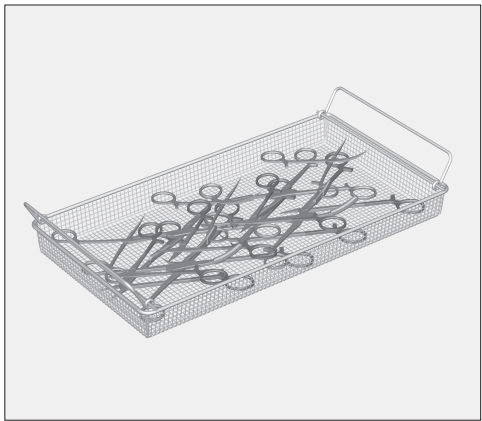

- Leddelte instrumenter skal anbringes i trådkurvene i åben tilstand (minimering af den flade, der er dækket).

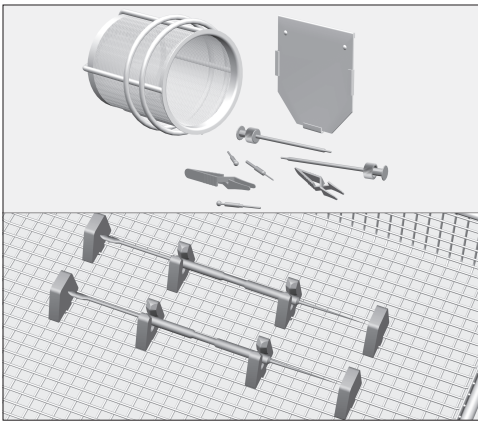


- Lette instrumenter såsom bulldogklemmer eller smådele, som let kan kastes omkring af skyllemekanikken, sikres med lukbare indsatser som f.eks. E 473 eller silikoneholdere som f.eks. E 476.

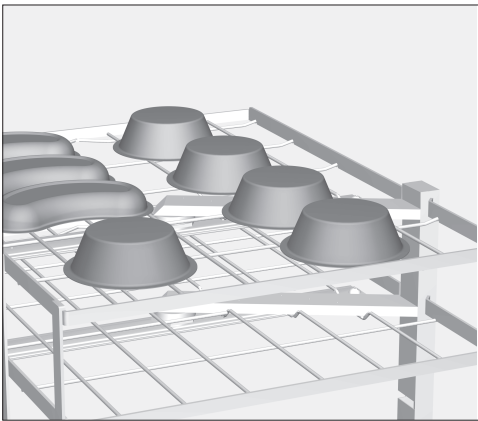




- Beholdere, f.eks. dåser, bægre og nyreskåle, anbringes med åbningen nedad (så vidt muligt på øverste etage), så de ikke hindrer rengøringen af instrumenterne og ikke væltes om af skyllemekanikken.

Hvis hule beholdere anbringes med åbningen opad, sker der en medrivning af skyllevand, hvilket kan forringe klarskylresultatet.

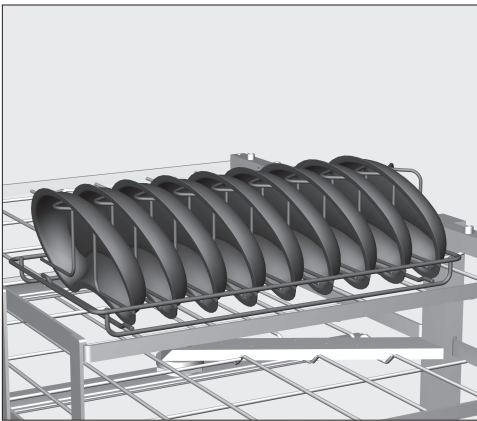

- Hvis genstandene anbringes omvendt, skal der til beholdere anvendes et afdækningsnet og til nyreskåle en indsats, f.eks. E 492.

Tilslutning af hulrumsinstrumenter forberedes

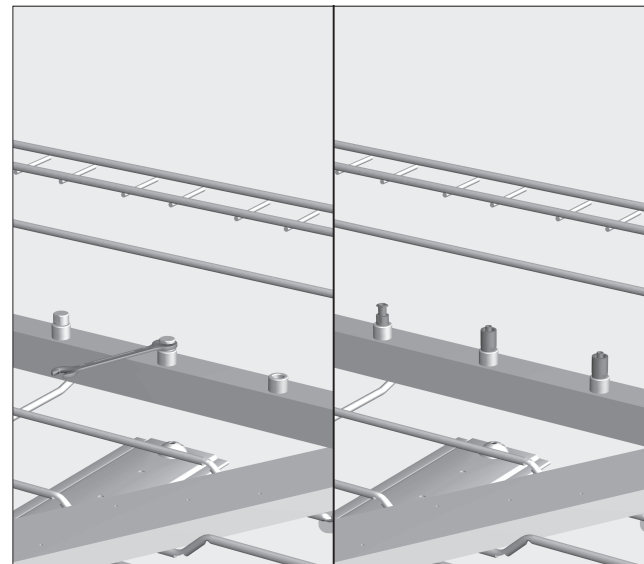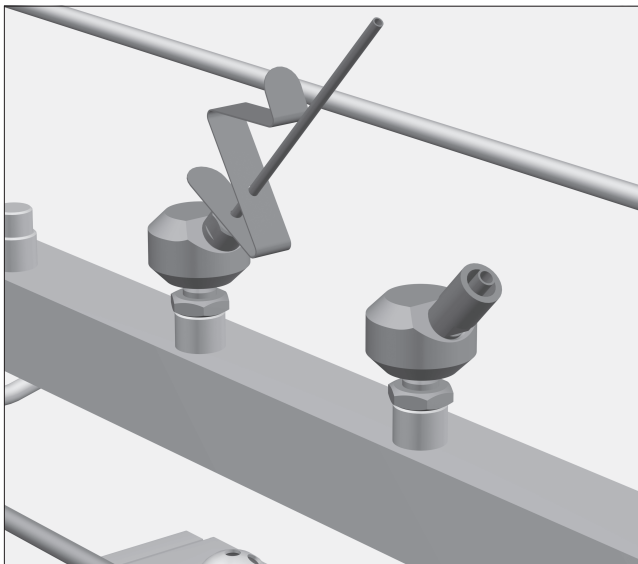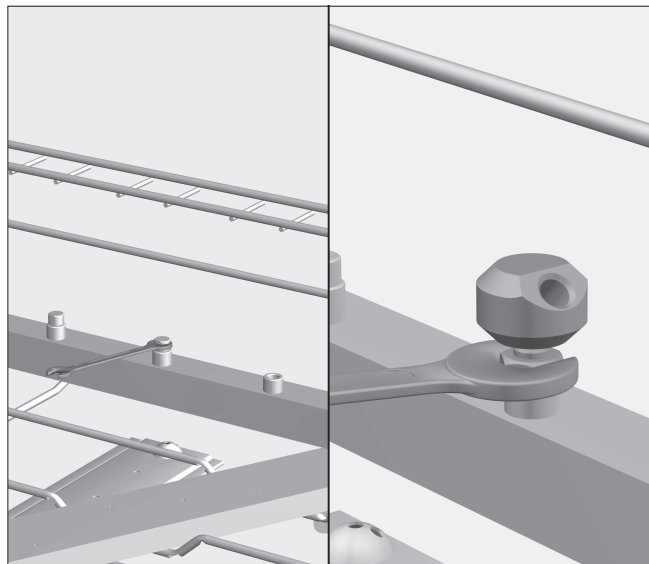

Vinkeladapter monteres

Injektordyser eller luer-lock-adaptore kan om nødvendigt skrues på vognens øverste etage ved hjælp af vedlagte vinkeladaptere.

Fremgangsmåde:

- Blindskruerne skrues af tilslutningerne med en skruenøgle SW 9.
- Vinkeladapteren til luer-lock-adapter eller injektordyse skrues i tilslutningerne og justeres.
- Efter justering efterspændes med kontramøtrikken SW 13.

Vinkeladaptere og dyser skrues sammen

For at kunne tilslutte lange suge- eller hulrumsinstrumenter skrues injektordyser med klemfjeder eller luer-lock-adaptore på vinkeladapteren.

Fremgangsmåde:

- Luer-lock-adaptore eller injektordyser skrues i vinkeladapteren og spændes fast med en skruenøgle SW 7 eller 9 (afhængig af dyse).




Injektordyser og luer-lock-adaptore sættes i

Der kan anbringes op til 8 hulrumsinstrumenter på vognens øverste etage ved anvendelse af de medfølgende injektordyser og luer-lock-adaptore.

Fremgangsmåde:

- Blindskruerne skrues af tilslutningerne med en skruenøgle SW 9.
- Luer-lock-adaptore eller injektordyser skrues i tilslutningerne og skrues fast med en skruenøgle.

Hulrumsinstrumenter tilsluttes

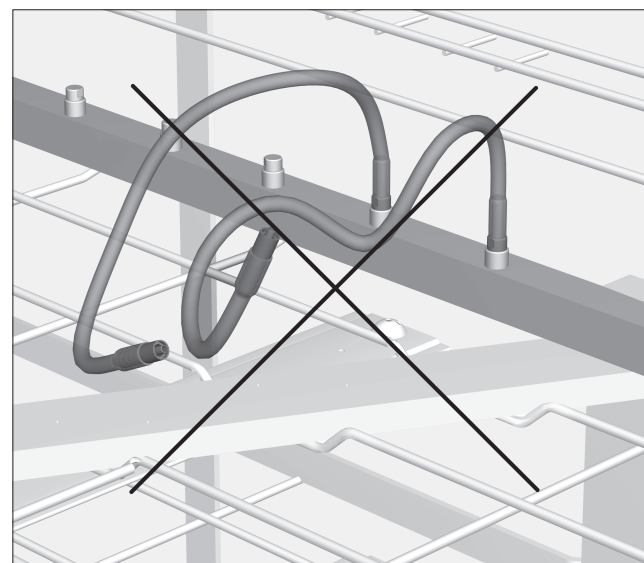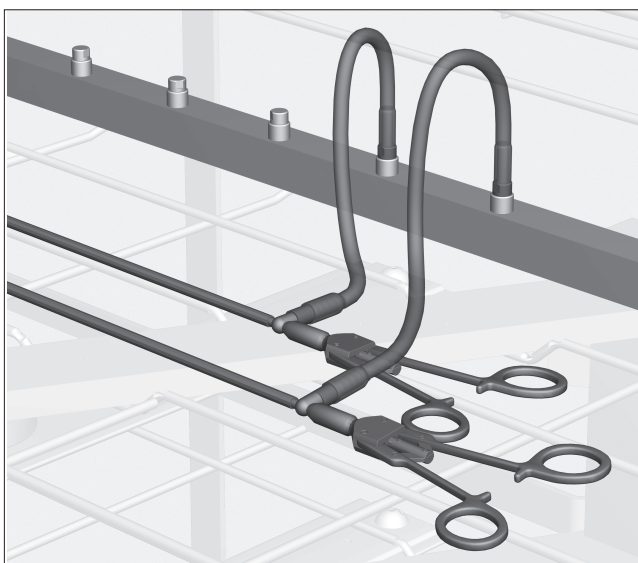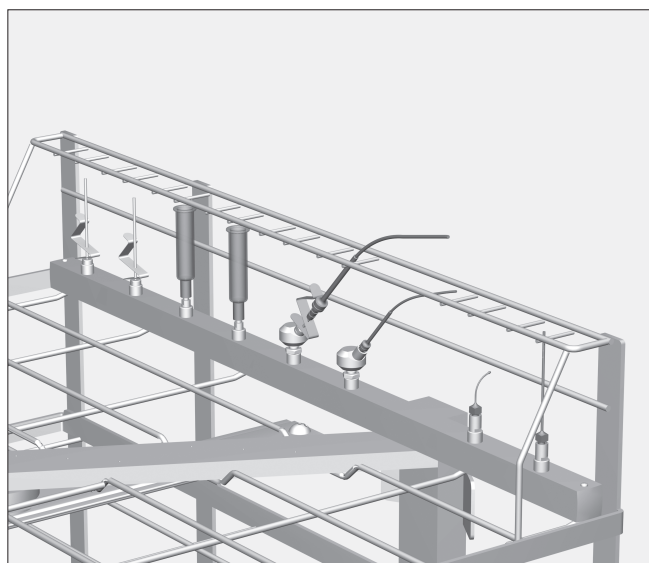

⚠ Inden hule instrumenter tilsluttes, skal det kontrolleres, at der er gennemgang for vaskevandet i lumener/kanaler.

- Kanyler med luer-lock-tilslutninger skrues fast på de tilsvarende luer-lock-adaptore på injektorvognen.
- Kirurgiske sug sættes på dyserne på vinkeladapterne.

⚠ Hulrumsinstrumenter, som har løsnet sig fra adapterne under rengøringen, skal rengøres på ny.

Ved behov kan slangetilslutninger E 448 anbringes på vognens øverste etage. Lange, hule instrumenter kan tilsluttes til disse og lægges på vognens øverste etage.

Hulrumsinstrumenter tilsluttes

- Lange hulrumsinstrumenter tilsluttes til en silikone-slange med luer-lock-adapter.
- Hulrumsinstrumenterne anbringes på injektorvognens gitter, eventuelt i en trådkurv.
- Skru hulrumsinstrumenterne af, når rengøringen er afsluttet.

⚠ Hulrumsinstrumenter, som har løsnet sig fra adapterne under rengøringen, skal rengøres på ny.

⚠ Slangetilslutninger, der ikke anvendes, skal erstattes af blindskruer E 362 eller dyser med lille diameter.

Slangetilslutningernes løse ender hvirvles rundt af skylletrykket, hvorved der kan opstå skader på ting; f.eks. kan rengørings- og desinfektionsmaskinens glasdør blive beskadiget.