

⚠ Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en desinfectieautomaten G 7827/28 of PG 8527/28. Behandel alleen instrumenten/medische producten die volgens de fabrikant van die producten geschikt zijn voor machinale behandeling. Houdt u zich aan de specifieke behandelingsvoorschriften van de fabrikant. Het te gebruiken programma, met bij voorkeur thermische desinfectie, moet indien nodig op het materiaal van de medische producten worden afgestemd. Gebruik voor het laatste spoelen bij voorkeur gedemineraliseerd water. Bij gebruik van de automatische wagenherkenning moet de codering worden aangepast!

Geleverd:

Module-inzet E 925, H 40, B 568, D 510 mm, voorzien van:

- 20 siliconen houders voor adapters, spoelhulzen en inspuiters
- 2 houders voor het positioneren van de instrumenten

Voor het inrichten van de inzet zijn bijgevoegd:

- 1 spoelhuls E 336 voor instrumenten, lengte 121 mm, Ø 11 mm
- 2 blindschroeven E 362
- 1 spoelhuls E 442 voor instrumenten, lengte 121 mm, Ø 11 mm, met kapje Ø 6 mm
- 2 Luer-Lock-adapters ♀ voor Luer-Lock ♂ E 447
- 4 slangen E 448 met schroefdraad, siliconen slang lengte 300 mm, Ø 5 mm en Luer-Lock-adapter ♀
- 2 Luer-Lock-adapters ♂ voor Luer-Lock ♀ E 449
- 4 inspuiters E 452, 2,5 x 60 mm, kunnen worden vastgeschroefd
- 3 inspuiters E 453, 4,0 x 110 mm met klem, kunnen worden vastgeschroefd
- 3 inspuiters E 454 voor trocarhulzen 10 - 15 mm, kunnen worden vastgeschroefd
- 1 adapter E 464 voor inspuiters E 454
- 1 klemveer E 472 voor inspuiters Ø 4 mm
- 1 zeefinzet met deksel voor kleine onderdelen E 907

Toepassing:

De module-inzet E 925 kan in de MIC-OK-injectorwagen E 909 worden gebruikt. Bij de wagen hoort een aparte gebruiksaanwijzing.

De E 925 is bedoeld voor de reiniging en desinfectie van korte MIC-instrumenten, bijvoorbeeld uit de artroscopie en de laparoscopie. Op de aansluitingen van de bovenste rij kunt u instrumenten met een lengte tot 190 mm inruimen, in de onderste rij instrumenten tot 220 mm.

Controleer bij het beladen/voor elke programmastart:

- of de siliconen houders in de inspuitbuizen onbeschadigd en aanwezig zijn.


⚠ Er mogen geen siliconen houders ontbreken. Beschadigde siliconen houders moeten worden vervangen. Alleen dan mag u de module gebruiken. Onder deze voorwaarden standaardiseren de siliconen houders de spoeldruk zelf.

Gebruik geen beschadigde spoelsystemen zoals inspuiters, adapters en spoelhulzen.

Houdt u zich aan de beladingsvoorschriften die in het kader van de validatie zijn vastgelegd.

⚠ Alle MIC-instrumenten moeten voorafgaand aan de behandeling volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gedemonteerd. Nauwe, niet demonteerbare schachtinstrumenten moeten volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden voorgereinigd.

⚠ Vóór het aansluiten van de holle instrumenten moet zijn gewaarborgd dat de lumina/de kanalen goed doorgespoeld kunnen worden. De afzonderlijke instrumenten mogen tijdens de reiniging en desinfectie niet met elkaar in aanraking komen. Holle instrumenten die tijdens de behandeling zijn losgeraakt, moeten opnieuw worden behandeld.

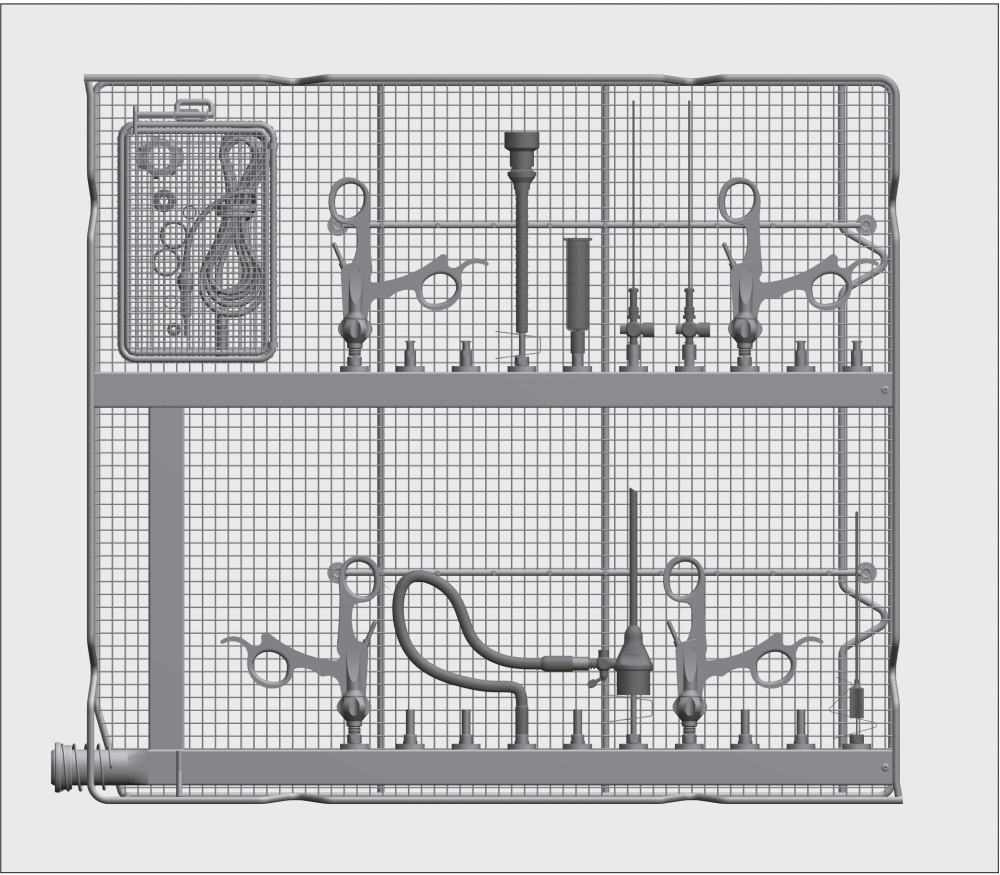


Spoelhulzen

De spoelhuls E 442 is geschikt voor de behandeling van instrumenten met lumina en voor instrumenten met een Ø kleiner dan 8 mm.

De diameters van de instrumenten en van de openingen in de spoelhulzen c.q. kapjes moeten bij elkaar passen.

- Steek trocarhulzen met een Ø kleiner dan 10 mm in de spoelhuls. Verbind de zijdelingse aansluiting met een slangadapter E 448. Verbind de slangadapter met een siliconen houder in de inspuitbuis.
- Steek trocars met holtes in spoelhulzen.
- Verbind de zijdelingse aansluitingen van de instrumenten met een slangadapter E 448 en steek de slangadapter in een siliconen houder.

Module-inzet E 925 voor korte MIC-instrumenten

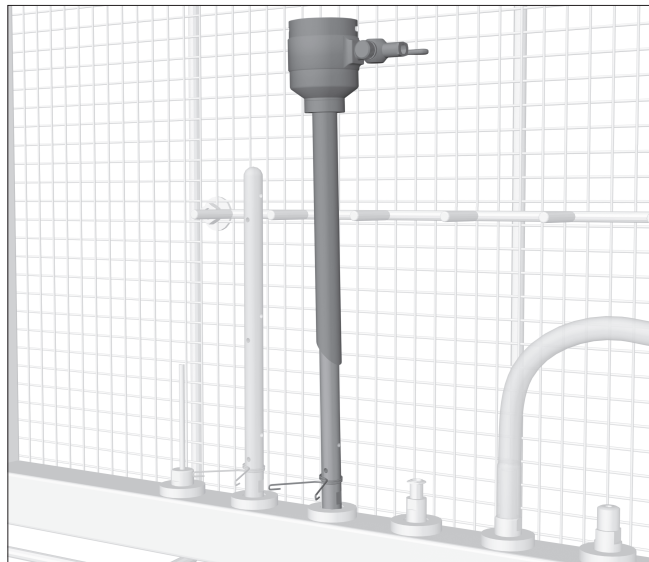


Trocarhulzen Ø 10 - 20 mm


- Demonteer de trocarhulzen.

Behandel de kleine onderdelen in een afsluitbare zeefschal.


- Steek trocarhulzen met een Ø 10 - 15 mm op een inspuiter E 454.
- Gebruik voor trocarhulzen met een Ø 15 - 20 mm de inspuitercombinatie E 464 en E 454.
- Positioneer de trocarhuls met de klemveer zo dat het water de kritische delen via de zijdelingse openingen van de inspuiter bereikt.

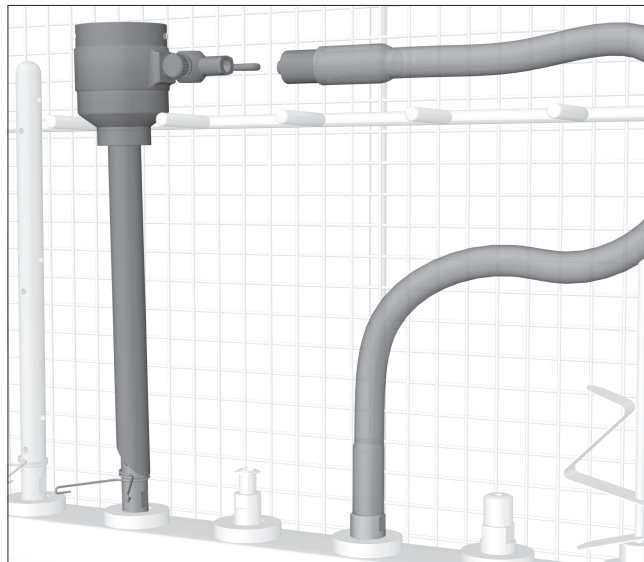

- Verbind de zijdelingse aansluiting van de trocarhuls met een slangadapter E 448.
- Steek de slangadapter in een siliconen adapter.

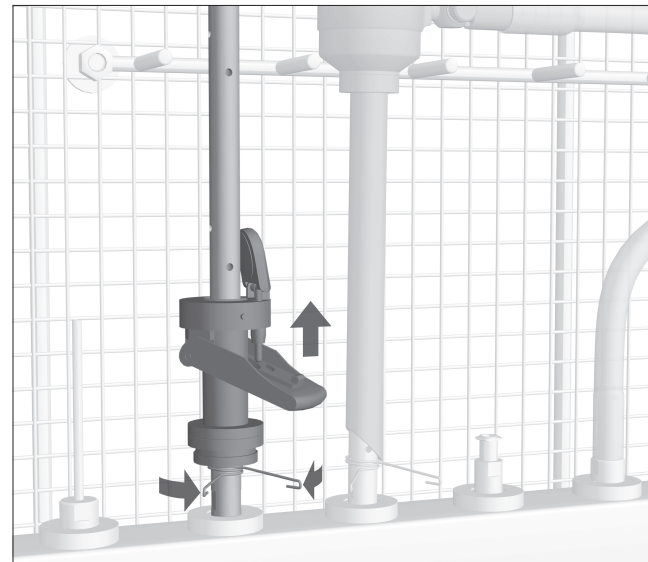


- Steek het klepventiel op een inspuiter E 454 voor trocarhulzen of een E 453 met klem.
- Positioneer het klepventiel met de klemveer of de klem zo dat het water de kritische delen via de zijdelingse openingen van de inspuiter bereikt.

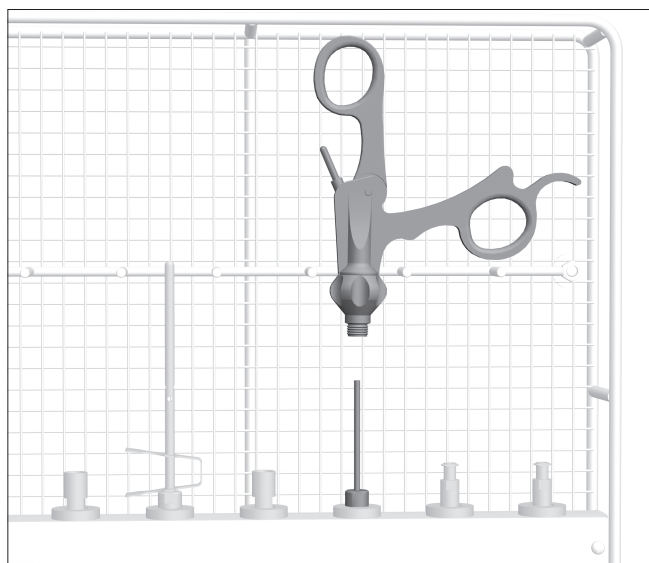

Handgrepen

- Steek gecontamineerde handgrepen op een inspuiter, bijvoorbeeld E 452.

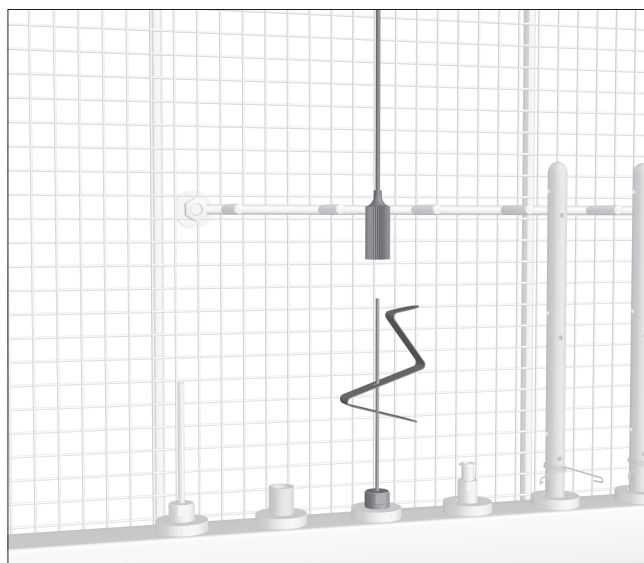


Veres-canules

- Demonteer de veres-canules.
- Plaats het buitenste gedeelte van de veres-canule op een inspuiter E 453 met klemveer E 472.



U kunt het buitenste gedeelte van de veres-canule ook in een E 499 behandelen (bij te bestellen). Bij de E 499 hoort een aparte gebruiksaanwijzing.

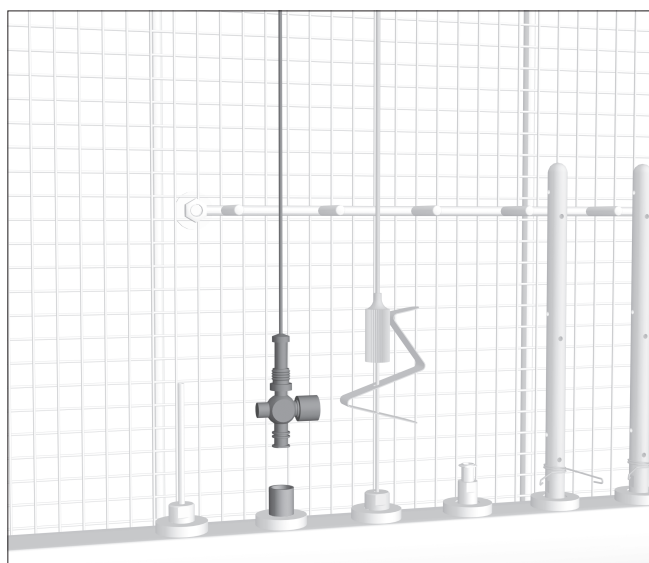

- Schroef het binnenste gedeelte van de veres-canule in een Luer-Lock-adapter ♂. Het kraantje moet open zijn.



Kleine onderdelen

- Leg kleine onderdelen, zoals dichtingen en kraantjes, in de afsluitbare zeefschal E 907/1.
- Hang de afgesloten zeefschal in de module-inzet.