

⚠ Beakta noggrant säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningarna för diskdesinfektorerna G 7827/28 eller PG 8527/28. Rengör endast instrument/medicinprodukter vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de specifika rengöringsanvisningarna. Diskprogram med termisk desinfektion måste överensstämja med medicinprodukternas materialkvalitet. Den sista sköljningen ska om möjligt alltid ske med AD-vatten. Vid användning av den automatiska vagnavkänningen måste koden anpassas.

I leveransen ingår:

Modulinsats E 925, höjd 40, bredd 568, djup 510 mm, utrustad med:

- 20 silikonhållare för adaptrar, spolhylsor och -dysor
- 2 listplattor för positionering av instrumenten

För utrustning av insatsen medföljer:

- 1 spolhylsa E 336 för instrument, längd 121 mm, Ø 11 mm
- 2 blindskruvar E 362
- 1 spolhylsa E 442 för instrument, längd 121 mm, Ø 11 mm, med lock Ø 6 mm
- 2 Luer-lock-adaptrar ♀ för Luer-lock ♂ E 447
- 4 slangar E 448 med gänga, silikon slang längd 300 mm, Ø 5 mm och Luer-lock-adapter ♀
- 2 Luer-lock-adaptrar ♂ för Luer-lock ♀ E 449
- 4 injektordysor E 452 med måtten 2,5 x 60 mm, skruvbara
- 3 injektordysor E 453 med måtten 4,0 x 110 mm med klamrar, skruvbara
- 3 injektordysor E 454 för trokarhylsor 10–15 mm, skruvbara
- 1 adapter E 464 för injektordysa E 454
- 1 låsfjäder E 472 för injektordysor Ø 4 mm
- 1 trådkorg med lock för smådelar E 907.

Användningsområde

Modulinsatsen E 925 går att använda med MIC-OP-injektorvagn E 909. En separat bruksanvisning bifogas injektorvagnen.

E 925 är anpassad för rengöring och desinfektion av korta MIC-instrument till exempel inom artroskopi eller laparoskopi. I anslutningarna i den övre raden kan instrument som är max 190 mm långa placeras. I de undre anslutningarna kan instrument som är max 220 mm långa placeras.

Kontrollera vid placering av instrumenten/före varje programstart:

- att silikonhållarna i spolbryggorna är oskadade och fullständiga.


⚠ Inga eller skadade silikonhållare, som läcker vätska, måste ersättas med nya silikonhållare. Först då får modulen användas igen. Under dessa villkor standardiserar silikonhållarna spoltrycket själva.

Inga skadade spolanordningar som dysor, adaptrar eller spolhylsor får användas.

Håll dig alltid till den fastlagda placeringen av diskgoods inom ramen för valideringen.

⚠ Alla MIC-instrument måste tas isär enligt tillverkarens anvisningar innan de diskas. Smala instrument med skaft som inte kan tas isär måste fördiskas enligt tillverkarens anvisningar.

⚠ Innan ihåliga instrument ansluts måste du kontrollera att kanaler eller ihåligheter inte är blockerade. Instrumenten får inte komma åt varandra under rengöring och desinfektion. Ihåliga instrument som har lossnat från adaptrarna under rengöringen måste rengöras på nytt.

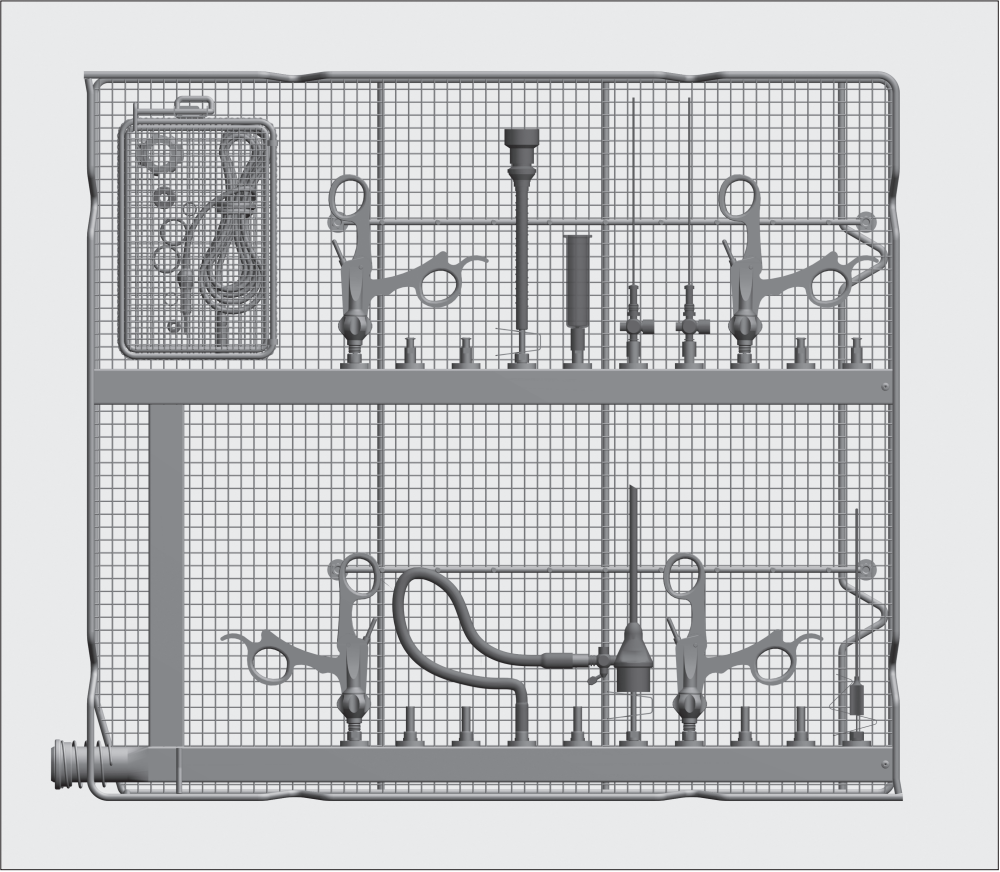


Spolhylsor

Spolhylsan E 442 är anpassad för rengöring av instrument med håligheter och instrument med en Ø under 8 mm.

Instrumentens diameter och spolhyslornas öppningar respektive lock ska passa varandra.

- Sätt ner trokarhylsor med en Ø under 10 mm i spolhyslorna. Förbind anslutningen på sidan med en slangadapter E 448. Anslut slangadaptern med en silikonhållare i spolbryggan.
- Sätt in trokarer med håligheter i spolhyslorna.
- Koppla ihop sidoanslutningarna på instrumenten med en slangadapter E 448 och sätt in slangadaptern i en silikonhållare.

Modulinsats E 925 för korta MIC-instrument

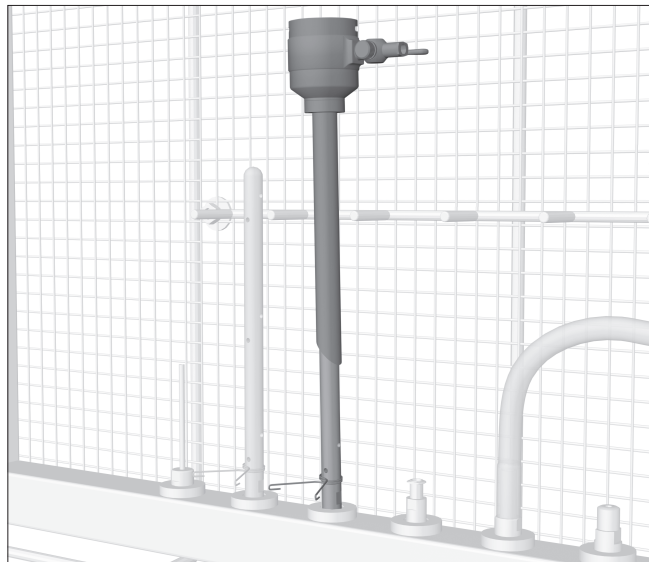


Trokarhylsor Ø 10–20 mm


- Plocka isär trokarhylsorna.

Diska smådelarna i en trådkorg som kan stängas.


- Sätt fast trokarhylsor med Ø 10–15 mm på en dysa E 454.
- Använd dyskombinationen E 464 plus E 454 för trokarhylsor med en Ø 15–20 mm.
- Placera trokarhylsorna med låsfjädern så att diskvattnet når kritiska områden genom dysans öppningar på sidorna.

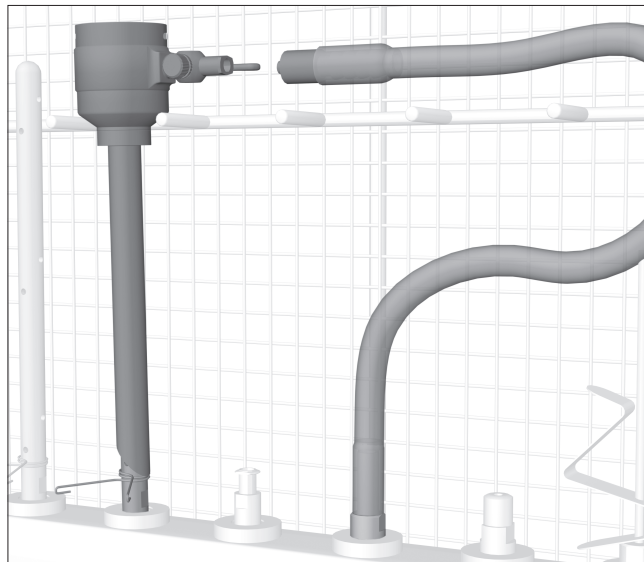

- Förbind trokarhylsans sidoanslutning med en slangadapter E 448.
- Sätt in slangadaptern i en silikonadapter.

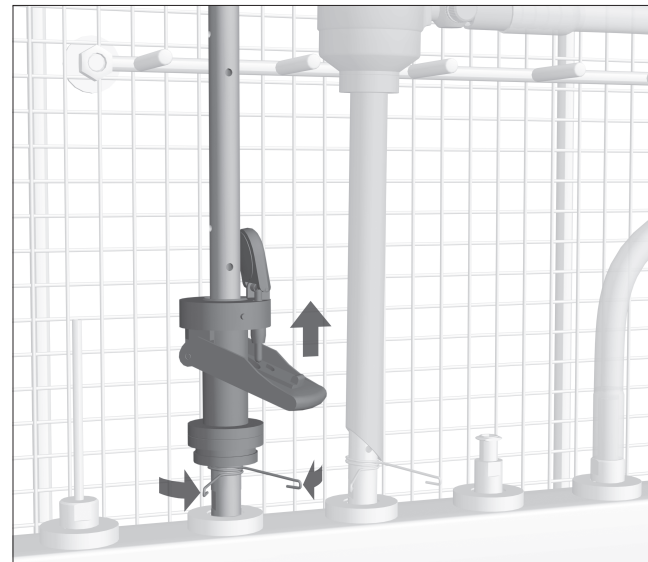


- Sätt klaffventilen på en injektordysa E 454 för trokarhylsor eller E 453 med klammer.
- Placera klaffventilen med låsfjädern eller klammern så att diskvattnet når kritiska områden genom dysans sidoöppningar.

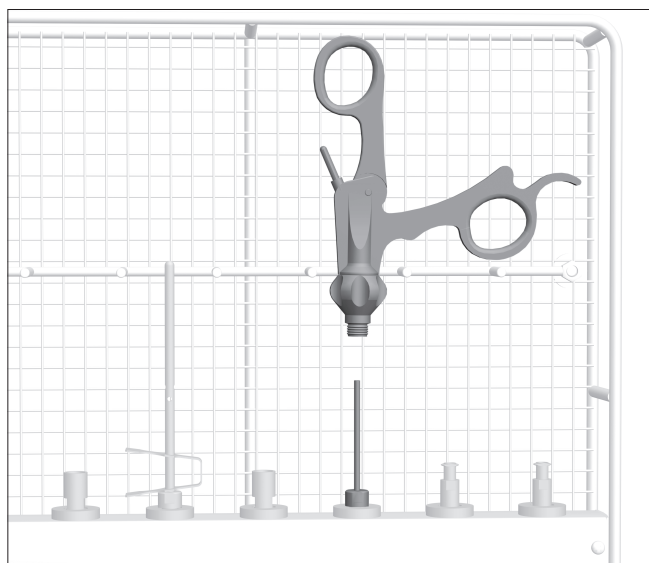

Handtag

- Sätt kontaminerade handtag på en dysa, till exempel E 452.

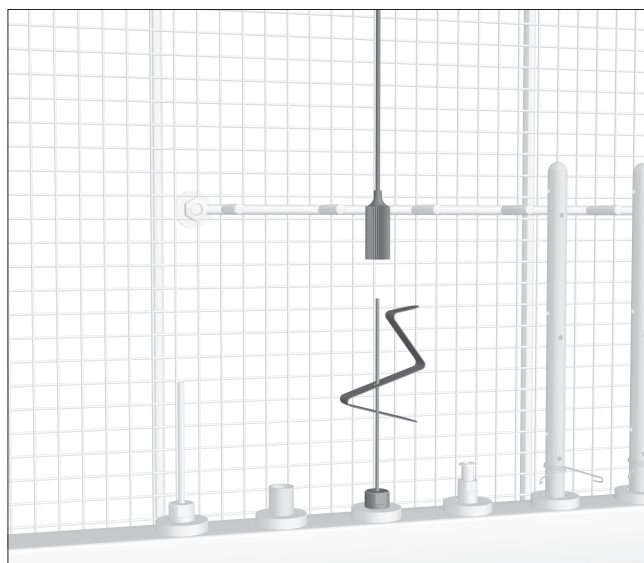


Veres-kanyler

- Ta isär Veres-kanylerna.
- Sätt den yttre delen av Veres-kanylen på en dysa E 453 med en låsfjäder E 472.



Veres-kanylens yttersta del kan alternativt rengöras i spolansordning E 499 (extra tillbehör). En separat bruksanvisning bifogas spolansordningen.

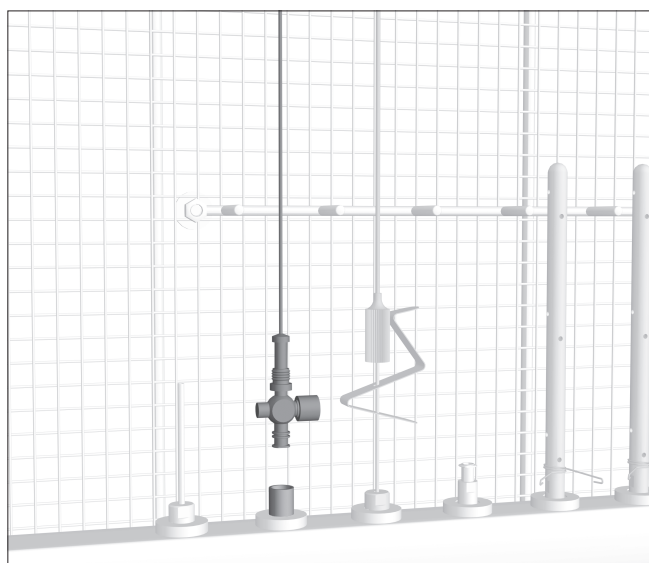

- Skruva fast Veres-kanylens innerdel i en Luer-lock-adapter ♂. Kranen måste vara öppen.



Smådelar

- Lägg smådelar som exempelvis packningar och kranar i trådkorg E 907/1 som kan stängas.
- Stäng trådkorgen och häng den i modulinsatsen.