

⚠ Noudata ehdottomasti puhdistus- ja desinfiointiautomaatin G 7827/28 tai PG 8527/28 käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita sekä vaunun E 909 käyttöohjetta. Käsittele laitteessa ainoastaan sellaisia välineitä/lääkinnällisiä tuotteita, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfiointin, ja noudata kunkin välineen omia puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Käytettävä puhdistus- ja desinfiointiohjelma, johon tulisi sisältyä lämpödesinfiointi, on tarvittaessa sopeutettava puhdistettavien lääkitsevien tuotteiden materiaalin laatuun sopivaksi. Viimeisessä huuhtelussa käytetään suoloista puhdistettua vettä aina kun vain mahdollista. Automaattista vaunun tunnistusta käytettäessä vaunu on ensin koodattava oikein!

Varusteet:

Moduuliteline E 926, johon sisältyy:

- 13 liitintä sovitinkappaleita, huuhteluhylysyjä ja suihkusuuttimia varten
- yksi hammastettu pidike instrumenttien kiinnitystä varten

Telineen varusteisiin kuuluvat seuraavat osat:

- 5 huuhteluhylysyä E 442 MIC-instrumentteja varten, pituus 121 mm, Ø 11 mm, mukana suojus Ø 6 mm
- 3 huuhteluhylysyä E 443 MIC-instrumentteja varten, pituus 121 mm, Ø 11 mm, mukana suojus Ø 10 mm
- 1 huuhteluhylysy E 336 MIC-instrumentteja varten, pituus 121 mm, Ø 11 mm
- 2 silikoniletkua E 448, joissa ruuvi kierteet, pituus 300 mm, Ø 5 mm sekä Luer Lock-sovitin ♀
- 1 suorasuihkusuutin E 454 troakaarihylysyille 10 - 15 mm, ruuvattava
- sovitin E 464 suorasuihkusuuttimeen E 454
- 2 avausjousta E 456 MIC-instrumentteja varten
- 2 sulkuruuvia E 362


Käyttökohteet:

Moduulitelinetä E 926 voidaan käyttää MIC-OP-suorasuihkuvaunussa E 909.

Teline on tarkoitettu pitkien (pituus enint. 440 mm) MIC-instrumenttien puhdistukseen ja desinfiointiin, esim. artroskooppisen tai laparoskooppisen kirurgian instrumenteille.

Tarkista vaunua täyttäessä/ennen ohjelman käynnistämistä:

- Ovatko suihkusuutinlistojen silikonipidikkeet ehjät ja ovatko ne varmasti paikoillaan?

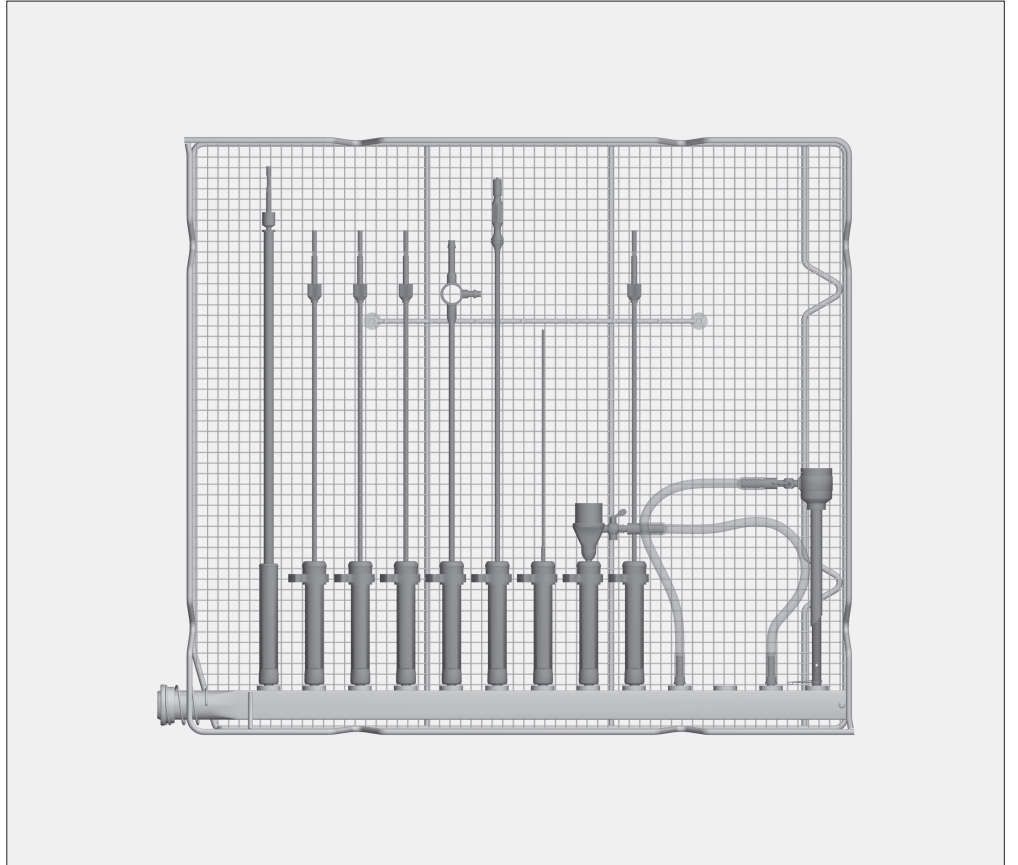

Huuhteluhylysyt

Huuhteluhylysyt E 442 ja E 443 on tarkoitettu kapeiden ja onttojen sekä Ø alle 15 mm:n kokoisten instrumenttien puhdistukseen ja desinfiointiin.

Valitse käytettävä huuhteluhylysy sen mukaan, että sen suutinaukko tai suojus vastaa mahdollisimman hyvin kunkin instrumentin halkaisijaa.

- Työnnä MIC-instrumenttien varret suojuksellisiin huuhteluhylysyihin.
- Aseta HF-pihdit ja elektrodit siten, että niiden toiminnallinen pää tulee alas kiinni suojuksellisiin huuhteluhylysyihin.
- Työnnä varrelliset instrumentit, joita ei voi purkaa osiin, suoraan huuhteluhylysyyn. Instrumenttien toiminnallisten päiden tulee olla auki, jännitä tarvittaessa kahvaosat auki erillisellä puristinjousta E 472. Liitä instrumenttien sivuliittimeen erillinen letkusovitin E 448. Liitä letkusovitin suihkusuutinlistan silikonipidikkeeseen.
- Työnnä Ø alle 10 mm:n troakaarihylysy suoraan huuhteluhylysyihin. Kiinnitä troakaarihylysyn sivuliittimeen erillinen letkusovitin E 448. Liitä letkusovitin suihkusuutinlistan silikonipidikkeeseen.
- Kiinnitä troakaarihylysyn ontot pistinosat huuhteluhylysyyn.

⚠ Puuttuvat tai vedenpaineen vahingoittamat silikonipidikkeet on ehdottomasti korvattava uusilla silikonipidikkeillä. Vasta tämän jälkeen moduulia (koria, vaunua) saa käyttää. Näillä edellytyksillä silikonipidikkeet standardoivat pesuveden paineen automaattisesti.


Vahingoittuneita huuhtelupidikkeitä, kuten suuttimia, sovittimia tai huuhteluhylysyjä ei saa missään tapauksessa käyttää.

Noudata aina validoinnin yhteydessä määritettyä täyttötapaa.

⚠ Kaikki MIC-instrumentit täytyy purkaa osiin puhdistusta ja desinfiointia varten valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kapeat ja ontot varrelliset instrumentit, joita ei voi purkaa osiin, on esipuhdistettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

⚠ Ennen onttojen ja kapeiden instrumenttien liittämistä on varmistettava, että pesuvesi pääsee virtaamaan vapaasti instrumenttien sisäosien/kanavien läpi. Yksittäiset instrumentit eivät saa koskettaa toisiaan puhdistus- ja desinfiointivaiheen aikana.

⚠ Ontot instrumentit, jotka ovat irronneet sovittimista tai letkuliittimistä pesun ja desinfiointin aikana, on käsiteltävä uudelleen.

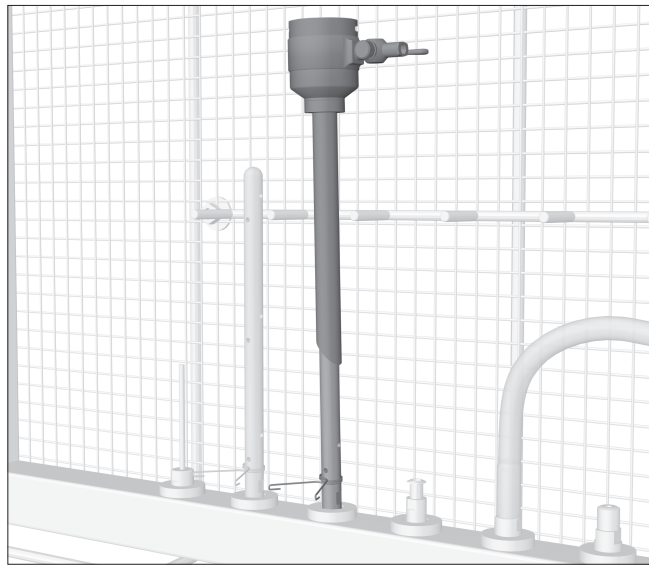


Troakaarihylysy Ø 10 - 20 mm


- Pura troakaarihylysy osiin.

Puhdista ja desinfioi pienet osat suljettavassa verkkokorissa.


- Työnnä Ø 10 - 15 mm:n troakaarihylysy suihkuuuttimiin E 454.
- Käytä Ø 15 - 20 mm:n troakaarihylysyille suihkuuutinyhdistelmää E 464 ja E 454.
- Aseta troakaarihylysy paikalleen puristinjousen avulla siten, että pesuvesi ulottuu kriittisiin alueisiin suuttimen sivuaukkojen kautta.

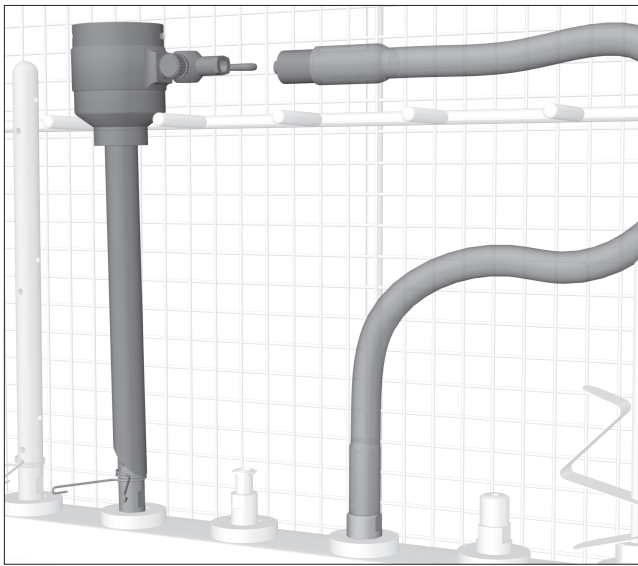

- Kiinnitä troakaarihylysyjen sivuliittimiin erillinen letkusovitin E 448.
- Liitä letkusovitin silikonipidikkeeseen.

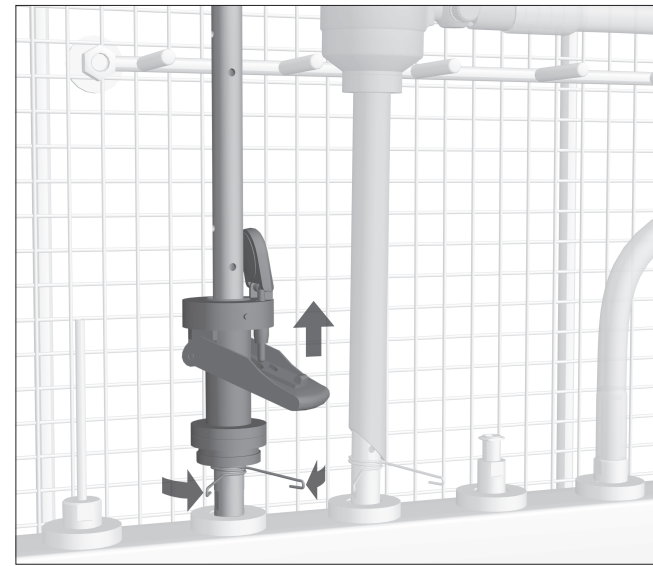


- Työnnä läppäventtiili troakaarihylysyille tarkoitettuun suihkuuuttimeen E 454 tai E 453 (erikseen ostettava lisävaruste, ei sisälly toimitukseen), jossa on pidikepuristin.
- Kiinnitä läppäventtiili puristinjousen tai pidikepuristimen avulla siten, että pesuvesi ulottuu kriittisiin alueisiin suuttimen sivuaukkojen kautta.

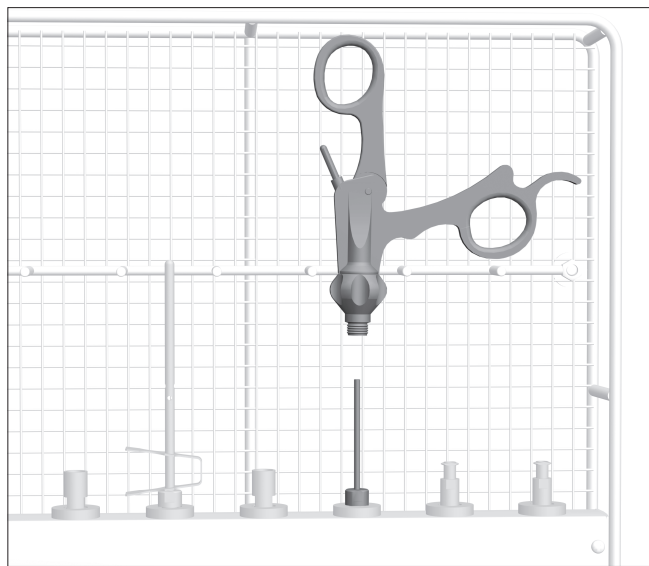


Kädensijat

- Työnnä likaiset kädensijat suoraan suihkuuuttimeen, esim. E 452 (erikseen ostettava lisävaruste, ei sisälly toimitukseen).

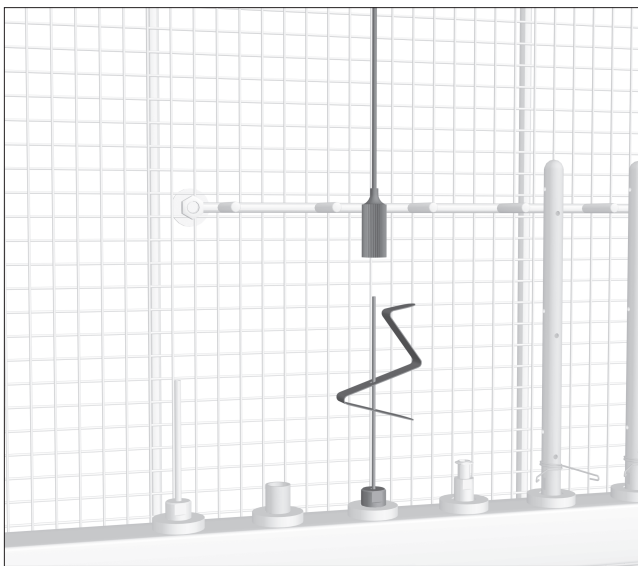


Veres-kanyylit

- Pura Veres-kanyylit osiin.
- Kiinnitä Veres-kanyyliin ulommainen osa suihkuuuttimeen E 453 puristinjousella E 472 (erikseen ostettava lisävaruste, ei sisälly toimitukseen).

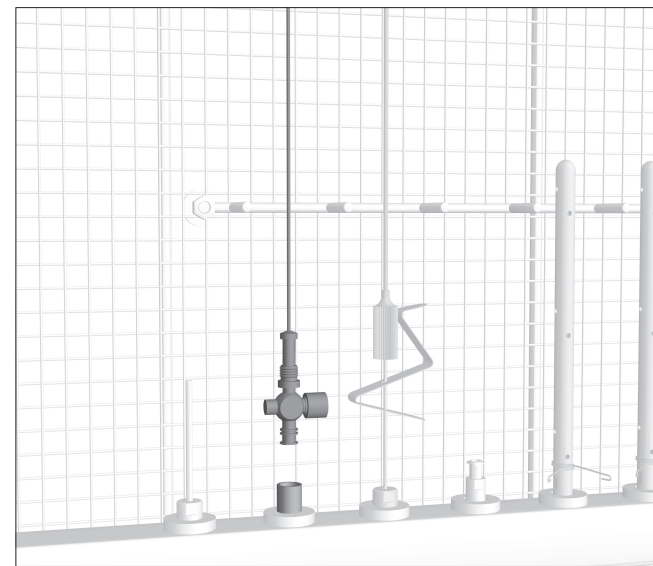

- Ruuvaa Veres-kanyyliin sisempi osa Luer-Lock-sovittimeen ♂, hanan on oltava avatussa asennossa.

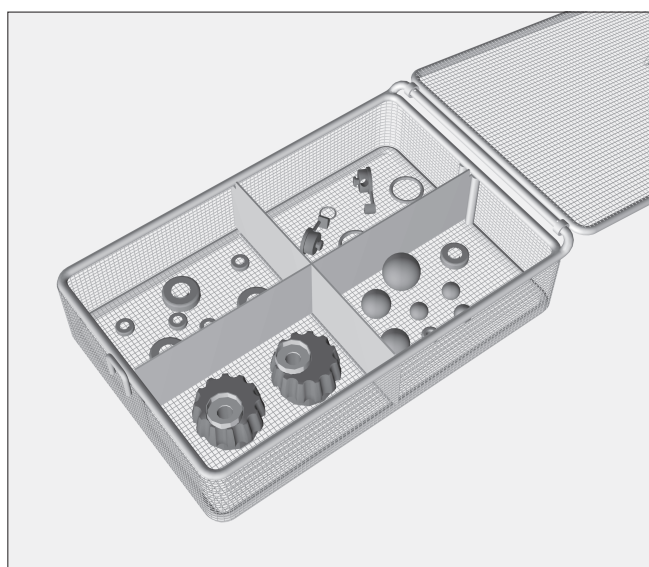

Pienet osat


- Aseta pienet osat, kuten tiivisteet ja hanat suljettaviin verkkokoreihin E 451 (erikseen ostettava lisävaruste, ei sisälly toimitukseen).
- Aseta suljetut verkkokorit vaunun ylemmälle tasolle.



Optiset välineet

⚠ Optiset välineet saa puhdistaa vain optisten välineiden valmistajan omista telineistä tai erikoistelineestä E 460. Vain tällaisissa telineissä välineet eivät vahingoitu mekaanisesti!

- Aseta optisten välineiden teline vaunun E 909 ylemmälle tasolle.

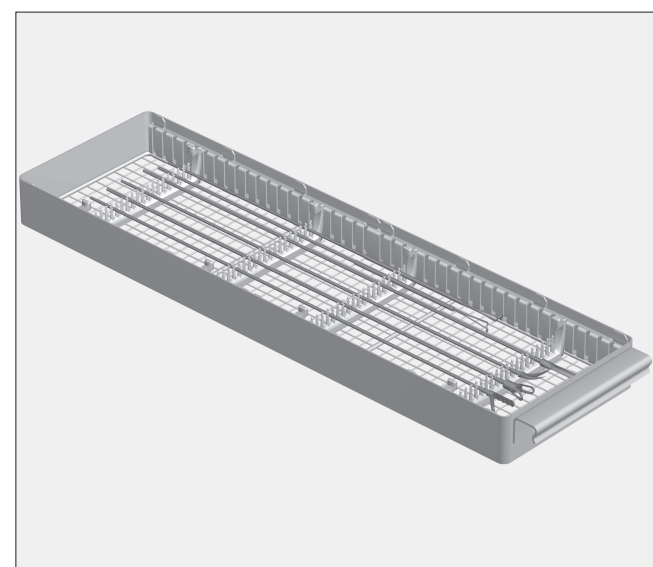

Irrotettavat sisäosat

Irrotettavat sisäosat voidaan käsitellä telineessä E 908/1 (erikseen ostettava lisävaruste, ei sisälly toimitukseen). Telineen mukana toimitetaan erillinen käyttöohje.

- Ripusta teline moduulitelineen ylemmään kehykseen.