

Käyttökohteet:

Telineessä E 908/1 voidaan puhdistaa ja desinfioida varrellisten MIC-instrumenttien enint. 420 mm pitkiä irrotettavia sisäosia.

Teline E 908/1 voidaan ripustaa MIC-instrumenttien moduulitelineisiin, esim. E 906/1. Moduulitelineiden mukana toimitetaan erillinen käyttöohje.

⚠ Noudata ehdottomasti puhdistus- ja desinfiointiautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita. Käsittele laitteessa ainoastaan sellaisia välineitä/lääkinnällisiä kohteita, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfiointin, ja noudata kunkin välineen omia puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Käytettävä puhdistus- ja desinfiointiohjelma, johon tulisi sisältyä lämpödesinfiointi, on tarvittaessa sopeutettava puhdistettavien lääkitävikä välineiden materiaalin laatuun sopivaksi.


Pura puhdistusta varten MIC-instrumentit niin pieniin osiin kuin mahdollista. Instrumenttien varret kiinnitetään moduulitelineen huuhteluhylsyihin ja kädensijat vastaaviin suuttimiin.

Sisäosien järjestäminen

Irrotettavat sisäosat on kiinnitettävä kolmesta tai neljästä kohdasta telineen E 908/1 hammastuksiin. Tätä varten hammastusten paikkaa voidaan muuttaa muuttamalla sisäosien pituuden mukaan.

- Aseta sisäosat hammastuksiin
- Kiinnitä ensin toiminnallinen pää paikalleen ja avaa se.
- Kiinnitä sitten sisäosa hammastuksiin muilta osiltaan.

Optiset välineet, joiden halkaisija on enint. 5 mm, esim. urologian instrumentit, voidaan myös käsitellä tässä samassa telineessä. Jotta välineet pysyivät varmasti paikoillaan, ne tulee kiinnittää yhteensä neljään hammastukseen.

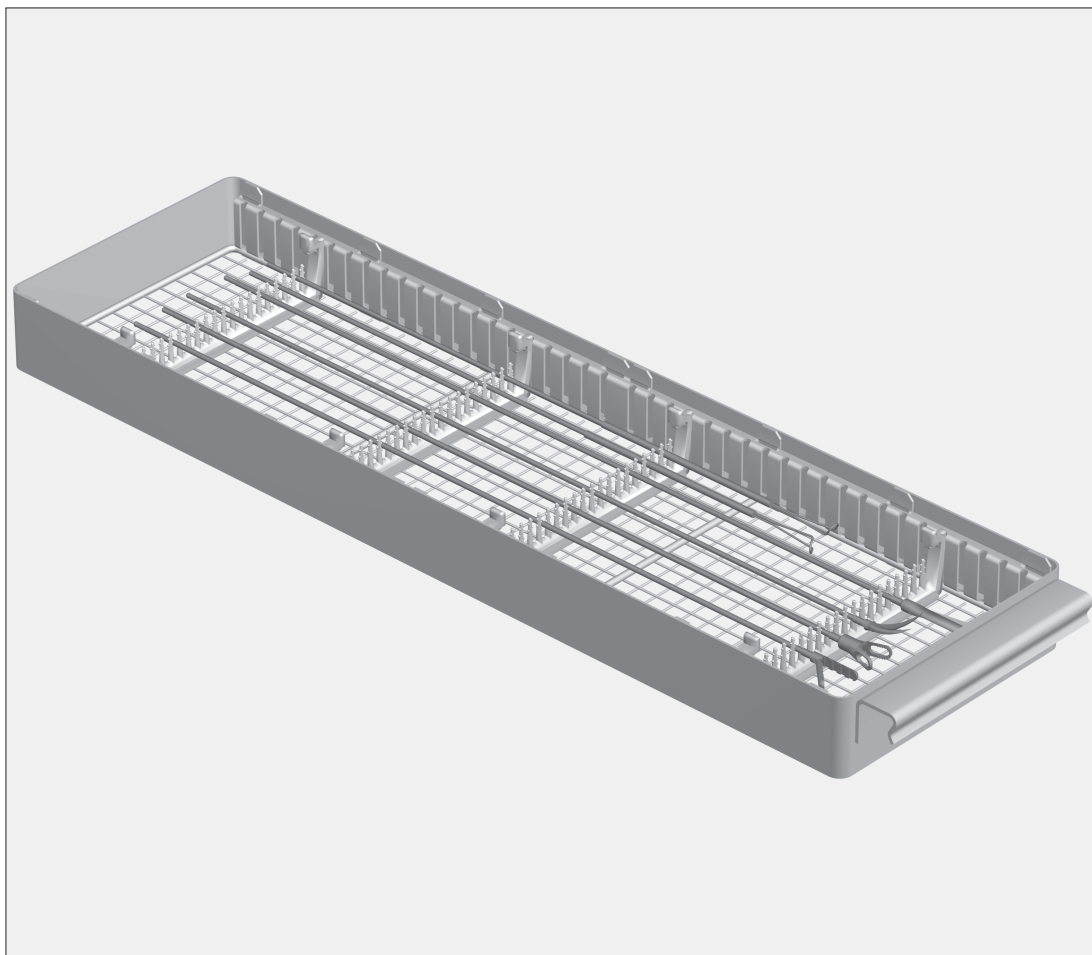

Användningsområde

I insatsen E 908/1 kan endoskopitänger till MIC-instrument med isoleringshylsor som är max 420 mm långa rengöras. Insats E 908/1 hängs in i modulinsatser för MIC-instrument, till exempel E 906/1. En separat bruksanvisning medföljer modul-insatsen.

⚠ Läs igenom säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningen för diskdesinfektorn noggrant. Rengör endast instrument/medicinprodukter vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de specifika rengöringsanvisningarna. Det diskprogram som används med termisk desinfektion måste även anpassas till medicinprodukternas materialkvalitet.

Lägg MIC-instrument så långt ifrån varandra som möjligt när de ska rengöras. Instrumentens isoleringshylsor ställs i spolhylsor och handtag ställs på motsvarande dysor i modul-insatsen.

Placera endoskopitänger

Endoskopitängerna ska vara fixerade på tre till fyra punkter på hållarna på E 908/1. Hållarnas position kan anpassas till endoskopitängernas längd.

- Placera endoskopitängerna i hållarna.
- För att göra det kläm ihop ändarna på funktionsdelen och öppna.
- Fixera sedan endoskopitängerna i de andra hållarna.

Optiska instrument med en diameter på upp till 5 mm, till exempel från urologi, kan också rengöras i denna insats. Instrumenten ska placeras i fyra hållare för att stå stadigt.