

Vogne til container E 910/4, E 911/3 og E 912/2

Leveringen omfatter:

Basisvogn E 910/4 til 6 DIN-containerere og låg, H 454, B 636, D 790 mm, med magnetliste til automatisk vognidentifikation

Basisvogn E 911/3 til 4 DIN-containerere og låg, H 454, B 636, D 790 mm, med magnetliste til automatisk vognidentifikation

Basisvogn E 912/2 til 4 ISO-containerere og låg, H 454, B 636, D 790 mm, med magnetliste til automatisk vognidentifikation

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinerne G7827/28 eller PG 8527/28 skal overholdes. Der må kun rengøres containere/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret som egnet til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl bør altid så vidt muligt foretages med totalt afsaltet vand.

Anvendelsesområde:

Med vogn E 910/4 kan der rengøres seks flade DIN-containerere med tilhørende låg (160 x 300 x 600 mm*).

Med vogn E 911/3 kan der rengøres fire høje DIN-containerere med tilhørende låg (270 x 300 x 600 mm*).

Med vogn E 912/2 kan der rengøres fire ISO-containerere med tilhørende låg (180 x 400 x 600 mm).

*Målangivelser for containere, inkl. låg, i mm (højde x bredde x længde), fremstillet iht. EN 868-8.


Anvendelsestips:

Til containere af eloxeret aluminium skal der altid anvendes et pH-neutralt rengøringsmiddel.
Ved farveeloxeret aluminium skal der anvendes totalt afsaltet vand til rengøringen og den termiske desinfektion/slutskyllet.


- Containere eller låg af kunststof tørrer hurtigere og bedre, hvis der anvendes et egnet slutskyllemiddel.
- Inden rengøringen skal filtre af tekstil eller papir fjernes fra lågene.
- Teflonfiltre kan blive siddende i låget, hvis producenten ikke har anført andet.
- Ved bortskaffelsescontainere med ventil skal ventilernes funktion kontrolleres efter rengøringen.

Bemærk:


Med hensyn til beskyttelse af personalet udgør containere ingen farer. Af hygiejnemæssige årsager skal det dog klarlægges, om der med den termiske desinfektion skal realiseres en A_0 -værdi på 60 eller 600.

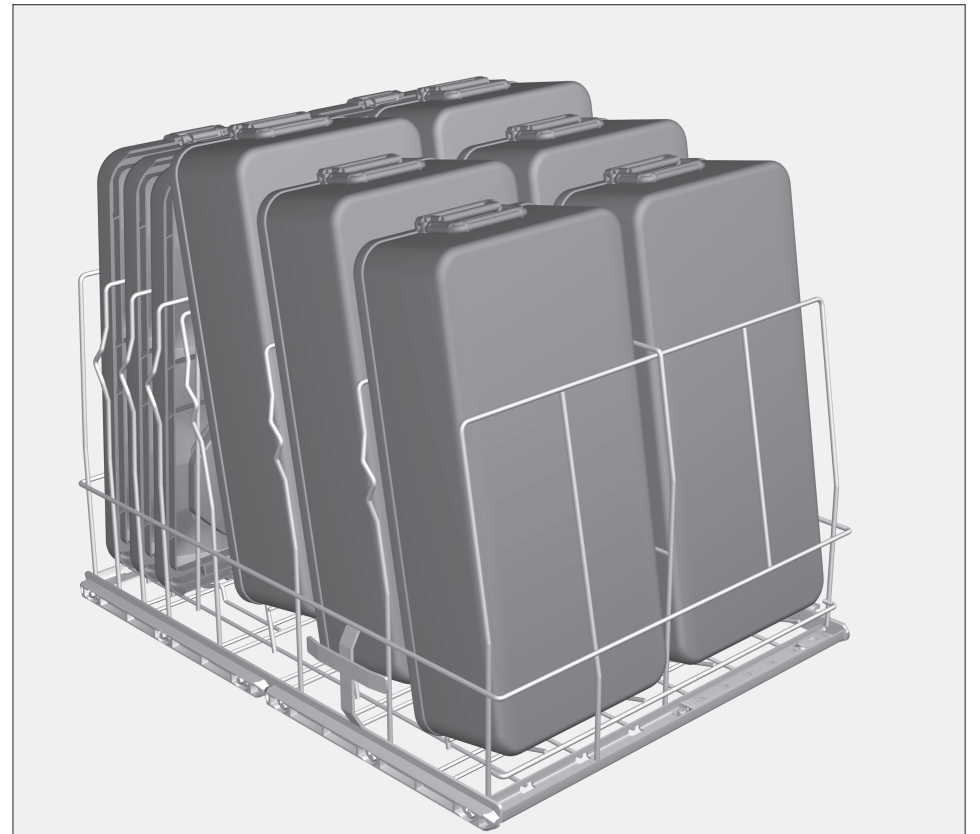

E 910/4

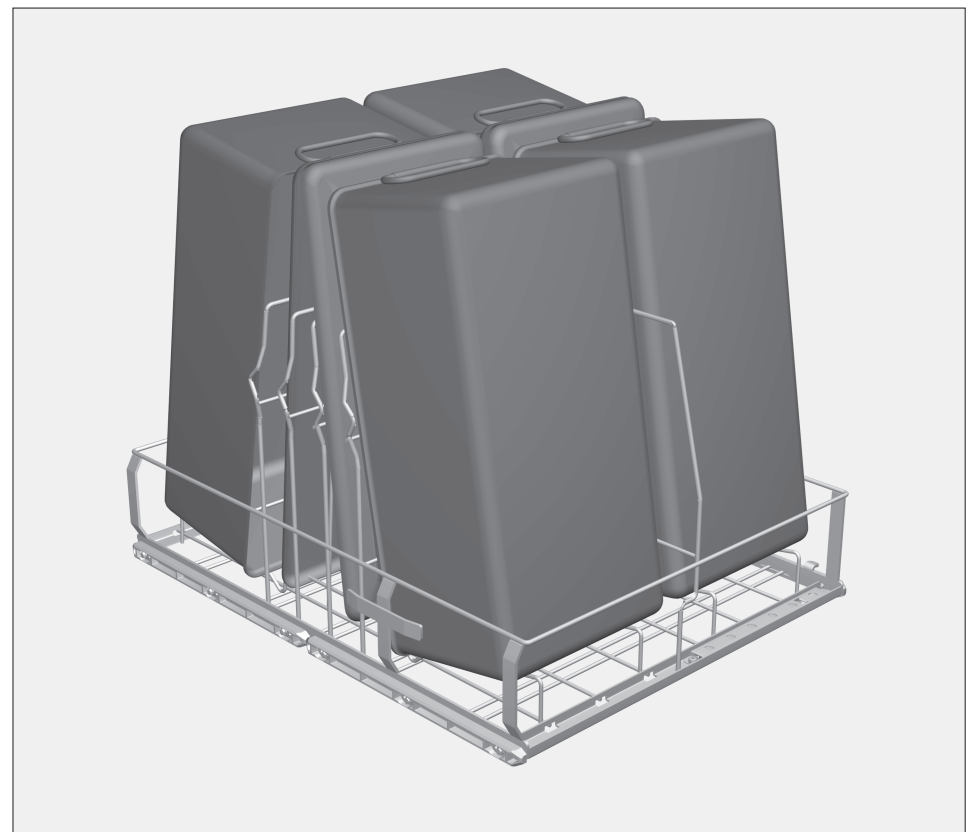

E 911/3

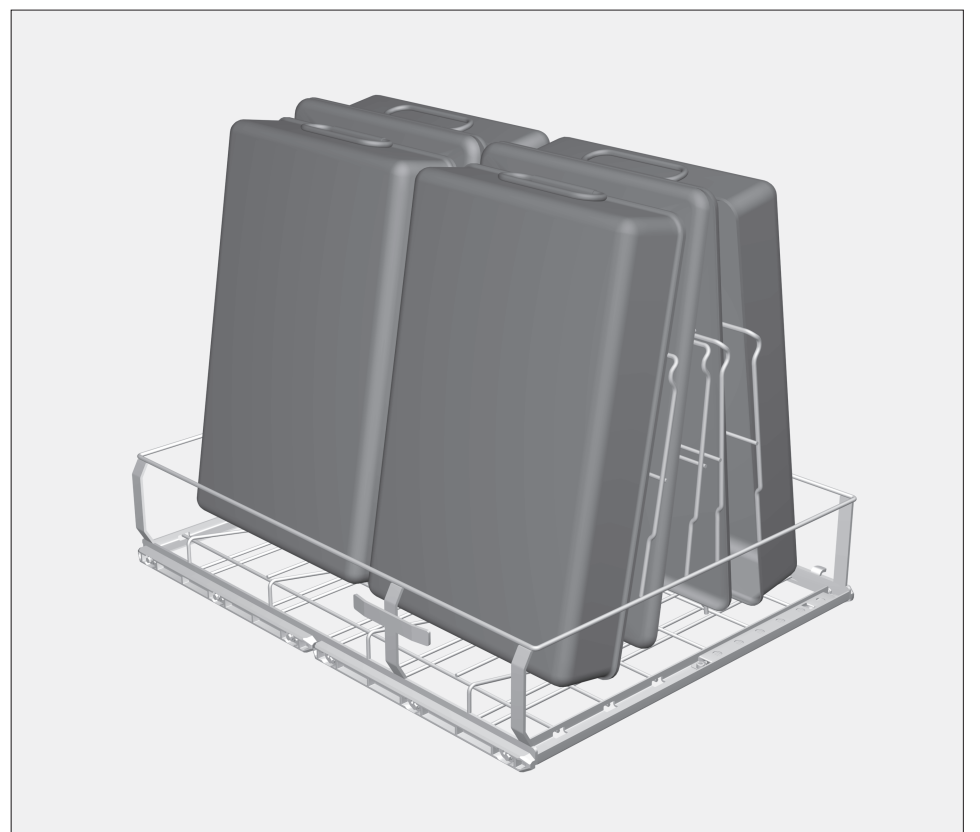

E 912/2

Vogn for containere E 910/4, E 911/3 og E 912/2

Standardlevering:

Grunnvogn E 910/4 for 6 DIN containere og lokk, H 454, B 636, T 790 mm med magnetlist for automatisk vogngjenkjenning

Grunnvogn E 911/3 for 4 DIN containere og lokk, H 454, B 636, T 790 mm med magnetlist for automatisk vogngjenkjenning

Grunnvogn E 912/2 for 4 ISO containere og lokk, H 454, B 636, T 790 mm med magnetlist for automatisk vogngjenkjenning

⚠ Kapitlet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for Rengjørings- og desinfeksjonsautomatene G 7827/28 og PG 8527/28 må absolutt følges. Klargjør bare containere/medisinprodukter, som av produsenten er deklart som mulig å klargjøre for gjenbruk maskinelt, og følg produsentens anvisninger for klargjøring. Klargjøringsprogrammet hvor termisk desinfeksjon foretrekkes, må eventuelt avstemmes til materialkvaliteten på medisinproduktene. I den siste skyllingen skal det, om mulig, alltid brukes demineralisert vann.

Anvendelsesområde:

Med vognen E 910/4 kan det klargjøres seks lave DIN-containere og tilhørende lokk (160 x 300 x 600*).

Med vognen E 911/3 kan det klargjøres fire høye DIN-containere og tilhørende lokk (270 x 300 x 600*).

Med vognen E 912/2 kan det klargjøres fire ISO-containere og tilhørende lokk (180 x 400 x 600 mm).

*Mål for container inkludert lokk i mm (høyde x bredde x lengde) produsert etter DIN EN 868-8


Brukerveiledning:

For containere av eloksert aluminium skal det brukes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel.
For fargeeloksert aluminium skal det brukes demineralisert vann for rengjøring og termisk desinfeksjon / etterskylling.


- For containere hhv. lokk av kunststoff fører bruk av et egnet avspenningsmiddel til raskere hhv. bedre tørkeresultater.
- Filtre av tekstil- eller papirmateriale skal fjernes fra lokkene før klargjøringen.
- Teflonfiltre kan eventuelt sitte på lokket, hvis produsenten ikke opplyser om noe annet.
- For instrumentcontainere med ventil, skal ventilens funksjon kontrolleres etter klargjøringen.

NB!:


Containerne utgjør ingen fare for skade når det gjelder personalvern. Det skal imidlertid avklares med den som er ansvarlig for hygien, om en A_0 - verdi på 60 eller 600 skal realiseres med den termiske desinfeksjonen

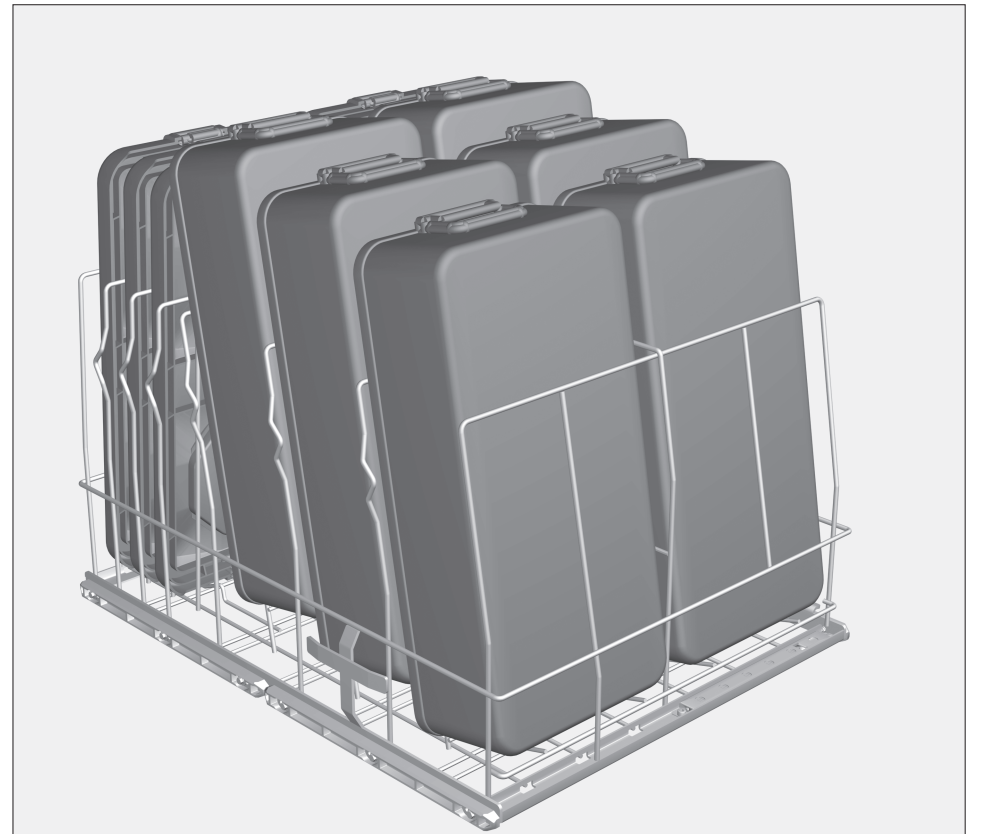

E 910/4

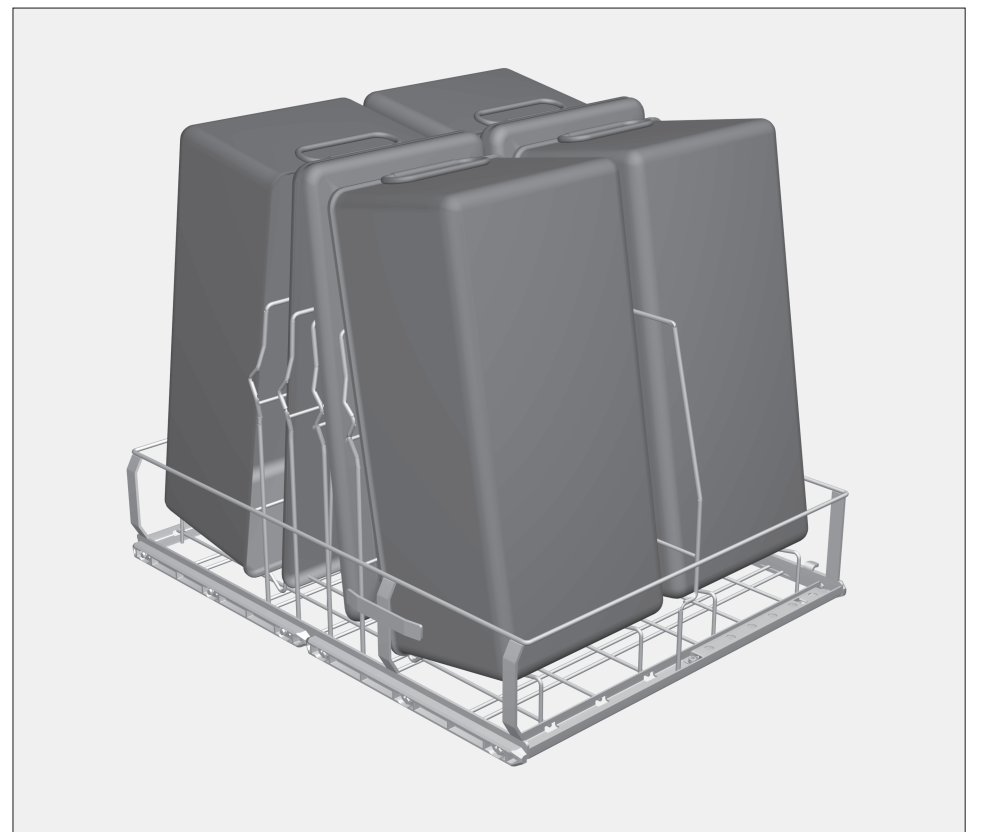

E 911/3

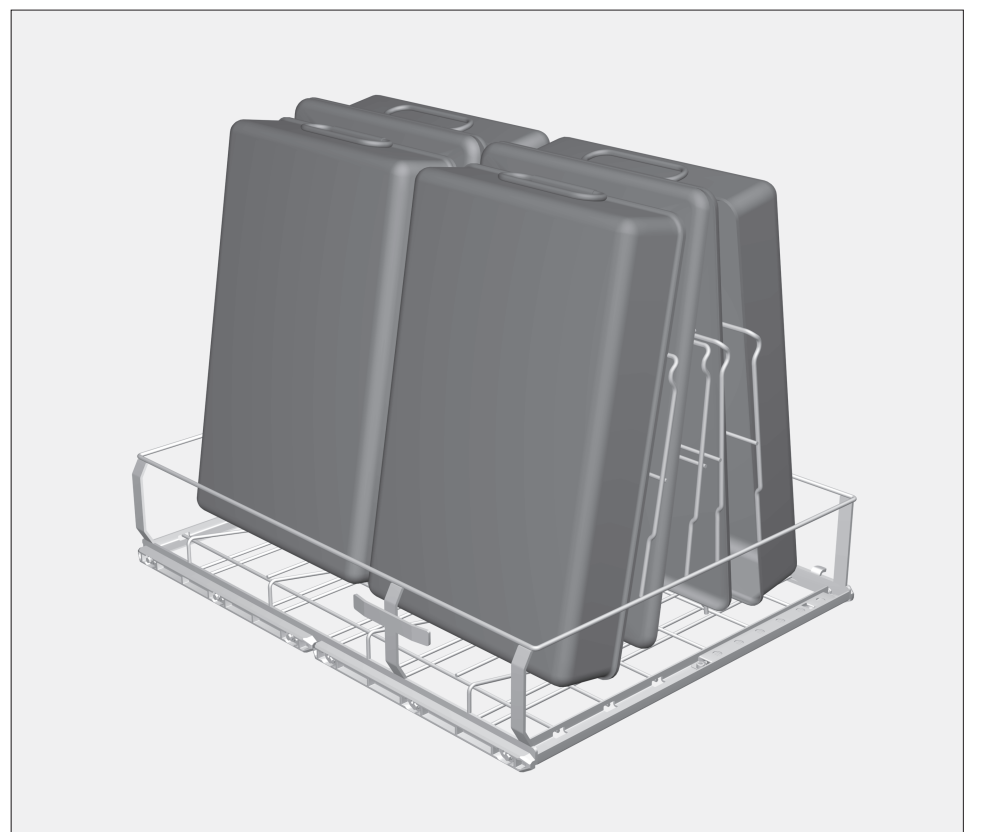

E 912/2