

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinerne G 7827/28 eller PG 8527/28 skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl bør altid så vidt muligt foretages med totalt afsaltet vand.  
Ved anvendelse af den automatiske vognidentifikation skal kodningen være tilpasset!

Leveringen omfatter:

Mobile-unit E 902/1 med 6 indsatsmuligheder til MIC-OP-moduler, H 620, B 640, D 790 mm, med magnetliste til automatisk vognidentifikation.

Medfølgende tilbehør

- 3 moduler med tilslutninger til korte MIC-instrumenter E 905/1
- 3 moduler med tilslutninger til lange MIC-instrumenter E 906/1
- 3 indsatser E 444 til lyslederkabel og sugeslange

Der følger separate brugsanvisninger med modulerne og indsatserne.


- 2 m silikoneslange Ø 5 mm
- 6 blindskruer E 362
- 24 kapper E 445 til hylstre E 442, åbning Ø 6 mm
- 12 kapper E 446 til hylstre E 443, åbning Ø 10 mm

Anvendelsesområde:

Der kan anbringes op til 6 moduler til MIC-instrumenter i mobile-unitten. Lyslederkabler og sugeslanger kan rengøres med maks. 6 indsatser E 444; der er holdere hertil i mobile-unittens forreste og bageste område. Til indvendig skylning af sugeslangerne eller tilslutning af lange instrumenter er der 6 tilslutningsmuligheder.

Derudover kan der anbringes specialindsatser til OP-instrumenter og trådkurve på mobile-unittens øverste etage. På den nederste etage kan der anbringes trådkurve.

| Fyldningsmål   | E 902/1 [H x B x D i mm] |
|----------------|--------------------------|
| Øverste etage  | 65 x 593 x 780           |
| Nederste etage | 53 x 593 x 780           |

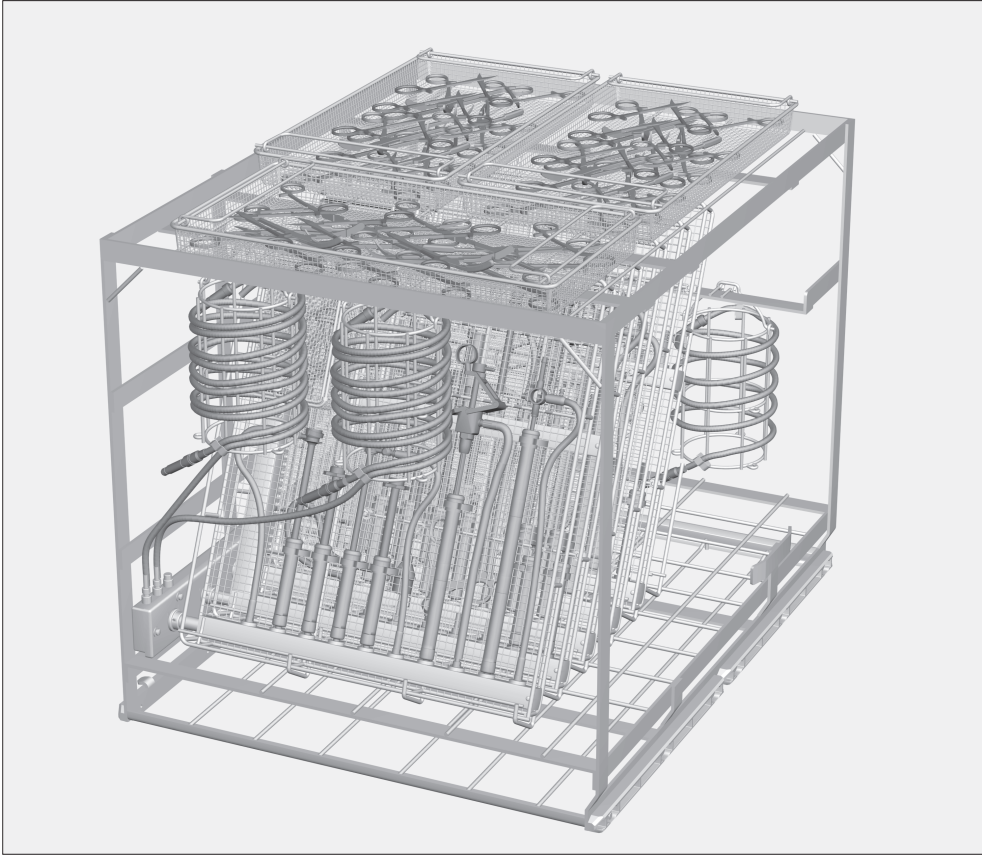

⚠ Undlad at anbringe dækkende genstande eller overfyldte trådkurve på mobile-unittens øverste og nederste etage, da instrumenterne i modulerne ellers ikke vil kunne nås af vandet.

Kontroller ved hver fyldning/inden hver programstart:


- fungerer blænddækslerne på vandforsyningen til de enkelte moduler,
- er de anvendte moduler tilsluttet rigtigt til mobile-unittens vandforsyning,
- er den indskubbede mobile-unit koblet rigtigt til rengørings-/desinfektionsmaskinens vandforsyning?

⚠ For at sikre et ensartet skylletryk i de forskellige faser skal alle tilslutningsmuligheder være forsynet med dyser, adaptere, hylstre eller blindskruer. Der må ikke anvendes beskadigede dyser, adaptere eller hylstre.  
  
Tilslutninger, der ikke bruges til utensilier, skal ikke erstattes med blindskruer.

Overhold altid det påfyldningseksempel, der er fastlagt i valideringen.

⚠ Før rengøring skal alle MIC-instrumenter skilles ad efter producentens anvisninger. Snæverhalsede hulrumsinstrumenter, der ikke kan skilles ad, skal forrengøres efter producentens anvisninger.

⚠ Inden tilslutningen af hulrumsinstrumenter skal det sikres, at vandet kan trænge igennem lumener/kanaler. De enkelte instrumenter må ikke berøre hinanden under rengøringen og desinfektionen.

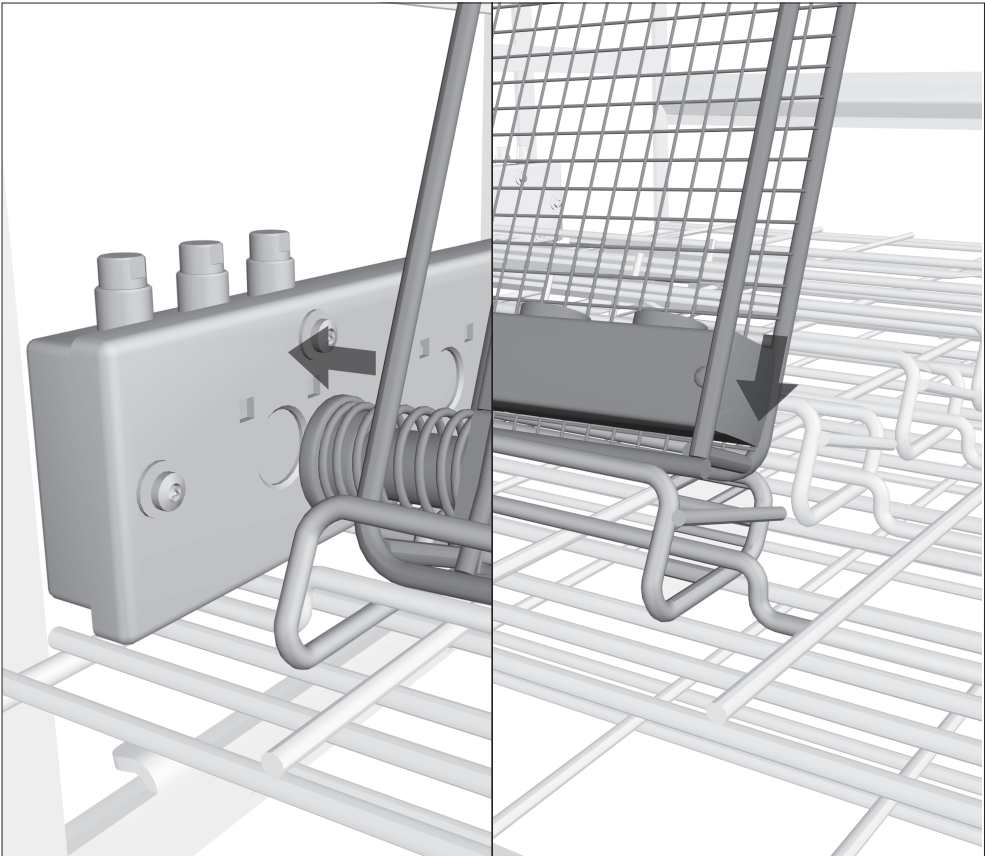


Modulerne anbringes i mobile-unitten

- Skub modulets vandtilførsel ind i mobile-unittens modultilkobling; blænddækslet trykkes op bagud.
- Tryk modulet ind bag rammens holdebjøle.



## Mobile-unit E 902/1 til MIC-moduler

**Miele**  
**PROFESSIONAL**

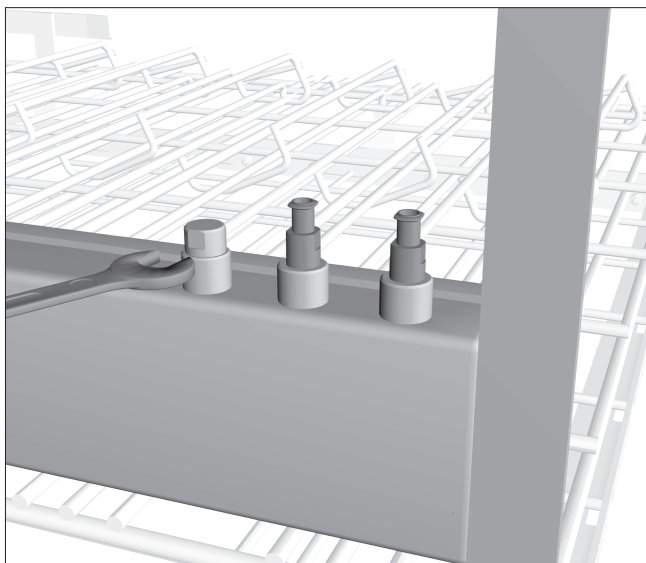

### Injektordyser og luer-lock-adaptere sættes i

På hver side af mobile-unitten er der 3 tilslutninger til injektordyser, slangeadaptere eller sugeslanger.


- Blindskruerne skrues af tilslutningerne med en skruenøgle SW 9.
- Luer-lock-adaptere eller injektordyser skrues i tilslutningerne og skrues fast med en skruenøgle.



### Lyslederkabler og sugeslanger


Lyslederkabler og sugeslanger kan rengøres med indsats E 444.

Der følger en separat brugsanvisning med indsatsen.

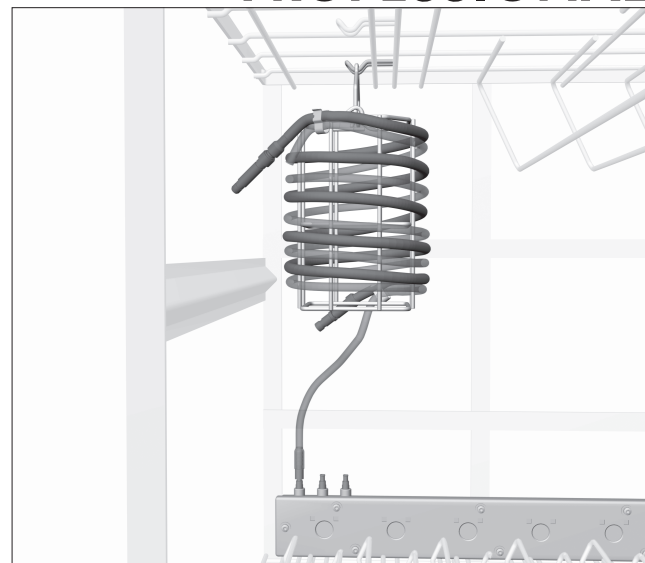

- Hæng indsats E 444 med bøjle på mobile-unittens holder.
- Tilslut enden af sugeslangen til en passende adapter på siden af mobile-unitten, så lumenen gennemskylls opadstigende.


Overskydende ender på lyslederkablet eller sugeslangen må ikke komme i klemme i mobile-unitten eller i rengørings- og desinfektionsmaskinens dør.

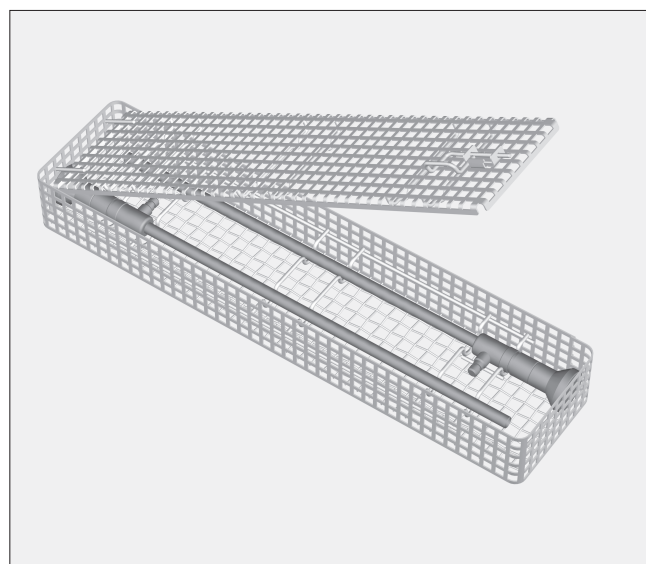

### OP-instrumenter

⚠ OP-instrumenter må kun rengøres i producentens indsatser eller i specialindsats E 460 (ekstraudstyr, medfølger ikke ved levering); herved sikres de mod mekaniske skader!


- Anbring indsatsen med OP-instrumenterne på mobile-unittens øverste etage.

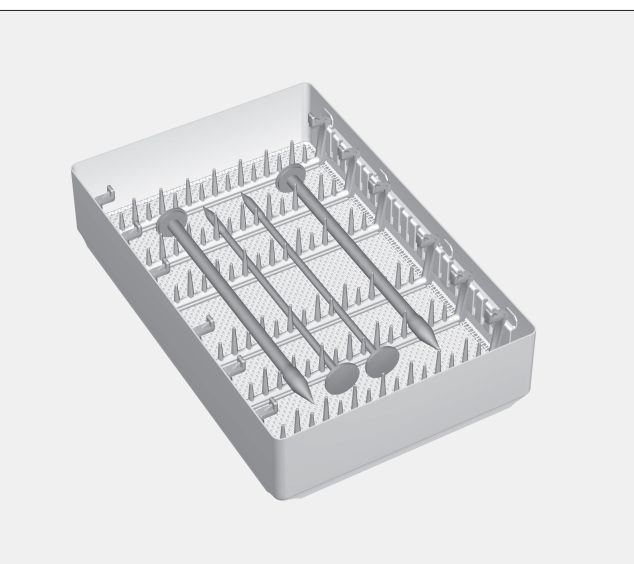

### Trokarer uden lumen

Trokarer uden lumen eller mikroinstrumenter kan rengøres i indsats E 441/1 (ekstraudstyr, medfølger ikke ved levering).

- Tryk trokarerne ind i holderne.
- Placer indsatsen på mobile-unittens øverste eller nederste etage.

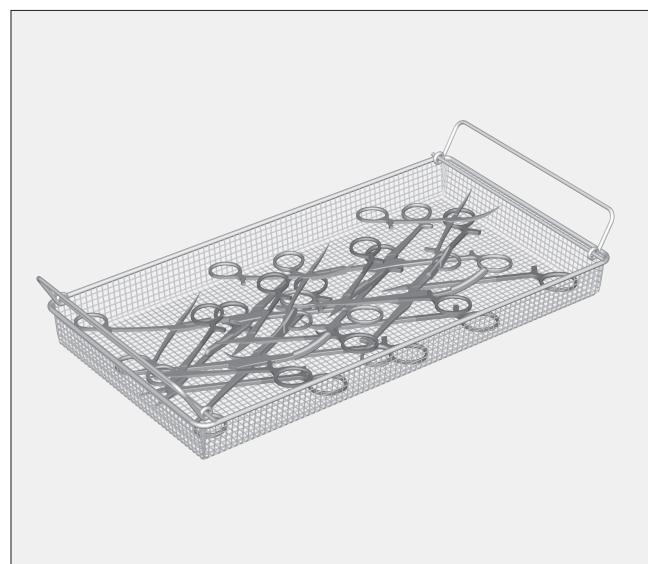


### Trådkurve

Leddete instrumenter skal anbringes i trådkurvene i åben tilstand (minimering af den flade, der er dækket).

- Anbring trådkurve på mobile-unittens øverste etage.


Undlad at overfylde trådkurvene, så vandet kan nå samtlige flader.

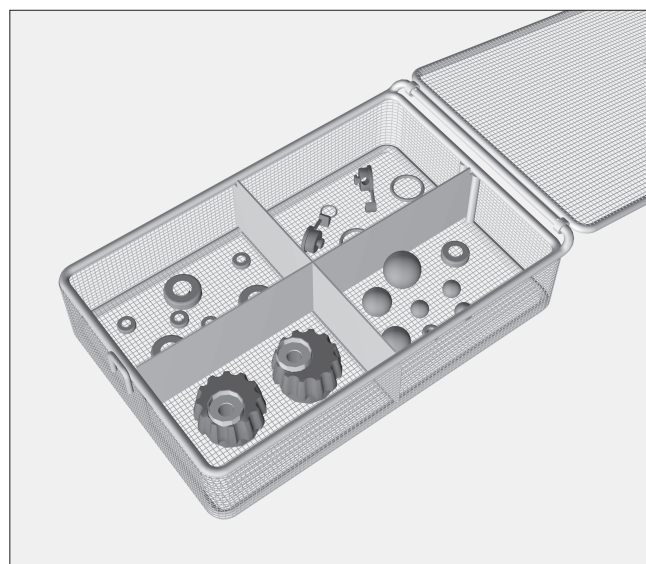

### Smådele

Læg smådele som f.eks. pakninger og haner i trådkurven E 451, der kan lukkes (ekstraudstyr, medfølger ikke ved levering).

- Anbring den lukkede trådkurv på mobile-unittens nederste etage.

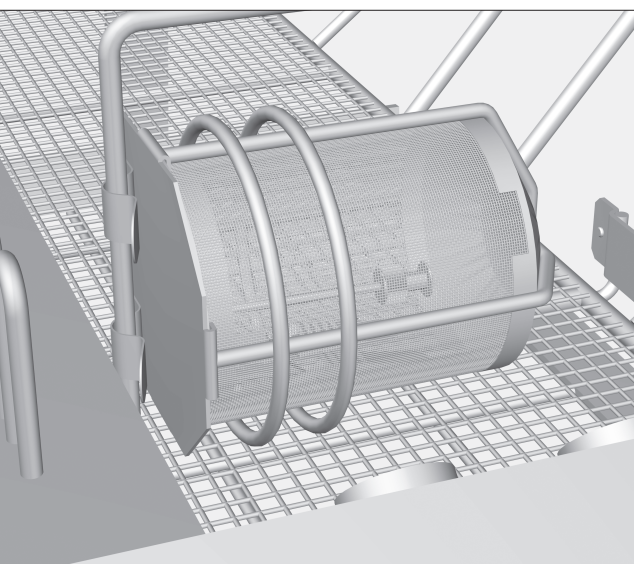

Sørg for at sikre de mindste dele, som kan blive skyllet gennem trådkurvens masker eller spalten mellem trådkurven og låget, f.eks. ved at anbringe dem i indsats E 473/1 (ekstraudstyr, medfølger ikke ved levering).

- Fastgør indsats E 473/1 til en holder på mobile-unitten.