

Modulo iniettore E 703/1

Dotazione:

Modulo iniettore E 703/1 per E 701/2 e E 525/2, H 170, L 80, P 555 mm, per disporre 7 strumenti cavi

sono allegati sciolti:

- 2 E 447, adattatori Luer-Lock ♀ per Luer-Lock ♂
- 2 E 449, adattatori Luer-Lock ♂ per Luer-Lock ♀
- 3 E 362, viti cieche
- 3 E 980, adattatore angolare
- 3 ugelli iniettori Ø 4,0 mm, lunghezza 110 mm
- 3 ugelli iniettori con molla di aggancio Ø 4,0 mm, lunghezza 120 mm

⚠ Rispettare scrupolosamente le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze riportate nelle istruzioni d'uso del termodisinfettore. Trattare esclusivamente strumenti/dispositivi medici che siano stati esplicitamente dichiarati riutilizzabili dal relativo produttore e attenersi alle indicazioni da questo fornite. Per il trattamento utilizzare un programma di disinfezione preferibilmente termica assicurandosi che sia compatibile con la qualità dei materiali di cui sono composti i dispositivi medici. L'ultimo risciacquo deve avvenire possibilmente sempre con acqua demineralizzata. Se si usa il sistema di riconoscimento automatico del carrello, assicurarsi che la codifica sia adeguata!

Applicazioni:

con il modulo iniettore montato, nei carrello E 701/2 e E 525/2 è possibile trattare, oltre ai cestini, max. 7 strumenti cavi.

A tale scopo il modulo iniettore viene allacciato alla guida acqua del carrello.

⚠ Attenersi alle istruzioni d'uso del carrello per strumenti OP.



E 701/2 ampliato con E 703/1

Le fasi di lavoro per il montaggio del modulo iniettore e dei dispositivi di lavaggio sono descritti sul retro.

Allacciamento di strumenti a corpo cavo


⚠ Per garantire a tutti i dispositivi di lavaggio una pressione di lavaggio sufficiente e standardizzata, dotare tutti gli innesti di ugelli, adattatori, boccole o viti cieche. Non utilizzare mai dispositivi di lavaggio come ugelli, adattatori o boccole danneggiati.

Non è necessario sostituire i dispositivi di lavaggio liberi da carico con delle viti cieche.


⚠ Prima di allacciare gli strumenti cavi assicurarsi che l'acqua possa passare attraverso i lumi interni/i canali.

- Avvitare le cannule con allacciamento Luer-Lock nei rispettivi adattatori Luer-Lock del carrello a iniezione.
- Infilare gli aspiratori chirurgici, come quelli di Cooley, sugli ugelli.

⚠ Gli strumenti a corpo cavo che durante il trattamento dovessero essersi staccati dagli adattatori, devono essere nuovamente sottoposti al trattamento.

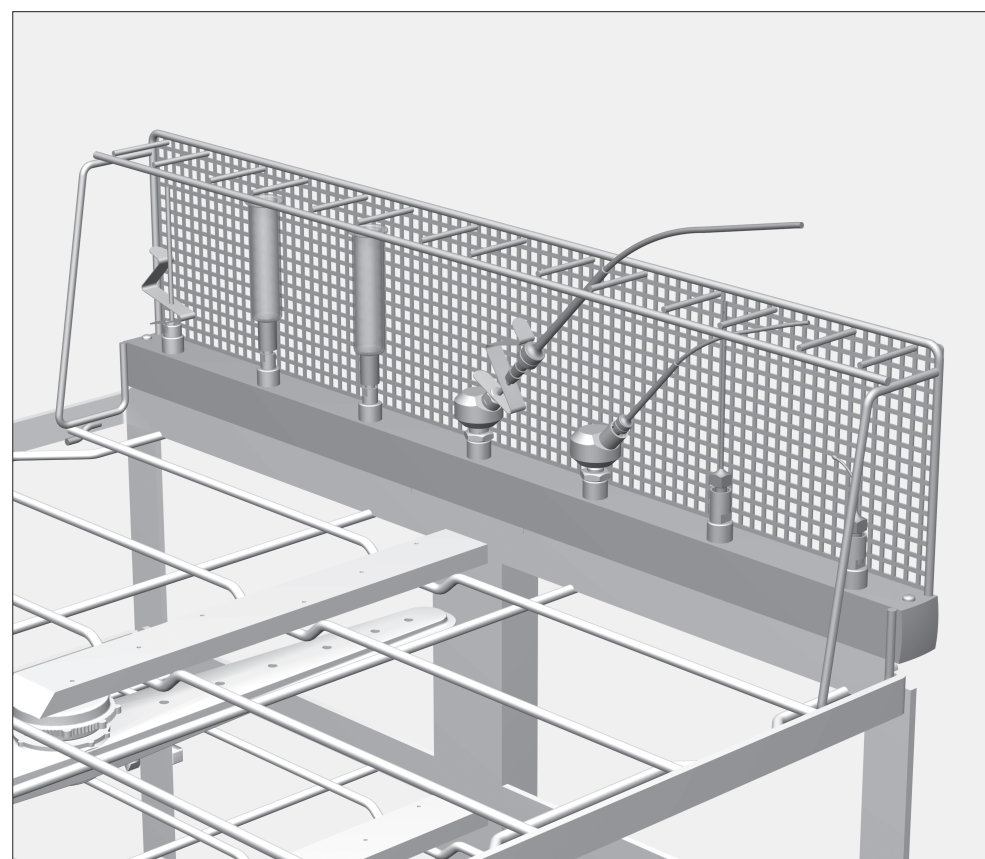

Montare il modulo iniettore

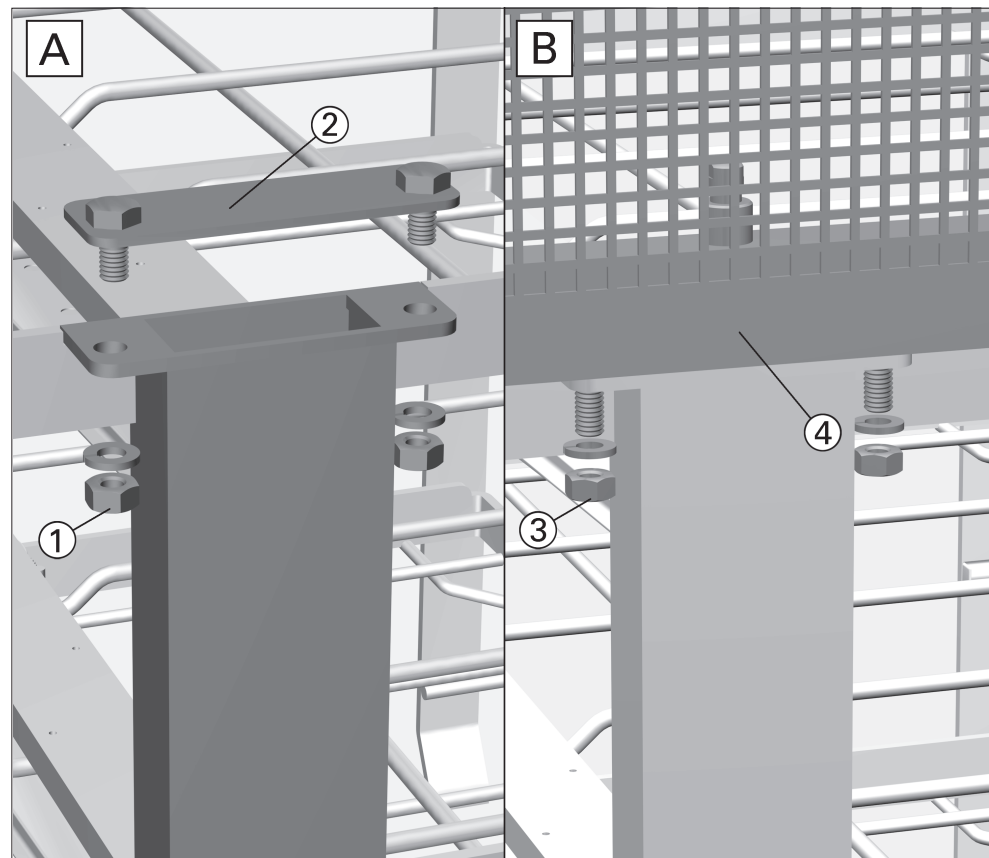


- Svitare i dadi ① sulle viti di fissaggio con una chiave inglese SW 10 e toglierli con le rondelle elastiche.
- Smontare la lamiera di copertura ② dalla guida acqua.

Conservare la lamiera di copertura ②, i dadi ① e le rondelle elastiche affinché siano a disposizione se il modulo iniettore dovesse essere successivamente smontato di nuovo.

- Per montare il modulo iniettore svitare i dadi ③ dalle viti di fissaggio del modulo ④ con una chiave inglese SW 10 e toglierli con le rondelle elastiche.
- Applicare il modulo iniettore ④; per i dettagli v. figura a lato.

Dopo aver posizionato correttamente il modulo iniettore:

- avvitare i dadi ③ con le rondelle elastiche sulle viti di fissaggio del modulo iniettore e stringere con una chiave SW 10.

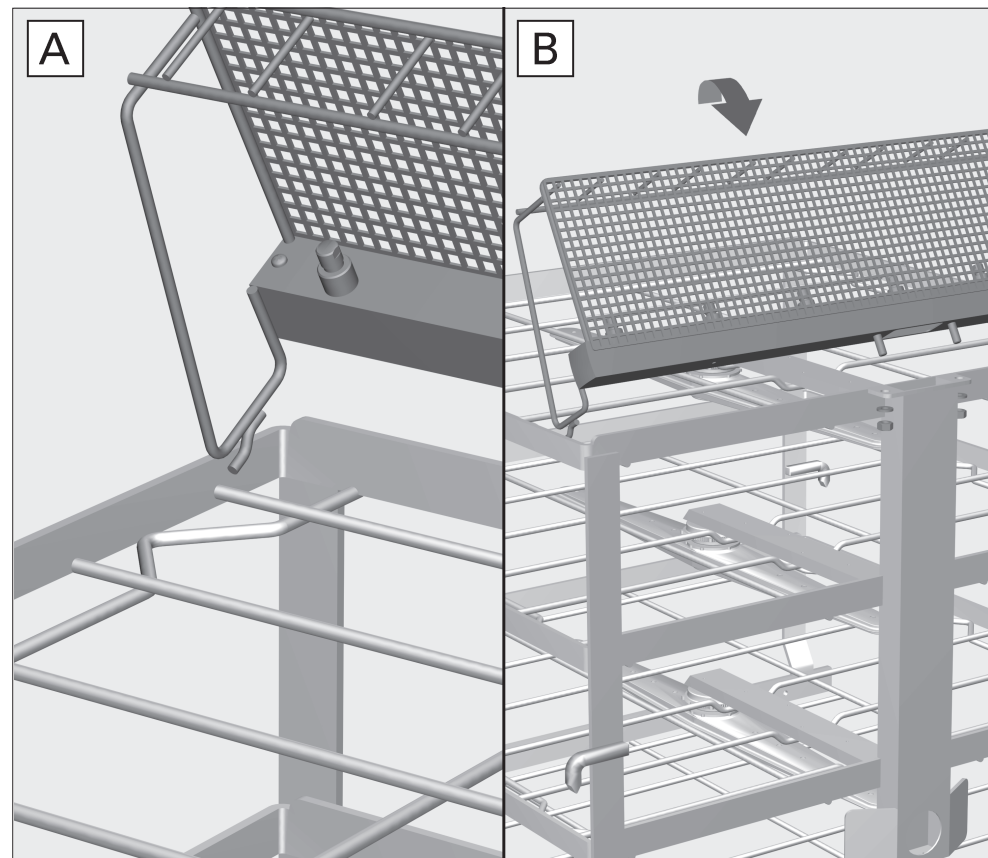


A:

- Infilare i ganci laterali del modulo iniettore sotto il filo metallico esterno del carrello per strumenti OP.

B:

- Abbassare il modulo iniettore e infilare le viti di fissaggio del modulo attraverso i fori del carrello, v. **B** nella foto a lato.

Preparare gli allacciamenti per strumenti a corpo cavo

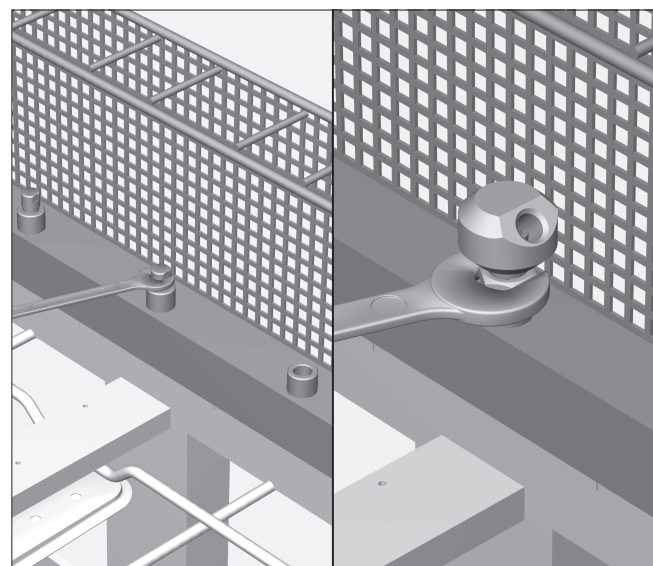


Utilizzare l'adattatore angolare

Se necessario è possibile avvitare gli ugelli iniettori o gli adattatori Luer-Lock utilizzando gli adattatori angolari allegati nel ripiano superiore del carrello.

Per farlo:

- svitare dagli allacciamenti le viti cieche con una chiave inglese SW 9.
- Avvitare l'adattatore angolare per l'adattatore Luer-Lock o l'ugello iniettore negli allacciamenti e regolare.
- Fissarli con il controdado SW 13.

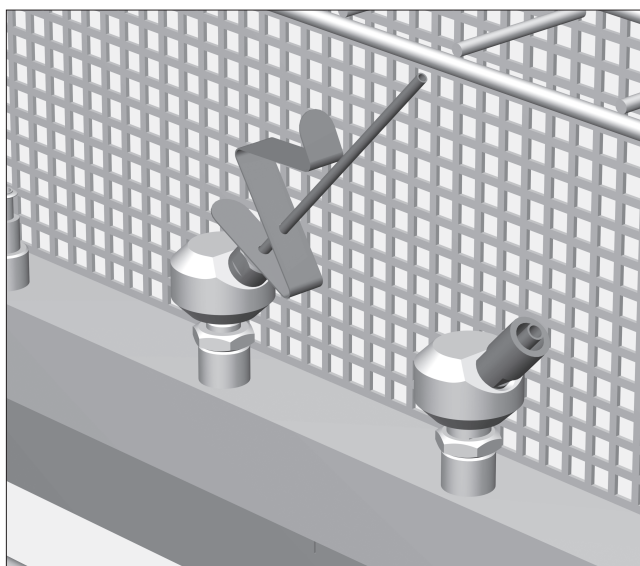


Avvitare gli adattatori angolari agli ugelli

Per poter allacciare aspiratori lunghi oppure strumenti cavi, si avvitano gli ugelli iniettori con molla di aggancio o adattatore Luer-Lock agli adattatori angolari.

Per farlo:

- avvitare gli adattatori Luer-Lock o gli ugelli iniettori agli adattatori angolari e fissarli con una chiave SW 7 o 9 (a seconda dell'ugello).
- In caso di necessità infilare una molla di aggancio sull'ugello iniettore.

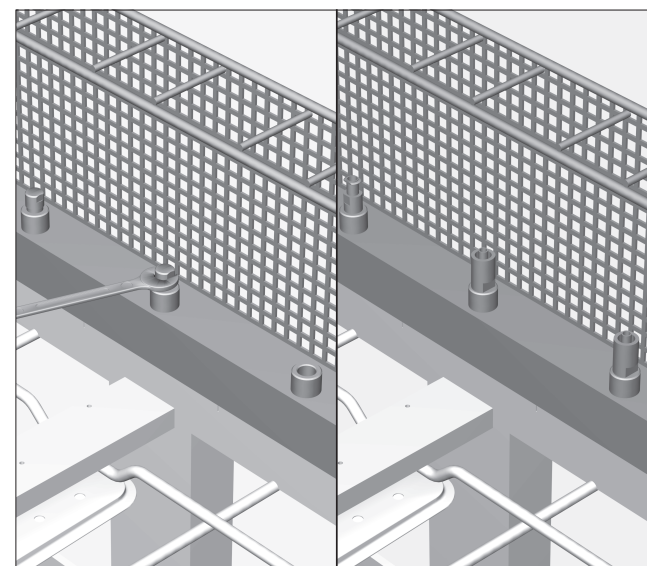

Utilizzare ugelli iniettori e adattatori Luer-Lock

Sul modulo iniettore è possibile disporre max. 7 strumenti a corpo cavo con l'ausilio degli ugelli iniettori allegati e degli adattatori Luer-Lock.

Per farlo:

- svitare dagli allacciamenti le viti cieche con una chiave inglese SW 9.
- Avvitare agli allacciamenti gli ugelli iniettori o gli adattatori Luer-Lock e stringere con la chiave inglese.