


E 741/1 mobile unit

Items supplied:

Mobile unit E 741/1, H 680, W 530, D 600 mm
with a magnetic strip for automatic mobile unit recognition

 Please observe the Warning and Safety instructions for washer-disinfector G 7825/26.
If using automatic mobile unit recognition, please make sure the coding is correctly set.


Areas of application:

Modules for laboratory glassware can be placed in the E 741/1 mobile unit.
The modules have their own operating instructions.



Depending on the size of the items to be processed, up to three modules can be placed in levels ① to ④ at the same time.

Before loading the machine and before starting a programme, please check that:

- the sealing caps in the module connections are in good working order,
- the modules are correctly connected to the water intake in the mobile unit,
- the mobile unit is correctly connected to the water intake in the washer-disinfector.

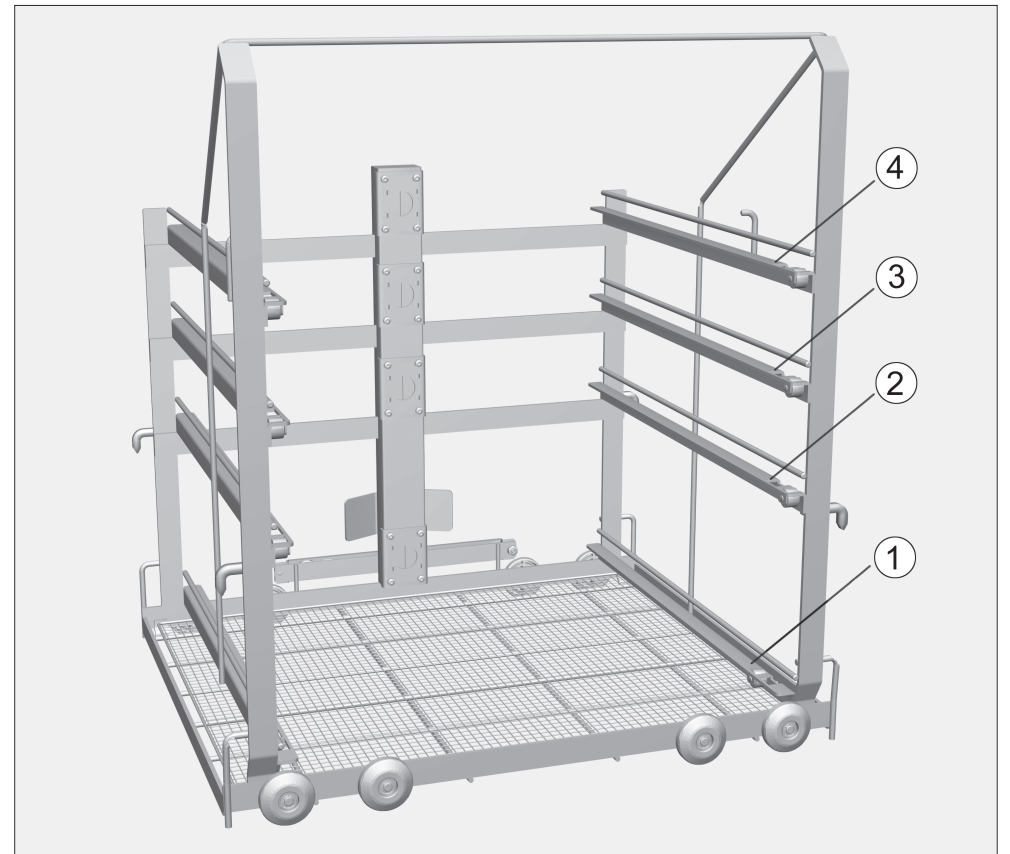

Placing modules into the mobile unit

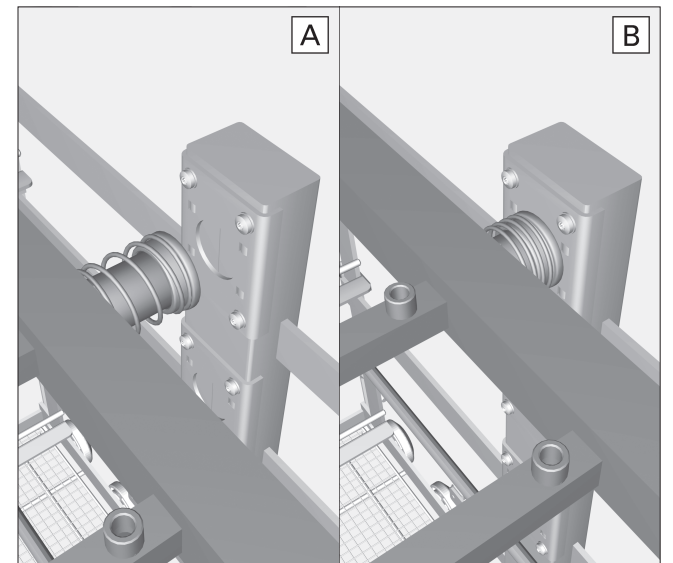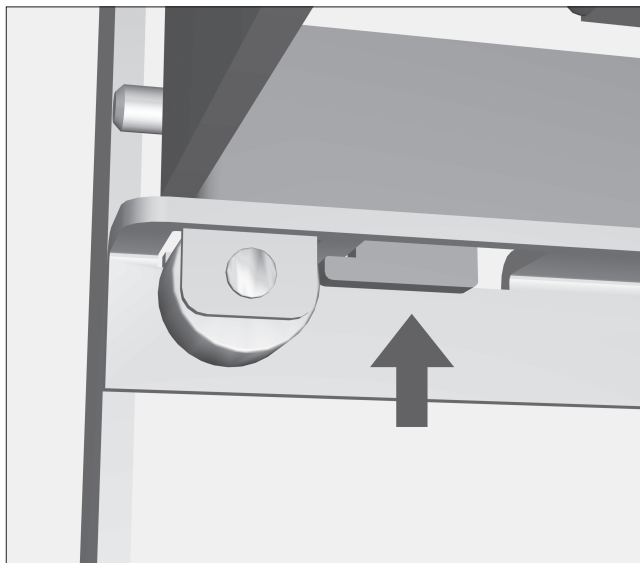

- Locate the module rollers on the runners, with the spring-mounted water intake facing towards the mobile unit.
- Push the module completely into the mobile unit.

Engage the catches on the underside of the module frame into the recess in the runners.
Make sure it clicks into position correctly.

If the module is accurately positioned, the water intake on modules with integrated water connection will connect correctly.

Removing modules from the mobile unit

- Push the module gently in the direction of the water intake, and then lift it off the guide rail.

E 741/1 wagen voor modules

Geleverd:

Basiswagen E 741/1 voor modules, H 680, B 530, D 600 mm met magneetstrip voor automatische wagenherkenning

⚠ Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en desinfectieautomaten G 7825/26. Bij gebruik van de automatische wagenherkenning moet de codering worden aangepast!


Toepassing:

In de wagen E 741/1 kunt u modules voor laboratoriumglaswerk plaatsen. Bij de modules horen aparte gebruiksaanwijzingen.



Afhankelijk van de grootte van het spoelgoed kunt u maximaal drie modules tegelijk op de niveaus ① tot ④ plaatsen.

Controleer bij het beladen/voor elke programmastart:

- of de afsluitkleppen in de module-aankoppelingen functioneren.
- of de aansluiting van de geplaatste modules op de watertoevoer van de wagen correct is.
- of de ingeschoven wagen goed op de watertoevoer van de reinigings-/desinfectieautomaat aansluit.

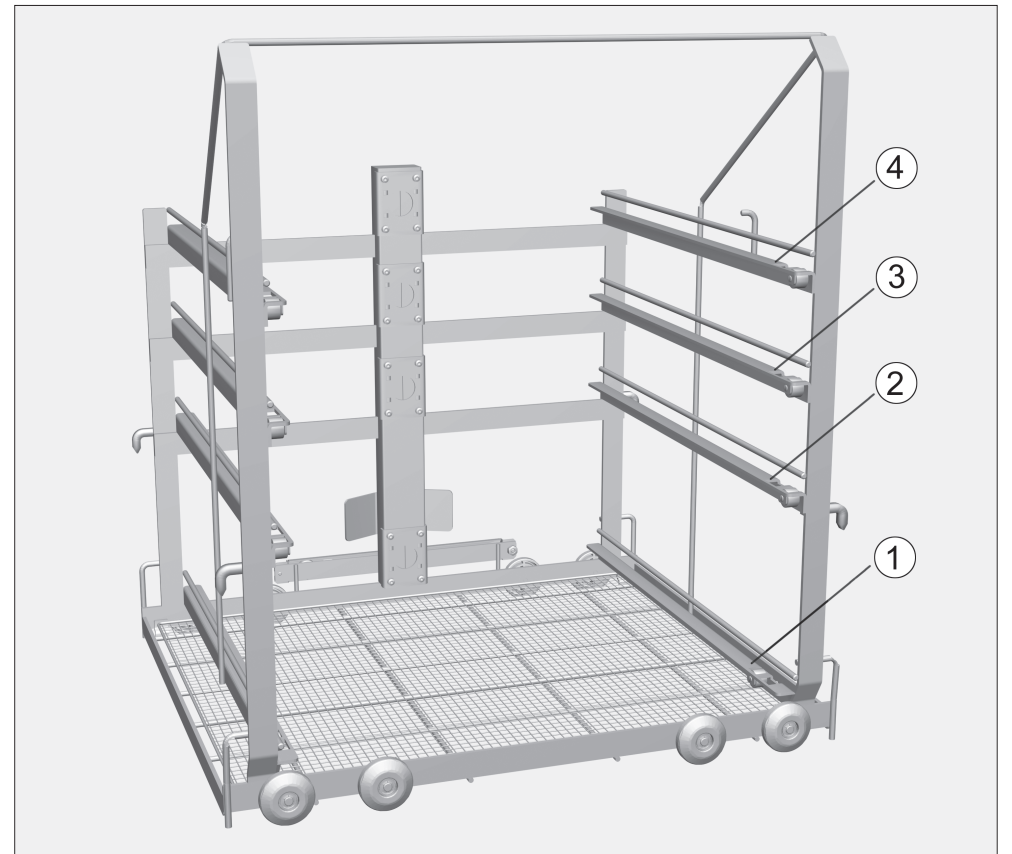

Modules in de wagen zetten

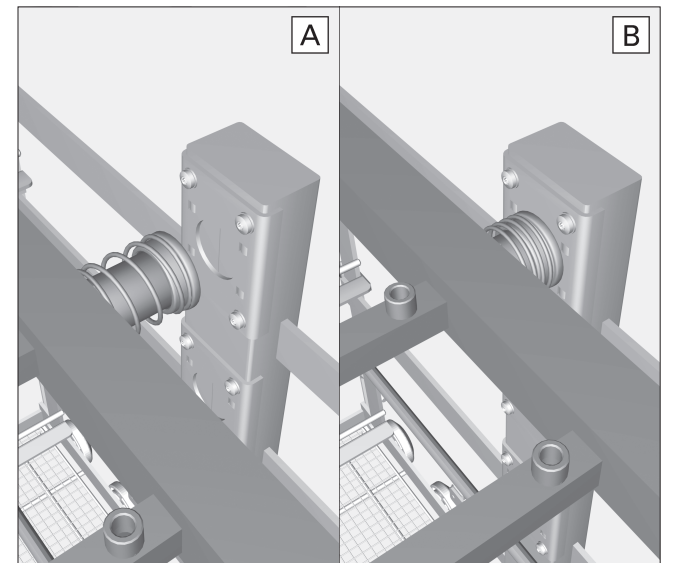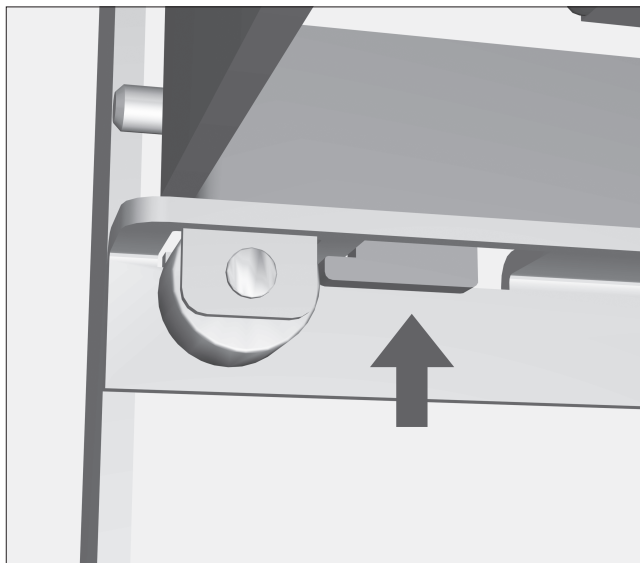

- Plaats de wieltjes van de module op de geleiderails. De verende watertoevoer wijst naar de wagen.
- Schuif de module helemaal in de wagen.

De vergrendelingshaken aan de onderkant van het moduleframe vallen in de uitsparing in de geleiderails van de wagen.

De module moet duidelijk vastklikken, alleen dan is de module correct gepositioneerd.

De watertoevoer bij modules met geïntegreerde wateraansluiting is alleen gewaarborgd als u de module correct positioneert.

Modules uit de wagen halen

- Schuif de module iets in de richting van de watertoevoer en til de module omhoog.
- Trek de module vervolgens uit de geleiderails.