

Vogn til moduler E 741/1

Leveringen omfatter:

Grundvogn E 741/1 til moduler, H 680, B 530, D 600 mm med en magnetliste til automatisk vognidentifikation

⚠ Rådene om sikkerhed og advarsler i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen G 7825/26 skal ubetinget følges.
Ved anvendelse af automatisk vognidentifikation skal kodningen tilpasses!


Anvendelsesområde:

Vogn E 741/1 er beregnet til moduler til laboratorieglass.
Separate brugsanvisninger følger med modulerne.



Afhænging af utensiliernes størrelse kan der anbringes op til tre moduler samtidigt på etagerne ① til ④.

Kontroller ved hver fyldning/inden hver programstart:

- blænddækslernes funktion i modultilkoblingen,
- tilkobling af de anvendte moduler til vognens vandforsyning.
- tilkobling af den anvendte vogn til vandforsyningen i rengørings-/desinfektionsmaskinen.

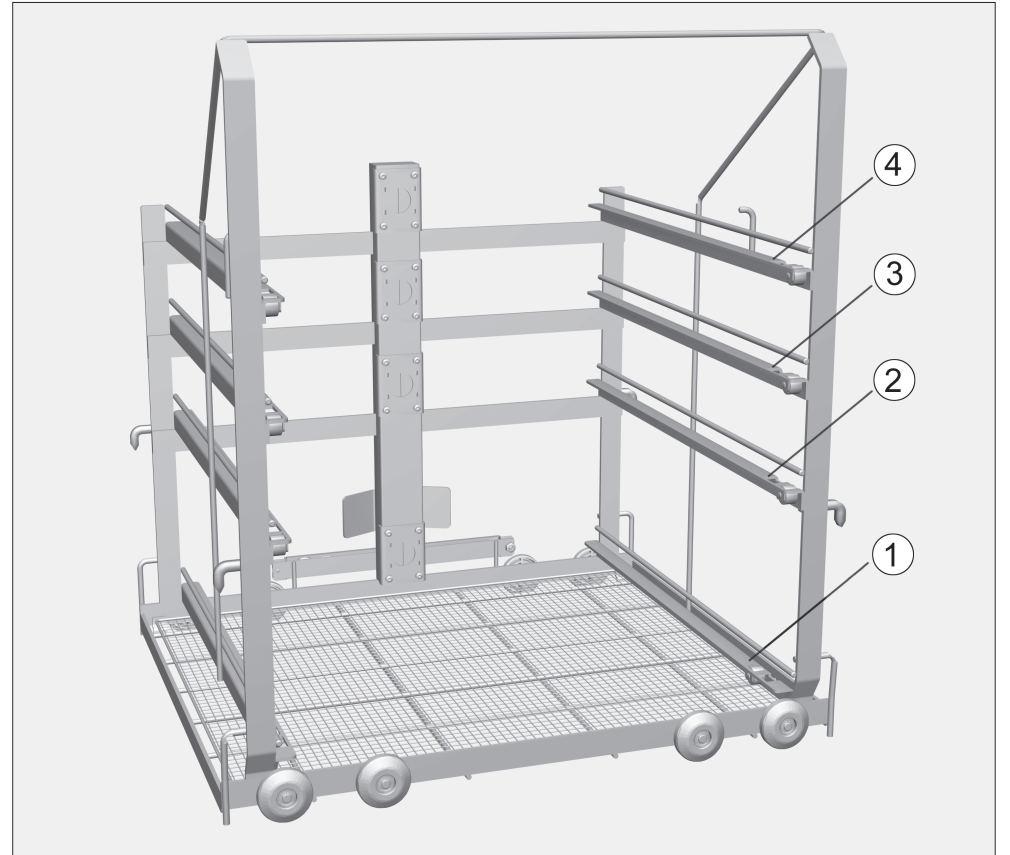

Modulerne anbringes i vognen

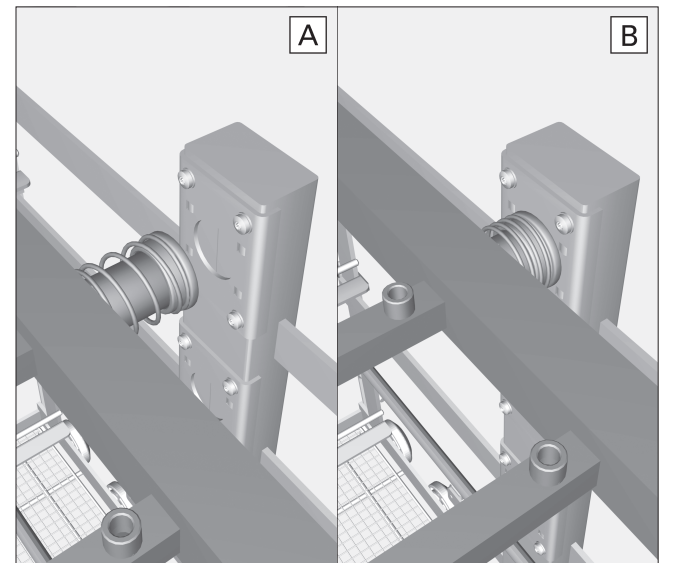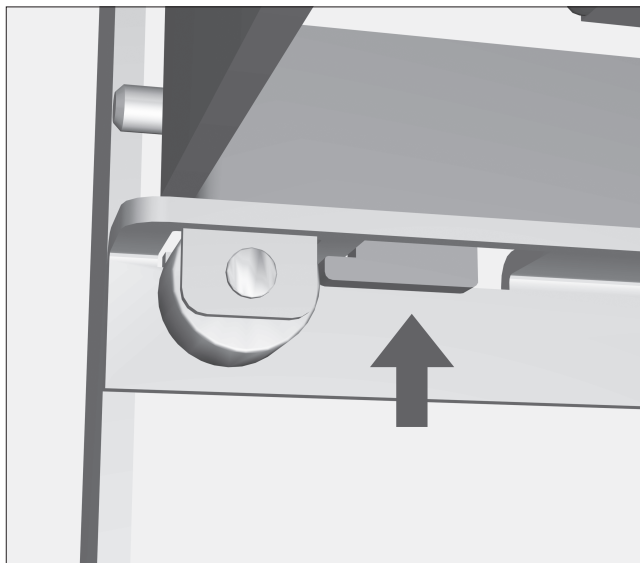

- Anbring hjulene på modulet i skinnen. Den affjedrede vandtilførsel peger ind i vognen.
- Skub modulet helt ind i vognen.

Tappen på undersiden af modulrammen falder i hak i vognens skinne.

Modulet skal gå tydeligt i hak for at være anbragt korrekt.

Vandtilførslen på moduler med integreret vandtilslutning sikres ved korrekt anbringelse af modulet.

Moduler tages ud af vognen

- Skub modulet let i retning af vandtilførslen, og løft det herefter op.
- Træk herefter modulet ud af skinnen.

Grunnvogn for plassering av moduler E 741/1

Standardlevering:

Grunnvogn E 741/1 for plassering av moduler, H 680, B 530, D 600 mm med en magnetlist for automatisk vogngjenkjenning

⚠ Kapittelet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomaten G 7825/26 må absolutt følges.
Ved bruk av automatisk vogngjenkjenning må kodingen være tilpasset!


Anvendelsesområde:

I vognen E 741/1 kan modulene for laboratorieglass plasseres.
Separate bruksanvisninger er vedlagt modulene.

Avhengig av størrelsen på utensilene, kan det plasseres inntil tre moduler samtidig i nivåene ① til ④.

Følgende må kontrolleres ved plassering / før hver programstart:


- funksjonen til låsekappene på modultilkoblingene,
- de innsatte modulenes tilkobling til vognens vannforsyning,
- den innsatte vognens tilkobling til rengjørings- og desinfeksjonsautomatens vannforsyning.

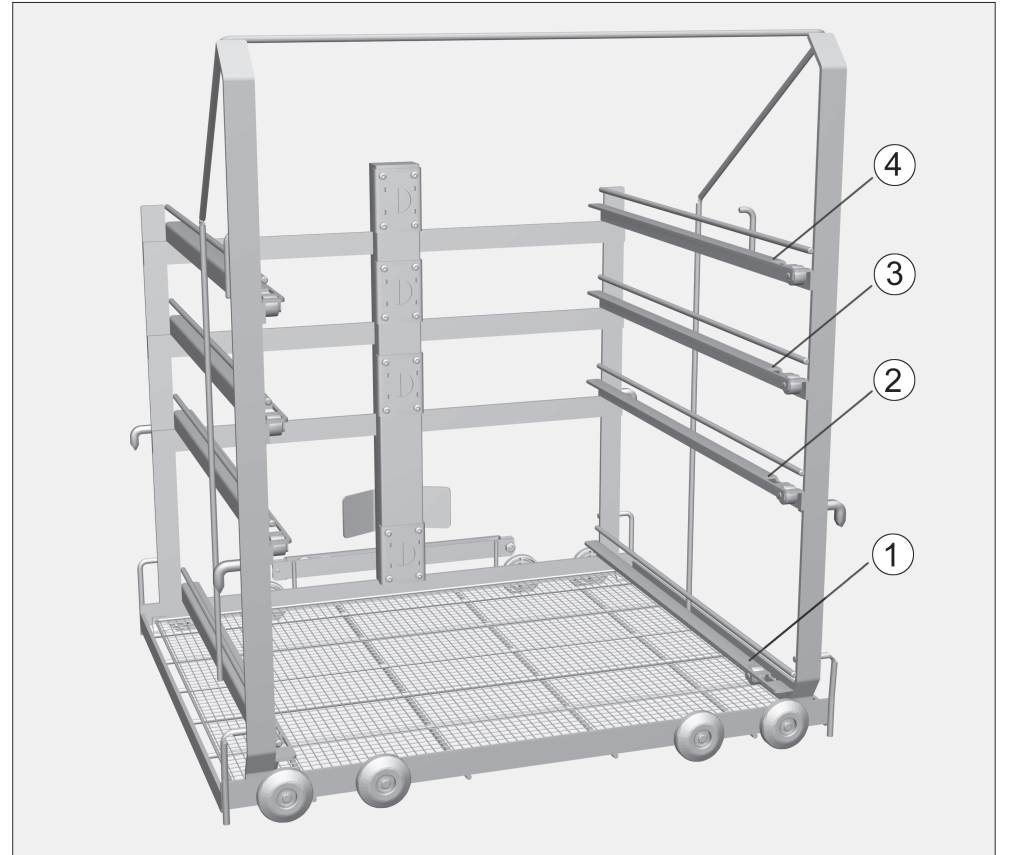

Plassere modulene i vognen




- Sett modulens hjul på føringsskinnene, den avfjærede vanntilførselen peker inn i vognen.
- Skyv modulen helt inn i vognen.

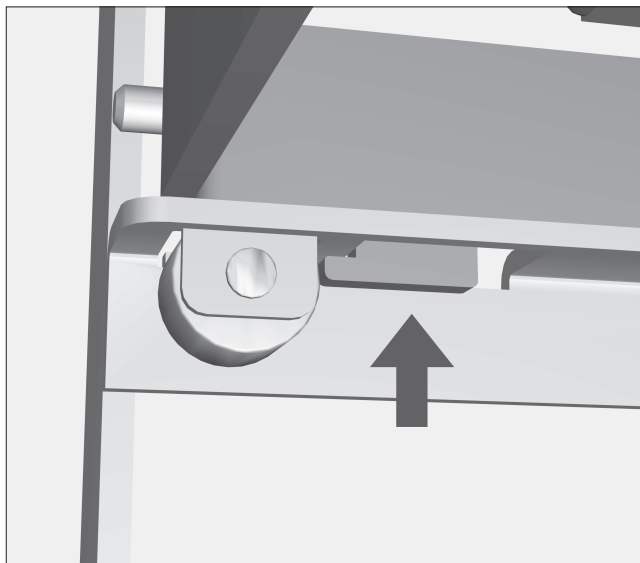

Stoppekroken på undersiden av modulrammen griper inn i utsparingen i vognens føringsskinne.

Modulen må tydelig kneppe på plass, slik at den er riktig posisjonert.

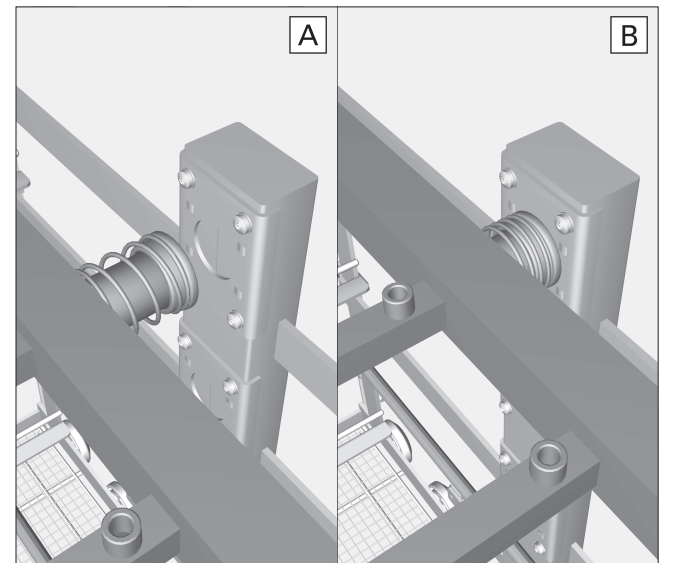

Vanntilførselen for moduler med integrert vanntilkobling sikres ved at modulen er i riktig posisjon.

Ta moduler ut av vognen

- Skyv modulen lett i retning vanntilførselen og løft den opp.
- Trekk modulen av føringsskinnene.