

# Injektormodul E 703/1

## I leveransen ingår:

Injektormodul E 703/1 för E 701/2 och E 525/2, höjd 170, bredd 80, djup 555 mm, för 7 ihåliga instrument

## Löst bifogade är:

- 2 E 447 Luer-Lock-adaptrar ♀ för Luer-Lock ♂
- 2 E 449 Luer-Lock-adaptrar ♂ för Luer-Lock ♀
- 3 E 362 blindskruvar
- 3 E 980 vinkeladaptrar
- 3 injektordysor Ø 4,0 mm, längd 110 mm
- 3 injektordysor med låsfjädrar Ø 4,0 mm, längd 120 mm

⚠ Läs noggrant igenom säkerhetsanvisningarna och varningarna i diskdesinfektorns bruksanvisning. Rengör endast instrument/medicinprodukter vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de specifika rengöringsanvisningarna. Det diskprogram som används med termisk desinfektion måste även anpassas till medicinprodukternas materialkvalitet. Den sista sköljningen ska om möjligt alltid ske med AD-vatten. Vid användning av den automatiska vagnavkänningen måste koden anpassas!

## Användningsområde:

Med monterad injektormodul kan upp till 7 ihåliga instrument i trådkorgarna rengöras i vagnarna E 701/2 och E 525/2. För detta ändamål ska injektormodulen anslutas till vagnens vattenförsörjning.

⚠ Beakta bruksanvisningen för vagnen för OP-instrument.



## E 701/2 utökad med E 703/1

Arbetsstegen för montering av injektormodul och spolanordning beskrivs på baksidan.

## Ansluta ihåliga instrument


⚠ För att spoltrycket ska vara tillräckligt standardiserat för alla spolanordningar måste alla skruvanordningar förses med dysor, adaptrar, spolhylsor eller blindskruvar. Inga skadade spolanordningar som dysor, adaptrar eller spolhylsor får användas.

Spolanordningar utan diskgoods behöver inte ersättas med blindskruvar.

⚠ Innan de ihåliga instrumenten ansluts måste man kontrollera att kanaler eller ihåligheter inte är blockerade.


- Anslut kanyler med Luer-Lock-anslutningarna till motsvarande Luer-Lock-adapter på injektorvagnen.
- Sätt kirurgiska sugnappar, t ex Cooley, på dysorna.

⚠ Ihåliga instrument som har lossnat från adaptrarna under rengöringen måste rengöras på nytt.

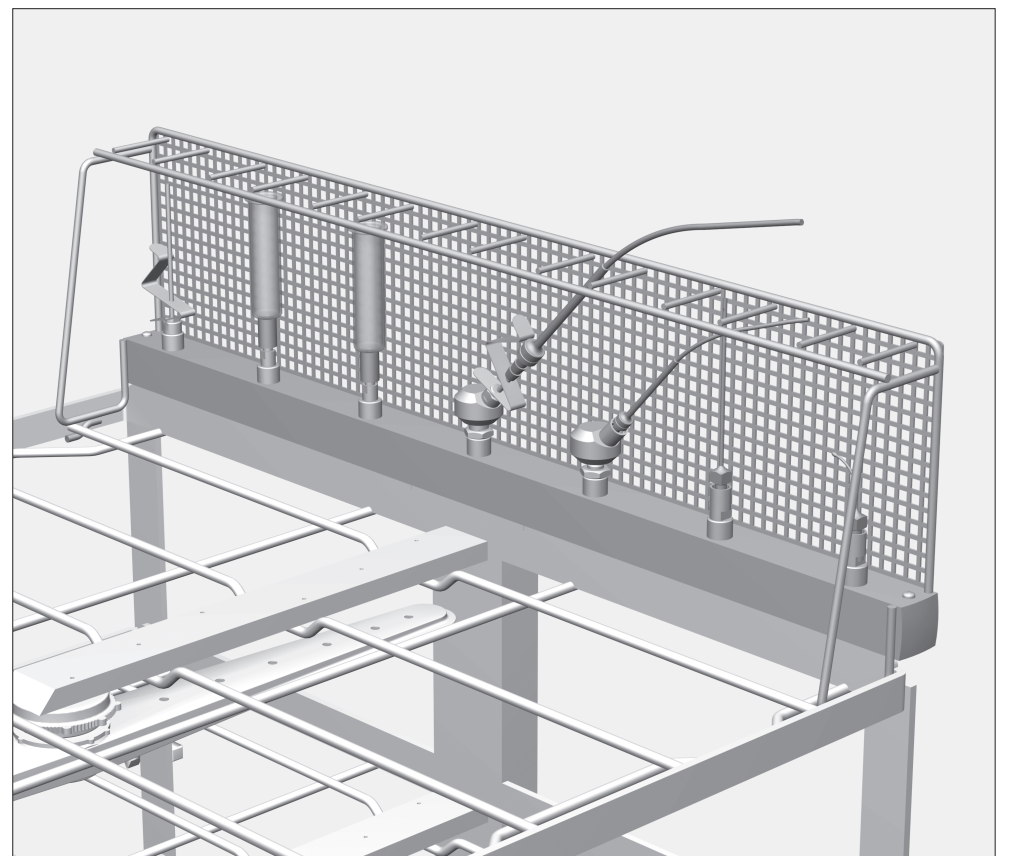

## Injektormodul E 703/1


## Montera injektormodul

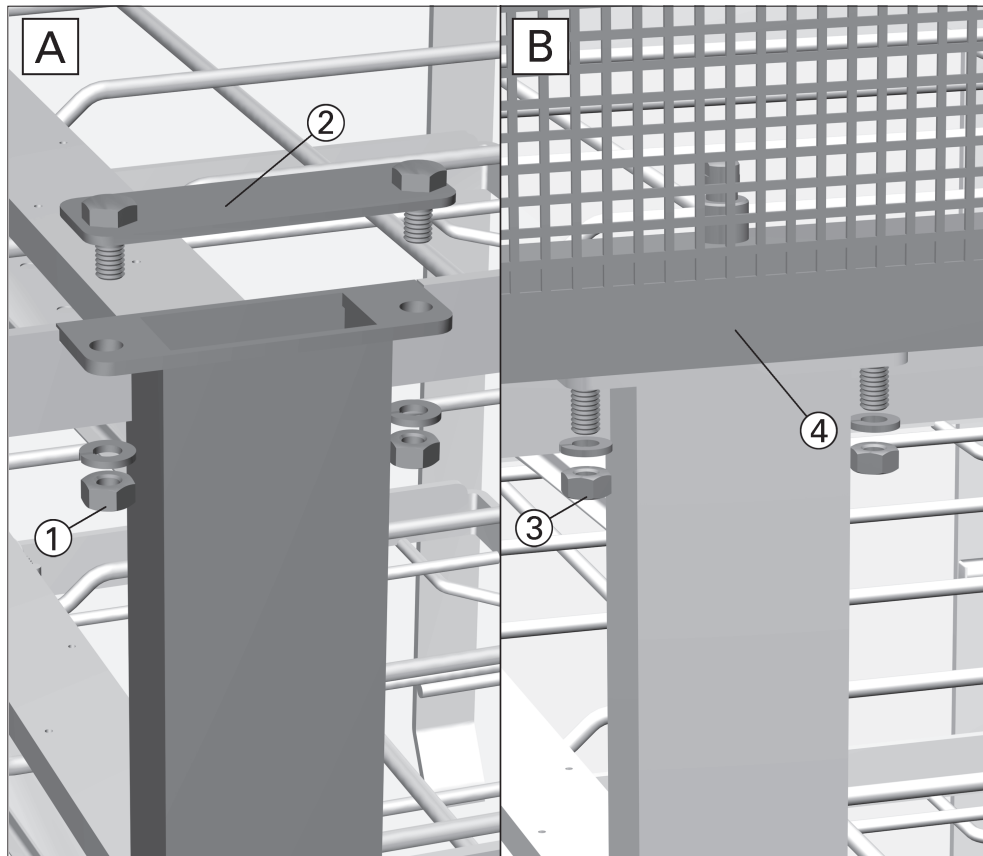

- Lossa muttrarna ① från fästskruvarna med en fast nyckel SW 10 och avlägsna dessa tillsammans med fjäderringarna.
- Avlägsna täckplåten ② från vattenförsörjningen.

Behåll täckplåten ②, muttrarna ① och fjäderringarna ifall injektormodulen ska demonteras igen.

- För att montera injektormodulen: Lossa först muttrarna ③ från fästskruvarna på injektormodulen ④ med en fast nyckel SW 10 och avlägsna sedan dessa tillsammans med fjäderringarna.
  - Sätt på injektormodulen ④. Se bild för detaljer.
- Efter det att injektormodulen sitter korrekt:
- Skruva fast muttrarna ③ med de mellanliggande fjäderringarna på injektor-modulens fästskruvar och dra åt med en fast nyckel SW 10.

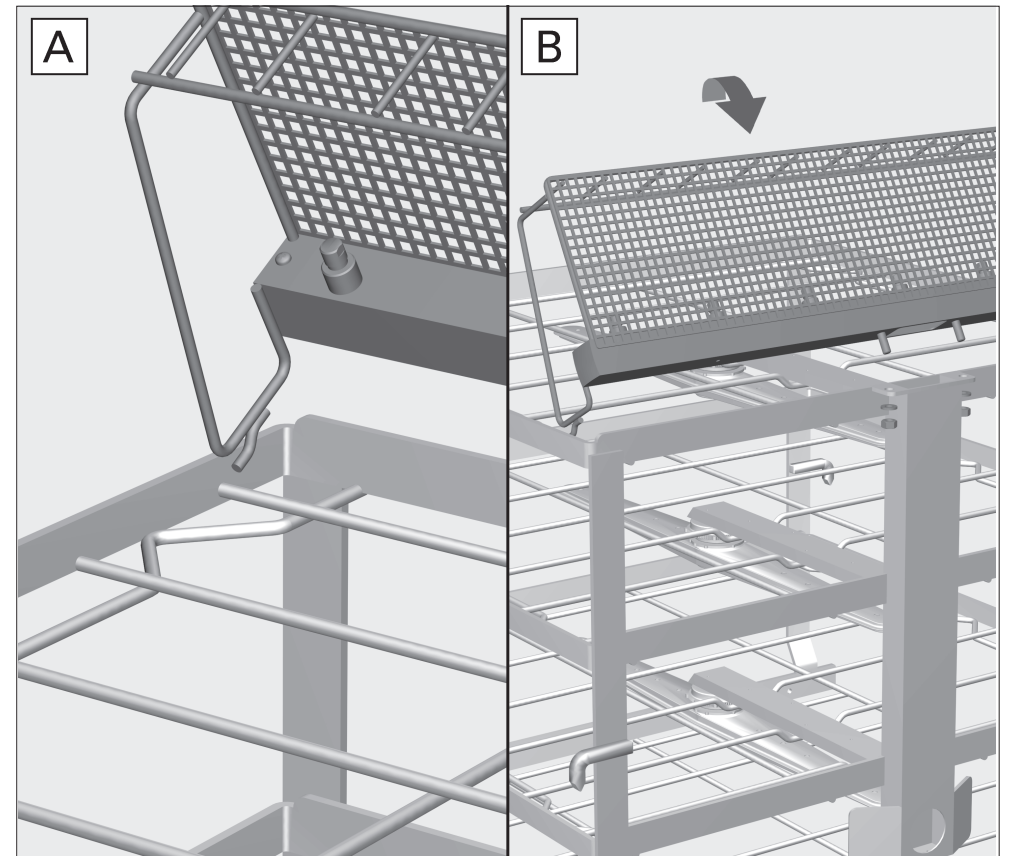


**A:**

- Sätt hakarna på injektormodulens sidor under den yttre metalltråden på vagnen för OP-instrument.

**B:**

- Tryck ner injektormodulen och sätt in fästskruvarna i injektormodulens borrhål, se B.

## Förbereda anslutning av ihåliga instrument

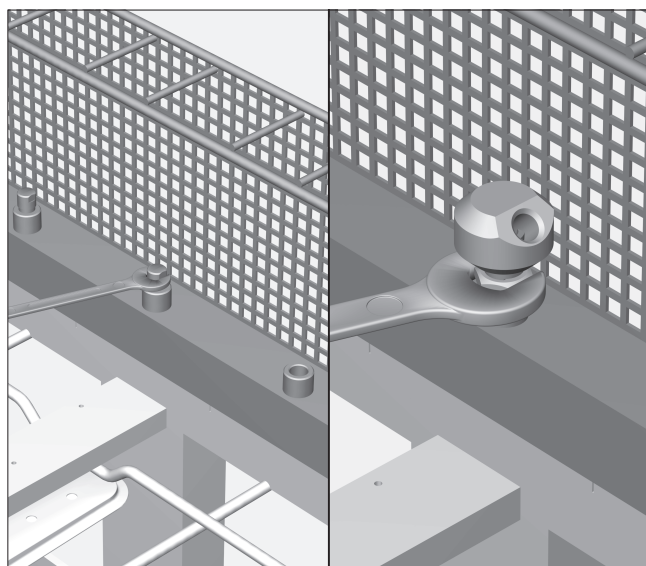


### Sätta in vinkeladaptar

Vid behov kan injektordysor eller Luer-Lock-adaptrar skruvas in på den översta nivån vid användning av de bifogade vinkeladaptarna.

Gör så här:

- Skruva loss blindskruvarna från anslutningarna med en fast nyckel SW 9.
- Skruva in vinkeladaptarna med Luer-Lock-adaptrarna eller injektordysorna i anslutningarna och rikta dem.
- Fixera placeringen med låsmutter SW 13.

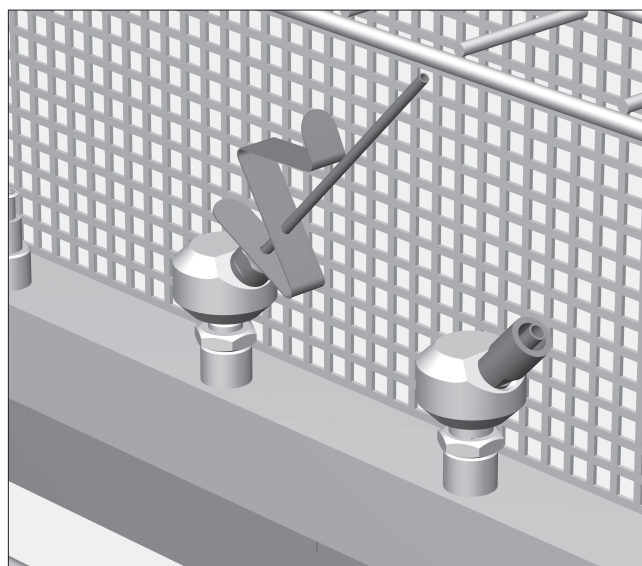


### Skruva ihop vinkeladaptar och dysor

För att kunna ansluta långa nappar och ihåliga instrument, skruvas injektordysor med låsfjädrar eller Luer-Lock-adaptrar fast i vinkeladaptarna.

Gör så här:

- Skruva Luer-Lock-adaptrarna eller injektordysorna i vinkeladaptarna och dra åt dem med en fast nyckel SW 7 eller 9 (beroende på dysa).
- Sätt en låsfjäder på injektordysan vid behov.

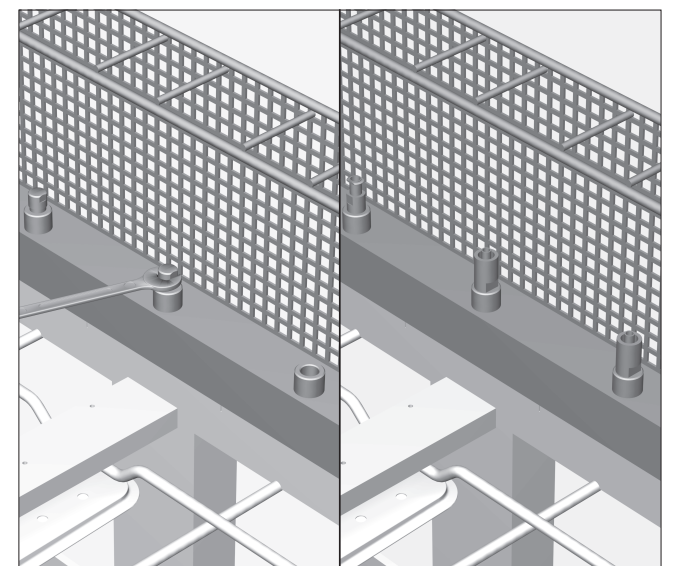

### Sätta in injektordysor och Luer-Lock-adaptrar

Upp till 7 ihåliga instrument kan kopplas till injektor-modulen vid användning av de bifogade injektor-dysorna och Luer-Lock-adaptrarna.

Gör så här:

- Skruva loss blindskruvarna från anslutningarna med en fast nyckel SW 9.
- Skruva in Luer-Lock-adaptrarna eller injektor-dysorna i anslutningarna och dra åt dem med en fast nyckel.