

Anvendelsesområde

Med indsats E 427 kan der rengøres og desinficeres op til seks laryngoskoper i næsten alle størrelser.


Indsats E 427 kan anvendes i injektorvognen til anæstesi-instrumenter, f.eks.:

- E 435, E 436, E 461,
- E 515, E 715, E 915,

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til opvaske- og desinfektionsmaskinen skal overholdes. Der må kun rengøres laryngoskoper/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret som egnede til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet.

- Laryngoskopet med kuglelås skal hænges op i den øverste holder på indsatsen. Spatelenden på laryngoskopet skal - alt efter størrelse - hvile på en af de andre holdere.
- Placer laryngoskoperne i mellemrummene, sådan at de ikke rører ved hinanden.
- Indsats E 427 sættes ind på den frie plads bagest i AN-injektorvognen. Spatelenden skal i denne forbindelse pege fremad eller til siden i beholderen. Kun i denne position kan vaskesystemet nå helt ind til de rengøringsmæssigt kritiske opråder.

⚠ For at undgå problemer med materialet skal rengøringen af laryngoskoperne udelukkende ske med programmet Vario TD, hvor klarskylning og desinfektion fortrinsvis sker med totalt afsaltet vand.

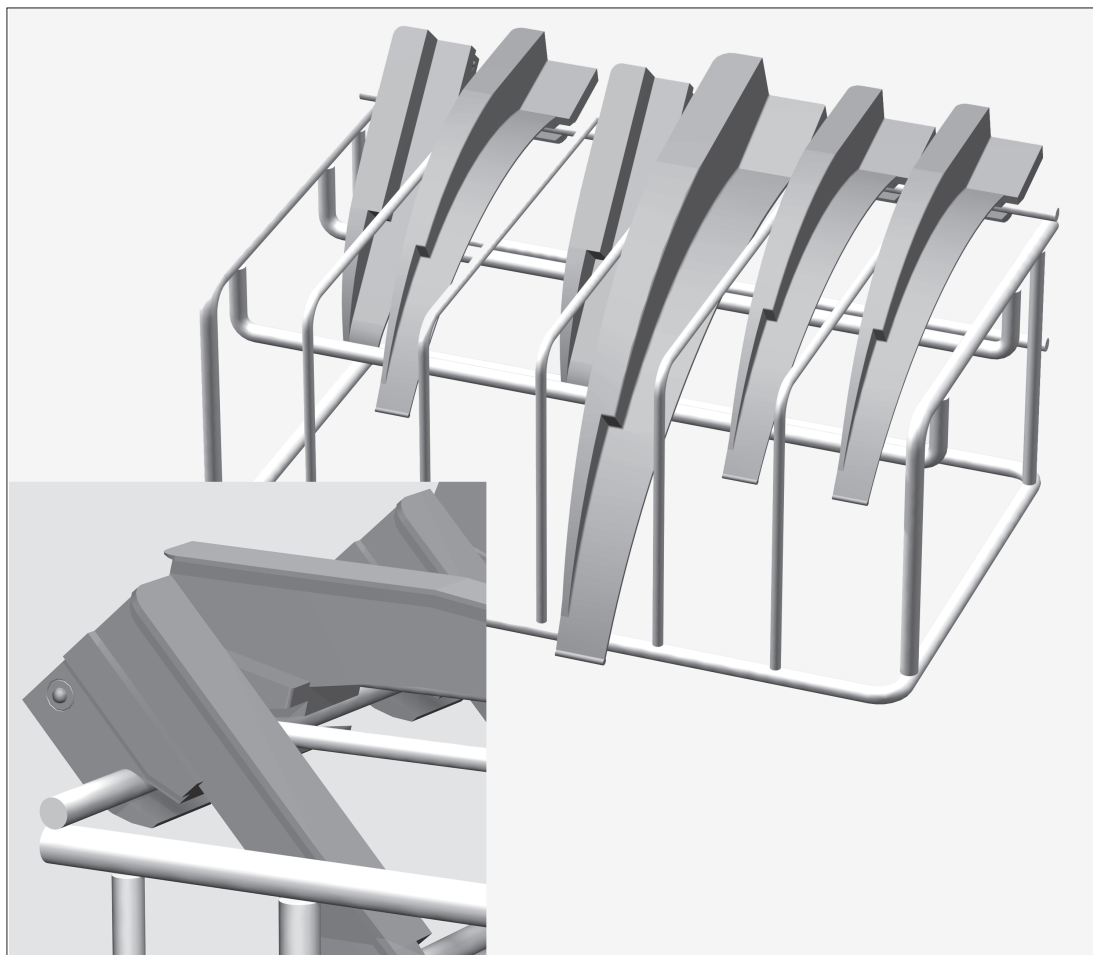

Anvendelsesområde

Med innsatsen E 427 kan inntil seks laryngoskoper i nesten alle størrelser rengjøres og desinfiseres.

Innsatsen E 427 kan settes inn i injektorvognen for anesthesiinstrumenter, f.eks.:

- E 435, E 436, E 461,
- E 515, E 715, E 915.

⚠ Kapitlet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomaten må absolutt følges. Klargjør bare laryngoskoper/medisinprodukter, som av produsenten er deklarerert som mulig å klargjøre for gjenbruk maskinelt, og følg produsentens anvisninger for klargjøring. Klargjøringsprogrammet hvor termisk desinfeksjon foretrekkes, må eventuelt avstemmes til materialkvaliteten på medisinproduktene.

- Hekt fast laryngoskopet med kulelåsen i den øvre støtten i innsatsen. Den bakerste delen av laryngoskopet skal, avhengig av størrelse, ligge på en av de andre støttene.
- Plasser hvert laryngoskop mellom to støtter, slik at de ikke berører hverandre.
- Sett innsatsen E 427 på den ledige plassen i det bakre området av AN-injektorvognen. Da skal endene på laryngoskopene peke forover eller sidelengs inn i vaskekammeret. Bare i denne stillingen når vaskemekanikken de rengjøringskritiske områdene skikkelig.

⚠ For å unngå materialproblemer, skal klargjøringen av laryngoskoper utelukkende skje med programmet Vario TD, hvor sluttskyllingen og desinfeksjonen fortrinnsvis skjer med demineralisert vann.