

## I leveransen ingår:

Grundvagn E 715/1, utrustad med:


- 12 fjädrade hållare Ø 12 mm för anestesislanger med en längd upp till 1,5 m
- 3 hållare E 433 för anestesislanger av silikon
- 6 injektordysor E 466 för Rubens blåsa
- 15 injektordysor E 496 t ex för svalgtubar eller endotrakealtubar
- 1 magnetlist för den automatiska vagnavkänningen (utan magneter)

Löst bifogade är:

- 1 injektordysa E 431 för veckad bälg
- 1 insats E 430/1 trådkorg 1/3 för små utensilier
- 1 hållare E 434 för anestesislanger för barn
- 1 hållare E 432 för veckade anestesislanger

## Extra tillbehör:

- 5 magneter för den automatiska vagnavkänningen (ML)
- Täcknät A 810/1 200 x 220 mm

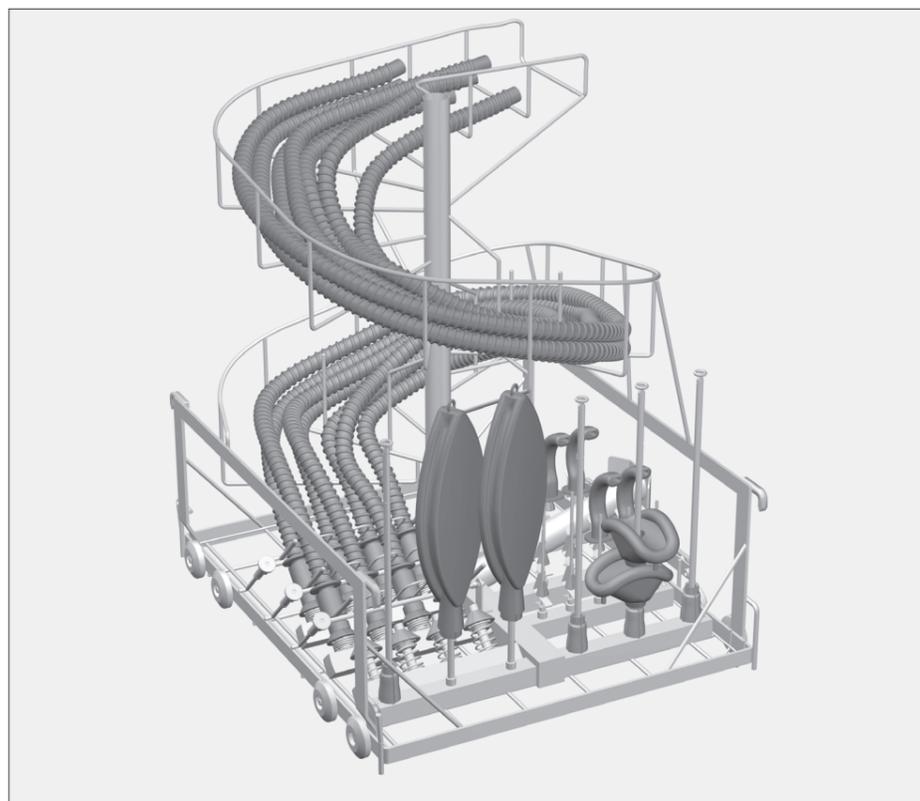

⚠ Beakta noggrant säkerhetsanvisningarna och varningarna i bruksanvisningen för diskdesinfektor G 7825 / G 7826. Rengör endast instrument/medicinprodukter vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de specifika rengöringsanvisningarna. Det diskprogram som används med termisk desinfektion måste även anpassas till materialets kvalitet.

## Användningsområde:

Injektorvagn E 715/1 gör det möjligt att diska, desinficera och torka ihåliga instrument och material som används inom området för anesthesi.

Speciella hållare och injektordysor används för adaptering av anestesislanger, Rubens blåsa, svalgtubar, endotrakealtubar, laryngomasker och även för veckade bälgar.

I injektorvagnens översikt visas placeringen av enskilda hållare och injektordysor.





⚠ För att spoltrycket ska vara tillräckligt standardiserat för alla spolanordningar måste alla skruvanordningar förses med dysor, adaptrar, spolhylsor eller blindskruvar. Inga skadade spolanordningar som dysor, adaptrar eller spolhylsor får användas.

Spolanordningar utan diskgoods behöver inte ersättas med blindskruvar.

Injektorvagnen är utrustad för adaptering av vanliga anestesislanger av silikon. Om anestesislanger med en annan diameter eller av ett annat material skall diskas måste hållaren på vagnens vänstra sida bytas ut.

Injektorvagnen bifogas en extra hållare för anestesislanger för barn och en för veckade anestesislanger.

⚠ För att ihåliga instrument säkert skall rengöras och desinficeras inifrån, måste de anslutas till injektorvagnen med respektive hållare / injektordysor. Anslutningarna får ej lossna under programförloppet! Ihåliga instrument som lossnat från anslutningarna under rengöring och desinfektion måste rengöras på nytt.

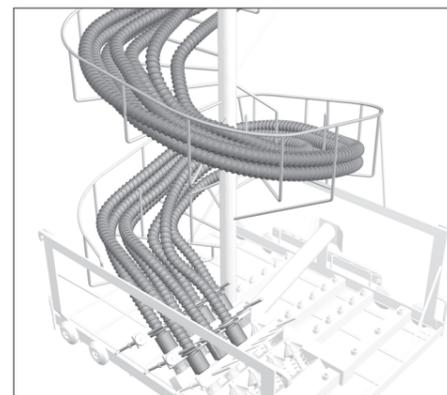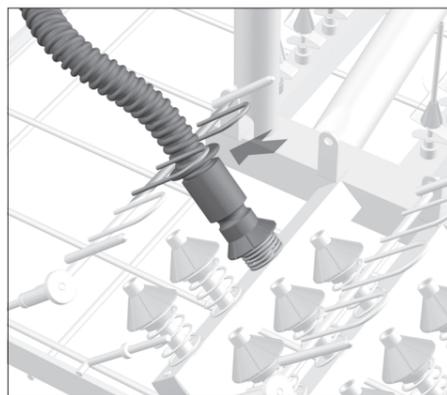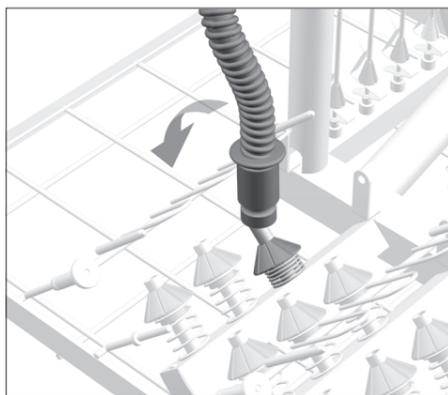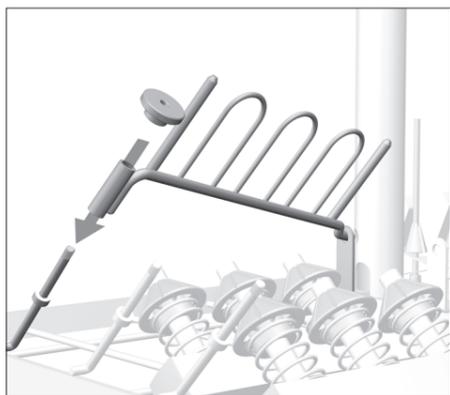

## Vid behov:

- Lossa muttern från den hållare som skall bytas.
- Ta ut hållaren.
- Sätt in önskad hållare i injektorvagnen.
- Skruva fast hållaren med muttern.

- Placera anestesislangerarna inifrån och ut med början på den sista raden hållare.

Gör så här:

- Sätt anestesislangeren på dysan och tryck samtidigt ned kon 1 ca 2 cm så att fjädern spänns.


- Sätt anestesislangeren mellan två hållare.

Anestesislangerarna skall sitta fast i hållarna. På detta sätt undviker man att slangarna lossas från de fjädrade hållarna under sköljning pga. vattentrycket.

Anestesislangerarna är korrekt adapterade när fjädrarna på dysorna står under spänning.


- Lägg anestesislangerarna jämnt i spiralen.

⚠ Slangarna får inte hänga ut eftersom vattnet annars stoppas i sänkan.

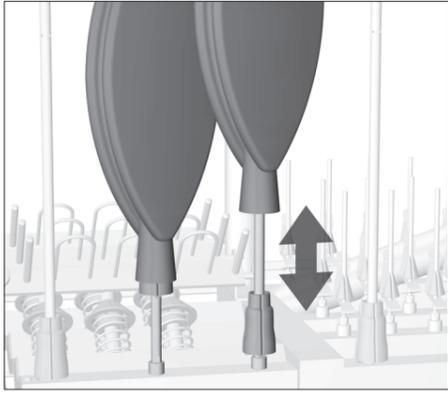


- Sätt Rubens blåsa på injektordysan.
- Förslut öppningen på Rubens blåsa med plastkonen. På detta sätt förhindras att Rubens blåsa klitrar ihop under diskning och torkning.

Rubens blåsa är korrekt adapterad när plastkonen inte lossas av sig själv från öppningen på Rubens blåsa.

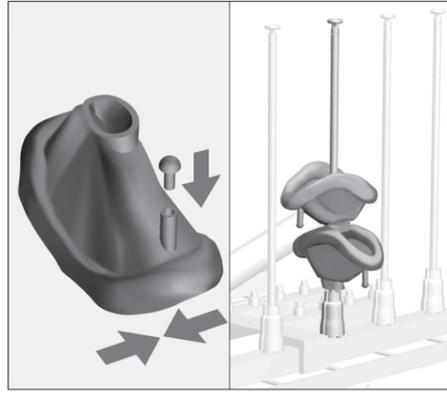


- Hos andningsmasker med förslutbar luftkudde skall pluggen dras ut, så mycket luft som möjligt avlägsnas och pluggen sedan sätts tillbaka.
- Sätt flera andningsmasker på en injektordysa för Rubens blåsa.

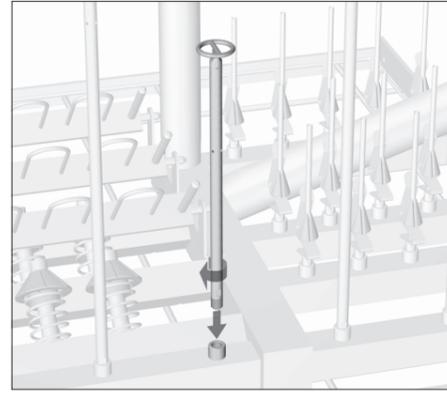


För rengöring av en veckad bälg måste en injektordysa E 466 bytas ut mot en speciell injektordysa för veckad bälg E 431 med en större ring.

Gör så här:


- Skruva loss en injektordysa E 466 med en 7 mm skruvnyckel.
- Skruva fast injektordysa E 431 i den lediga skruvanordningen och drag fast den med skruvnyckeln.

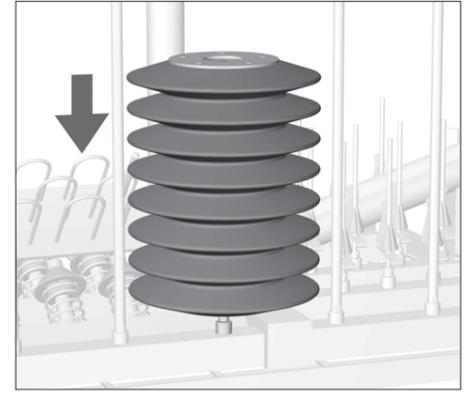


- Sätt den veckade bälgen på injektordysa E 431.

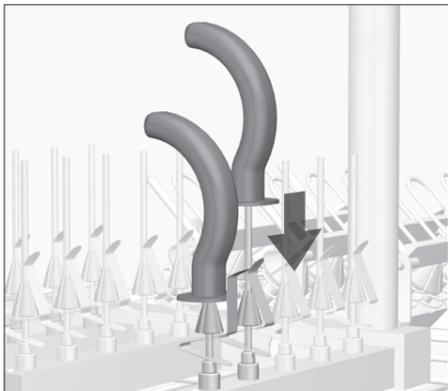

- Sätt svalgtuben på en injektordysa med låsfjädrar.

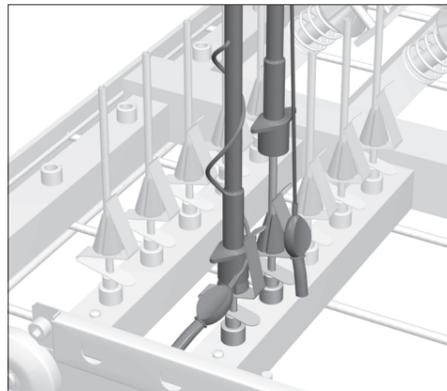


- Placera endotrakealtuben på en injektordysa så att den är fäst på dysan med låsfjädrarna.
- Lägg slangen till gummiblåsan med ventil bakom låsfjädrarna.

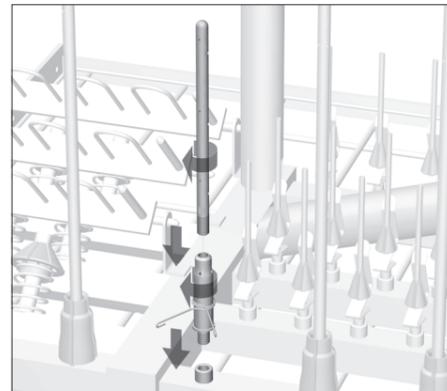


För rengöring av laryngomasker krävs en speciell dyskombination av E 464 och E 454 (extra tillbehör).

- Avlägsna fjädrarna för höjdjustering från injektordysa E 454.
- Skruva injektordysa E 454 på hållare E 464.
- Skruva dyskombinationen i en skruvanordning istället för injektordysa E 466 och drag fast den med en 7 mm skruvnyckel.

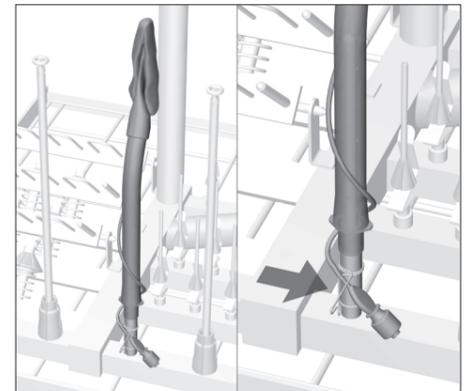

- Avlägsna så mycket luft som möjligt från laryngomaskens luftkudde.
- Sätt laryngomasken på dyskombinationen.
- Fixera slangen till gummiblåsan med ventilen i låsfjädrarna.

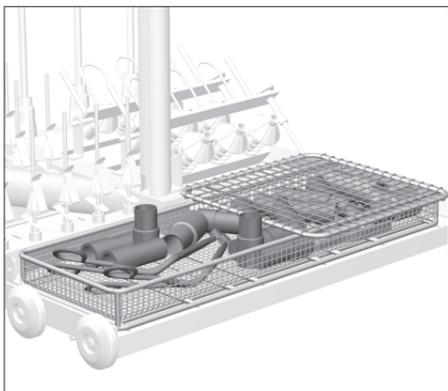

- Små utensilier som t ex Y-stycken, kontakter eller konnektorer skall placeras i insats E 430/1.
- Lätta utensilier bör täckas med ett nät så att de inte blockerar spolarmen eller dras till den automatiska vagn-avkänningens magnetlist.

⚠ Beakta den tillåtna torkningstemperaturen för att undvika att materialet slits ut i förtid. Hos vissa elastomeranmaterial för Rubens blåsa och andningsmasker ligger denna temperatur under 85 °C.

⚠ Efter avslutat diskprogram måste torkningsresultatet ovillkorligen kontrolleras. Det är särskilt viktigt att slangarnas insida är helt torra för att man skall undvika att bakterier bildas. För detta måste diskprogrammets torktid anpassas vid behov.