


⚠ Noudata ehdottomasti puhdistus- ja desinfiointiautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita. Käsittele laitteessa ainoastaan sellaisia tuttipulloja, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen desinfioinnin, ja noudata tuttipullojen omia puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Käytettävä puhdistus- ja desinfiointiohjelma, johon tulisi sisältyä mieluiten Vario-menetelmän mukainen lämpödesinfointi (esim. A<sub>0</sub> 600), on tarvittaessa sopeutettava pullojen materiaaliin sopivaksi. Puhdistustuloksen parantamiseksi pesulämpötilaksi voidaan säätää myös 65°C, koska maidon valkuaisaineet denaturoituvat vasta kuumissa lämpötiloissa. Erittäin alkaliset pesuaineet voivat syövyttää tuttipullojen täyttömerkintöjä, jolloin ne eivät enää ole luettavissa. Noudata huollon antamia suosituksia.

### Tuttipullotelineet:

E 135 ja kansi, tilaa 19 tuttipullolle à 250 ml, K 194, L 192, S 447 mm  
 E 135/1 ja kansi, tilaa 19 tuttipullolle à 110 ml, K 133, L 192, S 447 mm  
 E 135/2 ja kansi, tilaa 19 tuttipullolle à 90 ml, K 123, L 192, S 447 mm  
 E 135/3 ja kansi, tilaa 19 tuttipullolle à 120 ml, K 133, L 192, S 447 mm




### erikseen ostettavat lisävarusteet:

Teline E 364, jossa tilaa 36 leveäkaulaiselle tutille  
 Teline E 458, jossa tilaa 36 kierrekorkkitutille  
 Verkkokori E 142 korkkeja yms. sulkimia varten  
 Kansi A 16 verkkokorin E 142 peittämiseksi

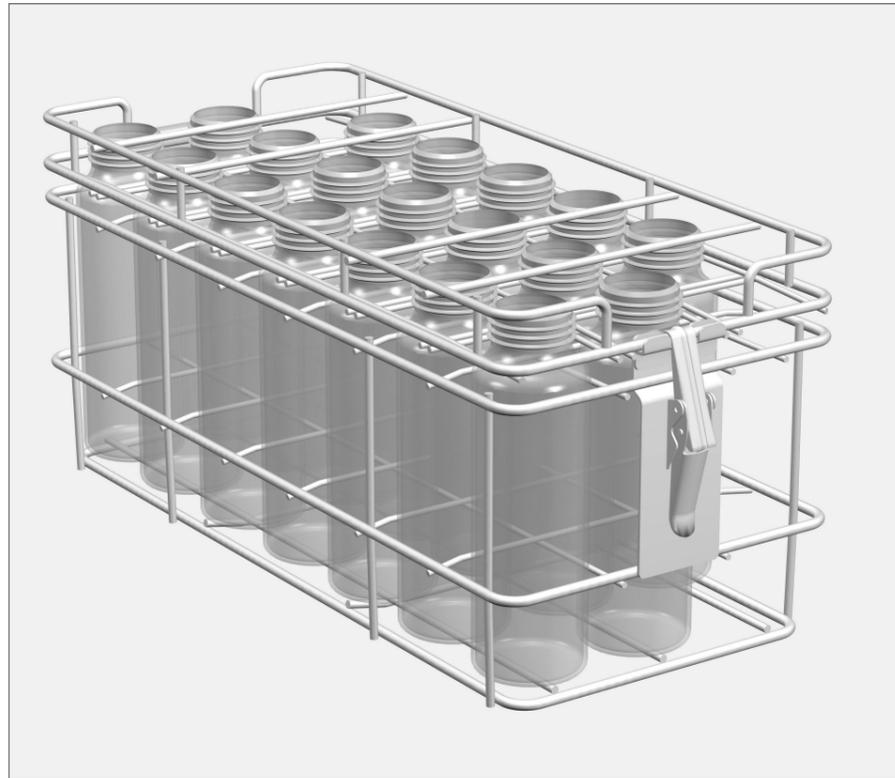

### Käyttökohteet:

Telineissä E 135 voidaan puhdistaa ja desinfioida yhteensä 19 tuttipulloa kerrallaan. Telineitä voidaan käyttää sekä ylä- että alakoreissa ja tyhjiissä vaunuissa, esim. E 935-3, E 735-3 tai E 555.

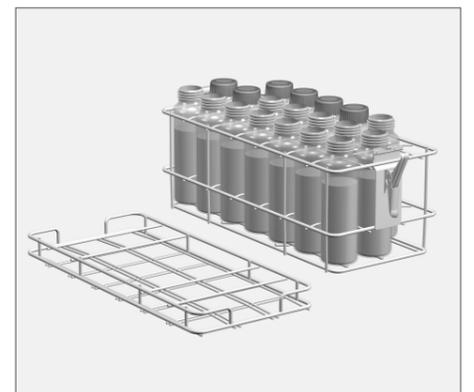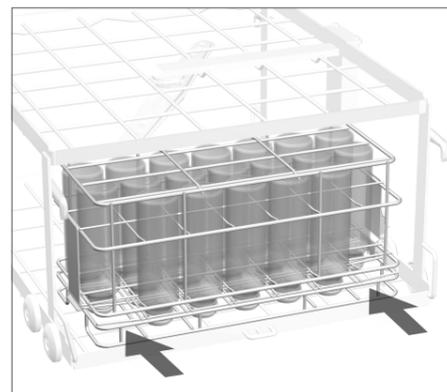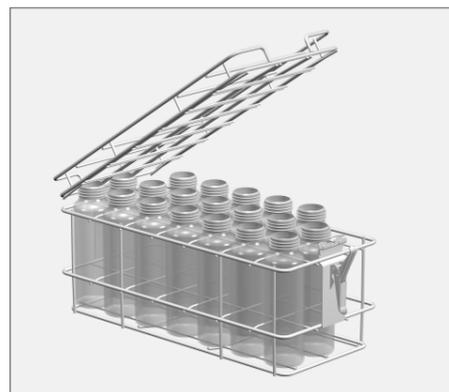

- Avaa telineen kannen lukitsin ja irrota telineen kansi.
- Aseta käytetyt tuttipullot telineeseen suuaukko ylöspäin.

- Sulje teline kannen avulla. Kannen ritilä pitää tuttipullot paikoillaan.

- Aseta teline haluamallasi vaunun tasolle siten, että tuttipullojen suuaukot tulevat alaspäin.

Teline on asetettava siten, että sen molemmat täyttämättä jäävät nurkat tulevat vaunun nurkkiin, eli samalla pesutason nurkkiin. Täyttämättä jäävissä nurkissa suihkusuuttimien vesisuihku ei yllä pullojen sisäpuolelle, jolloin pullot eivät puhdistu ja desinfioidu riittävän hyvin.

Mikäli tuttipulloja ei steriloida desinfioinnin jälkeen, mikrobikasvuston ehkäisemiseksi pullojen on oltava ehdottoman kuivia ennen varastointia. Tätä varten on valittava riittävän pitkä kuivausaika.

Kun tuttipullot on pesty, desinfioitu ja kuivattu, ne voidaan täyttää jälleen maidolla suoraan telineessään.

- Irrota tätä varten ensin telineen kansi.
- Sulje täytetyt tuttipullot ja säilytä ne kylmässä käyttöön saakka.


⚠ Läs noggrant igenom säkerhetsanvisningarna och varningarna i diskdesinfektorns bruksanvisning. Rengör endast nappflaskor vilka av tillverkaren är deklarerade som maskinellt disk- och desinfektionsbara och beakta de specifika rengöringsanvisningarna. Det diskprogram som används med termisk desinfektion (t ex A<sub>0</sub> 600), som rekommenderas med vario-metoden, måste anpassas till materialets kvalitet. För ett bättre resultat kan disktemperaturen även ställas in på 65°C, eftersom mjölkproteinet denaturerar först vid högre temperaturer. Högalkaliska diskmedel kan angripa och avlägsna graderingarna på nappflaskorna. Beakta de rekommendationer som anges av kundtjänst.

## Insatser för nappflaskor:

E 135 med förslutning, för 19 nappflaskor, volym 250 ml, höjd 194, bredd 192, djup 447 mm  
 E 135/1 med förslutning, för 19 nappflaskor, volym 110 ml, höjd 133, bredd 192, djup 447 mm  
 E 135/2 med förslutning, för 19 nappflaskor, volym 90 ml, höjd 123, bredd 192, djup 447 mm  
 E 135/3 med förslutning, för 19 nappflaskor, volym 120 ml, H 133, B 192, T 447 mm




## Extra tillbehör:

Insats E 364 för 36 vidhalsade nappar  
 Insats E 458 för 36 skruvnappar  
 Trådkorg E 142 för flasklock  
 Förslutning A 16 för att täcka över trådkorg E 142

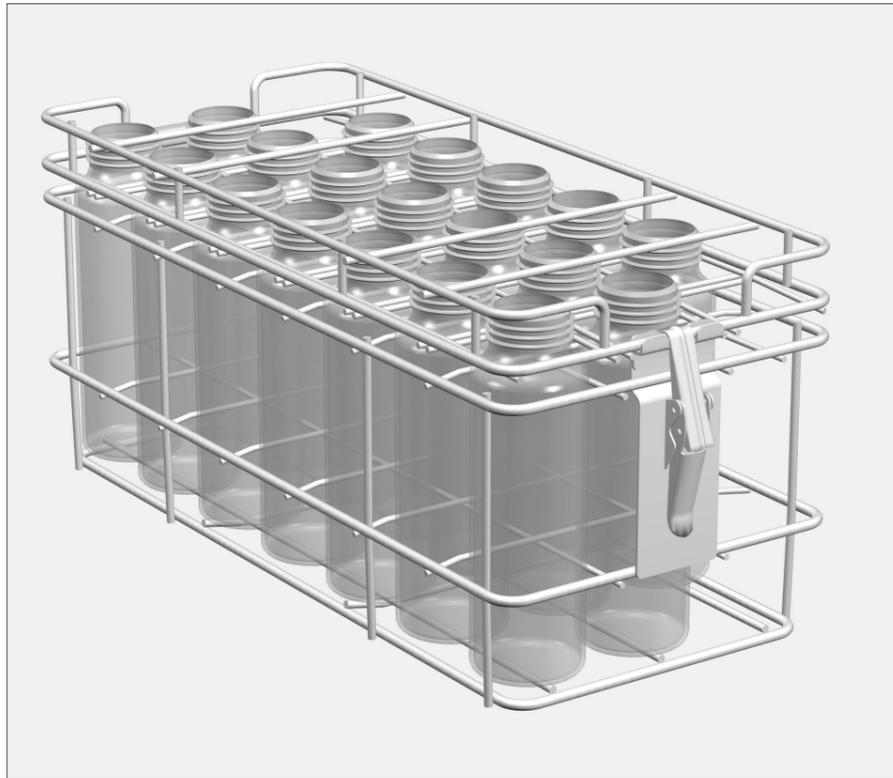

## Användningsområde:

Med insatser av typen E 135 kan 19 nappflaskor rengöras och desinficeras. De kan sättas in i över- och underkorgar och i en tom vagn, t ex E 935-3, E 735-3 eller E 555.

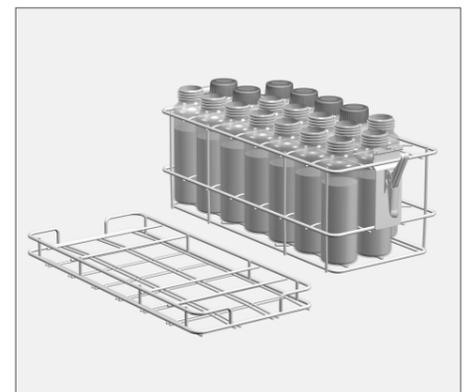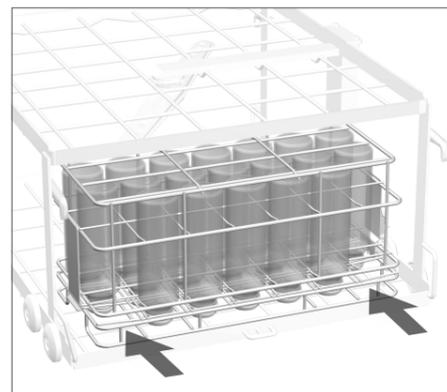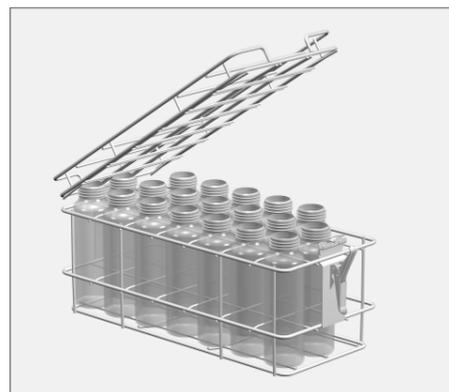

- Öppna förslutningen och tag loss den från insatsen.
- Placera använda nappflaskor i insatsen med öppningen uppåt.

- Förslut insatsen. Nappflaskorna säkras med hjälp av gallret.

- Ställ insatserna på vagnen. Öppningarna på nappflaskorna skall vara nedåt.

De två spärrade hörnen på insatsen måste placeras över hörnen på vagnen, d v s i hörnen på disknivån. Inom detta område når inte vattenstrålarna in i flaskorna, vilket medför att dessa inte rengörs ordentligt.

Om ingen anslutande sterilisering följer erfordras fullständig torkning av diskgodset innan det förvaras för att undvika tillväxt av vattenlösningar. Därför måste tillräcklig torktid väljas.

Efter rengöring, desinfektion och torkning kan nappflaskorna fyllas med barnmat i insatsen.

- Tag först bort insatsens förslutning.
- Förslut de fyllda nappflaskorna och förvara dem kallt fram till användning.