

Inserts E 458 and E 364 for baby bottle teats

 Please read the Warning and Safety instructions in the Operating Instructions for your washer-disinfector carefully. Only process baby bottle teats in your washer-disinfector if they have been declared machine washable by the manufacturer. Follow the manufacturer's care instructions.

Latex teats have a limited lifespan and must be replaced when necessary.

The programme used to process the teats must be suitable for the material from which they are manufactured. We recommend thermal disinfection (e.g. A₀ 600), preferably using a Vario programme.

For improved results the main wash temperature can be set to 65°C. This is because milk protein requires high temperatures for denaturation to take place. Please contact your Miele Professional application specialist if you require advice.

Inserts:


E 458 for screw cap teats. 36 compartments 29 x 29 mm, H 63 mm, W 215 mm, D 445 mm
E 364 for wide necked teats. 36 compartments 41 x 41 mm, H 77 mm, W 215 mm, D 445 mm

Optional accessories:

E 135 with lid, for 19 x 250 ml capacity baby bottles
E 135/1 with lid, for 19 x 110 ml capacity baby bottles
E 135/2 with lid, for 19 x 90 ml capacity baby bottles
E 135/3 with lid, for 19 x 120 ml capacity baby bottles
E 142 mesh tray for screw caps
A 16 lid for E 142 mesh tray


Areas of application:

Inserts E 458 and E 364 are suitable for cleaning and disinfecting 36 baby bottle teats each. They can be used in the upper or lower basket of the washer-disinfector or in empty mobile units e. g. E 935-3, E 735-3 or E 555.

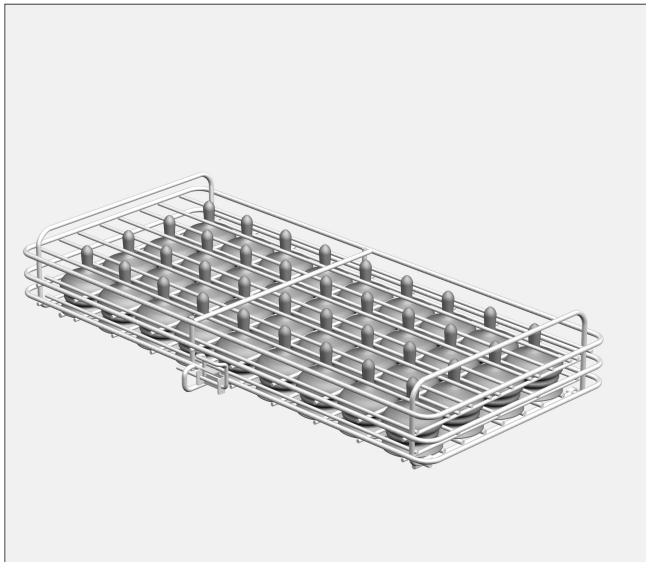


E 364:

- Undo the catch and open the insert out.
- Place used wide necked teats into the insert with the open end facing upwards.
- Close and secure the catch on the insert.

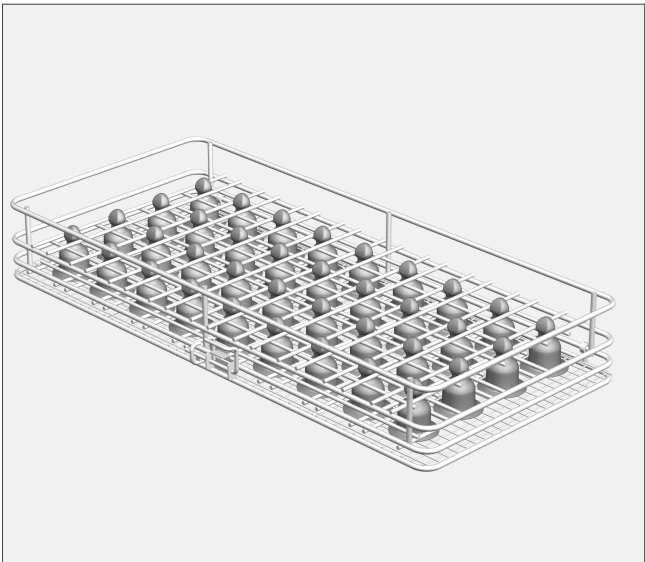


E 458:

- Undo the catch and open the insert out.
- Place used screw cap teats into the insert with the open end facing upwards.
- Close and secure the catch on the insert.

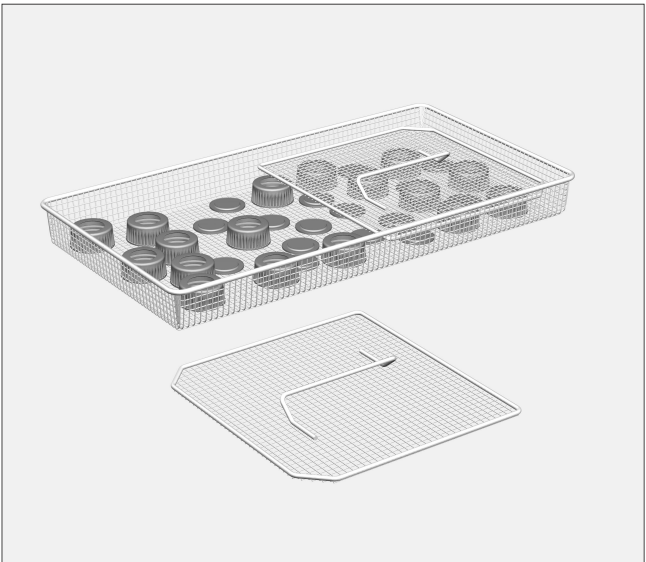

E 142 with A 16:

- Place caps and screw caps with the threaded side facing downwards in the mesh tray.
- Use a cover over the mesh tray to keep secure light weight plastic items.

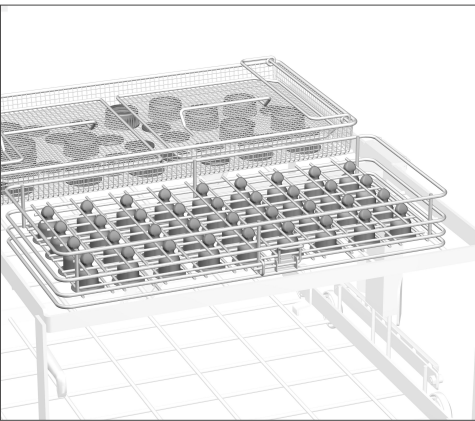

If the process is not to be followed by sterilisation, the load should be dried completely to avoid the development of water-borne bacteria. A sufficient drying time is, therefore, absolutely essential.

- Place the inserts into the mobile unit making sure that the open ends of the teats are facing downwards.
- Then place the covered mesh tray E 142 into the mobile unit.

Inzetten E 458 en E 364 voor spenen

 Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en desinfectieautomaat. Behandel alleen spenen die volgens de fabrikant van die producten geschikt zijn voor machinale behandeling. Houdt u zich aan de specifieke behandelingsvoorschriften van de fabrikant. Spenen van materiaal op latexbasis kunnen slechts een aantal keren worden behandeld en moeten dan door nieuwe worden vervangen. Het te gebruiken programma, met bij voorkeur thermische desinfectie (bijvoorbeeld A₀ 600) en bij voorkeur het Vario-programma, moet indien nodig op het materiaal van de producten worden afgestemd. Om het resultaat te verbeteren, kan de reinigingstemperatuur ook op 65°C worden ingesteld, omdat melkproteïnes pas bij hogere temperaturen denatureren. Houdt u zich aan het advies van Miele Professional.

Inzetten:


E 458 voor spenen van schroefdoppen, met 36 vakjes 29 x 29 mm, H 63 mm, B 215 mm, D 445 mm
E 364 voor spenen met een wijde hals, met 36 vakjes 41 x 41 mm, H 77 mm, B 215 mm, D 445 mm

Bij te bestellen accessoires:

E 135 met deksel, voor 19 babyflessen met een inhoud van 250 ml
E 135/1 met deksel, voor 19 babyflessen met een inhoud van 110 ml
E 135/2 met deksel, voor 19 babyflessen met een inhoud van 90 ml
E 135/3 met deksel, voor 19 babyflessen met een inhoud van 120 ml
Zeefschaal E 142 voor flesdoppen
Deksel A 16 voor het afdekken van zeefschaal E 142


Toepassing:

Met de inzetten E 458 en E 364 kunt u telkens 36 spenen reinigen en desinfecteren. U kunt de inzetten gebruiken in boven- en onderrekken, alsmede in lege wagens, zoals E 935-3, E 735-3 en E 555.

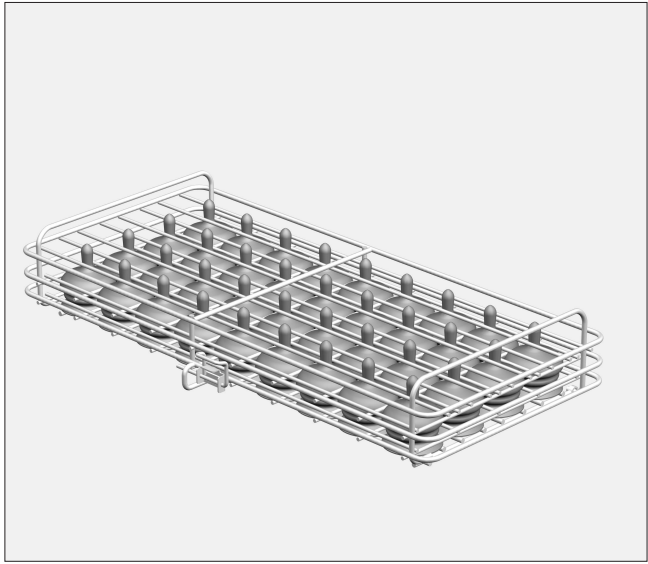


E 364:

- Open de vergrendeling van de inzet en open de inzet.
- Zet de spenen (met wijde hals) met de opening naar boven in de inzet.
- Sluit en vergrendel de inzet.

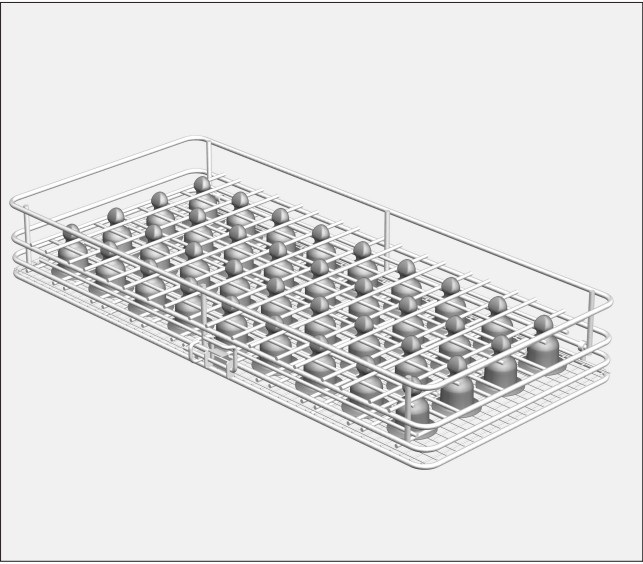


E 458:

- Open de vergrendeling van de inzet en open de inzet.
- Zet de spenen (voor schroefdoppen) met de opening naar boven in de inzet.
- Sluit en vergrendel de inzet.

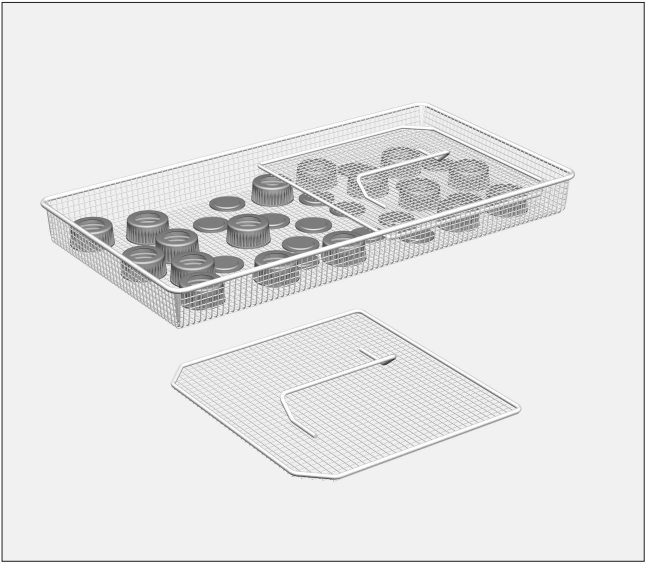

E 142 met A 16:

- Leg de afsluitplaatjes en de schroefdoppen met het schroefdraad naar beneden in de zeefschaal.
- Plaats de deksels op de zeefschaal zodat de lichte kunststof delen op hun plaats blijven.

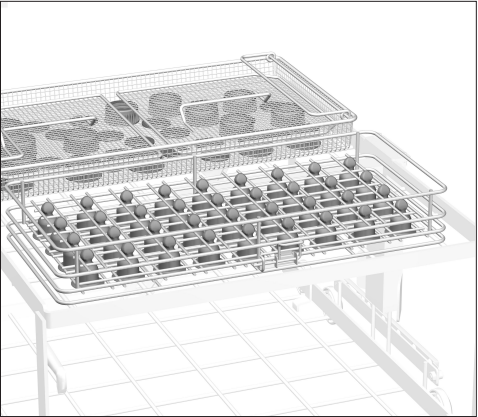

Als de voorwerpen daarna niet meteen worden gesteriliseerd, moeten ze volledig droog zijn voordat ze worden opgeborgen. Dit om kiemvorming in het water te voorkomen. Kies daarom een droogtijd die lang genoeg is.

- Positioneer de inzetten op een niveau van de wagen met de speenopeningen naar beneden.
- Zet ook de afgedekte zeefschaal E 142 met de kunststof delen in de wagen.