

⚠ Lisez les prescriptions de sécurité et les mises en gardes dans le mode d'emploi de votre laveur-désinfecteur. Ne traitez que des tétines qui ont été déclarées adaptées pour un traitement en machine par leurs fabricants et suivez les indications de ces derniers.

Les tétines en latex ne supporteront qu'un nombre limité de traitements en machine. Il faudra ensuite les remplacer.

Le programme de nettoyage avec désinfection thermique (par ex. A₀ 600), procédé Vario doit être adapté aux matériaux des tétines.

La température de nettoyage peut être montée à 65°C puisque les protéines lactiques ne commencent à se dégrader qu'à partir de cette température.

Suivez les indications du SAV.

Compléments :


- E 458 pour tétines à visser, avec 36 compartiments 29 x 29 mm, H 63 mm, L 215 mm, P 445 mm
- E 364 pour tétines à visser à col large, avec 36 compartiments 41 x 41 mm, H 77 mm, L 215 mm, P 445 mm

Accessoires en option :

- E 135 avec couvercle, pour 19 biberons à 250 ml
- E 135/1 avec couvercle, pour 19 biberons à 110 ml
- E 135/2 avec couvercle, pour 19 biberons à 90 ml
- E 135/3 avec couvercle, pour 19 biberons à 120 ml
- Complément à mailles E 142 pour bouchons
- Couvercle A 16 pour couvrir le complément à mailles E 142


Applications :

les compléments E458 et E 364 permettent de nettoyer et de désinfecter 36 tétines pour biberons. Ils peuvent être disposés dans les paniers supérieurs et inférieurs ainsi que dans les chariots vides comme par ex. E 935-3, E 735-3 ou E 555.

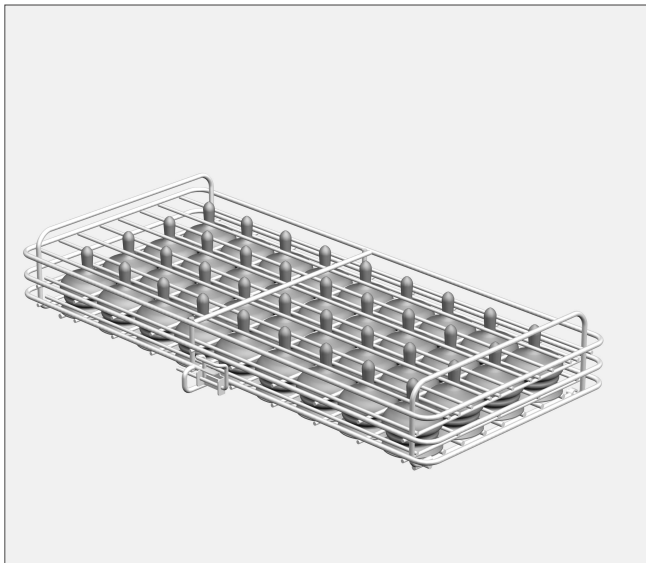


E 364 :

- Ouvrir la fermeture du complément puis ouvrir le complément.
- Poser les tétines à col large utilisées dans le complément avec l'ouverture vers le haut.
- Fermer le complément.

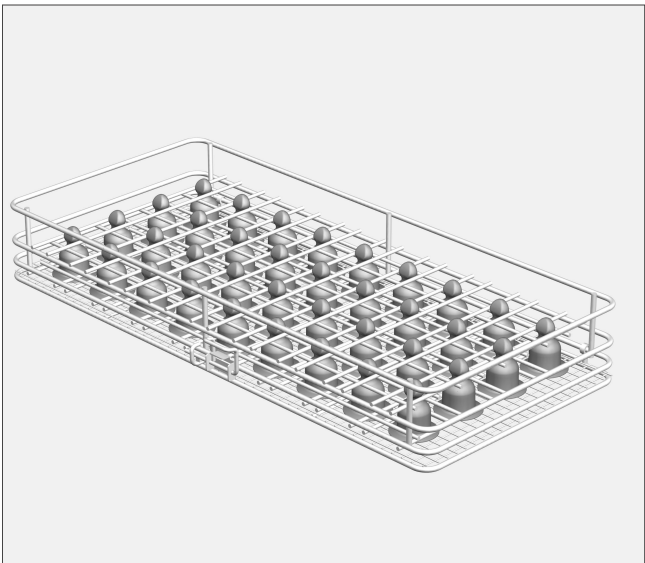


E 458 :

- Ouvrir la fermeture du complément puis ouvrir le complément.
- Poser les tétines à visser utilisées dans le complément avec l'ouverture vers le haut.
- Fermer le complément.

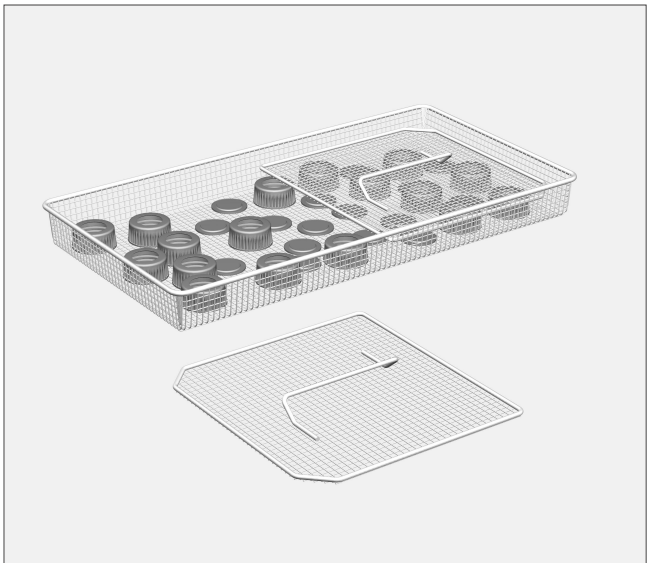

E 142 avec A 16 :

- Poser les bouchons avec les filetages vers le bas dans le complément à mailles.
- Maintenir les éléments en plastiques légers grâce aux couvercles dans le complément à mailles.

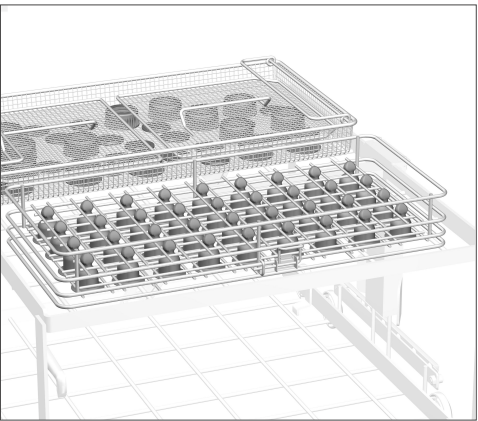

Dans la mesure où aucun processus de stérilisation n'est prévu à la suite du traitement de désinfection, il est conseillé d'effectuer un séchage total afin d'empêcher un développement de germes liés à la présence d'eau.

A cette fin, il faut régler un temps de séchage suffisant.

- Poser les compléments sur un des niveaux du chariot, les ouvertures des tétines sont tournées vers le bas.
- Poser le complément à mailles E 142 avec les éléments en plastique dans le chariot.

⚠ Rispettare scrupolosamente le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze riportate nelle istruzioni d'uso del termodisinfettore. Trattare esclusivamente succhietti che siano stati esplicitamente dichiarati idonei al trattamento in macchina dal produttore e attenersi alle indicazioni da questo fornite. I succhietti in lattice resistono solo a un numero limitato di trattamenti e devono poi essere sostituiti. Il programma utilizzato, con disinfezione preferibilmente termica (ad es. A₀ 600) e con il procedimento Vario, deve essere adeguato alla qualità dei materiali di cui sono costituiti gli strumenti. Per migliorare il risultato, la temperatura di lavaggio può essere imposta anche su 65°C perché le proteine del latte denaturano solo a temperature più alte. Seguire le raccomandazioni del servizio di assistenza tecnica.

Inserti:


E 458 per succhietti avvitabili, con 36 scomparti 29 x 29 mm, H 63 mm, L 215 mm, P 445 mm
E 364 per succhietti a collo largo, con 36 scomparti 41 x 41 mm, H 77 mm, L 215 mm, P 445 mm

Accessori su richiesta:

E 135 con coperchio, per 19 biberon da 250 ml
E 135/1 con coperchio, per 19 biberon da 110 ml
E 135/2 con coperchio, per 19 biberon da 90 ml
E 135/3 con coperchio, per 19 biberon da 120 ml
Bacinella E 142 per chiusure bottiglia
Coperchio A 16 per coprire la bacinella E 142


Applicazioni:

Con gli inserti E 458 ed E 364 possono essere lavati e disinfettati 36 succhietti per biberon. Gli inserti possono essere sistemati nei cestelli superiori e inferiori o in carrelli vuoti, ad es. E 935-3, E 735-3 o E 555.

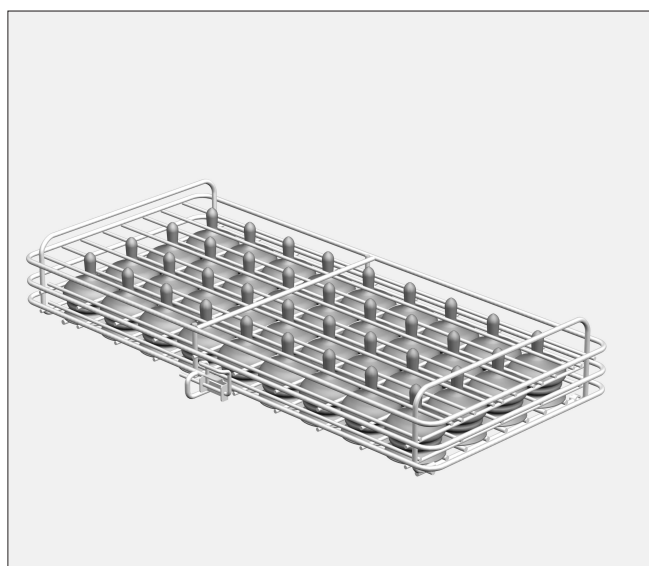

E 364:

- Sganciare il coperchio e aprire l'inserto.
- Disporre i succhietti a collo largo nell'inserto con le aperture rivolte verso l'alto.
- Chiudere l'inserto e agganciare il coperchio.

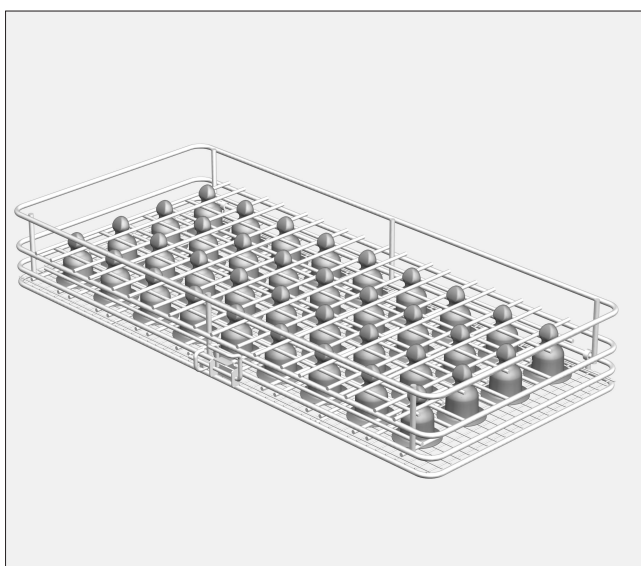


E 458:

- Sganciare il coperchio e aprire l'inserto.
- Disporre i succhietti avvitabili nell'inserto con le aperture rivolte verso l'alto.
- Chiudere l'inserto e agganciare il coperchio.



E 142 con A 16:

- Disporre le chiusure nella bacinella con la filettatura rivolta verso il basso.
- Assicurare le parti leggere in plastica nella bacinella con le coperture.

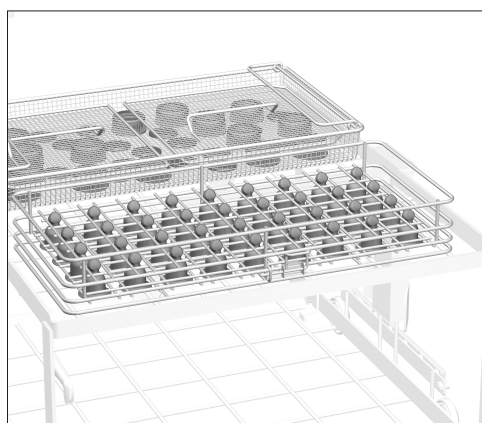

Se non è prevista la sterilizzazione, per evitare la proliferazione di germi in acqua durante la conservazione assicurarsi che i succhietti siano completamente asciutti. Deve quindi essere selezionato un tempo di asciugatura adeguato.

- Sistemare gli inserti su un piano del carrello con le aperture dei succhietti rivolte verso il basso.
- Sistemare nel carrello anche la bacinella E 142 con le parti in plastica.