

⚠ Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung des Reinigungs-/Desinfektionsautomaten. Bereiten Sie ausschließlich Babyflaschen auf, die von ihrem Hersteller als maschinell wiederaufbereitbar deklariert und freigegeben sind und beachten Sie dessen Hinweise. Das verwendete Aufbereitungsprogramm mit bevorzugt thermischer Desinfektion (z.B. A₀ 600), vorzugsweise mit Vario-Verfahren, muss ggf. auf die Materialqualitäten abgestimmt sein.


Die Reinigungstemperatur kann zur Ergebnisverbesserung auch auf 65°C eingestellt werden, weil die Milchproteine erst bei höheren Temperaturen denaturieren. Hochalkalische Reiniger können die Graduierungen angreifen und entfernen. Beachten Sie die Empfehlung des Kundendienstes.

Einsätze für Babyflaschen:

- E 135 mit Deckel, für 19 Babyflaschen mit 250 ml Volumen, H 194, B 192, T 447 mm
- E 135/1 mit Deckel, für 19 Babyflaschen mit 110 ml Volumen, H 133, B 192, T 447 mm
- E 135/2 mit Deckel, für 19 Babyflaschen mit 90 ml Volumen, H 123, B 192, T 447 mm
- E 135/3 mit Deckel, für 19 Babyflaschen mit 120 ml Volumen, H 133, B 192, T 447 mm




Nachkaufbares Zubehör:

- Einsatz E 364 für 36 Weithalssauger
- Einsatz E 458 für 36 Schraubkappensauger
- Siebschale E 142 für Flaschenverschlüsse
- Deckel A 16 zur Abdeckung der Siebschale E 142

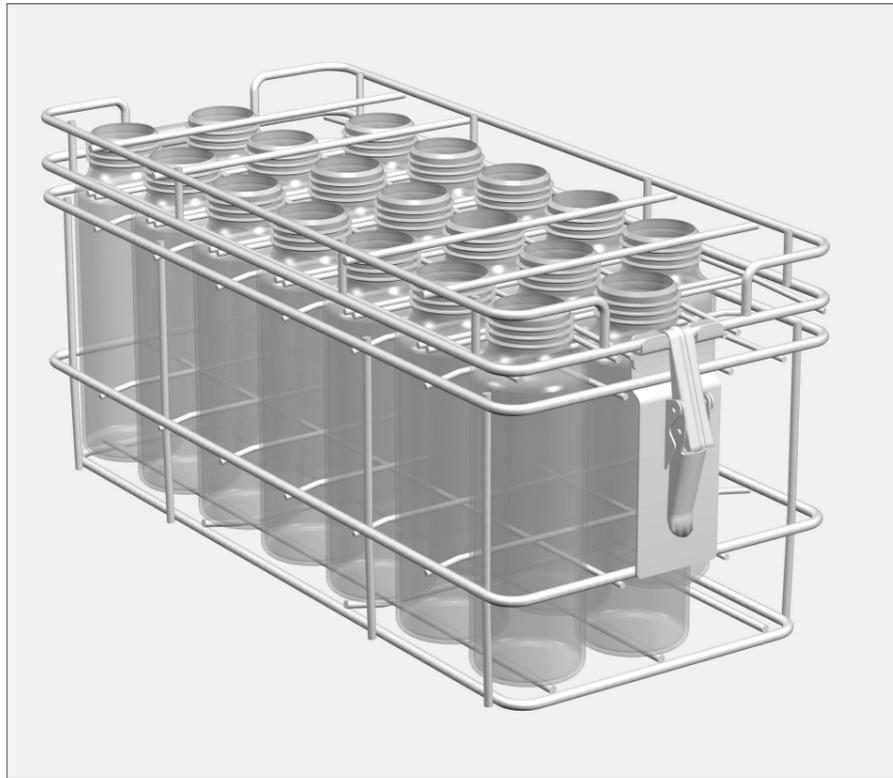

Anwendungsgebiet:

Mit den Einsätzen E 135 können 19 Babyflaschen gereinigt und desinfiziert werden. Sie sind einsetzbar in Ober- und Unterkörben sowie in leeren Wagen, z. B. E 935-3, E 735-3 oder E 555.

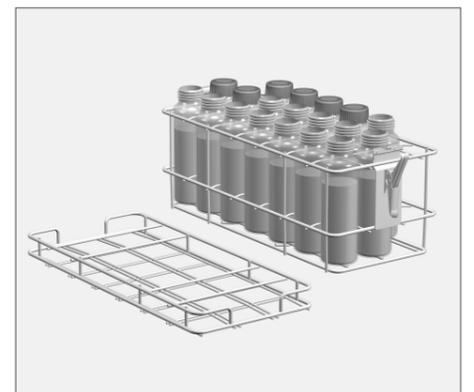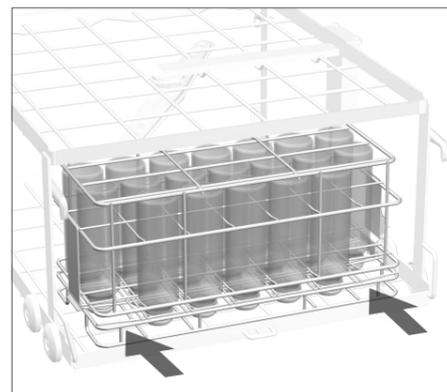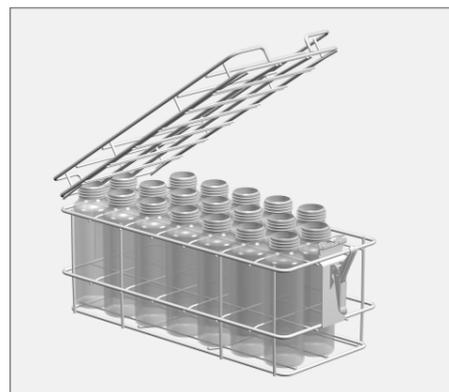

- Den Verschluss des Deckels öffnen und den Deckel von dem Einsatz abnehmen.
- Benutzte Babyflaschen mit der Öffnung nach oben in den Einsatz stellen.

- Einsatz mit Deckel verschließen. Die Babyflaschen werden durch das Gitter des Deckels gesichert.

- Den Einsatz auf eine Ebene des Wagens stellen, die Öffnungen der Babyflaschen zeigen nach unten.

Die beiden gesperrten Ecken des Einsatzes müssen über den Ecken des Wagens, d.h. in den Ecken der Spülebene positioniert sein. In diesem Bereich wird das Flascheninnere nicht ausreichend von den Sprühstrahlen erreicht und die Flaschen werden nicht vollständig gereinigt.

Soweit keine anschließende Sterilisation erfolgt, ist zur Vermeidung von Wasserkeimwachstum während der Lagerung eine vollständige Trocknung erforderlich. Dazu muss unbedingt eine ausreichende Trocknungszeit gewählt werden.

Nach der Reinigung, Desinfektion und Trocknung können die Babyflaschen in dem Einsatz mit der Babynahrung gefüllt werden.

- Dazu zuerst den Deckel des Einsatzes abnehmen.
- Die gefüllten Babyflaschen verschließen und bis zur Verwendung gekühlt lagern.