


Leverancen omfatter:

Injektorvogne, H 502, B 535, D 515 mm, E 405/1 endvidere med tilslutning til varmlufttørring og holder til magnetliste ML/2 (ekstraustyr) til automatisk vognidentifikation (G 7835, G 7836, PG 8535 og PG 8536)

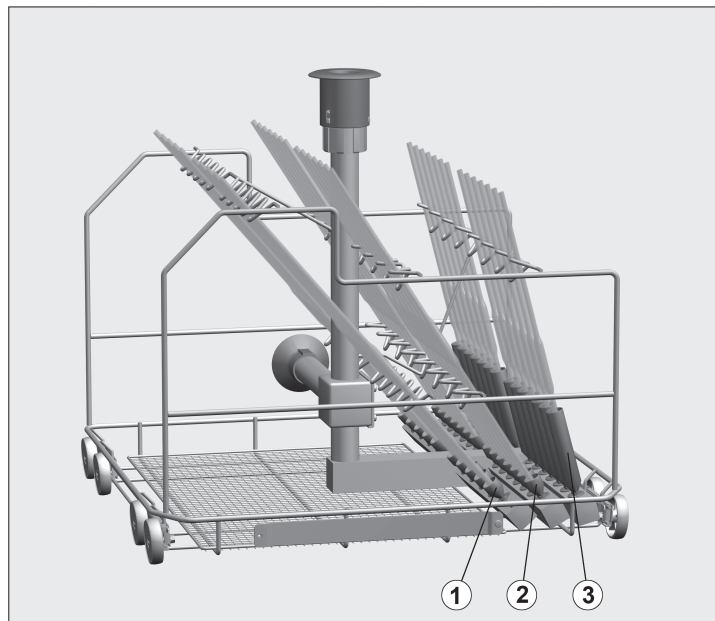

Anvendelsesområde:

Injektorvognene kan anvendes ved rengøring af forskellige pipetter. Kapacitet:

Række	Maks længde (mm) *	Antal	Volumen (ml)
1	550	10	10 - 100
2	500	14	10 - 25
3	440	14	1 - 10


* Pipetterne må ikke rage ud over tilløbsrøret eller injektorvognens kant.

Maskinel rengøring er kun egnet til laboratorieudstyr, der af producenten er erklæret egnet til genanvendelse.


⚠ Sikkerhedsinformationer og advarsler i brugsanvisningen til rengøringsmaskinen til laboratorieudstyr og vejledningen fra producenten af laboratorieudstyret skal følges nøje.
Ved glasbrud under rengøringen kan der være risiko for at komme alvorligt til skade.
Rengøringsresultatet skal i givet fald underkastes en særlig, ikke kun visuel kontrol.

⚠ Anvend programmet LAB-PIPETTER, eller forhøj vandindløbsmængden i de anvendte programmer med følgende:
G 7836, PG 8536 = + 5 l
G 7835, G 7883, G 7883 cd, G 7893, PG 8535 = + 6 l.

Placering af pipetter:

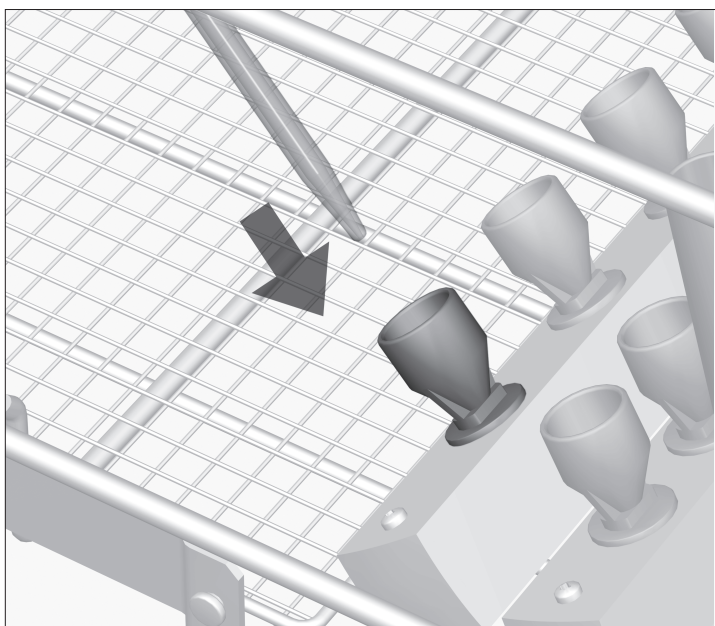

- Stil pipetterne med spidsen nedad i en holdetragt.
- Placer den øverste ende af pipetterne i de tilsvarende prægninger i stiverne.

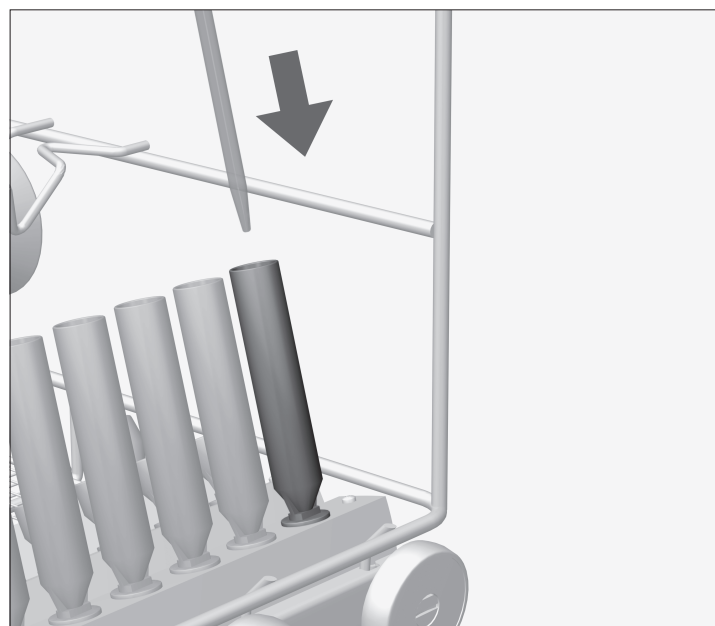


- Placer pipetter med en volumen på 1 - 5 ml i hylstrene i række ③ i injektorvognen.

I række ① og ② kan skylletrykket trykke disse pipetter ud af holdetragtene.

Standardlevering:

Injektorvogn, H 502, B 535, D 515 mm, E 405/1 har i tillegg tilkobling for varmluftstørking og holder for ML/2 (ekstraustyr) for den automatiske vogngjenkjenningen (G 7835, G 7836, PG 8535 og PG 8536)

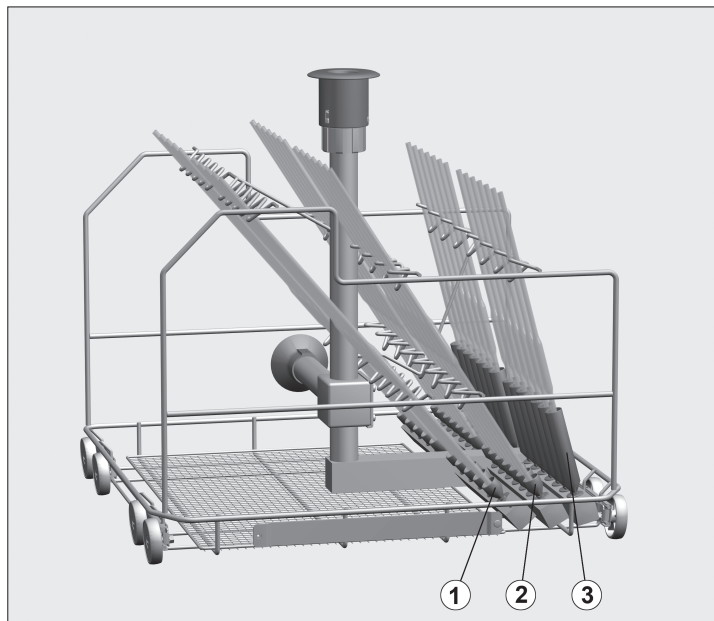

⚠ Bruk programmet LAB-PIPETTER eller øk vanninntaksmengden i programmene som anvendes:
G 7836, PG 8536 = + 5 l
G 7835, G 7883, G 7883 cd, G 7893, PG 8535 = + 6 l.

Anvendelsesområde:

I injektorvognen kan det klargjøres forskjellige typer pipetter. Volum:


Rekke	Maks. lengde [mm] *	Antall	Volum [ml]
1	550	10	10 til 100
2	500	14	10 til 25
3	440	14	1 til 10

* Pipettene må ikke stikke over kanten på tilførselsrøret eller utenfor kanten på injektorvognen.


Den maskinelle klargjøringen er kun egnet for laboratorieutstyr som av produsenten er deklartert som mulig å klargjøre for gjenbruk.

⚠ Kapittelet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for rengjørings- og desinfeksjonsautomaten for laboratorieutstyr og anvisningene fra produsenten av laboratorieutstyret må absolutt følges. Glass som knuses under klargjøringen kan føre til alvorlige skader. Rengjøringsresultatet må kontrolleres meget nøye, ikke bare visuelt.

Plassering av pipettene:

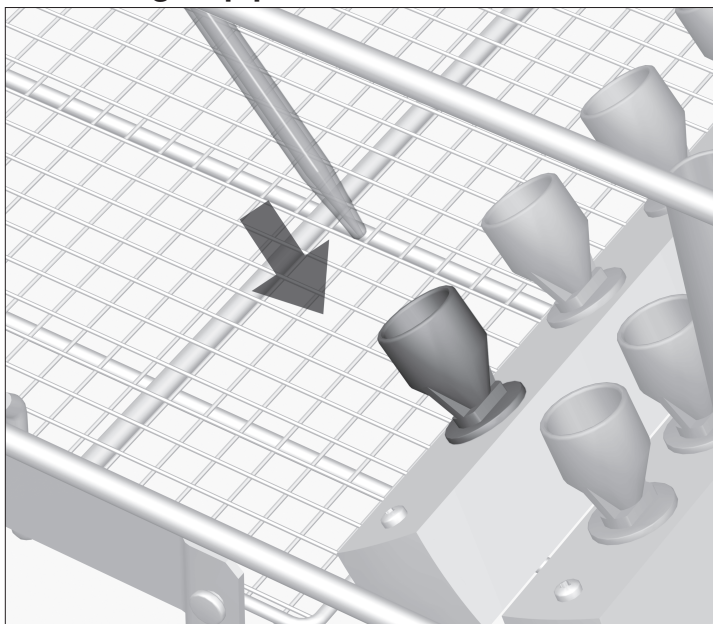

- Sett pipetten med spissen ned i trakten.
- Legg den øverste delen av pipetten i sporet på støtten.

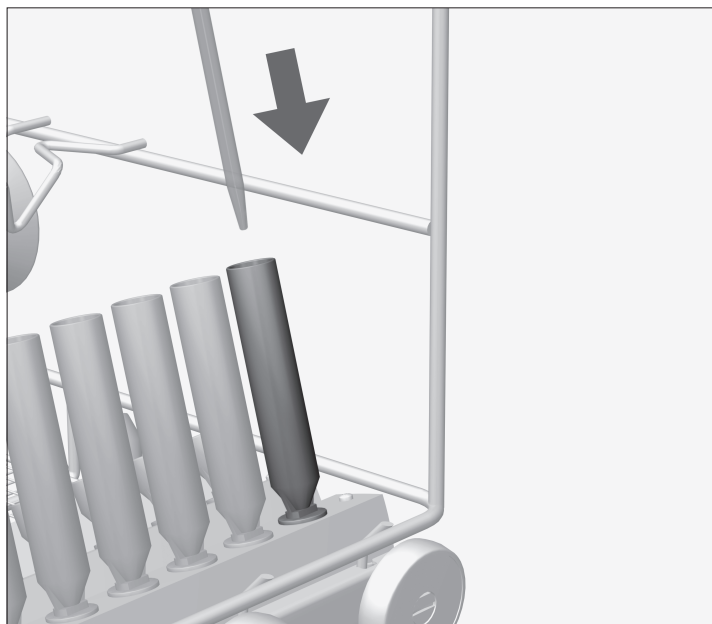

- Sett pipetter med et volum fra 1 til 5 ml i spylehyslene i rekke ③ på injektorvognen.

Spyletrykket kan presse pipettene ut av traktene i rekke ① og ②.