


Mobile injector unit E 406 / 408 for pipettes

Miele
PROFESSIONAL

Items supplied:

Mobile injector unit, H 502, W 533, D 516 mm, E 408 with connection for hot air drying unit and holder for ML/2 magnetic strip (optional extra) for automatic mobile unit recognition (G 7835, G 7836, PG 8535 and PG 8536)

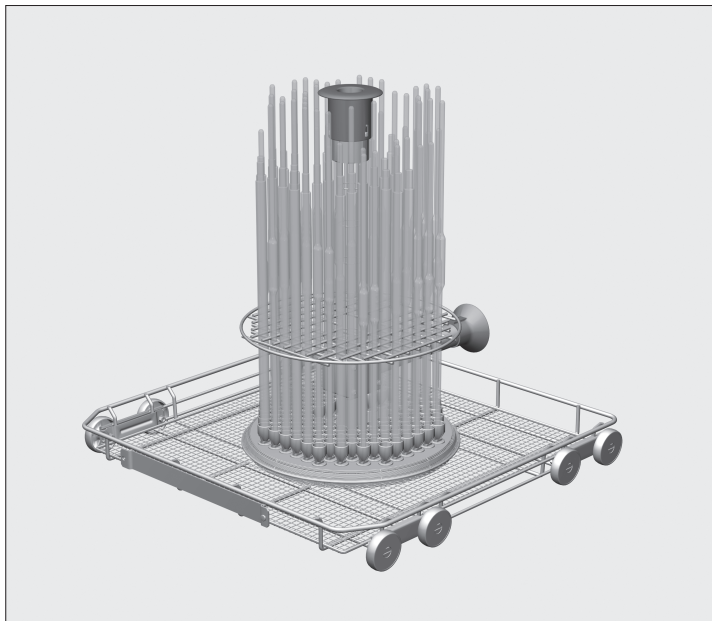

Intended use:

This mobile injector unit can be used for reprocessing pipettes with a maximum length of 450 mm. Load capacity:
E 406: 116 pipettes,
E 408: 96 pipettes.

The holders in the frame measure 16 x 16 mm. These holders can take 10 ml bulb pipettes or measuring pipettes up to 25 ml.

The pipettes must not be allowed to touch each other. To give the pipettes more space, it may be necessary to place fewer pipettes in the injector module.

This basket should only be used for processing laboratory glassware which has been declared as suitable for machine processing by the glassware manufacturer.

⚠ Please observe the Warning and Safety instructions in the Operating Instructions for your washer-disinfector as well as any instructions provided by the glassware manufacturer.


Broken glassware can cause serious injury. All glassware should be properly inspected and tested for cleanliness. Do not rely on a visual check alone.

⚠ Use the LAB PIPETTES programme or increase the water intake for the relevant reprocessing programmes as follows:


G 7836, PG 8536 + 5 litres

G 7835, G 7883, G 7883 CD, G 7893, PG 8535 + 6 litres

Placing pipettes into the injector unit:

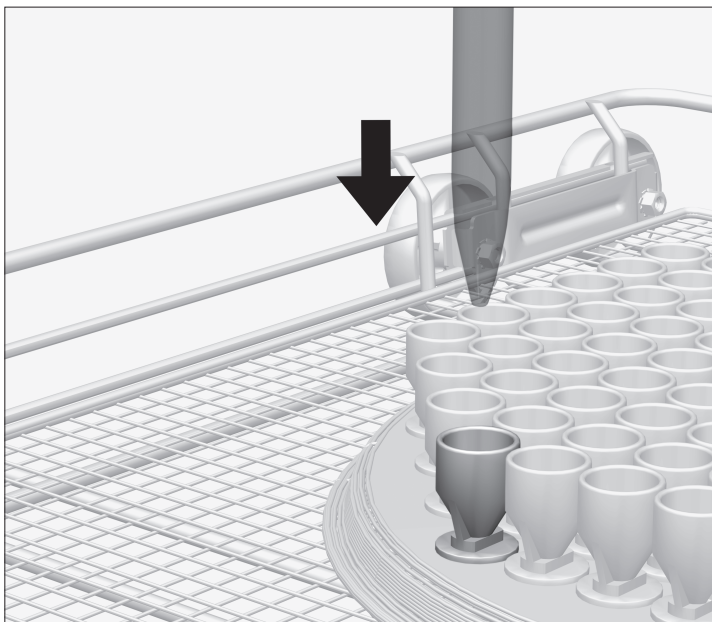

- With the pointed end facing downwards, place each pipette through the grid into the appropriate holder in the base.

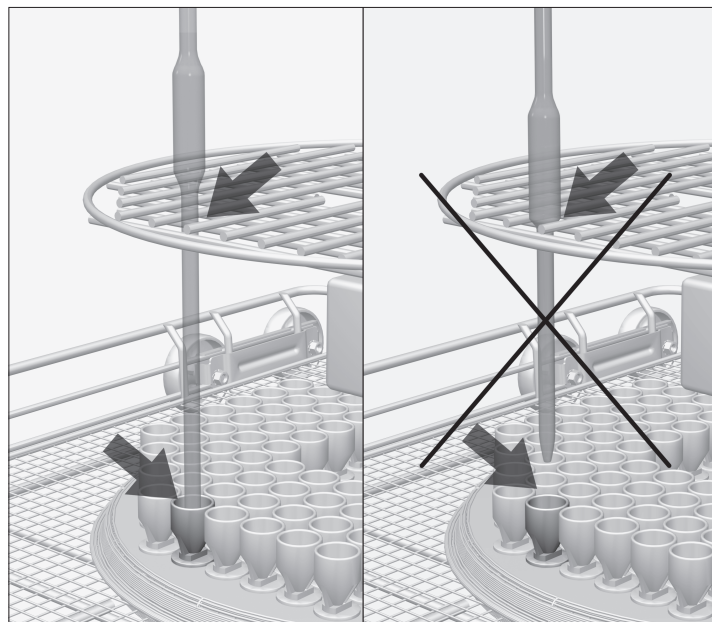

Bulb pipettes:


- If the body of a pipette does not fit through the grid, the lower shaft of the pipette must be long enough for the tip to reach the holder in the base.

Injectorwagen E 406 / E 408 voor pipetten

Miele
PROFESSIONAL

Geleverd:

Injectorwagen, H 502, B 533, D 516 mm, E 408 tevens met aansluiting voor heteluchtdroging en houder voor de magneetstrip ML/2 (niet bijgeleverd) voor de automatische wagenherkenning (G 7835, G 7836, PG 8535 en PG 8536)

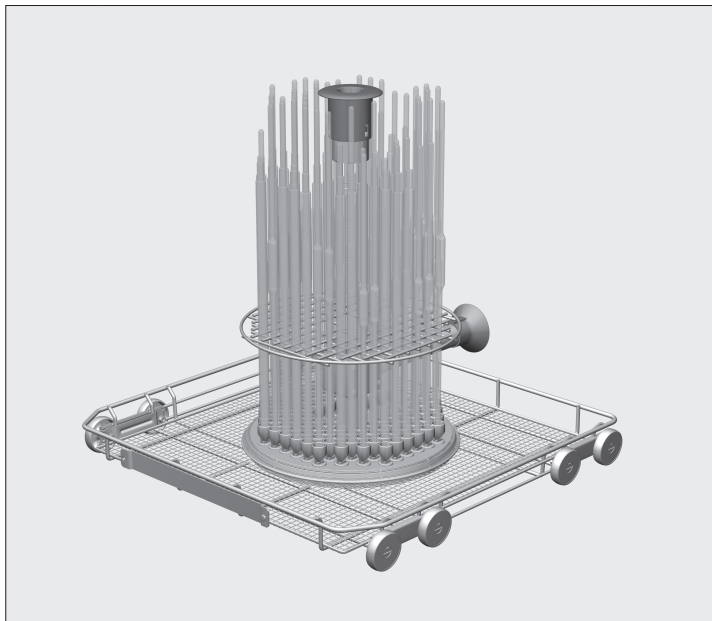

Bestemming:

Met de injectorwagen kunt u pipetten met een hoogte van maximaal 450 mm behandelen. Capaciteit:

E 406: 116 pipetten,

E 408: 96 pipetten.

De vakjes van het rooster hebben een grootte van 16 x 16 mm. In de vakjes kunt u volpipetten tot 10 ml of meetpipetten tot 25 ml plaatsen.

De lichamen van volpipetten mogen elkaar niet raken. Hierdoor kan de capaciteit van de injectorwagen afnemen.

De machinale behandeling is alleen bedoeld voor laboratoriumspoelgoed dat daarvoor door de fabrikant is vrijgegeven.

⚠ Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen met betrekking tot laboratoriumspoelgoed, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing van de automaat, alsmede aan de voorschriften van de fabrikant van het spoelgoed.

Glasbreuk tijdens de behandeling kan gevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben.


Het behandelingsresultaat moet worden gecontroleerd. Een visuele inspectie is niet altijd voldoende!

⚠ Gebruik het programma LAB-PIPETTEN of vergroot in de gebruikte programma's de toegevoerde waterhoeveelheid:


G 7836, PG 8536 = + 5 l

G 7835, G 7883, G 7883 cd, G 7893, PG 8535 = + 6 l

Pipetten inruimen:

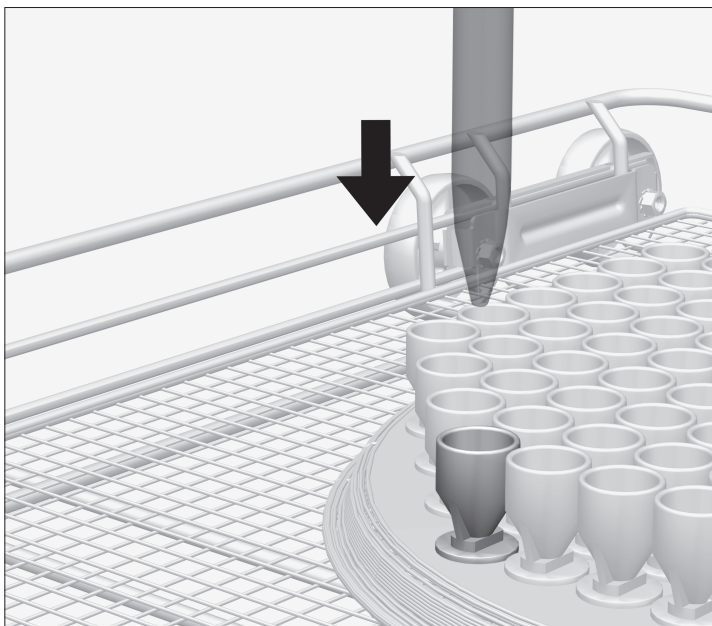

- Plaats de pipetten met de punt naar beneden door het rooster in een trechtertje.

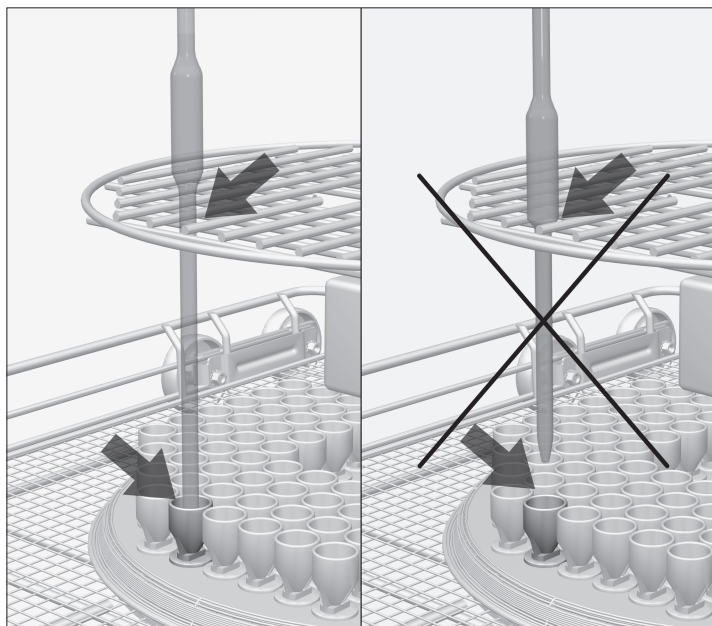

Volpipetten:

- Past het lichaam van de pipet niet door het rooster, dan moet het uitstroomgedeelte zo lang zijn dat de punt van de pipet een trechtertje bereikt.