


Carro inyector E 406 / E 408 para pipetas

Miele
PROFESSIONAL

Volumen de suministro:

Carro inyector, A 502, A 533, F 516 mm, E 408 con conexión adicional para secado con aire caliente y soporte del listón magnético ML/2 (accesorios especiales) para reconocimiento automático del carro (G 7835, G 7836, PG 8535 y PG 8536).

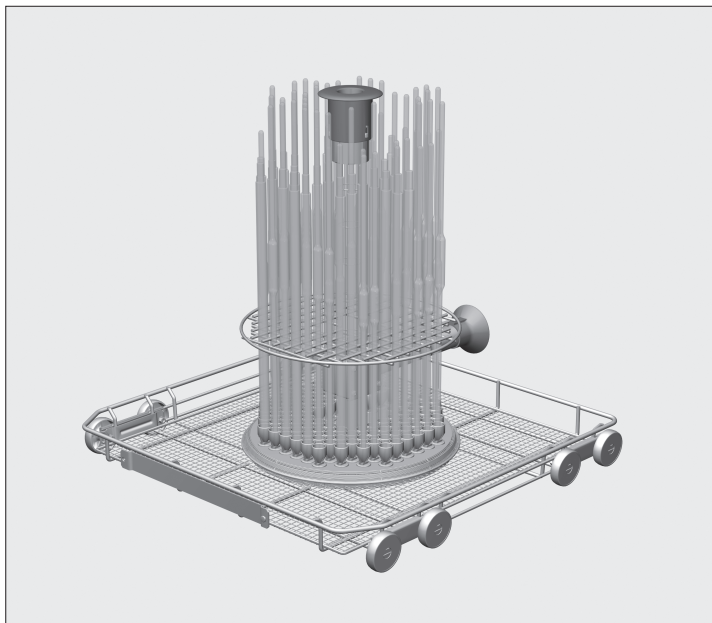

Finalidad:

Con el carro inyector pueden tratarse pipetas con una altura máxima de 450 mm. Capacidad:

E 406: 116 pipetas,

E 408: 96 pipetas.

Los compartimentos de la rejilla de sujeción miden 16 x 16 mm. En los compartimentos se pueden colocar pipetas volumétricas de hasta 10 ml o pipetas aforadas de hasta 25 ml.

Las pipetas no deben tocarse entre sí. De esta forma, la capacidad del carro inyector podría verse reducida.

El tratamiento sólo está indicado para recipientes de laboratorio que han sido declarados por el fabricante como retratables.


⚠ Aténgase en todo momento a las indicaciones y advertencias de seguridad de las instrucciones de manejo de la termodesinfectora para recipientes de laboratorio así como a las indicaciones del fabricante de los recipientes.

La rotura de cristales durante la limpieza puede causar heridas graves.


El resultado de la limpieza deberá someterse, en su caso, a un examen especial, no sólo visual.

⚠ Utilizar el programa LAB PIPETAS o aumentar la cantidad de entrada de agua en el programa utilizado:
G 7836, PG 8536 = + 5 l
G 7835, G 7883, G 7883 cd, G 7893, PG 8535 = + 6 l.

Colocación de las pipetas:

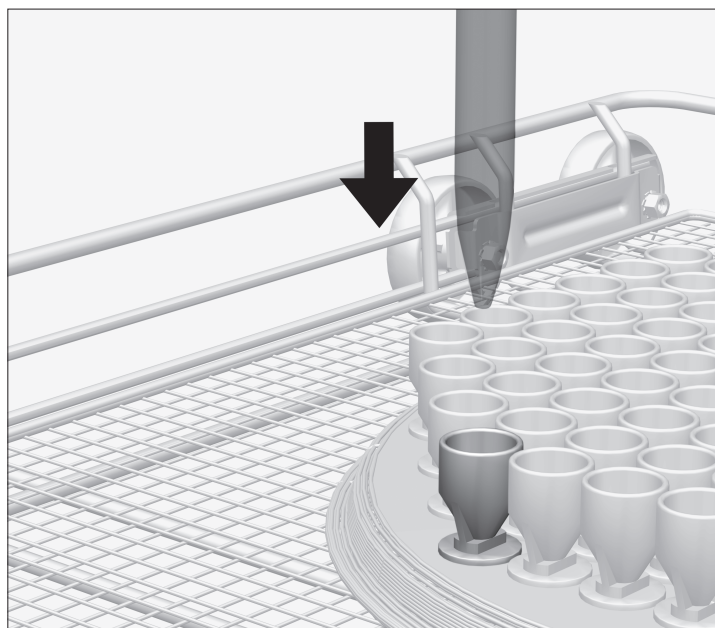

- Coloque las pipetas con la punta hacia abajo en los embudos a través de la rejilla de soporte.

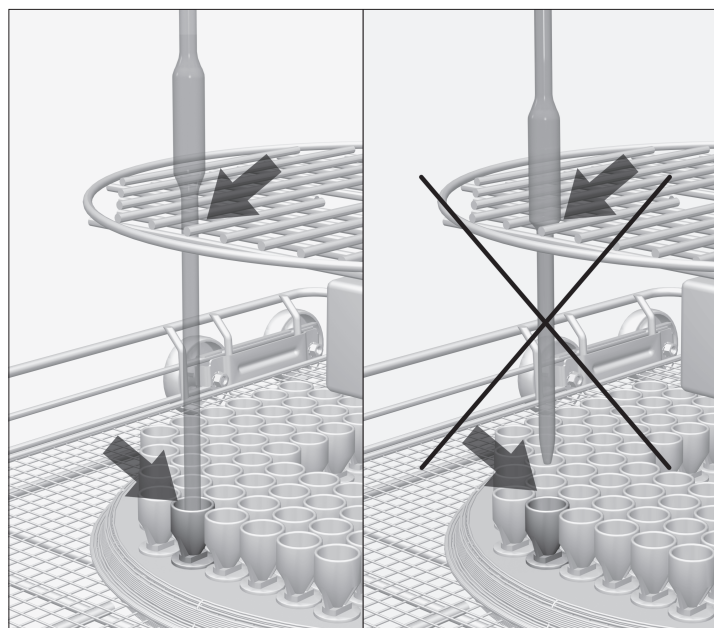

Pipetas volumétricas:


- Si la pipeta no cupiese a través de la rejilla de soporte, el extremo inferior deberá ser lo suficientemente largo para que la punta de la pipeta alcance un embudo.

Carro injector E 406 / E 408 para pipetas

Miele
PROFESSIONAL

Fornecimento:

Carro injector, alt. 502, larg. 533, prof. 516 mm, E 408 adicionalmente com ligação para sistema de secagem por ar quente e suporte para régua magnética ML/2 (acessório opcional) para reconhecimento automático do carro (G 7835, G 7836, PG 8535 e PG 8536)

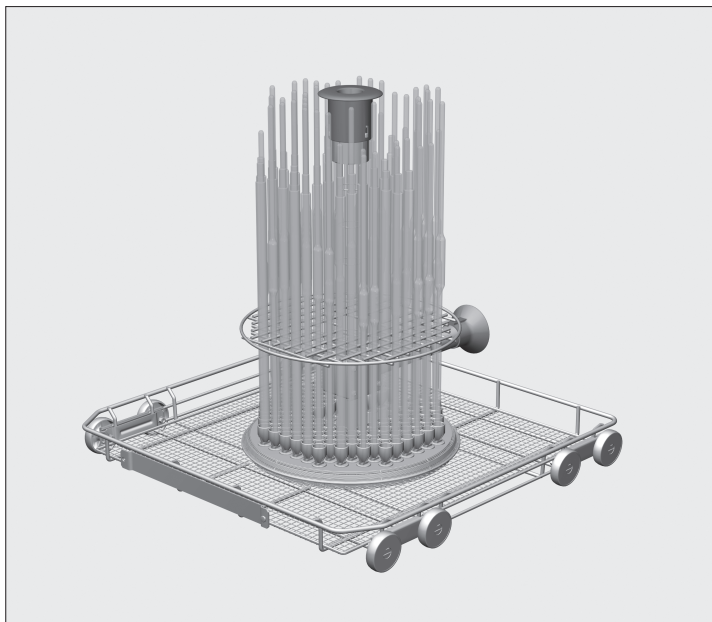

Utilização:

No carro injector podem ser colocadas pipetas até 450 mm de altura máxima. Capacidade:

E 406: 116 Pipetas,

E 408: 96 Pipetas.

O tamanho dos espaços da moldura suporte é de 16 x 16 mm. Nos espaços podem ser colocadas pipetas até 10 ml ou pipetas volumétricas até 25 ml.

As pipetas não devem entrar em contacto umas com as outras. Desta forma a capacidade do carro injector pode ser reduzida.

O tratamento mecânico só é adequado para vidraria de laboratório que seja declarada pelos respectivos fabricante como reutilizável.


⚠ Leia atentamente as medidas de segurança e precauções mencionadas no livro de instruções da máquina de lavar e desinfetar e as indicações do fabricante da vidraria de laboratório.

Vidros partidos durante o processamento podem provocar lesões.


O resultado do tratamento também deve ser controlado adequadamente não só através de controle visual.

⚠ Utilizar o programa LAB-PIPETAS ou aumentar o nível de entrada de água nos programas utilizados.:
G 7836, PG 8536 = + 5 l
G 7835, G 7883, G 7883 cd, G 7893, PG 8535 = + 6 l.

Posicionar as pipetas:

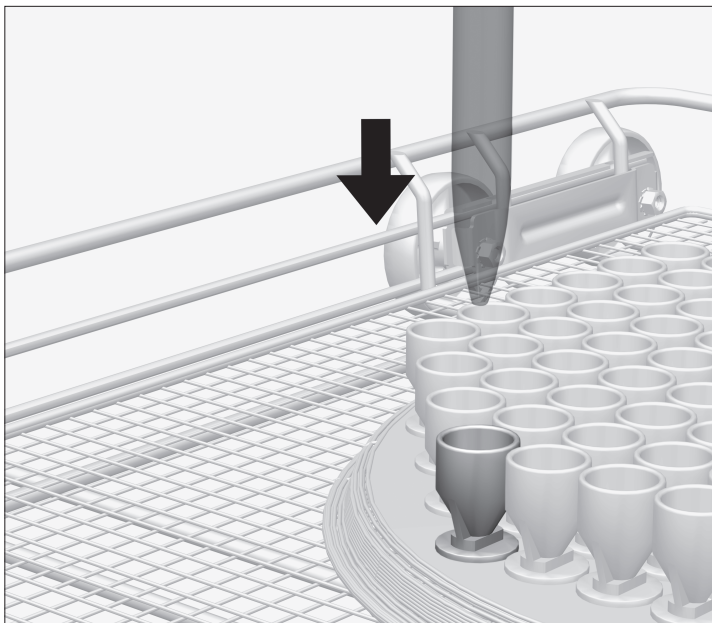

- Encaixe as pipetas através da grelha de fixação, no respectivo funil cónico e com a ponta voltada para baixo.

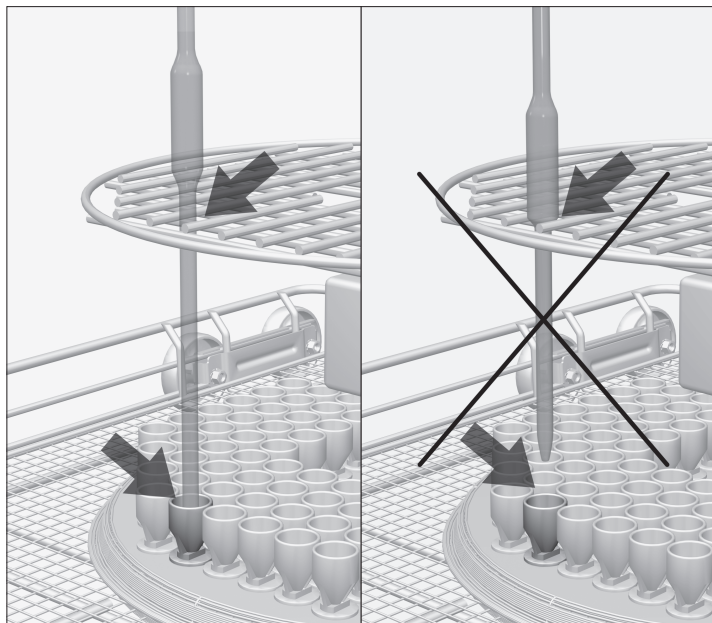

Pipetas volumétricas:

- Se o corpo da pipeta não passar através da grelha de fixação, a outra ponta da pipeta, tem de ser mais longa de forma que encaixe no funil cónico.