

Vogn til OP-instrumenter E 900-4/1 og E 900-5/1



Ved levering medfølger:

Basisvogn E 900-4/1 med fire etager, H 553, B 636, D 790 mm, med magnetliste til automatisk vognregistrering og spulearmsmagneter til spulearmsovervågning (kun PG 8527/28).

Basisvogn E 900-5/1 med fem etager, H 600, B 636, D 790 mm, med magnetliste til automatisk vognregistrering og spulearmsmagneter til spulearmsovervågning (kun PG 8527/28).

Ekstraudstyr

- DIN trådkurv E 142
- Afdækningsnet A2 1/2, 216 x 456 mm

⚠ Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinerne G 7827/28 og PG 8527/28 skal overholdes. Der må kun rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret som egnet til maskinopvask, og de specifikke rengøringsråd skal følges. Det anvendte rengøringsprogram med fortrinsvis termisk desinfektion skal i givet fald afstemmes efter medicinprodukternes materialekvalitet. Det sidste skyl bør altid så vidt muligt foretages med totalt afsaltet vand. Ved anvendelse af den automatiske vognregistrering skal kodningen være tilpasset!

Anvendelsesområde:

I vogn E 900-4/1 kan der rengøres og desinficeres 12 DIN trådkurve eller 8 ISO trådkurve med OP-instrumenter.

I vogn E 900-5/1 kan der rengøres og desinficeres 15 DIN trådkurve eller 10 ISO trådkurve med OP-instrumenter.

Påfyldningshøjde (etagenummerering nedefra)	E 900-4/1 [H x B x D i mm]	E 900-5/1 [H x B x D i mm]
1. etage	112,5 x 593 x 780	80 x 593 x 780
2. etage	112,5 x 593 x 780	80 x 593 x 780
3. etage	112,5 x 593 x 780	80 x 593 x 780
4. etage	114 x 593 x 780	80 x 593 x 780
5. etage	–	73 x 593 x 780

Kontroller ved hver påfyldning/inden hver programstart:

- kan spulearmene drejes frit,
- er dyseåbningerne i spulearmene rene/fri for tilstopninger,
- er de indskubbede vogne koblet rigtigt til vandforsyningen på rengørings-/desinfektionsmaskinen.


Overhold altid det påfyldningseksempel, der er fastlagt i valideringen.




E 900-4/1




E 900-5/1

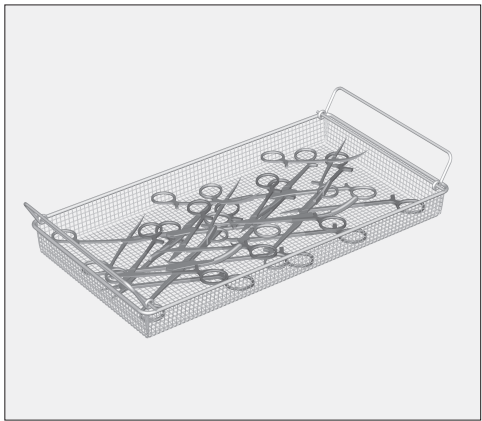

- Leddelte instrumenter skal anbringes i trådkurvene i åben tilstand (minimering af den flade, der er dækket).

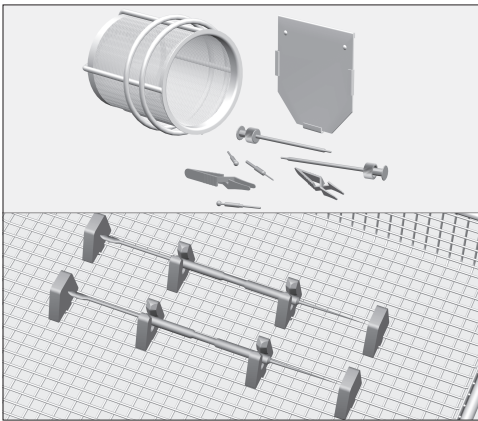

- Lette instrumenter såsom bulldogklemmer eller smådele, som let kan kastes omkring af skyllemekanikken, sikres med lukkbare indsatser som f.eks. E 473 eller silikoneholdere som f.eks. E 476.

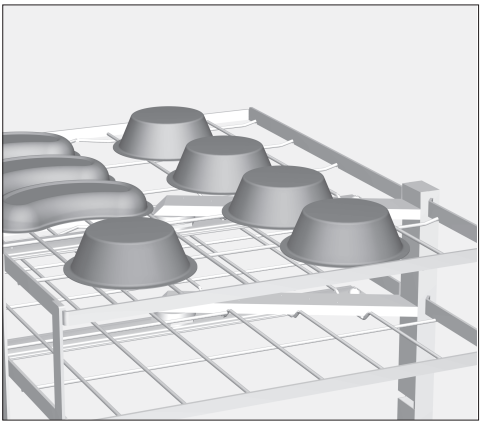

- Beholdere, f.eks. dåser, bægre og nyreskåle, anbringes med åbningen nedad, således at de ikke hindrer rengøringen af instrumenterne og ikke væltes om af skyllemekanikken.

Hvis beholdere anbringes med åbningen opad, sker der en medrivning af skyllevand, hvilket kan forringe resultatet af klarskyllet.

Vogn for OP-instrumenter E 900-4/1 og E 900-5/1



Standardlevering:

Grunnvogn E 900-4/1 med 4 nivåer, H 553, B 636, D 790 mm, med en magnetlist (holder) for automatisk vogngjenkjenning og spylearmmagneter for spylearmovervåkning (kun PG 8527/28).

Grunnvogn E 900-5/1 med fem nivåer, H 600, B 636, D 790 mm, med en magnetlist for automatisk vogngjenkjenning og spylearmmagneter for spylearmovervåkning (kun PG 8527/28).

Tilleggsutstyr

- E 142 DIN-instrumentrist
- Dekknett A2 1/2, 216 x 456 mm

⚠ Kapitlet "Sikkerhetsregler og advarsler" i bruksanvisningen for Rengjørings- og desinfeksjonsautomatene G 7827/28 og PG 8527/28 må absolutt følges. Klargjør bare instrumenter/medisinprodukter, som av produsenten er deklarerert som mulig å klargjøre for gjenbruk maskinelt, og følg produsentens anvisninger for klargjøring. Klargjøringsprogrammet hvor termisk desinfeksjon foretrekkes, må eventuelt avstemmes til materialkvaliteten på medisinproduktene. Den siste skylingen skal helst skje med demineralisert vann. Ved bruk av automatisk vogngjenkjenning må kodingen være tilpasset!

Anvendelsesområde:

I vognen E 900-4/1 kan 12 DIN-instrumentrister eller 8 ISO-instrumentrister med OP-instrumenter rengjøres og desinfiseres.

I vognen E 900-5/1 kan 15 DIN-instrumentrister eller 10 ISO-instrumentrister med OP-instrumenter rengjøres og desinfiseres.

Plasseringshøyde (nivånummerering nedenfra)	E 900-4/1 [H x B x D i mm]	E 900-5/1 [H x B x D i mm]
Nivå 1	112,5 x 593 x 780	80 x 593 x 780
Nivå 2	112,5 x 593 x 780	80 x 593 x 780
Nivå 3	112,5 x 593 x 780	80 x 593 x 780
Nivå 4	114 x 593 x 780	80 x 593 x 780
Nivå 5	–	73 x 593 x 780

Kontroller ved plasseringen/før hver programstart:

- kan spylearmene rotere fritt,
- er dyseåpningene i spylearmene rene/uten tilstoppinger,
- er de vognene som er skjøvet inn riktig koblet til rengjørings-/desinfeksjonsautomatens vannforsyning.


Overhold alltid det plasseringsmønsteret som er fastsatt innenfor valideringen.




E 900-4/1




E 900-5/1

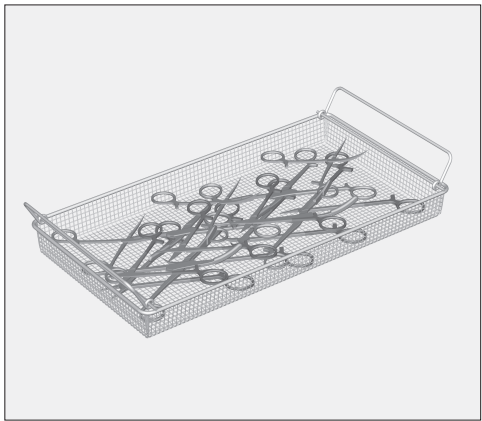

■ Leddete instrumenter skal være åpne i instrumentristene.

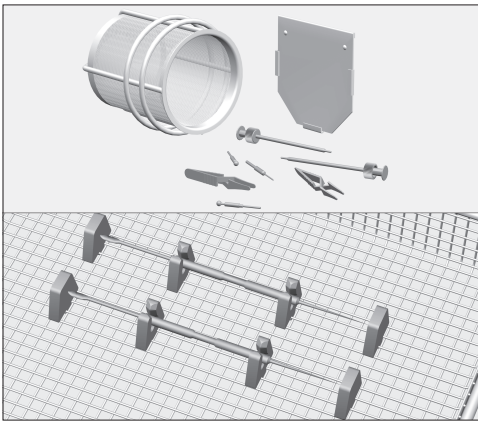

■ Lette instrumenter, f.eks. bulldogklemmer eller smådeler som lett kan bli kastet rundt under vaskingen, kan sikres med innsatser som kan lukkes, f.eks. E 473/1 eller silikonholdere, f.eks. E 476.

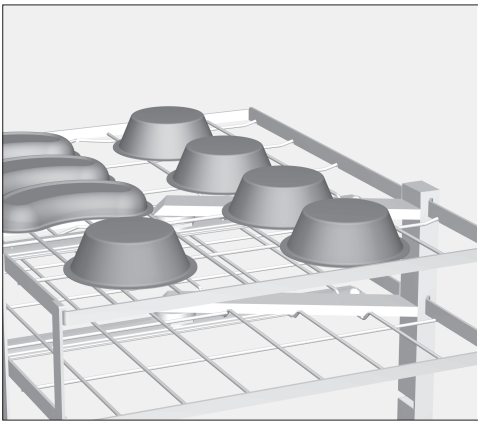

■ Boller, pussbekken skal plasseres med åpningene ned, slik at de ikke hindrer rengjøringen av instrumentene og ikke blir snudd under vaskingen.

Hvis boller og pussbekken blir plassert med åpningene oppover, vil dette påvirke vaskevannets bevegelse i maskinen og etterskyllingsresultatet kan bli dårligere.