

Catalogue produits

Solutions pour cabinets dentaires

Miele Professional. Immer Besser. Toujours mieux.

Édition 2026

360 PRO




Prendre soin de nos clients
avec les solutions les plus fiables et les plus durables



Avec Miele Professional, vous choisissez des solutions fiables qui sont garantes de qualité et de longévité.

En tant qu'entreprise familiale dirigée par la quatrième génération, Miele reste fidèle à sa responsabilité vis-à-vis de ses produits et processus, de ses collaborateurs et de ses partenaires commerciaux, ainsi que de la protection de nos ressources naturelles. Cela se reflète dans les matériaux que nous choisissons, ainsi que dans la conception et la fabrication de nos appareils. Tous nos clients bénéficient d'innovations « Made in Germany » qui établissent des normes dans toute l'industrie, ainsi que d'une conception de produits primée pour leur ergonomie et leur fonctionnalité, associée à une basse consommation et à de faibles coûts de fonctionnement.

Miele Professional développe des solutions sur mesure pour des publics spécifiques, qui inspirent nos clients tout en simplifiant les flux de travail et en rationalisant les processus. Notre principe directeur « Immer Besser » (« Toujours mieux ») a été notre ADN durant les 125 dernières années et il reste au cœur de nos activités, garantissant la fiabilité et la qualité de toutes nos solutions.

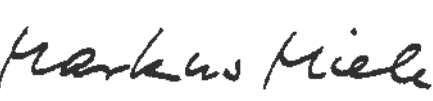
Dr Markus Miele
Directeur général et copropriétaire
Miele & Cie. KG


Dr Reinhard Zinkann
Directeur général et copropriétaire
Miele & Cie. KG

Découvrir nos solutions

Avant-propos 2

Développement durable 3

Solutions 360PRO 4

Miele MOVE et Miele Service 5

Laveurs-désinfecteurs

Laveur-désinfecteur pour plans de travail 10–14

Laveur-désinfecteur CompactLine 16–22

Laveurs-désinfecteurs ExpertLine 24–30

Laveurs-désinfecteurs SlimLine 31–35

Composants pour laveurs-désinfecteurs

Exemples de chargements 38–40

Paniers 41–43

Supports et buses d'injection 44–47

Compléments et modules 48–54

Système de plateaux et de containers 55–58

Composants 59–69

Produits chimiques ProCare Dent 70–78

Stérilisateurs compacts

CUBE, CUBE X 81–85

Composants 86–88

Solutions numériques 90–98

Liste d'articles 100

Liste des abréviations 101



Toutes les informations sont disponibles ici :
www.miele-professional.fr




Nos engagements en faveur de la planète

La course pour sauver notre unique planète ne cesse de s'accélérer, à l'image de notre volonté de faire évoluer nos ambitions.
Par ces engagements, nous avons pour objectif de poursuivre sur la voie que nous avons déjà tracée :



Développement durable à tous les niveaux
Nous nous efforçons en permanence de faire du développement durable un composant essentiel de chaque phase de la durée de vie d'un produit ou d'un service, tout au long de la chaîne de valeur et dans les logements et les entreprises de nos clients.

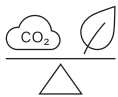

Fabriquer des appareils qui ne laissent aucune trace avec l'objectif de les rendre 100 % neutres en carbone
Miele a pour mission de fabriquer les meilleurs produits et services avec le moins d'impact possible sur l'environnement, l'objectif ultime étant de garantir un bilan carbone neutre à 100 %.



Donner une nouvelle vie à nos anciens appareils pour éliminer les déchets
Nous travaillons à créer une économie circulaire avec une philosophie zéro déchet, où tous les matériaux utilisés dans nos appareils sont réintroduits dans la boucle à la fin de leur durée de vie.

360PRO – La solution globale et durable pour faire face à vos enjeux quotidiens

Vous pouvez compter sur notre assistance sans égal lorsqu’il est question de vos besoins de traitement, grâce à nos solutions holistiques éprouvées. Miele Professional vous offre les solutions idéales pour répondre aux nombreuses exigences de votre entreprise. De la planification au calcul, en passant par la mise en œuvre et la maintenance, nous vous assurons de pouvoir vous focaliser totalement sur votre travail quotidien, avec une tranquillité d’esprit absolue. **C’est ce que nous appelons la solution 360PRO.**



Des solutions de service sur lesquelles vous pouvez compter

Notre service PROtect combine des services complets, un contrôle maximal des coûts et une disponibilité facile des pièces de rechange. Nos techniciens spécialement formés effectuent et documentent les travaux d’entretien conformément aux modèles et aux normes Miele et dans le respect total des prescriptions légales. Cela garantit la sécurité des processus et préserve durablement la valeur de vos appareils. Nous fournissons des conseils transparents spécifiques à votre domaine d’activités, nous coordonnons les rendez-vous et nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange appropriées, même 15 ans après l’arrêt de la production en série des appareils. Notre réseau de services complet protège vos appareils et votre entreprise, vous procurant ainsi une parfaite tranquillité d’esprit.



En savoir plus sur PROtect : www.miele-professional.fr/protect



Miele MOVE est synonyme de numérisation et de progrès.

Organisez vos tâches quotidiennes de manière encore plus simple, structurée et efficace avec les solutions numériques de Miele Professional. Commencez avec le module de base gratuit Miele MOVE Connect et, si nécessaire, ajoutez des modules supplémentaires avec des fonctions étendues, spécialement conçues pour votre secteur d’activité. Faites un pas vers l’avenir numérique avec nous. Pour plus d’informations : www.miele-move.com

La salle de stérilisation – Une solution parfaite pour les laveurs-désinfecteurs, les stérilisateurs compacts et la documentation

Exemples d'installations



Les principaux fabricants d'instruments recommandent Miele

Miele Professional est synonyme d'un traitement sûr et hygiénique des instruments, tout en assurant un maintien de valeur et une préservation des matériaux optimaux. C'est pour cela que les principaux fabricants d'instruments recommandent l'utilisation de systèmes Miele pour le traitement de leurs instruments.



Programme de nettoyage Vario TD Dental éprouvé

Le programme Vario TD Dental développé par Miele est idéal pour le traitement de routine de tous les instruments thermorésistants conformément à la norme DIN EN ISO 15883. Cette approche est particulièrement douce pour les matériaux et elle est recommandée notamment pour le traitement des instruments rotatifs. Le séchage à l'air chaud sur le laveur-désinfecteur PWD 8692 assure que les instruments sont séchés soigneusement à la fin du processus.



Taille de la pièce : environ 300 x 250 cm (longueur x largeur)



Taille de la pièce : environ 300 x 200 cm (longueur x largeur)



Taille de la pièce : environ 300 x 150 cm (longueur x largeur)



Taille de la pièce : environ 250 x 250 cm (longueur x largeur)

Salle de stérilisation avec plan de travail en L

Une salle d'hygiène en L offre un espace de dégagement et de rangement supplémentaire. Le côté contaminé avec l'évier et le laveur-désinfecteur est séparé encore plus nettement du côté propre avec le stérilisateur compact, la traçabilité et l'imprimante d'étiquettes grâce à la configuration en angle.

Salle de stérilisation avec deux plans de travail séparés

Il s'agit de la solution optimale pour les cabinets disposant d'un grand espace et de plusieurs praticiens. Le côté contaminé avec l'évier et le laveur-désinfecteur est séparé physiquement du côté propre avec le stérilisateur, la traçabilité et l'imprimante d'étiquettes. Les armoires des deux côtés créent de l'espace sur le plan de travail et réduisent davantage le risque de contamination croisée.

Salle de stérilisation avec plan de travail continu

Dans ce cas, le traitement est effectué sur un plan de travail continu. Le côté contaminé comporte un évier et un laveur-désinfecteur. Un panneau en verre peut être utilisé pour séparer le côté propre, qui comporte un stérilisateur compact, une traçabilité et une imprimante pour les étiquettes d'instruments à stériliser.



Taille de la pièce : environ 300 x 150 cm (longueur x largeur)



Laveurs-désinfecteurs

Laveur-désinfecteur pour plans de travail

PWD 8531

Laveur-désinfecteur CompactLine

PWD 8682 C

Laveurs-désinfecteurs ExpertLine

PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692

Laveurs-désinfecteurs SlimLine

PWD 7121, PWD 7122

Laveur-désinfecteur pour plans de travail

Avantages Miele



Plus d'efficacité pour les petits cabinets


- En version pour plan de travail, à poser ou à encastrer — Une solution pour chaque cabinet dentaire
- Taille de la cuve adaptée à la salle d'hygiène pour convenir au traitement dans les petits cabinets
- Capacité : 12 buses d'injection et kits d'instruments* pour un maximum de 70 patients

* Kit d'instruments composé d'un miroir dentaire, d'une sonde et d'une pince



Convivialité

- Boutons d'accès direct pour accéder rapidement aux programmes
- Écran couleur 4"
- Contrôle visuel grâce à la porte plein verre
- Surface en verre facile à nettoyer

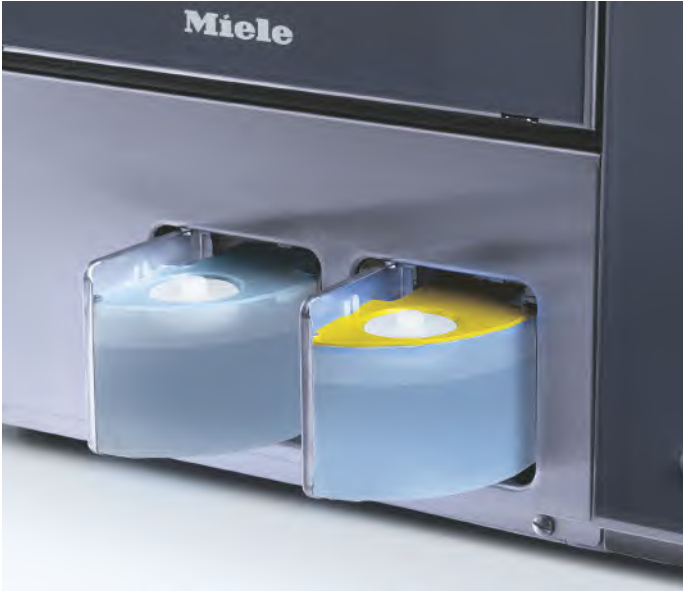

Dosage simple

- Dosage automatique et simple des produits liquides grâce à deux pompes de dosage
- Sur le modèle PWD 8531, les produits chimiques sont dosés à partir de réservoirs de produits chimiques intégrés pendant les phases de traitement appropriées
- Le neutralisant n'étant pas recommandé sur cet appareil, les deux produits de procédé à utiliser sont des détergents.



Séchage minutieux

- Solution idéale pour les instruments avec lumen
- Séchage à l'air chaud DryPlus avec un filtre HEPA H 14 en amont (classe de filtration : 99,995 %)



Plus de sécurité

- Qualité éprouvée de Miele bénéficiant de l'expérience significative de Miele en technique d'utilisation
- Systèmes indépendants pour la surveillance continue des paramètres de processus, notamment la pression et la température
- Traçabilité complète



Haute qualité

- Adoucisseur d'eau intégré pour un résultat de lavage optimal
- Séchage à l'air chaud DryPlus pour préserver la valeur des instruments
- Triple filtration de l'eau pour un résultat de lavage parfait
- L'inox de haute qualité utilisé dans la cuve, sur les bras de lavage et sur les filtres garantit une longue durée de vie

Laveur-désinfecteur pour plans de travail

Appareil posable
PWD 8531



Laveurs-désinfecteurs	PWD 8531
Modèle et conception	Appareil posable
Dimensions extérieures : H/l/P [mm]	535 x 570(+75**) x 575
Poids [kg]	55
Habillage extérieur	Inox
Porte plein verre	◆
Touch on Glass, interface utilisateur avec boutons d'accès direct et écran couleur de 4"	◆
7 programmes	◆
Affichage de déroulement de programme et signal sonore à la fin du programme	◆
Interface série RS 232	◆
Raccordement électrique	230 V AC 50 Hz, y compris fiche avec mise à la terre
2 raccordements à l'eau	1 x raccordement à l'eau froide et 1 x raccordement à l'eau déminéralisée
Adoucisseur d'eau intégré pour eau froide et eau chaude, 65 °C max.	◆
2 pompes de dosage	1 x pour le détergent liquide et 1 x pour le produit de rinçage/neutralisation
Séchage	Séchage à l'air chaud DryPlus intégré

Article	Habillage extérieur/ Bandeau de commande	Largeur de l'appareil	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe en kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Variante(s) de tension possible(s) – Puissance de chauffe en kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Réf. mat.	N° d'art.	EAN
PWD 8531 [WS DSN IMS DWC]	SST	645 mm	230 V AC 50 Hz 16 A	–	10957230	63853106ZER	4002516040484

Durées de cycle et consommation	Lavage/Désinfection				Séchage	
	Durée de cycle (min)	EF (l)	DI (l)*	Énergie (kWh)	Durée de cycle (min)	Énergie (kWh)
Vario TD Dental	49	18	6	1,2	11	0,1
Vario TD Intensive	58	19	6	1,3	11	0,1
* L'utilisation d'eau déminéralisée est recommandée pour le rinçage final. Sans utilisation d'eau déminéralisée, la consommation d'eau froide augmente de 6 l.						
** Largeur de l'appareil, filtre HEPA inclus						

Équipez votre laveur-désinfecteur avec :

- Paniers et composants à partir de la page 38
- Produits chimiques à partir de la page 70
- Traçabilité à partir de la page 90

Caractéristiques techniques

PWD 8531

Modèle et conception	PWD 8531
Appareil posable	◆
Appareil encastrable/posable avec couvercle	–
Commandes/Programmes	
7 programmes	◆
Vario TD Dental	◆
Vario TD Intensive	◆
Remplissage Dos1	◆
Remplissage Dos3	◆
Touch on Glass	◆
Boutons d'accès direct	◆
Programmabilité	◆
Affichage du temps restant	◆
Affichage de déroulement de programme	◆
Signal sonore à la fin du programme	◆
Options de mise en réseau	
Interface série RS 232	◆
Raccordements à l'eau	
1 x eau froide, pression d'eau de 2 à 8 bar (200–800 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆
1 x eau déminéralisée, pression d'eau de 1 à 8 bar (100–800 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆
2 x tuyaux d'arrivée d'eau avec raccord 3/4", L = env. 2,0 m	◆
Pompe de circulation [Qmax. l/min]	90
Pompe de vidange Ø 22, hauteur de refoulement : max. 80 cm	◆
Adoucisseur d'eau intégré pour eau froide et eau chaude, 65 °C max.	◆
Dureté maximale admissible de l'eau avec adoucisseur d'eau	6,1 mmol/l
Raccordement électrique	
230 V AC 50 Hz, câble d'alimentation électrique d'environ 2,0 m x 3 x 2,5 mm² y compris fiche de mise à la terre	◆
Chauffage [kW]	2,6
Puissance totale de raccordement [kW]	2,75
Fusible [A]	1 x 16
Systèmes de dosage	
1 pompe de dosage pour détergent liquide	◆
1 pompe de dosage du produit de rinçage	◆
Condenseur de vapeur	◆
Dispositif de séchage/Ventilateur radial	
Ventilateur [kW]	0,1
Batterie de chauffage [kW]	0,75
Puissance totale de raccordement [kW]	0,8
Puissance de ventilation [m³/h]	35
Réglage de la température par incréments de 1 °C [°C]	◆
Réglage de l'heure par incréments d'une minute [min]	◆
Filtre à particules/Filtre HEPA/Classe de filtration (DIN EN 1822)/Durée de vie du filtre	99,995
Durée de vie du filtre HEPA en h	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission sur le lieu de travail: <70 dB (A) re 20 µPa	◆
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,83
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures : H/l/P [mm]	535 + 20 x 570 (+75) x 575
Dimension de la cuve : H/l/P [mm]	375 x 415 x 480
Poids [kg]	55
Habillage extérieur, porte	
Habillage extérieur	Inox
Porte plein verre	◆
Respect des normes	
DIN EN ISO 15883-1/2, EN 61010-2-040	◆
Certificats d'essais	
IP 21	◆
CE 0051	◆

Aperçu des composants

PWD 8531

Article	Description	Référence mat.
APWD 060	Panier, pour différents compléments et paniers à mailles.	11017140
APWD 061	Panier, pour poignées, différents compléments et paniers à mailles.	11017150
APWD 063	Complément, pouvant accueillir jusqu'à 8 plateaux ou cassettes.	11017170
APWD 064	Cache, pour la fermeture hermétique des supports inoccupés par des instruments rotatifs.	11017180
APWD 067	Adaptateur, partie supérieure pour adaptateurs pour le traitement d'instruments rotatifs.	11017200
APWD 068	Adaptateur, partie inférieure à utiliser sur une barre à injection de panier à injection APWD 061.	11017210
APWD 070	Adaptateur en silicone, pour maintenir des instruments rotatifs, Ø 19–21 mm	11017230
APWD 071	Adaptateur en silicone, pour maintenir des instruments rotatifs, Ø 14–17 mm	11017240
APWD 069	Filtre, empêche les particules de pénétrer dans les instruments rotatifs.	11017220
APWD 072	Buse d'injection, pour le traitement optimal d'instruments avec lumen, par ex. des aspire-salive.	11127460
APWD 073	Adaptateur, pour buses d'injection APWD 072 supplémentaires dans un panier APWD 061.	11127500
A 822	Adaptateur pour l'utilisation de A 814/1 dans les paniers à injection des appareils PWD 8531.	11691970
E 197	Complément, pour instruments divers.	7984090
E 807	Complément, pour 3 paniers à mailles ou haricots.	7984220
E 473	Filtre avec couvercle, pour divers petits composants.	10623720
E 491	Complément, pour instruments rotatifs.	12686260
E 802/1	Complément, pour instruments verticaux divers.	7984170
A 830/1	Complément, pour extrémités de travail de miroirs dentaires séparables.	11729480
E 521/2	Complément, pour 7 pinces d'extraction, orthodontiques ou orthopédiques pour molaires.	7476430
E 522/1	Complément, pour 9 porte-empreintes dentaires.	6697010
E 147/1	Complément, pour 10–12 gobelets.	4746620
E 801/1	Complément, pour 8 gobelets.	5673820
E 337/1	Complément, pour instruments verticaux.	7984130
E 143	Complément, pour instruments divers.	3830310
A 817	Douille de rinçage, pour un nettoyage optimal des instruments ORL, par exemple.	10706260
E 468	Complément, pour différents ustensiles.	5043640
E 476	Support, pour micro-instruments de 4–8 mm de diamètre.	5692400
E 520	Complément, pour instruments pour canal radiculaire.	5409080
A 813/1	Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	11763880
A 814/1	Support, pour le traitement d'embouts pour Air Scaler et Piezo Scaler.	11691870
A 815	Buse, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	10619690



Laveur-désinfecteur CompactLine

Avantages Miele

CompactLine



Solution optimisée et compacte

- Traitement efficace dans un design peu encombrant grâce à un niveau de chargement et un tiroir Push2open pour l'intégration des produits chimiques
- Ouverture automatique avec la technologie EcoDry pour un séchage durable
- Idéal pour les cabinets avec un faible volume d'instruments – répond aux exigences de la pratique quotidienne avec la commodité d'un appareil entrée de gamme

Rapide et intuitif

- Programme Vario TD Dental court : en seulement 30 minutes pour tous les instruments dentaires
- Écran tactile couleur de 7 pouces pour un accès facile aux programmes favoris, une meilleure visibilité et une plus grande facilité d'utilisation
- L'état des programmes et la validation des cycles sont clairement affichés à l'écran

Développement durable

- Des durées de cycle courtes et des technologies telles que la pompe à vitesse variable garantissent une utilisation efficace des ressources
- Le cadre de maintien des produits chimiques incline les bidons de produit pour améliorer la vidange résiduelle
- Mode d'emploi numérique et emballage respectueux de l'environnement

Plus de longévité

- Testé pour 15000 heures de fonctionnement et disponibilité des pièces de rechange pendant au moins 15 ans après l'arrêt de la production en série
- Les programmes spéciaux garantissent des cycles de vie prolongés pour les instruments dentaires



Pratique et flexible

- L'éclairage LED à l'intérieur assure une visibilité parfaite pour un chargement facile
- Grâce à une large gamme de composants, le modèle CompactLine offre une solution de traitement des instruments de toutes les disciplines dentaires
- Le réglage de la langue peut être modifié à tout moment à l'aide d'un bouton situé sur l'écran, ce qui est idéal pour les équipes multilingues

Performant et fiable

- La pompe à vitesse variable adapte la pression d'eau à chaque phase du programme de lavage, garantissant un nettoyage en douceur, en profondeur et économe en eau
- Des capteurs intégrés contrôlent le fonctionnement des bras de lavage et la pression de lavage pour garantir des performances fiables
- Les filtres à plusieurs étages garantissent une hygiène accrue et un fonctionnement plus sûr
- Conforme à toutes les normes internationales pertinentes, y compris la norme DIN EN ISO 15883

Plus de numérique

- Intégration rapide et facile dans le réseau du cabinet
- Protection de la traçabilité grâce à des droits d'accès programmables individuellement

Accompagnement

- L'accès facile aux composants facilite les opérations de maintenance
- Des séquences pratiques s'affichent à l'écran en fonction des besoins pour aider l'utilisateur à résoudre les problèmes

Laveur-désinfecteur CompactLine

Appareil posable, encastrable
PWD 8682 C



Certification :
Les laveurs-désinfecteurs CompactLine sont conformes au règlement (UE) 2017/745 (MDR).

Laveurs-désinfecteurs	PWD 8682 C DST
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures : H/l/P [mm]	835/600/600
Dimensions du panier utilisable H/l/P [mm]	280/490/498
Poids [kg]	81
Niveau de chargement	1
Dimensions du compartiment	
Surface utile H/l/P [mm] pour 2 bidons de 5 l	240/305/285
Surface utile H/l/P [mm] pour 1 bouteille de 1 l	240/160/125
Durée de cycle/Vario TD¹ [min]	33
Durée de cycle/Vario TD court¹ [min]	30
Instruments rotatifs [capacité]	22
Canule salivaire [capacité]	22
Séchage	EcoDry
Adoucisseur d’eau	◆
Condenseur de vapeur	◆

- Équipez votre laveur-désinfecteur avec :**
- Paniers et composants à partir de la page 38
 - Produits chimiques à partir de la page 70
 - Traçabilité à partir de la page 90

Kit d'adaptation	Référence mat.	N° d'art.	EAN
pour l'utilisation de produits de lavage et d'agents neutralisants dans les appareils équipés de deux pompes de dosage (réglage d'usine standard : produit de lavage et produit de rinçage dans les appareils équipés de deux pompes de dosage)	12970760	69747060D	4002516978572

Caractéristiques techniques

Appareil posable, encastrable
PWD 8682 C

CompactLine

Laveur-désinfecteur	PWD 8682 C DST
Appareil encastrable/posable avec couvercle	◆
Pompe de circulation [Qmax. l/min]	500
Commandes/Programmes	
M Touch Flex/Nombre de programmes	13
Emplacements de programmes libres	5
AutoClose – Verrouillage de porte automatique	◆
LED pour l'éclairage de la cuve	2
Signal sonore à la fin du programme	◆
Module de communication Ethernet	En option
Module de communication Wi-Fi	◆
Raccordements à l'eau	
1 x eau froide, pression d'eau de 2 à 10 bar (200–1000 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆
1 x eau déminéralisée, pression d'eau de 2 à 10 bar (200–1000 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆
1 x eau chaude, pression d'eau de 2 à 10 bar (200–1000 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆
Nombre de tuyaux d'arrivée d'eau, 1/2" avec raccord 3/4", L = env. 2,0 m	3
Pompe de vidange Ø 22, hauteur de refoulement : max. 100 cm	◆
Système Aquasécurité (WPS)	◆
Raccordement électrique	
3N 400 V AC 50 Hz convertible en 230 V AC 50 Hz, (commutation 230 V / 16 A), câble d'alimentation électrique, approx. 2,0 m, 5 x 2,5 mm² avec prise	◆
Chauffage [kW]	8,5
Pompe de circulation [kW]	0,8
Puissance totale de raccordement [kW]	9,3
Fusible [A]	3 x 16
Systèmes de dosage	
1 pompe de dosage pour le détergent liquide (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des bidons de produit d'une hauteur maximale de 202 mm)	◆
1 pompe de dosage pour l'agent neutralisant (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des bidons de produit d'une hauteur maximale de 202 mm)	◆
1 pompe de dosage pour le produit de rinçage (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des bidons de produit d'une hauteur maximale de 202 mm)	◆
Adoucisseur d'eau	
Pour eau chaude et froide, max. 65 °C	◆
Condenseur de vapeur	
Aérosol	◆
Options d'habillage extérieur	
Blanc lotus (LW)	◆
Inox	◆
Respect des normes	
DIN EN ISO 15883-1/2, EN 61010-2-040, EN 61326-1	◆
Certificats de conformité	
IP 21	◆
CE 0297	◆
EU 2017/745 (MDR)	◆

- Équipez votre laveur-désinfecteur avec :**
- Paniers et composants à partir de la page 38
 - Produits chimiques à partir de la page 70
 - Traçabilité à partir de la page 90

Durées de cycle et consommation

PWD 8682 C

PWD 8682 C DST (appareil avec trois pompes de dosage)	Lavage/Désinfection					Séchage	
	Durée de cycle	Eau froide	Eau chaude	Eau déminéralisée	Énergie	Durée de cycle	Énergie
	[min]	[l]	[l]	[l]	[kWh]	[min]	[kWh]
Vario TD Dental	33	12,2	14,2	6,0	1,3	6	—
Vario TD Dental +	34	13,1	15,4	6,5	1,4	6	—
Vario TD Dental court	24	5,2	13,7	5,5	0,9	6	—
Rinçage à l'eau froide	4	7,0	—	—	—	—	—

* En combinaison avec le produit de rinçage Miele ProCare Dent 40

Aperçu des variantes

Articles	Habillage extérieur	Largeur de l'appareil	Raccordement électrique et calibre des fusibles	Réf. mat.	Numéro d'article	EAN
PWD 8682 C [DST]	Blanc lotus	600 mm	3N 400 V AC 50 Hz 16 A	12945630	62868276NWE	4002516957713

CompactLine

Aperçu des composants

PWD 8682 C

CompactLine

Article	Description	Référence mat.
Paniers		
APWD 153	Panier inférieur pour différents compléments	12537450
Supports et buses d'injection		
A 801	Adaptateur pour une utilisation de AUF 1 et AUF 2 en association avec A 105/1.	9862940
AUF 1	Support pour le traitement optimal d'instruments rotatifs.	5159510
AUF 2	Support pour le traitement optimal d'instruments rotatifs.	5282470
ADS 1	Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l'utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159530
ADS 2	Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l'utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159540
ADS 3	Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l'utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159550
FP 20	Plaque de filtre, pour le traitement des poignées et des contre-angles avec AUF 1/AUF 2.	6059480
A 803	Support, pour le chargement d'instruments rotatifs.	9863100
A 865	Support pour seringues multifonctionnelles et 3F.	11709860
A 836	Kit de buses d'injection, pour le traitement optimal des instruments avec lumen utilisés dans les applications dentaires.	11054660
A 833	Buse d'injection, pour le nettoyage optimal d'une variété de charges.	10635480
E 476	Support, pour micro-instruments de 4–8 mm de diamètre.	5692400
A 832	Buse d'injection, pour le nettoyage optimal d'une variété de charges.	10635440
A 816	Buse d'injection, pour le nettoyage optimal d'une variété de charges.	10635660
A 834	Buse d'injection, pour le nettoyage optimal de charges diverses, notamment pour les proctoscopes.	10635650
E 336	Douille de rinçage, pour pipettes/instruments chirurgicaux mini-invasifs dans des chariots à injection.	3809390
A 817	Douille de rinçage, pour un nettoyage optimal des instruments ORL, par exemple.	10706260
A 818	Capuchon pour douille de rinçage, pour bloquer des instruments dans des douilles de rinçage.	10706620
A 819	Douille de rinçage, pour un nettoyage optimal des instruments avec lumen.	10721750
A 812	Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	10619680
Compléments et modules		
E 337/1	Complément, pour instruments verticaux.	7984130
E 430/1	Complément, pour instruments divers.	6643200
A 317	Complément, pour 6 paniers à mailles.	11710110
E 441/1	Complément, pour micro-instruments.	5988240
E 520	Complément, pour instruments pour canal radiculaire.	5409080
E 147/1	Complément, pour 10–12 gobelets.	4746620
E 523	Complément, pour 6 paniers à mailles.	5649700
E 339/1	Complément, pouvant accueillir jusqu'à 12 bases de plateaux et plateaux.	9233840
E 806/1	Complément, pour 8 demi-plateaux.	9013220
E 198	Complément, pouvant accueillir jusqu'à 6 paniers à mailles/haricots.	7984040
E 807	Complément, pour 3 paniers à mailles ou haricots.	7984220
E 468	Complément, pour différents ustensiles.	5043640
E 131/1	Complément, pour 5 paniers à mailles et haricots.	5771030
A 315/1	Module, pour une capacité accrue et le traitement d'instruments avec lumen.	12531630
APWD 329	Composant pour le traitement d'aspire-salive dentaires.	12036470
APWD 062	Complément, pour instruments verticaux.	11017160
E 197	Complément, pour instruments divers.	7984090
E 473/2	Filtre avec couvercle, pour divers petits composants.	10623720
E 491	Complément, pour instruments rotatifs.	12686260
E 802/1	Complément, pour instruments verticaux divers.	7984170
A 830/1	Complément, pour extrémités de travail de miroirs dentaires séparables.	11729480
E 522/1	Complément, pour 9 porte-empreintes dentaires.	6697010
E 521/2	Complément, pour 7 pinces d'extraction, orthodontiques ou orthopédiques pour molaires.	7476430
E 801/1	Complément, pour 8 gobelets.	5673820
E 143	Complément, pour instruments divers.	3830310
A 815	Buse, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	10619690
A 813/1	Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	11763880
A 814/1	Support, pour le traitement d'embouts pour Air Scaler et Piezo Scaler.	11691870
Composants pour le traitement de systèmes de sédation dentaire à l'oxyde nitreux		
APWD 325	Composant pour le traitement de tuyaux de sédation dentaire à l'oxyde nitreux.	12036420
APWD 328	Composant avec kit de rallonge pour le traitement des systèmes de sédation dentaire à l'oxyde nitreux.	12036450
APWD 326	Kit de rééquipement avec adaptateurs pour tuyaux doubles utilisés dans les systèmes de sédation dentaire à l'oxyde nitreux	12036440

Aperçu des composants

PWD 8682 C

CompactLine

Article	Description	Référence mat.
E 146	Complément, pour instruments divers.	3346680
Système de plateaux et de containers/EasyStore		
APWD 331	Panier à mailles, plat, avec 3 entretoises en silicone.	12752230
APWD 332	Panier à mailles, plat, avec 5 entretoises en silicone.	12752360
APWD 333	Panier à mailles, haut, avec 3 entretoises en silicone.	12752420
APWD 334	Conteneur stérile pour le maintien de paniers à mailles plats.	12752500
APWD 335	Conteneur stérile pour le maintien de paniers à mailles plats ou hauts.	12752580
APWD 336	Filtre permanent pour 1000 charges maximum.	12752660
APWD 337	Support pour plaques d'identification.	12752730
APWD 338	Joints avec indicateur.	12566280
APWD 339	Joints.	12566300
Autres composants		
A 800	Tuyau de filtration, pour le traitement sûr et économique des instruments avec lumen.	9960680
A 804	Brosse de nettoyage, pour le nettoyage optimal du tuyau de filtration A 800.	9960720
E 362	Vis d'obturation, pour l'étanchéité des raccords sur les supports de charge.	3809630
A 838	Kit d'outils, pour le réglage des hauteurs des paniers et l'installation/le retrait des buses d'injection.	11054290
E 379	Complément, pour instruments divers.	3203500



Avantages Miele



Convivialité


- AutoClose : un léger contact entre la porte et l'appareil suffit à fermer automatiquement la porte
- Écran tactile couleur intuitif et convivial avec accès rapide aux programmes favoris et à l'aperçu de l'état des programmes
- Le réservoir de sel breveté est positionné dans la porte pour un accès facile¹
- Chargement simplifié grâce à l'éclairage de la cuve et contrôle du processus de nettoyage grâce à la porte vitrée en option



Grande capacité

- Capacité : 44 instruments avec lumen + kits d'instruments² pour un maximum de 160 patients
- Particulièrement flexible grâce à des supports de charge modulaires offrant un large éventail de combinaisons possibles

¹ Pas dans le cas des versions avec porte vitrée
² Kit d'instruments composé d'un miroir dentaire, d'une sonde et d'une pince

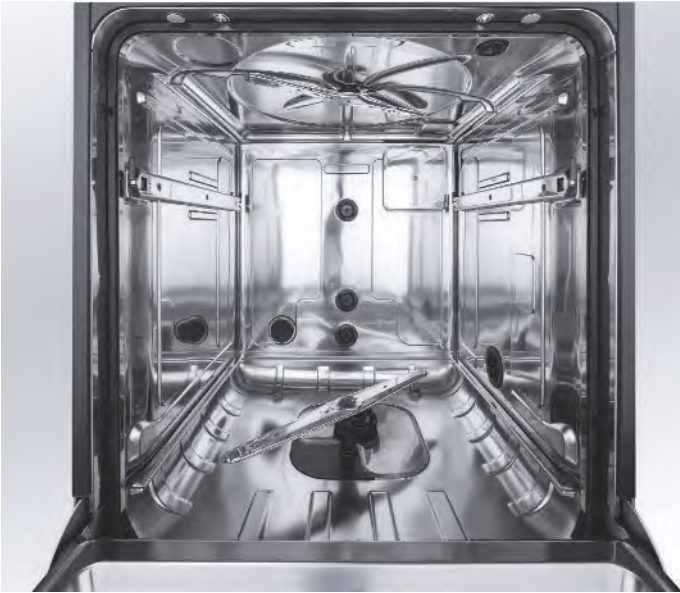

Efficacité supérieure

- Performance de nettoyage exceptionnelle grâce à une pompe à vitesse variable, une fiabilité maximale du processus grâce à la technologie de capteurs et à une bonne hygiène grâce à la cuve sans soudure et au système de filtration à plusieurs étages
- Mise en service optimisée et positionnement convivial des composants concernés




Différentes options de séchage

- EcoDry : Une fois le programme terminé, la porte du PWD 8682 s'ouvre automatiquement grâce à la fonction AutoOpen. Cela permet d'évacuer l'humidité résiduelle hors de la cuve, permettant ainsi aux charges de sécher plus rapidement
- Le séchage à l'air chaud DryPlus sur le PWD 8692 avec filtre HEPA 13 en amont représente une solution idéale pour le traitement d'instruments avec lumen



Plus durable

Des programmes économiques conçus pour l'application en question, de courtes durées de cycle et des technologies économes en ressources, comme la pompe de dosage intégrée pour le dosage automatique des produits de lavage : tout cela vous permet de préserver l'eau, l'électricité et les détergents et de protéger l'environnement.

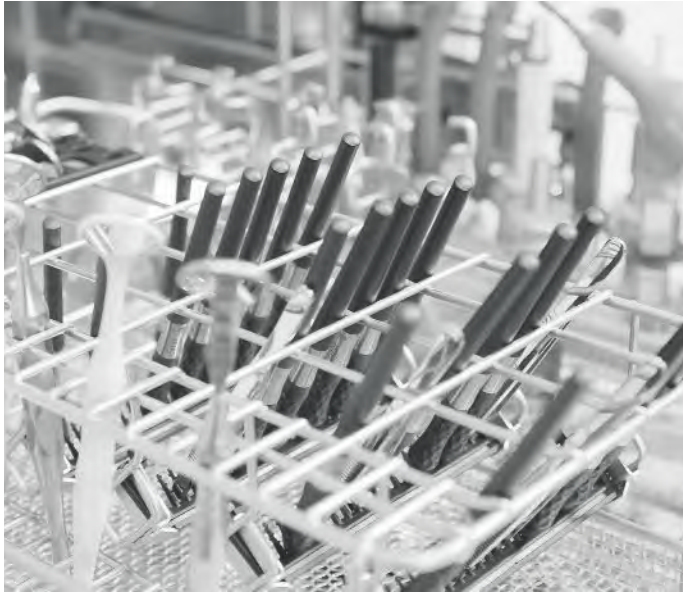

Plus de longévité

- Testé pour 15000 heures de fonctionnement et disponibilité des pièces de rechange pendant au moins 15 ans après l'arrêt de la production en série
- Les programmes spéciaux garantissent des cycles de vie prolongés pour les instruments dentaires



Commande tactile et intuitive

- Sélection simple de la langue par le biais d'un bouton spécial sur le bandeau de commande. Elle peut également être modifiée durant la procédure de nettoyage
- Des tutoriels s'affichent à l'écran en fonction des besoins pour aider l'utilisateur à résoudre les problèmes



Plus de numérique

Mise en réseau avec Miele MOVE Connect : affichage des données de l'appareil, contrôle des réglementations d'hygiène, mises à jour du module de communication, transparence totale des données de processus pour les programmes de nettoyage, assistance directe du S.A.V. et bien plus.

Laveurs-désinfecteurs ExpertLine

Appareil posable, encastrable
PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692

Certification :
PWD 8682 et PWD 8692 sont conformes au règlement de l’UE 2017/745 (MDR).



Laveurs-désinfecteurs	PWD 8682	PWD 8682 CD	PWD 8692
Largeur [mm]	600	900	600
Hauteur, profondeur [mm]	H 835 (820¹), P 600	H 835 (820¹), P 603	H 835 (820¹), P 600
Porte vitrée avec hublot	En option	◆	—
Durée de cycle/Vario TD² [min]	42	40	40
Instruments rotatifs [capacité]	44	44	44
Aspire-salive [capacité]	44	44	44
Séchage	EcoDry	DryPlus	DryPlus
Système de dosage/Option de mise en réseau (par ex. DOS K 85/1 flex)	1	1	2
Adoucisseur d'eau	◆	◆	◆
Condenseur de vapeur	◆	◆	◆

Équipez votre laveur-désinfecteur avec :

- Paniers et composants à partir de la page 38
- Produits chimiques à partir de la page 70
- Traçabilité à partir de la page 90

¹ Sans couvercle (couvercle fourni)
² Nettoyage et désinfection thermique

Caractéristiques techniques

PWD 8682, PWD 8692

ExpertLine

Laveur-désinfecteur	PWD 8682	PWD 8682 CD	PWD 8692
Appareil encastrable/posable avec couvercle	◆	◆	◆
Pompe de circulation [Qmax. l/min]	500	500	500
Commandes/Programmes			
TouchControl/Nombre de programmes	23	24	24
Emplacements de programmes libres	5	5	5
AutoClose – Verrouillage de porte automatique	◆	◆	◆
LED pour l'éclairage de la cuve, sans/avec porte vitrée	2/2	–/2	2/–
Signal sonore à la fin du programme	◆	◆	◆
Module de communication Ethernet	En option	En option	En option
Module de communication Wi-Fi	◆	◆	◆
Raccordements à l'eau			
1 x eau froide, pression d'eau de 2 à 10 bar (200–1000 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆	◆	◆
1 x eau déminéralisée, pression d'eau de 2 à 10 bar (200–1000 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆	◆	◆
1 x eau chaude, pression d'eau de 2 à 10 bar (200–1000 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆	◆	◆
Nombre de tuyaux d'arrivée d'eau, 1/2" avec raccord 3/4", L = env. 2,0 m	3	3	3
Pompe de vidange Ø 22, hauteur de refoulement : max. 100 cm	◆	◆	◆
Système Aquasécurité (WPS)	◆	◆	◆
Raccordement électrique			
3N 400 V AC 50 Hz convertible vers 230 V AC 50 Hz (commutation 230 V 16 A et 32 A), câble d'alimentation électrique d'environ 2,0 m, 5 x 2,5 mm² y compris prise CEE	◆	◆	◆
Chauffage [kW]	8,5	8,5	8,5
Pompe de circulation [kW]	0,8	0,8	0,8
Puissance totale de raccordement [kW]	9,3	9,3	9,3
Fusible [A]	3 x 16	3 x 16	3 x 16
Systèmes de dosage			
1 porte de dosage pour produit de rinçage	◆	◆	◆
1 pompe de dosage pour détergent liquide (longueur de canne d'aspiration : 217 mm)	◆	◆	◆
1 pompe de dosage pour agent neutralisant (longueur de canne d'aspiration : 217 mm)	◆	◆	—
Options de mise en réseau			
DOS K 85 flex, DOS K 85/1 flex, DOS K 85 confort ou DOS K 85/1 confort pour produits liquides	1	1	2
Adoucisseur d'eau			
Pour eau chaude et froide, max. 65 °C	◆	◆	◆
Condenseur de vapeur			
Brumisation	◆	◆	◆
Dispositif de séchage/Ventilateur radial			
Ventilateur [kW]	—	0,3	0,3
Batterie de chauffage [kW]	—	2,2	2,2
Puissance totale de raccordement [kW]	—	—	2,5
Puissance de ventilation [m³/h]	—	60	60
Réglage de la température par incréments de 1 °C [°C]	—	—	50–115
Réglage de l'heure par incréments d'une minute [min]	—	0–120	0–120
Filtre à particules/Filtre HEPA/Classe de filtration (DIN EN 1822)/Durée de vie du filtre	—	H14/>99,99 %/ 500 h	H 13/> 99,95 %/200 h
Dimensions, poids			
Dimensions extérieures H/l/P (sans couvercle H 820 mm, avec porte vitrée P 603 mm) [mm]	835/600/600	835/900/603	835/600/600
Dimensions de la cuve : H/l/P [mm]¹	522/536/O = 518, U = 523	522/536/O = 518, U = 523	522/536/O = 518, U = 523
Poids sans/avec porte vitrée [kg.]	74/80	98/104	78/–
Options d'habillage extérieur			
Blanc lotus (LW)	◆	◆	◆
Porte vitrée avec hublot	En option	◆	—
Inox	◆	◆	◆
Respect des normes			
DIN EN ISO 15883-1/2, EN 61010-2-040, EN 61326-1	◆	◆	◆
Certificats de conformité			
IP 21	◆	◆	◆
CE 0297	◆	◆	◆
EU 2017/745 (MDR)	◆	◆	◆

¹ O : dans la zone du panier supérieur, U : dans la zone du panier inférieur

PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692

D’autres programmes pour le secteur médical sont disponibles dans ces modèles

PWD 8682	Lavage/Désinfection					Séchage	
	Durée de cycle	Eau froide	Eau chaude	Eau déminéralisée	Énergie	Durée de cycle	Énergie
	min	l	l	l	kWh	min	kWh
Vario TD Dental	38	18,6	18,5	9,0	2,2	6	—
Vario TD Dental Eco	38	17,1	20,4	8,0	1,7	8	—
Vario TD Dental +	52	22,8	26,7	13,0	2,7	4	—
Vario TD Intensive	92	15,0	—	74,0	3,7	7	—
Rinçage à l'eau froide	4	10,0	—	—	0,01	—	—
Réservoir Vario TD	40	10,5	—	35,0	2,1	6	—

PWD 8692	Lavage/Désinfection					Séchage	
	Durée de cycle	Eau froide	Eau chaude	Eau déminéralisée	Énergie	Durée de cycle	Énergie
	min	l	l	l	kWh	min	kWh
Vario TD Dental	38	18,6	18,5	9	2,2	52	0,9
Vario TD Dental Eco	38	17,1	20,4	8,0	1,7	42	0,8
Vario TD Dental +	52	22,8	26,7	13	2,7	52	0,9
Vario TD Intensive	92	15	—	74	3,7	51	1
Rinçage à l'eau froide	4	10	—	—	0,01	—	—
Séchage	—	—	—	—	—	40	0,7
Réservoir Vario TD	40	10,5	—	35,0	2,1	70	1,9

Aperçu des variantes

Articles	Habillage extérieur	Largeur de l'appareil	Raccordement électrique et calibre des fusibles	Réf. mat.	Numéro d'article	EAN
PWD 8682 [DC5]	Blanc lotus	600 mm	3N 400 V AC 50 Hz 16 A	12798410	62868205NWE	4002516883654
PWD 8682 [DC5]	SST	600 mm	3N 400 V AC 50 Hz 16 A	12798430	62868206NWE	4002516883678
PWD 8682 [GD DC5]	SST	600 mm	3N 400 V AC 50 Hz 16 A	12907420	62868208NWE	4002516938002
PWD 8692 [DC5]	SST	600 mm	3N 400 V AC 50 Hz 16 A	12800200	62869206NWE	4002516884873
PWD 8692 [LW DC5]	Blanc lotus	600 mm	3N 400 V AC 50 Hz 16 A	12800150	62869205NWE	4002516884521
PWD 8682 CD	SST	898 mm	3N 400 V AC 50 Hz 16 A	12800320	6286C262NWE	4002516884996

Article	Description	Référence mat.
Paniers		
A 105/1	Panier supérieur, réglable en hauteur, sans buses d’injection, pour divers instruments.	12664820
A 102	Panier supérieur, réglable en hauteur, pour compléments.	12645600
A 151	Panier inférieur, pour différents paniers à mailles DIN standard et différents compléments.	12666340
Supports et buses d’injection		
A 801	Adaptateur pour une utilisation de AUF 1 et AUF 2 en association avec A 105/1.	9862940
AUF 1	Support pour le traitement optimal d’instruments rotatifs.	5159510
AUF 2	Support pour le traitement optimal d’instruments rotatifs.	5282470
ADS 1	Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l’utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159530
ADS 2	Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l’utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159540
ADS 3	Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l’utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159550
FP 20	Plaque de filtre, pour le traitement des poignées et des contre-angles avec AUF 1/AUF 2.	6059480
A 803	Support, pour le chargement d’instruments rotatifs.	9863100
A 865	Support pour seringues multifonctionnelles et 3F.	11709860
A 836	Kit de buses d’injection, pour le traitement optimal des instruments avec lumen utilisés dans les applications dentaires.	11054660
A 833	Buse d’injection, pour le nettoyage optimal d’une variété de charges.	10635480
E 476	Support, pour micro-instruments de 4–8 mm de diamètre.	5692400
A 832	Buse d’injection, pour le nettoyage optimal d’une variété de charges.	10635440
A 816	Buse d’injection, pour le nettoyage optimal d’une variété de charges.	10635660
A 834	Buse d’injection, pour le nettoyage optimal de charges diverses, notamment pour les proctoscopes.	10635650
E 336	Douille de rinçage, pour pipettes/instruments chirurgicaux mini-invasifs dans des chariots à injection.	3809390
A 817	Douille de rinçage, pour un nettoyage optimal des instruments ORL, par exemple.	10706260
A 818	Capuchon pour douille de rinçage, pour bloquer des instruments dans des douilles de rinçage.	10706620
A 819	Douille de rinçage, pour un nettoyage optimal des instruments avec lumen.	10721750
A 812	Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	10619680
Compléments et modules		
E 337/1	Complément, pour instruments verticaux.	7984130
E 430/1	Complément, pour instruments divers.	6643200
A 317	Complément, pour 6 paniers à mailles.	11710110
E 441/1	Complément, pour micro-instruments.	5988240
E 520	Complément, pour instruments pour canal radiculaire.	5409080
E 147/1	Complément, pour 10–12 gobelets.	4746620
E 523	Complément, pour 6 paniers à mailles.	5649700
E 339/1	Complément, pouvant accueillir jusqu’à 12 bases de plateaux et plateaux.	9233840
E 806/1	Complément, pour 8 demi-plateaux.	9013220
E 198	Complément, pouvant accueillir jusqu’à 6 paniers à mailles/haricots.	7984040
E 807	Complément, pour 3 paniers à mailles ou haricots.	7984220
E 468	Complément, pour différents ustensiles.	5043640
E 131/1	Complément, pour 5 paniers à mailles et haricots.	5771030
A 315/1	Module, pour une capacité accrue et le traitement d’instruments avec lumen.	12531630
APWD 329	Composant pour le traitement d’aspire-salive dentaires.	12036470
E 363	Complément, pour instruments divers.	3149790
E 130	Complément, pour 10 plateaux.	2648950
E 378	Complément, pour instruments divers.	3203530
E 379	Complément, pour instruments divers.	3203500
E 197	Complément, pour instruments divers.	7984090
E 473/2	Filtre avec couvercle, pour divers petits composants.	10623720
E 491	Complément, pour instruments rotatifs.	12686260
E 802/1	Complément, pour instruments verticaux divers.	7984170
A 830/1	Complément, pour extrémités de travail de miroirs dentaires séparables.	11729480
E 522/1	Complément, pour 9 porte-empreintes dentaires.	6697010
E 521/2	Complément, pour 7 pinces d’extraction, orthodontiques ou orthopédiques pour molaires.	7476430
E 801/1	Complément, pour 8 gobelets.	5673820
E 143	Complément, pour instruments divers.	3830310
A 815	Buse, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	10619690
A 813/1	Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	11763880
A 814/1	Support, pour le traitement d’embouts pour Air Scaler et Piezo Scaler.	11691870


PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692

Article	Description	Référence mat.
Composants pour le traitement de systèmes de sédation dentaire à l'oxyde nitreux		
APWD 325	Composant pour le traitement de tuyaux de sédation dentaire à l'oxyde nitreux.	12036420
APWD 328	Composant avec kit de rallonge pour le traitement des systèmes de sédation dentaire à l'oxyde nitreux.	12036450
APWD 326	Kit de rééquipement avec adaptateurs pour tuyaux doubles utilisés dans les systèmes de sédation dentaire à l'oxyde nitreux	12036440
E 146	Complément, pour instruments divers.	3346680
Système de plateaux et de containers/EasyStore		
APWD 331	Panier à mailles, plat, avec 3 entretoises en silicone.	12752230
APWD 332	Panier à mailles, plat, avec 5 entretoises en silicone.	12752360
APWD 333	Panier à mailles, haut, avec 3 entretoises en silicone.	12752420
APWD 334	Conteneur stérile pour le maintien de paniers à mailles plats.	12752500
APWD 335	Conteneur stérile pour le maintien de paniers à mailles plats ou hauts.	12752580
APWD 336	Filtre permanent pour 1000 charges maximum.	12752660
APWD 337	Support pour plaques d'identification.	12752730
APWD 338	Joints avec indicateur.	12566280
APWD 339	Joints.	12566300
APWD 340	Composant pour bases de conteneurs de produits stériles	12760030
APWD 341	Composant pour couvercles de conteneurs de produits stériles	12760040
Autres composants		
A 800	Tuyau de filtration, pour le traitement sûr et économique des instruments avec lumen.	9960680
A 804	Brosse de nettoyage, pour le nettoyage optimal du tuyau de filtration A 800.	9960720
E 362	Vis d'obturation, pour l'étanchéité des raccords sur les supports de charge.	3809630
A 838	Kit d'outils, pour le réglage des hauteurs des paniers et l'installation/le retrait des buses d'injection.	11054290
Composants pour le dosage de produits chimiques et socles		
PG 8596	Unité de distribution, pour produits chimiques et modules de dosage, inox.	10087340
PG 8596	Unité de distribution, pour produits chimiques et modules de dosage, blanc.	10087330
DOS K 85/1 flex	Module de dosage pour bidons 5 l, pour le dosage automatique des produits liquides avec affichage de jauge vide.	11498920
DOS K 85/1 flex	Module de dosage pour bidons 5 l, pour le dosage automatique des produits liquides avec affichage de jauge vide.	11498930
DOS K 85 flex	Module de dosage pour bidons 5–10 l, pour le dosage automatique des produits liquides avec affichage de jauge vide.	11498880
DOS K 85 flex	Module de dosage pour bidons 5–10 l, pour le dosage automatique des produits liquides avec affichage de jauge vide.	11498910
DOS K 85/1 Comfort	Module de dosage pour bidons 5 l pour le dosage automatique des produits liquides, avec détection niveau de remplissage.	12831620
DOS K 85 Comfort	Module de dosage pour bidons 5–10 l pour le dosage automatique des produits liquides, avec détection niveau de remplissage.	12831610
UG 30-60/60-85/1	Socle fermé, pour appareil, profondeur 60 cm, largeur 60 cm.	12650010
UG 30-90/60-85/1	Socle fermé, pour appareil et meuble contigu, profondeur 60 cm, largeur 90 cm.	12650160
UG 50-64	Socle, avec porte pour surélever l'appareil, profondeur 54 cm, largeur 60 cm.	98501755

Avantages Miele



- Dimensions compactes de l'appareil combinées à une grande capacité de la cuve**
- Faible encombrement avec une largeur de seulement 650 mm et un volume utile de 252 litres
 - 3 niveaux pour les instruments dentaires
 - Jusqu'à 66 instruments avec lumen et 24 paniers à mailles ainsi que d'autres instruments
 - Chargement flexible des niveaux avec des compléments pour instruments dentaires

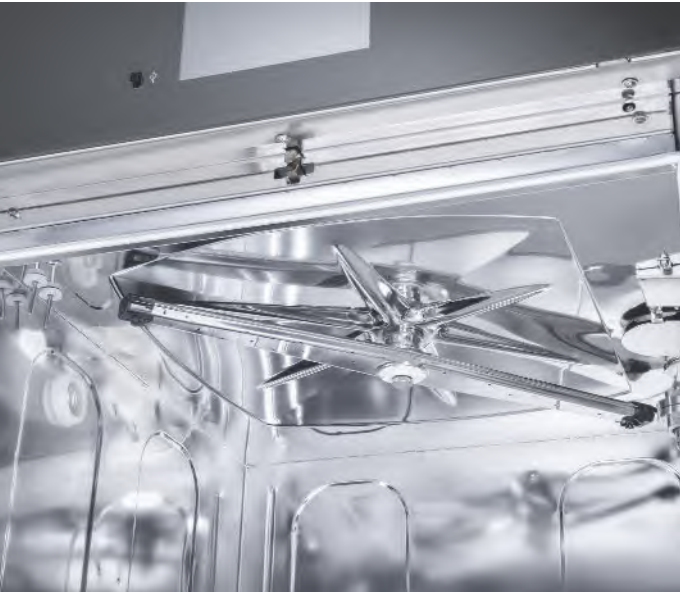

- Efficacité et précision des processus de nettoyage**
- La cuve, les bras de lavage et les filtres de la cuve sont fabriqués en inox de haute qualité électropoli (DIN 1.4404/AISI 316L)
 - Contrôle de conductivité pour une qualité de processus élevée*
 - Filtre fin HEPA H14 pour l'air de séchage
 - Adoucisseur d'eau intégré*
 - Réservoir de préchauffage pour des durées de cycle raccourcies*

* Selon modèle, les durées de cycle sont plus longues pour les modèles avec adoucisseur d'eau intégré.



- Exploitation intuitive et sûre**
- Régulateurs intelligents avec écran tactile couleur 7", programmes optimisés et 20 emplacements de programmes libres
 - Nettoyage simple et efficace
 - Interface USB (intégré dans la façade de l'appareil)
 - Prêt pour une connexion au logiciel de traçabilité



- Large gamme de supports de charges**
- Une flexibilité maximale combinée à une utilisation intuitive
 - Large gamme de possibilités de dispositions standard et configurables

Appareil posable, 1 ou 2 portes, porte vitrée
PWD 7121, PWD 7122



Gain de temps et de ressources

- Système de pompage performant et intelligent avec pompe à vitesse variable
- Performances maximales en cas de besoin et économies d’eau si possible

Contrôle visuel de la cuve

- Surveillance du processus grâce à la porte plein verre
- Éclairage de la cuve
- Verrouillage de porte automatique



Prêt pour la mise en réseau numérique

- Prêt pour la connexion à Miele MOVE
- Accès direct aux données de l’appareil et de performances
- Grande disponibilité de l’appareil grâce au télédiagnostic



Des résultats irréprochables grâce à la parfaite synergie des programmes de lavage et des produits de lavage

- Produits de lavage ProCare Dent pour des résultats optimaux
- Un nettoyage minutieux associé à une préservation maximale des matériaux

Laveurs-désinfecteurs SlimLine	PWD 7121	PWD 7122
Dimensions externes [largeur x hauteur x profondeur mm]	650, 1940, 700	650, 1940, 700
Dimensions de la cuve [largeur x hauteur x profondeur mm]	570, 717, 617	570, 717, 617
Volume utile [l]	252	252
Concept de charge	Chariot de chargement avec modules et compléments	Chariot de chargement avec modules et compléments
Hauteur de chargement ergonomique	◆	◆
Programmes		
Programme dentaire	Vario TD Dental	Vario TD Dental
Programmes de services	◆	◆
Emplacements de programmes libres	20	20
Sélection du programme	Écran tactile couleur 7"	Écran tactile couleur 7"
Caractéristiques		
Modèle à une porte	◆	—
Modèle Barrière (2 portes)	—	◆
Porte(s) à battant, plein verre	◆	◆
Éclairage de la cuve	◆	◆
Matériau de la cuve	1.4404/316L (électropoli)	1.4404/316L (électropoli)
Séchage à l'air chaud	◆	◆
Filtre HEPA H14	◆	◆
Condenseur de vapeur	◆	◆
Pompes de dosage [nombre]	2	2
Pompe à vitesse variable	◆	◆
Raccordements à l'eau	Eau chaude, eau froide, eau déminéralisée	Eau chaude, eau froide, eau déminéralisée
Raccordement électrique 3N 400 V AC, 50 Hz	◆	◆
Puissance totale de raccordement [kW]	10,1	10,1
Wi-Fi	◆	◆
Port USB	◆	◆
Interface Ethernet	◆	◆
Capacité de produit de lavage	3 x 5 l	3 x 5 l
Capteur de fuite	◆	◆
Caractéristiques (selon modèle)		
Pompe de vidange	◆	◆
Vanne de vidange	◆	◆
Réservoir de préchauffage	◆	◆
Conductimètre	◆	◆
Adoucisseur d'eau intégré ¹	◆	◆
Modules en option		
Contacts secs (APLW 906)	◆	◆
Pompe(s) de dosage supplémentaire(s) (APLW DS7111)	◆	◆
Pompe de surpression d'eau déminéralisée (APLW 875)	◆	◆
Conductimètre (APLW 891)	◆	◆
Refroidissement des eaux usées (APLW 895)	◆	◆
Capacité de charge (exemples)		
66 articles creux, 24 réservoirs en filet, 18 porte-empreintes dentaires, 3 paniers à mailles	◆	◆
66 articles creux, 160 kits d'instruments, 18 porte-empreintes dentaires, 3 paniers à mailles	◆	◆

¹ La durée de cycle des modèles avec adoucisseur d'eau intégré est plus longue.

Aperçu des variantes

Appareil posable, 1 ou 2 portes, porte vitrée
PWD 7121, PWD 7122

Articles	Habillage extérieur	Largeur de l'appareil	Raccordement électrique et calibre des fusibles	Réf. mat.	Numéro d'article	EAN
PWD 7121 [DT-S-2001]	AE	650 mm	3N 380–415 V AC 50 Hz 16 A	12731210	62712101NWE	4002516861911
PWD 7121 [DT-S-2005]	AE	650 mm	3N 380–415 V AC 50 Hz 16 A	12731200	62712103NWE	4002516861904
PWD 7122 [DT-S-2002]	AE	650 mm	3N 380–415 V AC 50 Hz 16 A	12731230	62712201NWE	4002516861935
PWD 7122 [DT-S-2006]	AE	650 mm	3N 380–415 V AC 50 Hz 16 A	12731220	62712203NWE	4002516861928


SlimLine

Aperçu des composants

PWD 7121, PWD 7122

SlimLine

Article	Description	Référence mat.
Composants pour SlimLine		
APWD 907	Chariot de transfert pour charger/décharger les laveurs-désinfecteurs/laveurs de laboratoire à grande cuve, SlimLine.	12722690
APWD 646	Module de traitement des instruments avec lumen.	12719050
APWD 217	Chariot de chargement pour instruments dentaires.	12718910
Supports et buses d'injection		
A 801	Adaptateur pour une utilisation de AUF 1 et AUF 2 en association avec A 105/1.	9862940
AUF 1	Support pour le traitement optimal d'instruments rotatifs.	5159510
AUF 2	Support pour le traitement optimal d'instruments rotatifs.	5282470
ADS 1	Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l'utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159530
ADS 2	Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l'utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159540
ADS 3	Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l'utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159550
FP 20	Plaque de filtre, pour le traitement des poignées et des contre-angles avec AUF 1/AUF 2.	6059480
A 803	Support, pour le chargement d'instruments rotatifs.	9863100
A 865	Support pour seringues multifonctionnelles et 3F.	11709860
A 836	Kit de buses d'injection, pour le traitement optimal des instruments avec lumen utilisés dans les applications dentaires.	11054660
A 833	Buse d'injection, pour le nettoyage optimal d'une variété de charges.	10635480
E 476	Support, pour micro-instruments de 4–8 mm de diamètre.	5692400
Compléments et modules		
E 337/1	Complément, pour instruments verticaux.	7984130
E 430/1	Complément, pour instruments divers.	6643200
A 317	Complément, pour 6 paniers à mailles.	11710110
E 441/1	Complément, pour micro-instruments.	5988240
E 520	Complément, pour instruments pour canal radiculaire.	5409080
E 147/1	Complément, pour 10–12 gobelets.	4746620
E 523	Complément, pour 6 paniers à mailles.	5649700
E 339/1	Complément, pouvant accueillir jusqu'à 12 bases de plateaux et plateaux.	9233840
E 806/1	Complément, pour 8 demi-plateaux.	9013220
E 198	Complément, pouvant accueillir jusqu'à 6 paniers à mailles/haricots.	7984040
E 807	Complément, pour 3 paniers à mailles ou haricots.	7984220
E 468	Complément, pour différents ustensiles.	5043640
E 131/1	Complément, pour 5 paniers à mailles et haricots.	5771030
E 363	Complément, pour instruments divers.	3149790
E 130	Complément, pour 10 plateaux.	2648950
E 378	Complément, pour instruments divers.	3203530
E 379	Complément, pour instruments divers.	3203500
E 197	Complément, pour instruments divers.	7984090
E 473/2	Filtre avec couvercle, pour divers petits composants.	10623720
E 491	Complément, pour instruments rotatifs.	12686260
E 802/1	Complément, pour instruments verticaux divers.	7984170
A 830/1	Complément, pour extrémités de travail de miroirs dentaires séparables.	11729480
E 522/1	Complément, pour 9 porte-empreintes dentaires.	6697010
E 521/2	Complément, pour 7 pinces d'extraction, orthodontiques ou orthopédiques pour molaires.	7476430
E 801/1	Complément, pour 8 gobelets.	5673820
E 143	Complément, pour instruments divers.	3830310
A 815	Buse, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	10619690
A 813/1	Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	11763880
A 814/1	Support, pour le traitement d'embouts pour Air Scaler et Piezo Scaler.	11691870
Système de plateaux et de containers/EasyStore		
APWD 331	Panier à mailles, plat, avec 3 entretoises en silicone.	12752230
APWD 332	Panier à mailles, plat, avec 5 entretoises en silicone.	12752360
APWD 333	Panier à mailles, haut, avec 3 entretoises en silicone.	12752420
APWD 334	Conteneur stérile pour le maintien de paniers à mailles plats.	12752500
APWD 335	Conteneur stérile pour le maintien de paniers à mailles plats ou hauts.	12752580
APWD 336	Filtre permanent pour 1000 charges maximum.	12752660
APWD 337	Support pour plaques d'identification.	12752730
APWD 338	Joint avec indicateur.	12566280
APWD 339	Joint.	12566300
Autres composants		
A 800	Tuyau de filtration, pour le traitement sûr et économique des instruments avec lumen.	9960680
A 804	Brosse de nettoyage, pour le nettoyage optimal du tuyau de filtration A 800.	9960720
E 362	Vis d'obturation, pour l'étanchéité des raccords sur les supports de charge.	3809630
A 838	Kit d'outils, pour le réglage des hauteurs des paniers et l'installation/le retrait des buses d'injection.	11054290

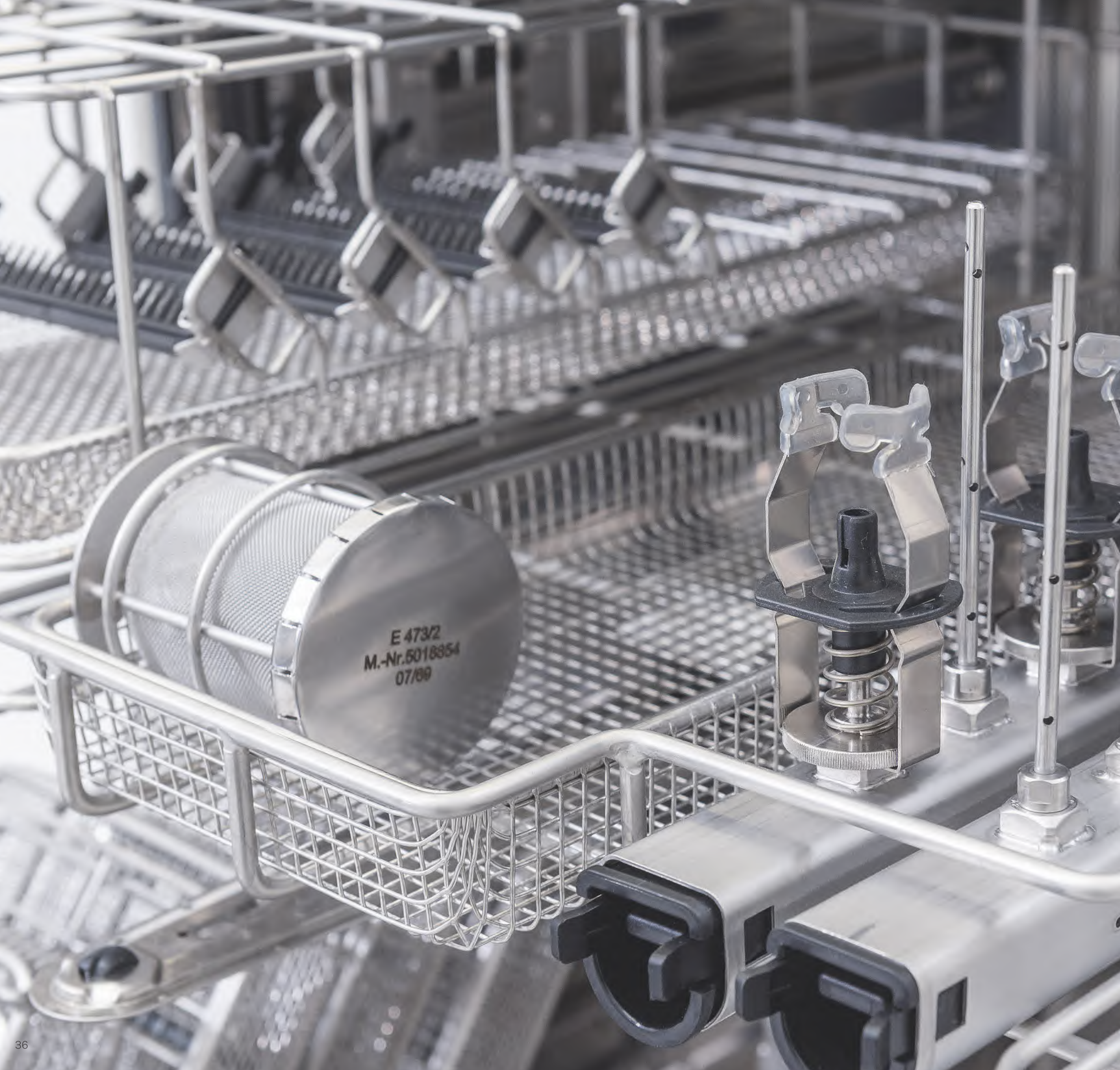

Composants pour laveurs-désinfecteurs

Exemples de chargements

Kits de paniers

Paniers

Supports et buses d'injection

Compléments et modules


Système de plateaux et de containers

Composants


Exemples de chargements

Possibilités de disposition du panier de base (APWD 060)

PWD 8531

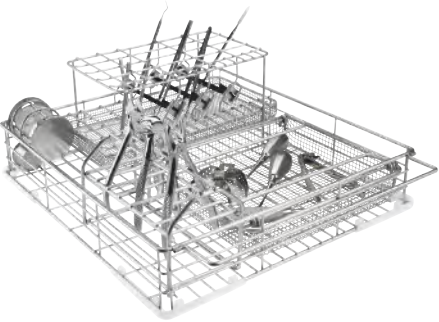

- Panier APWD 060, pour différents compléments et paniers à mailles.
- Complément E 802/1, pour instruments verticaux divers.
- Complément E 143, pour instruments divers.
- Filtre avec couvercle E 473/2, pour divers petits composants.
- Complément E 521/2, pour 7 pinces d'extraction, orthodontiques ou orthopédiques pour molaires.

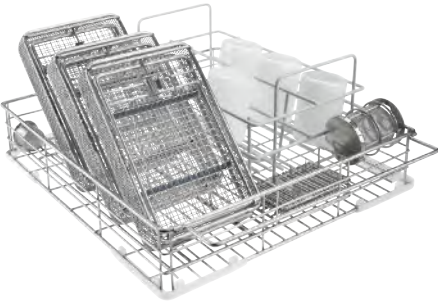


- Panier APWD 060, pour différents compléments et paniers à mailles.
- Complément E 801/1, pour 8 gobelets.
- Complément E 807, pour 3 paniers à mailles ou haricots.
- Complément E 197, pour instruments divers.
- Complément E 491, pour instruments rotatifs.
- Filtre avec couvercle E 473/2, pour divers petits composants.

Possibilités de disposition du panier à injection (APWD 061)

PWD 8531



- Panier APWD 061, pour poignées, différents compléments et paniers à mailles.
- Complément APWD 063, pouvant accueillir jusqu'à 8 plateaux ou cassettes.
- Filtre avec couvercle E 473/2, pour divers petits composants.
- Complément E 521/2, pour 7 pinces d'extraction, orthodontiques ou orthopédiques pour molaires.
- Complément E 522/1, pour 9 porte-empreintes dentaires.
- Buse d'injection APWD 072, pour le traitement optimal d'instruments avec lumen, par ex. des aspire-salive.
- Adaptateur APWD 073, pour buses d'injection APWD 072 supplémentaires dans un panier APWD 061.

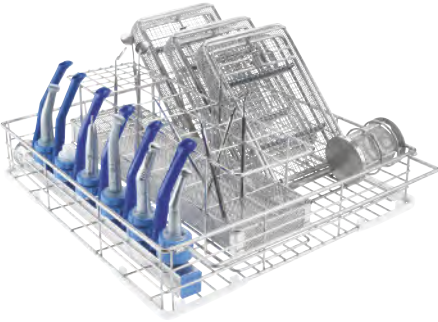


- Panier APWD 061, pour poignées, différents compléments et paniers à mailles.
- Complément APWD 062, pour instruments verticaux.
- Complément E 807, pour 3 paniers à mailles ou haricots.
- Complément E 197, pour instruments divers.
- Filtre avec couvercle E 473/2, pour divers petits composants.

Exemples de chargements


PWD 8682 C

Médecine dentaire générale

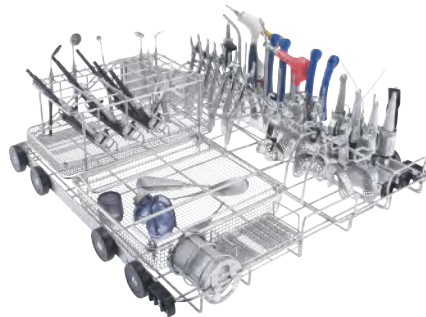

- Panier APWD 153, pour différents paniers à mailles DIN et compléments.
- Module A 315/1, pour une capacité accrue et le traitement d'instruments avec lumen.
- Complément E 802/1, pour instruments verticaux divers.
- Complément E 521/2, pour 7 pinces d'extraction, orthodontiques ou orthopédiques pour molaires.
- Complément E 522/1, pour 9 porte-empreintes dentaires.
- Complément E 143, pour instruments divers.
- Filtre avec couvercle E 473/2, pour divers petits composants.
- Complément E 491, pour instruments rotatifs.

Orthodontie

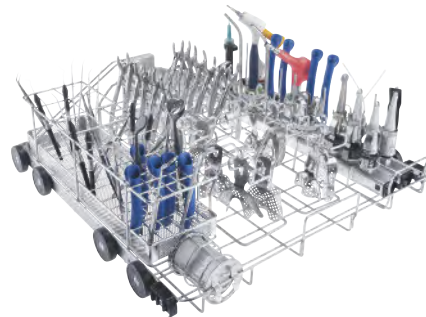

- Panier APWD 153, pour différents paniers à mailles DIN et compléments.
- Module A 315/1, pour une capacité accrue et le traitement d'instruments avec lumen.
- Complément APWD 062, pour instruments verticaux.
- 2 x compléments E 521/2, pour 7 pinces d'extraction, orthodontiques ou orthopédiques pour molaires.
- 2 x compléments E 522/1 pour 9 porte-empreintes dentaires.
- Filtre avec couvercle E 473/2, pour divers petits composants.

Implantologie



- Panier APWD 153, pour différents paniers à mailles DIN et compléments.
- Module A 315/1, pour une capacité accrue et le traitement d'instruments avec lumen.
- 2 x compléments A 317, pour 6 paniers à mailles.
- 12 x paniers à mailles APWD 332, plats, avec 5 entretoises en silicone. (7 seulement sur l'image)

Exemples de chargements

PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692


ExpertLine

Paniers

PWD 8531

Médecine dentaire générale

Exemple de charge pour traiter des instruments avec et sans lumen

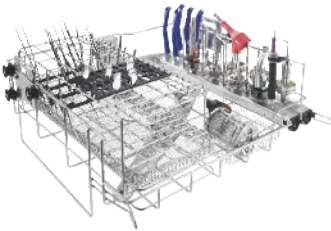


- Panier supérieur A 105/1
- Kit de buses dentaires A 836
- Tuyau de filtration A 800
- Brosse de nettoyage A 804
- Adaptateur pour instruments rotatifs A 803 et/ou AUF 1 avec ADS 1/2/3 et adaptateur A 801
- Adaptateur pour instruments rotatifs A 813/1 avec canal de pulvérisation externe
- Support pour embouts A 814/1
- Douille de rinçage, pour instruments avec lumen A 819, par ex. embouts de détartreur à ultrasons magnétostrictifs
- Complément, pour instruments verticaux E 337/1 avec complément A 830/1 pour miroirs dentaires
- Panier à mailles E 430/1
- Composant pour petits articles divers E 473/2



- Panier inférieur A 151
- Barre à injection A 315/1 avec 22 positions d'injection
- Panier à mailles E 430
- Composant pour paniers à mailles E 198 avec panier à mailles E 197

Implantologie et chirurgie orale et maxillo-faciale

Exemple de charge pour traiter jusqu'à 18 grandes cassettes et 22 instruments avec lumen

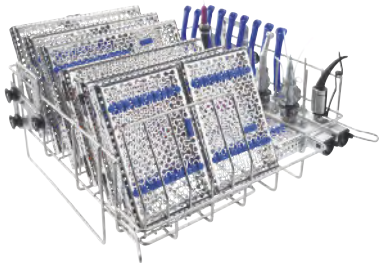


- Panier supérieur A 105/1
- Kit de buses dentaires A 836
- Tuyau de filtration A 800
- Brosse de nettoyage A 804
- Adaptateur pour instruments rotatifs A 803 et/ou AUF 1 avec ADS 1/2/3 et adaptateur A 801
- Adaptateur pour seringues 3F/MF A 865
- Adaptateur pour instruments rotatifs A 813/1 avec canal de pulvérisation externe
- Douille de rinçage, pour instruments avec lumen A 819, par ex. embouts de détartreur à ultrasons magnétostrictifs
- 1 x composant pour paniers à mailles E 523




- Panier inférieur A 151
- 2 x compléments pour paniers à mailles A 317 ou cassettes.

Orthodontie


Exemple de charge pour traiter des instruments, pinces et porte-empreintes dentaires

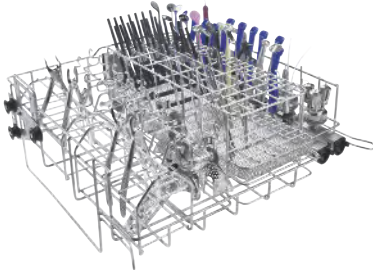

- Panier supérieur A 105/1
- Kit de buses dentaires A 836
- Tuyau de filtration A 800
- Brosse de nettoyage A 804
- Adaptateur pour instruments rotatifs A 803 et/ou AUF 1 avec ADS 1/2/3 et adaptateur A 801
- Adaptateur pour instruments rotatifs A 813/1 avec canal de pulvérisation externe
- Adaptateur pour seringues 3F/MF A 865
- Support pour embouts A 814/1
- Complément, pour instruments verticaux E 337/1 avec complément A 830 pour miroirs dentaires
- 2 x compléments pour pinces E 521/2
- 2 x compléments pour porte-empreintes dentaires E 522/1

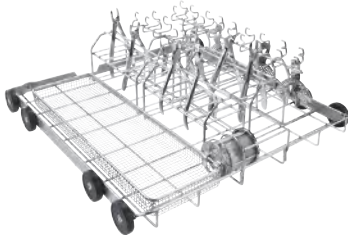


- Panier inférieur A 151
- Panier à mailles E 430
- 2 x compléments pour pinces E 521/2
- 2 x compléments pour porte-empreintes dentaires E 522/1
- Composant pour petits articles divers E 473/2

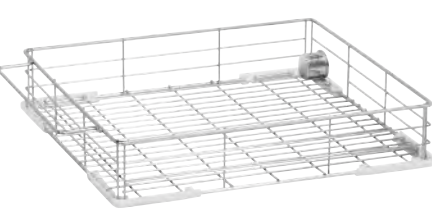

APWD 060

- Panier, pour différents compléments et paniers à mailles.**
- Hauteur de chargement 230 mm, largeur 370 mm, profondeur 395 mm
 - Une profondeur de 370 mm exactement est disponible dans la zone du couplage de panier sur une largeur de 50 mm
 - H 85, l 395, P 469 mm

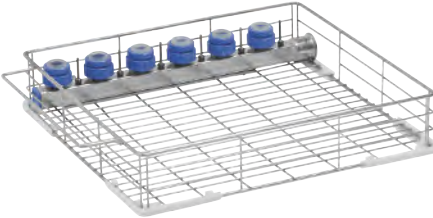


APWD 061

- Panier, pour poignées, différents compléments et paniers à mailles.**
- Équipé de 6 supports pour poignées et contre-angles, ainsi que pour turbines dentaires
 - Équipé de 6 buses d'injection Ø 3,8 x 15 mm pour les extracteurs
 - Séchage intérieur actif des contre-angles
 - Dimensions de chargement H 230, l 320, P 395 mm
 - H 85, l 395, P 469 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APWD 060	Panier pour le chargement optimal de différents compléments et paniers à mailles.	11017140	68406000D	4002516066644
APWD 061	Panier pour le chargement optimal de poignées, de différents compléments et paniers à mailles.	11017150	68406100D	4002516066651

Paniers

PWD 8682 C

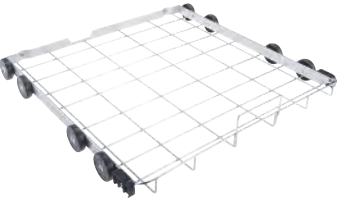


APWD 153

Panier pour différents paniers à mailles DIN et compléments.

- Hauteur de chargement 260 mm
- Largeur de chargement : 490 mm, profondeur de chargement : 498 mm

Paniers

PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692

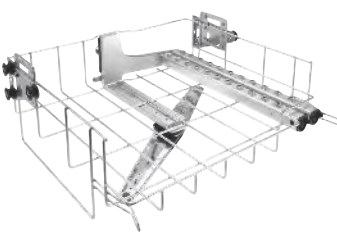


A 105/1

Panier supérieur, réglable en hauteur, sans buses d'injection, pour divers instruments.

- Côté droit : 22 positions d'injecteurs
- Côté gauche libre pour les compléments
- Séchage intérieur actif des instruments avec lumen
- Séchage intérieur actif des contre-angles
- Tuyau de filtration A 800 à utiliser dans une des barres à injection (non fourni)
- Bras de lavage intégré
- Dimensions de chargement H 225 +/- 30, L 360, P 445 mm (une profondeur de 460 mm est disponible sur le côté gauche sur une largeur de 215 mm)
- H 202, I 528, P 528 mm


Composants :
• Kit d'outils A 838 [nombre] : 1

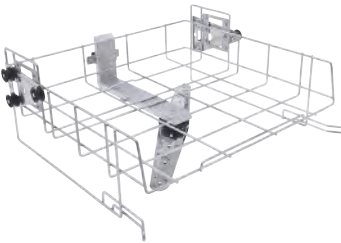

A 102

Panier supérieur, réglable en hauteur, pour compléments.


- Hauteur de chargement 205 +/- 30 mm, largeur 475 mm, profondeur 443 mm
- Avec bras de lavage intégré
- Façade ouverte
- H 206, I 528, P 527 mm

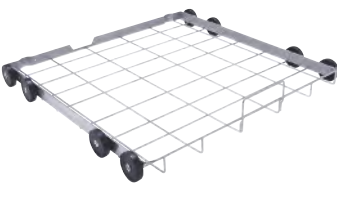

A 151

Panier inférieur, pour différents paniers à mailles DIN standard et différents compléments.

- Hauteur de chargement en fonction du panier supérieur
- Combinaison avec A 102 H 230 +/- 30 mm A 105 H 210 mm
- Largeur de chargement : 490 mm, profondeur de chargement : 498 mm
- H 88, I 529, P 522 mm

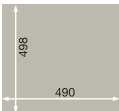

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APWD 153	Panier pour accueillir des paniers à mailles DIN standard, ainsi que divers compléments.	12537450	69615300D	4002516847540

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
A 105/1	Hauteur du panier supérieur réglable, sans buse d'injection, pour divers instruments.	12664820	69610502D	4002516854814
A 102	Panier supérieur réglable en hauteur, pour le chargement optimal de compléments.	12645600	69610201D	4002516855262
A 151	Panier inférieur pour accueillir des paniers à mailles DIN standard, ainsi que divers compléments.	12666340	69615101D	4002516853992

Supports et buses d’injection

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 7121, PWD 7122



A 801
Adaptateur pour une utilisation de AUF 1 et AUF 2 en association avec A 105/1.
• H 50, l 50, P 50 mm



AUF 1
Support, pour le traitement d’instruments rotatifs dans un panier supérieur O 177/1.
• Peut également être utilisé avec un adaptateur A 801 dans un panier supérieur A 105/1
• Se compose de : joint, douille fileté, support, partie inférieure de support, partie supérieure de support, 5 plaques de filtre

Composants :
• Plaque de filtre FP [nombre] : 5



AUF 2
Support, pour le traitement d’instruments rotatifs dans un panier supérieur O 801/2.
• Peut également être utilisé avec un adaptateur A 801 dans un panier supérieur A 105/1
• Se compose de : joint, douille fileté, support, partie inférieure de support, partie supérieure de support, 5 plaques de filtre

Composants :
• Plaque de filtre FP [nombre] : 5



ADS 1
Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l’utilisation de AUF 1 ou AUF 2.
• Pour poignées et contre-angles/turbines dentaires d’un Ø d’environ 20 mm
• Blanc
• H 20,5, l 32,4, P 32,4 mm



ADS 2
Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l’utilisation de AUF 1 ou AUF 2.
• Pour poignées et contre-angles/turbines dentaires d’un Ø d’environ 16 mm
• Vert
• H 20,5, l 32,4, P 32,4 mm



ADS 3
Adaptateur en silicone, pour instruments rotatifs lors de l’utilisation de AUF 1 ou AUF 2.
• Pour poignées et contre-angles/turbines dentaires d’un Ø d’environ 22 mm
• Rouge
• H 20,5, l 32,4, P 32,4 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d’art.	EAN
A 801	Adaptateur pour une utilisation de AUF 1 et AUF 2 en réseau avec A 105/1.	9862940	69680100D	4002515460931
AUF 1	Support pour le traitement optimal d’instruments rotatifs dans un panier supérieur O 177/1.	5159510	68551101D	4002512427517
ADS 1	Adaptateur en silicone pour le maintien d’instruments rotatifs lors de l’utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159530	68751301D	4002512427548
ADS 2	Adaptateur en silicone pour le maintien d’instruments rotatifs lors de l’utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159540	68751401D	4002512427555
ADS 3	Adaptateur en silicone pour le maintien d’instruments rotatifs lors de l’utilisation de AUF 1 ou AUF 2.	5159550	68751501D	4002512478236

Supports et buses d’injection

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 7121, PWD 7122




FP 20
Plaque de filtre, pour le traitement des poignées et des contre-angles avec AUF 1/AUF 2.
• Pour éviter les blocages dus à des micro-particules
• Porosité 2
• 20 plaques de filtre par paquet
• Diamètre 30 mm



A 803
Support, pour le chargement d’instruments rotatifs.
• Destiné à une utilisation dans le panier supérieur A 105/1, le module A 315/1 et l’appareil APWD 646 avec tuyau de filtration A 800
• Convient à de nombreuses poignées et contre-angles, ainsi qu’à des turbines dentaires
• H 31,5, l 32, P 40 mm



A 865
Pour le maintien de canules de seringues MF et 3F
• Destiné à une utilisation dans le panier supérieur A 105/1, le module A 315/1 et l’appareil APWD 646
• Compatible avec des seringues de plusieurs fabricants de renom
• Uniquement destiné à une utilisation en association avec un tuyau de filtration A 800
• H 121,4, l 28, P 28 mm

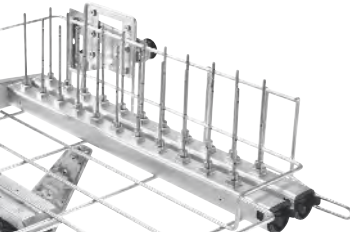

A 836
Kit de buses d’injection, pour le traitement optimal des instruments avec lumen utilisés dans les applications dentaires.
• Destiné à une utilisation dans le module A 315, l’appareil APWD 646 ou le panier supérieur A 105/1
• Pack de 22 buses d’injection dentaires (A 833)



A 833
Buse d’injection, pour le nettoyage optimal d’une variété de charges.
• Convient pour les chariots à injection, avec raccord à vis
• Pour un résultat de lavage optimal grâce aux perçages latéraux
• H 110, l 4, P 4 mm



E 476
Support, pour micro-instruments de 4–8 mm de diamètre.
• Convient également pour le blocage de moteurs chirurgicaux dans un panier à mailles E 468
• Destiné à une utilisation dans des paniers avec un maillage de 5 mm
• 50 par sac

Article	Description	Référence mat.	N° d’art.	EAN
FP 20	Plaques de filtre pour le traitement de contre-angles et de poignées lors de l’utilisation de AUF 1/ AUF 2.	6059480	69751201D	4002513505498
A 803	Support pour le chargement optimal d’instruments rotatifs.	9863100	69680300D	4002515460993
A 865	Support pour le maintien parfait de seringues multifonctionnelles et de seringues 3F.	11709860	69686500D	4002516413752
A 836	Kit de buses d’injection, pour le traitement optimal des instruments avec lumen utilisés dans les applications dentaires.	11054660	69783600D	4002516204091
A 833	Buse d’injection pour le nettoyage optimal d’une variété de charges.	10635480	69745302D	4002515941225
E 476	Support pour micro-instruments d’un Ø de 4 à 8 mm.	5692400	69747601D	4002513239454

Supports et buses d’injection

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692



A 832
Buse d’injection, pour le nettoyage optimal d’une variété de charges.

- Convient pour les chariots à injection, avec raccord à vis
- Résultat de lavage optimal grâce aux perçages latéraux
- H 60, I 2,5, P 2,5 mm



A 816
Buse d’injection, pour le nettoyage optimal d’une variété de charges.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers, raccord à vis
- Pour un résultat de lavage optimal grâce aux perçages latéraux
- H 90, I 2,5, P 2,5 mm



A 834
Buse d’injection, pour le nettoyage optimal de charges diverses, notamment pour les proctoscopes.

- Convient pour les proctoscopes, les douilles de trocart et autres charges
- Équipé d'un ressort (référence mat. 4692430) pour le réglage de la hauteur
- Pour un résultat de lavage optimal grâce aux perçages latéraux
- H 150, I 8, P 8 mm



E 336
Douille de rinçage, pour pipettes/instruments chirurgicaux mini-invasifs dans des chariots à injection.

- Maintien sûr des pipettes, max. 445 mm
- Plastique, avec raccord à vis
- H 121, I 11, P 11 mm



A 817
Douille de rinçage, pour un nettoyage optimal des instruments ORL, par exemple.

- Convient pour les chariots à injection et les paniers, raccord à vis
- Y compris le capuchon pour douille de rinçage et la pince
- Longueur 65 mm, diamètre 11 mm
- Capuchon pour douille de rinçage, ouverture Ø 6 mm (référence mat. 4174960)
- Pince (référence mat. 4174850)
- H 65, I 11, P 11 mm



A 818
Capuchon pour douille de rinçage, pour bloquer des instruments dans des douilles de rinçage.

- Paquet de 12 capuchons pour douilles de rinçage
- L'ouverture peut être adaptée à différentes applications
- H 20, I 20, P 20 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
A 832	Buse d’injection pour le nettoyage optimal d’une variété de charges.	10635440	69745202D	4002515817711
A 816	Buse d’injection pour le nettoyage optimal d’une variété de charges.	10635660	69681600D	4002515978849
A 834	Buse d’injection, pour le nettoyage optimal de charges diverses, notamment pour les proctoscopes.	10635650	69745403D	4002515940709
E 336	Douilles de rinçage pour le chargement optimal des pipettes/instruments chirurgicaux mini-invasifs dans des unités d’injection.	3809390	69733601D	4002511117068
A 817	Douilles de rinçage pour un nettoyage optimal des instruments ORL, par exemple.	10706260	69681700D	4002515880593
A 818	Capuchon pour douille de rinçage pour le blocage optimal d’instruments dans les douilles de rinçage.	10706620	69681800D	4002516100119

Supports et buses d’injection

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692



A 819
Douille de rinçage, pour un nettoyage optimal des instruments avec lumen.

- Par ex. pour les embouts de détartreur à ultrasons magnétostrictifs tels que Cavitron
- Dimension int. 108 mm, dimension ext. 128 mm, Ø 11 mm
- Y compris le capuchon pour douille de rinçage avec une ouverture de Ø 10 mm
- Avec pince – doit être utilisée
- H 10, I 100, P 114 mm



A 812
Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.

- Destiné à une utilisation dans un panier supérieur 177/1
- Peut accueillir jusqu'à 4 instruments rotatifs, canal de pulvérisation externe
- Convient aussi pour 3 embouts pour Air Scaler, Piezo Scaler

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
A 819	Douilles de rinçage pour un nettoyage optimal des instruments avec lumen.	10721750	68681900D	4002515990278
A 812	Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	10619680	68681200D	4002515830307

Compléments et modules


PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 7121, PWD 7122




E 337/1
Complément, pour instruments verticaux.
• Convient pour des sondes, des pinces et des miroirs dentaires
• Équipé de 4 supports en plastique
• 12 compartiments, largeur d'environ 22 x 28 mm
• 4 compartiments, largeur d'environ 25 x 28 mm
• 48 compartiments, largeur d'environ 13 x 14 mm
• H 148, l 173, P 445 mm



E 430/1
Complément, pour instruments divers.
• En treillis métallique avec un maillage de 5 mm de largeur
• H 40, l 150, P 445 mm

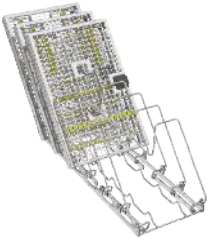

A 317
Complément, pour 6 paniers à mailles.
• Équipé de 7 supports (6 compartiments)
• L'angle d'inclinaison peut être ajusté pour s'adapter à différentes séries d'appareils
• H 142,3, l 154, P 464,6 mm

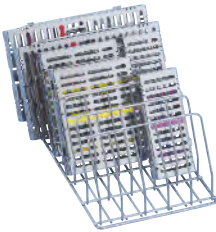

E 523
Complément, pour 6 paniers à mailles.
• Équipé de 7 supports (6 compartiments), H 145, espacement 50 mm
• H 151, l 220, P 450 mm



E 339/1
Complément, pouvant accueillir jusqu'à 12 bases de plateaux et plateaux.
• Convient pour 12 bases de plateaux ou plateaux
• Équipé de 13 supports (12 compartiments).
• Capacité utile maximale: 290 x 30 mm
• H 115, l 305, P 498 mm



E 806/1
Complément, pour 8 demi-plateaux.
• 9 supports (8 compartiments), l 295, espacement 37 mm
• Capacité utile maximale 290 x 30 mm
• H 114, l 305, P 348 mm



E 441/1
Complément, pour micro-instruments.
• La largeur de maillage sur la base est de 1,7 mm
• Les côtés sont fermés, composant empilable
• Section avec 6 séparateurs réglables pour le positionnement des instruments
• Peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C/134 °C
• H 60, l 183, P 284 mm




E 520
Complément, pour instruments pour canal radiculaire.
• Convient pour 17 instruments pour canal radiculaire
• Rabattable
• Peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C/134 °C
• H 45, l 75, P 30 mm



E 147/1
Complément, pour 10–12 gobelets.
• Convient pour 10–12 gobelets, Ø 80 mm max.
• Rilsanisé
• H 155, l 220, P 455 mm



E 198
Complément, pouvant accueillir jusqu'à 6 paniers à mailles et haricots.
• Convient pour 6 paniers à mailles ou haricots
• 7 supports (6 compartiments), hauteur 160 mm, espacement 67 mm
• Pour le panier à mailles E 197
• H 160, l 180, P 495 mm

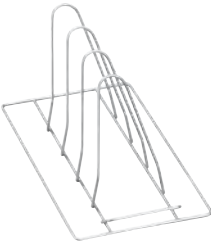


E 807
Complément, pour 3 paniers à mailles ou haricots.
• 4 supports (3 compartiments), H 165, espacement 58 mm
• H 144, l 140, P 290 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
E 337/1	Composant pour le chargement optimal d'instruments verticaux.	7984130	69533702D	4002514953397
E 430/1	Composant pour la disposition optimale de différents instruments.	6643200	69743003D	4002513984422
A 317	Composant pour le chargement optimal de 6 paniers à mailles.	11710110	68631700D	4002516413875
E 441/1	Composant pour le chargement optimal de micro-instruments.	5988240	69544102D	4002513460476
E 520	Composant pour le chargement optimal d'instruments pour canal radiculaire.	5409080	68552001D	4002512472524
E 147/1	Composant pour le chargement optimal de 10 à 12 verres de rinçage buccal.	4746620	68514703D	4002512122313

Compléments et modules

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 7121, PWD 7122

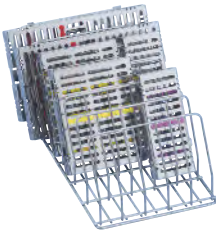

E 523
Complément, pour 6 paniers à mailles.
• Équipé de 7 supports (6 compartiments), H 145, espacement 50 mm
• H 151, l 220, P 450 mm



E 339/1
Complément, pouvant accueillir jusqu'à 12 bases de plateaux et plateaux.
• Convient pour 12 bases de plateaux ou plateaux
• Équipé de 13 supports (12 compartiments).
• Capacité utile maximale: 290 x 30 mm
• H 115, l 305, P 498 mm



E 806/1
Complément, pour 8 demi-plateaux.
• 9 supports (8 compartiments), l 295, espacement 37 mm
• Capacité utile maximale 290 x 30 mm
• H 114, l 305, P 348 mm



E 441/1
Complément, pour micro-instruments.
• La largeur de maillage sur la base est de 1,7 mm
• Les côtés sont fermés, composant empilable
• Section avec 6 séparateurs réglables pour le positionnement des instruments
• Peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C/134 °C
• H 60, l 183, P 284 mm




E 520
Complément, pour instruments pour canal radiculaire.
• Convient pour 17 instruments pour canal radiculaire
• Rabattable
• Peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C/134 °C
• H 45, l 75, P 30 mm



E 147/1
Complément, pour 10–12 gobelets.
• Convient pour 10–12 gobelets, Ø 80 mm max.
• Rilsanisé
• H 155, l 220, P 455 mm



E 198
Complément, pouvant accueillir jusqu'à 6 paniers à mailles et haricots.
• Convient pour 6 paniers à mailles ou haricots
• 7 supports (6 compartiments), hauteur 160 mm, espacement 67 mm
• Pour le panier à mailles E 197
• H 160, l 180, P 495 mm

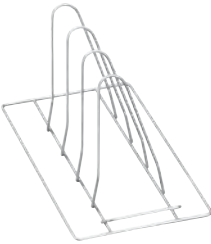

E 807
Complément, pour 3 paniers à mailles ou haricots.
• 4 supports (3 compartiments), H 165, espacement 58 mm
• H 144, l 140, P 290 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
E 523	Composant pour le chargement optimal de 6 paniers à mailles.	5649700	69552301D	4002513199116
E 339/1	Composant pour le chargement optimal d'un maximum de 12 séparateurs de plateaux et plateaux.	9233840	69533902D	4002515094860
E 806/1	Composant pour le chargement optimal de 8 plateaux demi-coquilles.	9013220	69580603D	4002514969718
E 198	Composant pour le chargement optimal d'un maximum de 6 paniers à mailles et haricots.	7984040	68519801D	4002514953373
E 807	Composant pour une charge optimale des 3 paniers à mailles ou haricots.	7984220	69580701D	4002514951638

Compléments et modules

PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 8682 C, PWD 7121, PWD 7122



- E 468
- Complément, pour différents ustensiles.**
 - Fabriqué en fils en croix soudés/inox avec couvercle et compartiments
 - Largeur de maillage: 5 x 5 x 1 mm
 - Pour le traitement de moteurs chirurgicaux après retrait du séparateur
 - Veuillez respecter les consignes de traitement des fabricants
 - Ne convient pas pour une utilisation dans E 198
 - H 76, l 170, P 250 mm



- E 131/1
- Complément, pour 5 paniers à mailles et haricots.**
 - Convient pour 5 paniers à mailles ou haricots
 - Équipé de 6 supports, hauteur: 160 mm, espace-ment: 80 mm
 - Pour panier inférieur
 - Pour le panier à mailles E 363
 - H 168, l 180, P 495 mm


Compléments et modules

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692



- A 315/1
- Module, pour une capacité accrue et le traitement d'instruments avec lumen.**
 - Augmente la capacité de 22 à 44 injecteurs
 - Compatible a posteriori avec tous les produits A 151 sur le marché
 - Compatible avec tous les adaptateurs et composants dentaires et ENT standard
 - Buses d'injection non fournies
 - Séchage intérieur actif des contre-angles
 - Tuyau de filtration A 800 à utiliser dans une des barres à injection (non fourni)
 - Dimensions de chargement en cas d'utilisation dans un panier inférieur A 151 tout en utilisant simultanément un panier supérieur A 105/1: H 210 +/- 30, l 383, P 479 mm
 - Hauteur de chargement de la barre à injection en cas d'utilisation d'un panier supérieur A 105/1 135 mm +/- 30
 - H 145, l 492, P 542 mm

- Composants:
- Kit d'outils A 838 [nombre]: 1

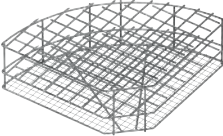

- APWD 329
- Composant pour le traitement des canules salivaires.**
 - Peut accueillir jusqu'à 80 canules salivaires
 - 80 compartiments, 18 x 18 mm chacun
 - Taille des mailles sur base 8 x 8 mm
 - H 80, l 226, P 226 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
E 468	Composant pour le chargement optimal de différents ustensiles.	5043640	69546801D	4002512277280
E 131/1	Composant pour le chargement optimal de 5 plateaux à mailles et haricots.	5771030	69513102D	4002513317336

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
A 315/1	Module pour augmenter la capacité et traiter des instruments creux.	12531630	69631501D	4002516881186
APWD 329	Composant pour le traitement d'aspire-salive dentaires.	12036470	69632900D	4002516596080

Compléments et modules

PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 7121, PWD 7122



E 363
Complément, pour instruments divers.
• Largeur de maillage : 1 mm
• Équipé d'un couvercle
• Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
• Sans supports pour instruments
• H 55, l 150, P 225 mm



E 130
Complément, pour 10 plateaux.
• Équipé de 11 supports, hauteur : 170 mm, espacement : 35 mm
• Destiné à une utilisation dans le panier inférieur
• H 180, l 180, P 445 mm



E 378
Complément, pour instruments divers.
• Treillis métallique 0,8 mm, largeur de maillage 1,7 mm, cadre 5 mm
• Équipé de 2 poignées de transport
• Destiné à une utilisation dans le panier inférieur
• H 110, l 460, P 460 mm

Compléments et modules

PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 7121, PWD 7122



E 379
Complément, pour instruments divers.
• Treillis métallique 0,8 mm, largeur de maillage 1,7 mm, cadre 5 mm
• Équipé de 2 poignées de transport
• Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
• H 110, l 180, P 445 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
E 363	Composant pour le chargement optimal de différents instruments.	3149790	69536301D	4002511116283
E 130	Composant pour le chargement optimal de 10 plateaux.	2648950	69513001D	4002511129375
E 378	Composant pour le maintien de différents instruments.	3203530	69537801D	4002511116443

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
E 379	Composant pour le maintien de différents instruments.	3203500	69537901D	4002511116450



APWD 062
Complément, pour instruments verticaux.
• Convient pour des sondes, des pinces et des miroirs dentaires
• H 122, l 124, P 395 mm



Gain de temps

- Élimine la manipulation fastidieuse des instruments individuels
- Le système coordonné réduit les étapes du travail
- Organisation et manipulation optimisées des instruments



Économique

- Économies significatives sur les coûts de personnel grâce au gain de temps
- Élimination des dépenses courantes pour les emballages jetables
- La protection contre les dommages mécaniques prolonge la durée de vie de l'instrument



Développement durable

- Réduit considérablement le besoin de film de stérilisation
- Système réutilisable
- Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité



Sécurisé et traçable

- Protection contre la contamination et les blessures par perforation pendant la charge et le transport
- Stérilité garantie des instruments jusqu'à la prochaine utilisation
- Suivi facile grâce aux plaques d'identification et aux étiquettes à code-barres

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APWD 062	Composant pour le chargement optimal d'instruments verticaux.	11017160	68406200D	4002516066668

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 7121, PWD 7122



Des paniers à mailles très pratiques

- Grande perforation et zones non atteintes quasi minimales
- Disposition idéale et blocage des instruments sur le plateau
- Entretoises en silicone réglables de façon flexible pour une utilisation personnalisée
- Ouverture et fermeture pratiques à une main



Conteneurs stériles imperméables aux germes

- Joint de couvercle imperméable aux germes
- Retrait du couvercle rapide et stérile
- Les fermetures à clips servent de poignées de couvercle pratiques
- Support de filtre rapide pour un remplacement facile des filtres permanents



Peut être combiné avec les laveurs-désinfecteurs Miele

- Mise en place particulièrement rapide et facile des plateaux dans l'appareil
- Un composant spécial pour plateaux offre la capacité de charge la plus élevée du marché
- Traitement d'un maximum de 18 grands plateaux par cycle



Peut être combiné avec les stérilisateurs compacts Miele

- Chargement simple et sûr de conteneurs pour produits stériles
- Pas de rayures sur la chambre de stérilisation grâce au support rotatif spécial
- Traitement d'un maximum de trois conteneurs stériles par cycle



APWD 331

- Panier à mailles, plat, avec 3 séparateurs en silicone.**
- Grande perforation et zones non atteintes quasi minimales
 - Disposition idéale et blocage des instruments sur le plateau
 - Ouverture/Fermeture faciles d'une seule main
 - Adapté au conteneur stérile APWD 334
 - Dimensions extérieures : H/l/P : 30 x 125 x 188 mm
 - Dimensions internes H/l/P : 23 x 119 x 181 mm



APWD 332

- Panier à mailles, plat, avec 5 séparateurs en silicone.**
- Grande perforation et zones non atteintes quasi minimales
 - Disposition idéale et blocage des instruments sur le plateau
 - Ouverture/Fermeture faciles d'une seule main
 - Adapté au conteneur stérile APWD 334
 - Dimensions extérieures : H/l/P : 30 x 176 x 273 mm
 - Dimensions internes H/l/P : 23 x 170 x 267 mm



APWD 333

- Panier à mailles, haut, avec 3 séparateurs en silicone.**
- Grande perforation et zones non atteintes quasi minimales
 - Disposition idéale et blocage des instruments sur le plateau
 - Ouverture/Fermeture faciles d'une seule main
 - Adapté au conteneur stérile APWD 335
 - Dimensions extérieures : H/l/P : 41 x 176 x 273 mm
 - Dimensions internes H/l/P : 34 x 170 x 267 mm



APWD 334

- Conteneur stérile pour le maintien de paniers à mailles plats.**
- Joint de couvercle imperméable aux germes
 - Retrait de couvercle rapide et sans contamination durant une alimentation stérile
 - Support de filtre rapide pour un remplacement facile des filtres permanents
 - Peut être empilé – Moins d'espace nécessaire
 - Dimensions extérieures : H/l/P : 46 x 190 x 312 mm
 - Dimensions internes H/l/P : 27 x 176 x 277 mm



APWD 335

- Conteneur stérile pour le maintien de paniers à mailles plats ou hauts.**
- Joint de couvercle imperméable aux germes
 - Retrait de couvercle rapide et sans contamination durant une alimentation stérile
 - Support de filtre rapide pour un remplacement facile des filtres permanents
 - Peut être empilé – Moins d'espace nécessaire
 - Dimensions extérieures : H/l/P : 65 x 190 x 312 mm
 - Dimensions internes H/l/P : 46 x 176 x 277 mm



APWD 336

- Filtre permanent pour 1000 cycles maximum.**
- Bon résultat de séchage dans les conteneurs
 - Résistant et durable
 - 2 unités par paquet
 - Destiné à une utilisation dans les appareils APWD 334 et APWD 335

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APWD 331	Panier à mailles, plat, avec 3 entretoises en silicone.	12752230	69633100D	4046955907427
APWD 332	Panier à mailles, plat, avec 5 entretoises en silicone.	12752360	69633200D	4046955907434
APWD 333	Panier à mailles, haut, avec 3 entretoises en silicone.	12752420	69633300D	4046955907410
APWD 334	Conteneur stérile pour le maintien de paniers à mailles plats.	12752500	69633400D	4046955907441
APWD 335	Conteneur stérile pour le chargement d'un panier à mailles APWD 333.	12752580	69633500D	4046955907458
APWD 336	Filtre permanent pour 1000 charges maximum.	12752660	69633600D	4038653289066

Système de plateaux et de containers

EasyStore

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 7121, PWD 7122



APWD 337
Support pour plaques signalétiques.

- Pour les plaques signalétiques d’une taille de H/I 18 x 56 mm
- À utiliser sur les paniers à mailles APWD 331, APWD 332 et APWD 333



APWD 338
Joints avec indicateur.

- Pour éviter toute ouverture indésirable après une stérilisation à la vapeur
- Indicateur pour stérilisation à la vapeur selon la norme EN ISO 11140-1 classe 1
- 100 unités par paquet



APWD 339
Joints.

- Pour éviter toute ouverture indésirable après une stérilisation à la vapeur
- 100 unités par paquet

Composants pour le traitement de systèmes de sédation

dentaire à l’oxyde nitreux

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692



APWD 325
Composant pour le traitement de tuyaux de sédation dentaire à l’oxyde nitreux.

- Traitement simultané possible de 5 jeux de tuyaux max.
- Avec kit d’adaptation pour un raccordement sécurisé avec le système d’injecteurs
- Nettoyage et séchage fiables des tuyaux internes/externes
- Traitement en parallèle de masques de patients dans un panier à mailles E 146
- Maintien d’une grande capacité pour d’autres instruments à chaque cycle
- H 132, I 323,5, P 379 mm



APWD 328
Composant avec kit de rallonge pour le traitement des systèmes de sédation dentaire à l’oxyde nitreux.

- Extension de la capacité à un total de 5 jeux de tuyaux doubles max.
- 5 x plaques à clipser et à pivoter
- H 77, I 90, P 100 mm



APWD 326
Kit de rééquipement avec adaptateurs pour tuyaux doubles utilisés dans les systèmes de sédation dentaire à l’oxyde nitreux

- Contient 2 adaptateurs
- Kit de rééquipement pour APWD 325
- H 65, I 40, P 78 mm



E 146
Complément, pour instruments divers.

- Pour les masques de sédation dentaire
- Largeur de maillage sur la base 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
- Équipé de 2 poignées de transport rabattables
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur et le panier inférieur
- H 55, I 150, P 225 mm




Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APWD 337	Support pour plaques signalétiques de 56 x 18 mm.	12752730	69633700D	4046963095499
APWD 338	Joints de fermeture avec indicateur pour éviter l'ouverture accidentelle après stérilisation vapeur.	12566280	69633800D	4046963756512
APWD 339	Joints de fermeture pour éviter l'ouverture accidentelle après stérilisation vapeur.	12566300	69633900D	4046963510619

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APWD 325	Composant pour le traitement de tuyaux utilisés dans des systèmes de sédation dentaire à l’oxyde nitreux.	12036420	68632500D	4002516610908
APWD 328	Kit de rallonge de composant pour le traitement de systèmes de sédation dentaire à l’oxyde nitreux.	12036450	68632800D	4002516611028
APWD 326	Kit de rééquipement pour l’adaptation avec des adaptateurs pour tuyaux doubles utilisés dans les systèmes de sédation dentaire à l’oxyde nitreux	12036440	68632600D	4002516611011
E 146	Composant pour le chargement optimal de différents instruments.	3346680	69514601D	4002511116009

Composants pour PWD 8531

PWD 8531

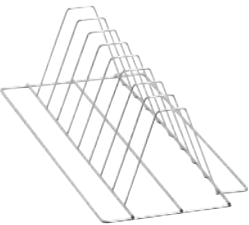

APWD 063

Complément, pouvant accueillir jusqu’à 8 plateaux ou cassettes.

- Équipé de 9 supports, espacement : 40 mm
- H 110, l 180, P 390 mm



APWD 064

Cache, pour la fermeture hermétique des supports inoccupés par des instruments rotatifs.

- H 23,5, l 25, P 25 mm



APWD 067

Adaptateur, partie supérieure pour adaptateurs pour le traitement d’instruments rotatifs.

- Peut uniquement être utilisé avec la partie inférieure APWD 068 correspondante
- H 18,5, l 35, P 35 mm



APWD 069

Filtre, empêche les particules de pénétrer dans les instruments rotatifs.

- Pour éviter les blocages dus à des micro-particules
- Inox, recyclable
- H 1, l 30, P 30 mm



APWD 072

Buse d’injection, pour le traitement optimal d’instruments avec lumen, par ex. des aspire-salive.

- Convient pour le panier APWD 061
- Utilisation d’un adaptateur APWD 073
- L’illustration présente la buse APWD 072 avec un adaptateur APWD 073
- Ø 3,8 x 50 mm



APWD 073

Adaptateur, pour buses d’injection APWD 072 supplémentaires dans un panier APWD 061.



APWD 068

Adaptateur, partie inférieure à utiliser sur une barre à injection de panier à injection APWD 061.

- Peut uniquement être utilisé avec la partie supérieure APWD 067 correspondante
- H 30,5, l 40, P 40 mm



APWD 070

Adaptateur en silicone, pour maintenir des instruments rotatifs, Ø 19–21 mm

- Peut uniquement être utilisé avec un support APWD 067
- H 20,5, l 27, P 27 mm



APWD 071

Adaptateur en silicone, pour maintenir des instruments rotatifs, Ø 14–17 mm

- Peut uniquement être utilisé avec un support APWD 067
- H 20,5, l 27, P 27 mm



A 822

Adaptateur pour l’utilisation de A 814/1 dans les paniers à injection des appareils PWD 8531.

- Destiné à une utilisation dans le panier à injection APWD 061
- H 16, l 20, P 20 mm

Autres composants pour tous les laveur-désinfecteurs à partir de la page 63

Article	Description	Référence mat.	N° d’art.	EAN
APWD 063	Composant pour le chargement optimal d’un maximum de 8 plateaux ou cassettes.	11017170	68406300D	4002516066675
APWD 064	Cache hermétique pour la fermeture des supports non utilisés avec des instruments rotatifs.	11017180	68406400D	4002516066682
APWD 067	Adaptateur, partie supérieure pour maintenir des adaptateurs pour le traitement d’instruments rotatifs, par exemple.	11017200	68406700D	4002516066729
APWD 068	Support, partie inférieure pour le traitement optimal des instruments rotatifs dans le panier APWD 061	11017210	68406800D	4002516066736
APWD 070	Adaptateur en silicone, pour maintenir des instruments rotatifs, Ø 19–21 mm	11017230	68407000D	4002516066750
APWD 071	Adaptateur en silicone, pour maintenir des instruments rotatifs, Ø 14–17 mm	11017240	68407100D	4002516066767

Article	Description	Référence mat.	N° d’art.	EAN
APWD 069	Filtre pour empêcher les particules d’être entraînées dans les instruments rotatifs.	11017220	68406900D	4002516066743
APWD 072	Buse d’injection, pour le traitement optimal d’instruments avec lumen, notamment des ventouses.	11127460	68407200D	4002516122289
APWD 073	Adaptateur pour un positionnement supplémentaire de buses d’injection APWD 072 dans le panier APWD 061.	11127500	68407300D	4002516122296
A 822	Adaptateur pour l’utilisation de A 814/1 dans les paniers à injection des appareils PWD 8531.	11691970	68682200D	4002516428565

Composants pour SlimLine

PWD 7121, PWD 7122



APWD 907

Chariot de transfert

- Chariot de transfert pour le chargement et le déchargement du PWD 7121 et du PWD 7122
- 4 roulettes, dont 2 immobilisables
- Poignée ergonomique
- Y compris la bouteille de récupération de liquide qui s'égoutte
- Chariot de chargement protégé contre les chutes pendant le transport



APWD 646

Module de traitement des instruments avec lumen

- Capacité : 22 positions d'injection
- Peut être utilisé dans le chariot de chargement APWD 217
- Compatible avec tous les adaptateurs dentaires et composants courants
- Buses d'injection non fournies
- Séchage intérieur actif des contre-angles



APWD 217

Chariot de chargement pour instruments dentaires

- Destiné à recevoir des compléments et des paniers à mailles
- Le chariot de chargement dispose de 3 options de raccordement pour le module APWD 646
- Jusqu'à 66 instruments avec lumen et jusqu'à 160 kits d'instruments

Utilisation flexible avec des composants pour instruments dentaires

Autres composants

PWD 8682 C, PWD 8682, PWD 8682 CD, PWD 8692, PWD 7121, PWD 7122



A 800

Tuyau de filtration, pour le traitement sûr et économique des instruments avec lumen.

- Filtre à tamis en inox multicouche pour chariots de chargement
- Largeur de maillage 63 µm
- Traitement possible avec une brosse de nettoyage A 804
- Destiné à une utilisation dans le panier supérieur A 105/1, le module A 315/1 et l'appareil APWD 646
- H 405, l 22,5, P 22,5 mm



A 804

Brosse de nettoyage, pour le nettoyage optimal du tuyau de filtration A 800.

- Convient pour le nettoyage d'un tuyau de filtration A 800
- Brosse métallique torsadée avec poils en spirale
- Poignée avec œillet
- Longueur 500 mm, longueur de la brosse 100 mm
- H 500, l 20, P 20 mm



E 362

Vis d'obturation, pour l'étanchéité des raccords sur les supports de charge.

- Filetage M 8 x 1



A 838

Kit d'outils, pour le réglage des hauteurs des paniers et l'installation/le retrait des buses d'injection.

- Kit composé d'une clé Torx et d'une clé à fourche
- Convient pour les paniers supérieurs et les chariots de chargement Miele

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APWD 907	Chariot de transfert pour charger/décharger les laveurs-désinfecteurs/laveurs de laboratoire à grande cuve, SlimLine.	12722690	69200117D	4002516860594
APWD 646	Module à injection pour le traitement des instruments dentaires avec lumen dans le PWD 7121 et le PWD 7122.	12719050	69631600D	4002516863052
APWD 217	Chariot de chargement à 3 niveaux pour le nettoyage et la désinfection des instruments dentaires.	12718910	69610800D	4002516863069

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
A 800	Tuyau de filtration pour le traitement sûr et économique des instruments creux.	9960680	68680000D	4002515538081
A 804	Brosse de nettoyage, pour le nettoyage optimal du tuyau de filtration A 800.	9960720	68680400D	4002515527238
E 362	Bouchon d'obturation pour l'étanchéité des raccords sur les supports de charge.	3809630	69736201D	4002511117136
A 838	Kit de clés, pour le réglage des hauteurs des paniers et l'installation/retrait des buses d'injection.	11054290	69783800D	4002516171720

Autres composants

pour tous les laveurs-désinfecteurs




E 197
Complément, pour instruments divers.
• Largeur de maillage sur la base 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
• Peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C/134 °C
• H 42, l 150, P 225 mm



E 473/2
Filtre avec couvercle, pour divers petits composants.
• Crochets en place
• Avec couvercle à fermeture rapide
• H 88,4, l 66, P 66 mm



E 491
Complément, pour instruments rotatifs.
• Convient pour 18 arbres de turbine (Ø 1,8 mm max.)
• Convient pour 30 arbres de poignée (Ø 2,8 mm max.)
• Convient également pour des instruments rotatifs, tels que ceux utilisés en podiatrie
• H 53, l 70, P 120 mm

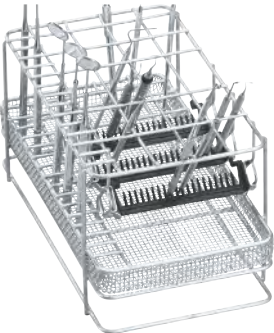

E 802/1
Complément, pour instruments verticaux divers.
• Convient pour charger des sondes, des pinces et des miroirs dentaires
• Équipé de 3 supports en plastique
• 8 compartiments, largeur d'environ 30 x 28 mm
• 8 compartiments, largeur d'environ 16 x 28 mm
• 15 compartiments, largeur d'environ 16 x 20 mm
• H 148, l 163, P 295 mm



A 830/1
Complément, pour extrémités de travail de miroirs dentaires séparables.
• Destiné à une utilisation dans les compléments E 337/1 et E 802/1
• 3 compart. Ø 8 mm, 14 compart. 10 x 19 mm, 2 compart. 8 x 19 mm
• Les poignées de miroirs dentaires peuvent être positionnées dans des compartiments pour compléments
• Convient pour des miroirs dentaires ≥ 3
• H 12, l 49, P 159 mm



E 522/1
Complément, pour 9 porte-empreintes dentaires.
• Équipé de 9 supports
• H 140, l 100, P 190 mm


Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
E 197	Composant pour la disposition optimale de différents instruments.	7984090	68519701D	4002514953380
E 473/2	Filtre avec couvercle, adapté aux micro-composants.	10623720	69547303D	4002515811962
E 491	Composant pour le chargement optimal des instruments rotatifs.	12686260	68549103D	4002516855194
E 802/1	Composant pour le chargement optimal de différents instruments verticaux.	7984170	69580202D	4002514953403
A 830/1	Composant pour le chargement optimal des miroirs dentaires séparables.	11729480	68683001D	4002516429203
E 522/1	Composant pour le chargement optimal de 9 porte-empreintes.	6697010	68552202D	4002514072722

Autres composants

pour tous les laveurs-désinfecteurs



E 521/2
Complément, pour 7 pinces d'extraction, orthodontiques ou orthopédiques pour molaires.
• Taille de compartiment : 21 x 80 mm
• Convient également pour des pinces comme celles utilisées en podiatrie
• H 135, l 100, P 189 mm

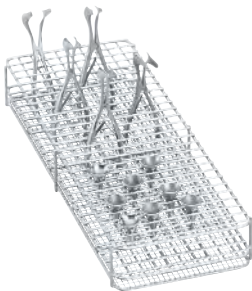

E 417/1
Composant pour la prise en charge optimale de jusqu'à 30 spéculums auriculaires et nasaux.
• Pour prise en charge d'env. 30 spéculums auriculaires et nasaux
• La largeur de mailles au fond correspond à 4 mm
• Utilisable dans le panier inférieur et supérieur



E 143
Complément, pour instruments divers.
• Treillis métallique 1 mm, largeur de maillage 5 mm, cadre 5 mm
• Équipé de 2 poignées de transport rabattables
• Charge maximale : 5 kg
• H 55, l 255, P 230 mm



A 815
Buse, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.
• Destiné à une utilisation avec A 812, A 813/1 ou dans un panier supérieur A 105/1
• Uniquement destiné à une utilisation dans A 105/1 en association avec un tuyau de filtration A 800
• Se compose de 4 injecteurs avec tuyaux en silicone, longueur env. 114 mm
• H 10, l 10, P 114 mm



A 813/1
Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.
• Destiné à une utilisation dans les paniers supérieurs A 105 et A 105/1, et les modules A 315/1 et APWD 646 – Utilisation uniquement en association avec un tuyau de filtration A 800
• Uniquement destiné à une utilisation dans le panier APWD 061 – Utilisation uniquement en association avec une plaque de filtre APWD 069 et un adaptateur A 822
• Deux pièces, comprenant une partie supérieure et une partie inférieure, composants inclus
• H 120, l 120, P 300 mm

Composants :
• Vis d'obturation E 362 [nombre] : 3
• Buse avec tuyau en silicone [nombre] : 4



A 814/1
Support, pour le traitement d'embouts pour Air Scaler et Piezo Scaler.
• Universel, pour différents types d'embouts
• Utilisation possible de plusieurs supports en combinaison avec A 813/1 ou A 812
• Utilisation possible dans les laveurs-désinfecteurs PWD 8531
• Destiné à une utilisation dans les paniers A 105, A 105/1, O 177/1 et APWD 061, ainsi que dans les modules A 315/1 et APWD 646 – Utilisation uniquement en association avec un tuyau de filtration A 800
• Peut uniquement être utilisé dans le O 177/1 en association avec le support A 812 et la plaque de filtre FP
• Uniquement destiné à une utilisation dans APWD 061 en association avec un adaptateur A 822 et un adaptateur A 813/1 avec un filtre APWD 069
• H 480, l 220, P 220 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
E 521/2	Composant pour le chargement optimal de 7 pinces d'extraction, orthodontiques et/ou techniques.	7476430	68552103D	4002514616438
E 417/1	Composant pour la prise en charge optimale de jusqu'à 30 spéculums auriculaires et nasaux.	12669760	69541703D	4002516855224
E 143	Composant pour la disposition optimale de différents instruments.	3830310	69514301D	4002511115989
A 815	Buse, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	10619690	68681500D	4002515830413
A 813/1	Adaptateur, pour le traitement optimal des instruments rotatifs avec canal de pulvérisation externe.	11763880	68681301D	4002516432555
A 814/1	Support pour le traitement optimal d'embouts pour Air Scaler et Piezo Scaler.	11691870	68681401D	4002516428558

Composants pour le dosage de produits chimiques et socles

PWD 8682, PWD 8692



PG 8596

Unité de distribution, pour produits chimiques et modules de dosage, inox.

- 2 tiroirs amovibles contenant chacun 3 bidons de 5 l
- Dimensions intérieures : H 285–690, l 250, P 425–555 mm
- Capacité pour 2 modules de dosage par niveau
- Divisée en 2 niveaux : tiroirs amovibles avec bac collecteur sur rails télescopiques pour l'alimentation de conteneurs en produits chimiques, taille des bidons (L x l x H)
- Capacité max. : 6 bidons de 5 l (245 x 145 x 225 mm*).
- Le tiroir inférieur accueille également des conteneurs plus grands :
 - 2 x 10 l : 140 x 193 x 307 mm
 - 2 x 10 l : 223 x 203 x 321 mm
 - 2 x 10 l : 229 x 193 x 323 mm
 - 2 x 10 l : 194 x 204 x 353 mm
 - 1 x 20 l : 289 x 233 x 396 mm
 - 1 x 25 l : 288 x 234 x 456 mm
- Le bac collecteur facilite la vidange résiduelle des bidons
- H 835, l 300, P 600 mm



PG 8596

Unité de distribution, pour produits chimiques et modules de dosage, blanc.

- 2 tiroirs amovibles contenant chacun 3 bidons de 5 l
- Dimensions intérieures : H 285–690, l 250, P 425–555 mm
- Capacité pour 2 modules de dosage par niveau
- Divisée en 2 niveaux : tiroirs amovibles avec bac collecteur sur rails télescopiques pour l'alimentation de conteneurs en produits chimiques, taille des bidons (L x l x H)
- Capacité max. : 6 bidons de 5 l (245 x 145 x 225 mm*).
- Le tiroir inférieur accueille également des conteneurs plus grands :
 - 2 x 10 l : 140 x 193 x 307 mm
 - 2 x 10 l : 223 x 203 x 321 mm
 - 2 x 10 l : 229 x 193 x 323 mm
 - 2 x 10 l : 194 x 204 x 353 mm
 - 1 x 20 l : 289 x 233 x 396 mm
 - 1 x 25 l : 288 x 234 x 456 mm
- Le bac collecteur facilite la vidange résiduelle des bidons
- H 835, l 300, P 600 mm



DOS K 85/1 flex

Module de dosage pour bidons 5 l, pour le dosage automatique des produits liquides avec affichage de jauge vide.

- Surveillance du dosage – sécurité élevée des processus selon la norme EN ISO 15883
- Pour le dosage des détergents liquides/agents neutralisants
- Canne d'aspiration de 214 mm pour bidons de produit de 5 l, avec capuchon flexible
- Jeu d'adaptation pour canne d'aspiration pour bidons de 10–30 l, disponible auprès du service après-vente



DOS K 85 flex

Module de dosage pour bidons 5–10 l, pour le dosage automatique des produits liquides avec affichage de jauge vide.

- Surveillance du dosage – sécurité élevée des processus selon la norme EN ISO 15883
- Pour le dosage des détergents liquides/agents neutralisants
- Canne d'aspiration de 352 mm pour bidons de 5–10 l, avec capuchon flexible
- Jeu d'adaptation pour canne d'aspiration pour bidons de 10–30 l, disponible auprès du service après-vente



DOS K 85/1 Comfort

Module de dosage pour bidons 5 l, pour dosage automatique des produits liquides avec détection niveau de remplissage.

- Surveillance du dosage – sécurité élevée des processus selon la norme EN ISO 15883
- Contrôle permanent du niveau de remplissage et possibilité d'intégrer Miele MOVE pour créer des notifications personnalisées
- Pour le dosage des détergents liquides/agents neutralisants
- Canne d'aspiration de 214 mm pour bidons de produit de 5 l, avec capuchon flexible
- Jeu d'adaptation pour canne d'aspiration pour bidons de 10–30 l, disponible auprès du service après-vente



DOS K 85 Comfort

Module de dosage pour bidons 5–10 l pour le dosage automatique de produits liquides, avec détection niveau de remplissage.

- Surveillance du dosage – sécurité élevée des processus selon la norme EN ISO 15883
- Contrôle permanent du niveau de remplissage et possibilité d'intégrer Miele MOVE pour créer des notifications personnalisées
- Pour le dosage des détergents liquides/agents neutralisants
- Canne d'aspiration de 352 mm pour bidons de produit de 5–10 l, avec capuchon flexible
- Jeu d'adaptation pour canne d'aspiration pour bidons de 10–30 l, disponible auprès du service après-vente

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
PG 8596	Armoire de dosage pour produits chimiques et modules de dosage, inox.	10087340	69859602D	4002515558324
PG 8596	Armoire de dosage pour produits chimiques et modules de dosage, blanc.	10087330	69859601D	4002515558317
DOS K 85/1 flex	Module de dosage pour bidon de 5 litres avec affichage de jauge vide pour le dosage automatique de produits liquides.	11498920	69747053D	4002516365297
DOS K 85 flex	Module de dosage pour bidons de 5–10 litres avec affichage de jauge vide pour le dosage automatique de produits liquides.	11498880	69747052D	4002516357438
DOS K 85/1 Comfort	Module de dosage pour bidon de 5 litres avec détection niveau de remplissage pour le dosage automatique de produits liquides.	12831620	69747551NWE	4002516913986
DOS K 85 Comfort	Module de dosage pour bidon de 5–10 litres avec détection niveau de remplissage pour le dosage automatique de produits liquides.	12831610	69747550NWE	4002516913979

Composants pour le dosage de produits chimiques et socles

PWD 8682, PWD 8692



UG 30-60/60-85/1

Socle fermé, pour appareil, profondeur 60 cm, largeur 60 cm.

- Convient pour tous les appareils d'une largeur et d'une profondeur de 60 cm
- H 317, l 600, P 600 mm



UG 30-90/60-85/1

Socle fermé, pour appareil et meuble contigu, profondeur 60 cm, largeur 90 cm.

- Convient pour le déminéralisateur PG 8595 et l'armoire DOS PG 8596
- Socle en inox, boulonné à l'appareil
- H 300, l 897, P 542 mm



UG 50-64

Socle avec porte pour le chargement et le déchargement ergonomiques, hauteur 56 cm.

- Possibilité de rangement, par ex. pour les produits chimiques
- H 560, l 600, P 540 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
UG 30-60/60-85/1	Socle, fermé pour surélever l'appareil, profondeur 60 cm, largeur 60 cm.	12650010	69390100D	4002516873969
UG 30-90/60-85/1	Socle, fermé pour surélever l'appareil y compris le meuble contigu, profondeur 60 cm, largeur 90 cm.	12650160	69390200D	4002516887874
UG 50-64	Socle, avec porte pour surélever l'appareil, profondeur 54 cm, largeur 60 cm.	98501755	FR98505414	4002515919651

Composants pour le traitement à l’eau déminéralisée

pour tous les laveurs-désinfecteurs



PG 8595
Déminéralisateur, pour deux cartouches de déminéralisation totale, inox.
• Convient pour VE P 2800 et VE P 2000
• Raccordement du module de conductivité ConductivityMeter CM/1 possible
• Dimensions externes : H 835 (820 sans couvercle), l 300, P 600 mm
• H 835, l 300, P 600 mm



PG 8595
Déminéralisateur, pour deux cartouches de déminéralisation totale, blanc.
• Convient pour VE P 2800 et VE P 2000
• Raccordement du module de conductivité ConductivityMeter CM/1 possible
• Dimensions externes : H 835 (820 sans couvercle), l 300, P 600 mm
• H 835, l 300, P 600 mm



SK/1
Raccord à action rapide, pour le remplacement facile des cartouches de déminéralisation.
• 2 x raccords enfichables VA 3/4", 2 x raccords à action rapide 3/4"
• Joints inclus pour le jeu de tuyaux existant.

Composants pour le traitement à l’eau déminéralisée

pour tous les laveurs-désinfecteurs



E 315/1
Résine à usage unique pour l’eau déminéralisée, pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale
• Pour une utilisation dans la cartouche vide LP 2800/1
• 20 l de résines homogénéisées
• Carton contenant 2 sacs de 10 l
• Mise sous vide dans des sacs en plastique
• Sac de filtre de remplacement inclus



E 316
Baril en plastique pour le remplissage des résines à usage unique
• Avec couvercle et entonnoir pour résines à usage unique
• Kit de remplissage, max. 30 l



VEP 2000/1
Cartouche de déminéralisation totale pour le traitement de l’eau.
• Refoulement max. : 450 l/h
• Le module de conductivité ConductivityMeter CM/1 mesure la capacité restante
• Température max. d’arrivée d’eau 40 °C – Plage de pression de 0,5–10 bar
• Volume de résine 12,5 l
• H 410, Ø 230 mm



UfZ/1
Jeu d’adaptation pour seconde cartouche, pour un remplacement rapide avec une seconde cartouche de déminéralisation totale/partielle.
• 2 x raccords enfichables VA 3/4" pour une installation sur une seconde cartouche



VEP 2800/1
Cartouche de déminéralisation totale pour le traitement de l’eau.
• Refoulement max. : 800 l/h
• Le module de conductivité ConductivityMeter CM/1 mesure la capacité restante
• Température max. d’arrivée d’eau 40 °C – Plage de pression de 0,5–10 bar
• Volume de résine 19 l
• H 570, Ø 230 mm



LP 2800/1
Cartouche de déminéralisation, vide, pour le remplissage manuel avec des résines à usage unique.
• Refoulement max. : 800 l/h
• Température max. d’arrivée d’eau 40 °C – Plage de pression de 0,5–10 bar
• Volume de résine 19 l
• H 570, Ø 230 mm



CM/1
Module de conductivité ConductivityMeter pour la mesure du niveau de conductivité et indicateur de remplacement de cartouche.
• Convient pour les cartouches de déminéralisation totale
• Indicateur optique et sonore de remplacement de cartouche
• Mesure en 10 points dans la plage 0–199,9 µS/cm
• Affichage sur une ligne, possibilité de raccordement à une LED externe
• Support mural et bloc d’alimentation inclus
• H 110, l 125, P 52 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
PG 8595	Déminéralisateur pour deux cartouches de déminéralisation totale ou partielle, inox.	10087320	69859502D	4002515558102
PG 8595	Déminéralisateur pour deux cartouches de déminéralisation totale ou partielle, blanc.	10087310	69859501D	4002515558096
SK/1	Raccord rapide pour le remplacement facile et pratique des cartouches de déminéralisation.	12684790	69431902D	4002516881131
UfZ/1	Jeu d'adaptation pour deux cartouches pour le remplacement rapide d'une cartouche de déminéralisation totale/partielle.	12684950	69431906D	4002516881148
VEP 2800/1	Cartouche de déminéralisation totale pour la préparation optimale de l'eau.	12681040	69431006D	4002516874027
LP 2800/1	Cartouche de déminéralisation, vide pour le remplissage manuel de résines à usage unique.	12684720	69431806D	4002516881124

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
E 315/1	Résine à usage unique de déminéralisation totale pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale	12945010	69431502D	4002516957515
E 316	Baril en plastique pour le remplissage des résines à usage unique	3830360	69431601D	4002511115309
VEP 2000/1	Cartouche de déminéralisation totale pour la préparation optimale de l'eau.	12680820	69431102D	4002516874010
CM/1	Module de conductivité ConductivityMeter pour la mesure du niveau de conductivité et indicateur de remplacement de cartouche.	10889920	69450002D	4002516057420



ProCare Dent – Produits chimiques pour les laveurs-désinfecteurs Miele

Aperçu des produits



ProCare Dent 10 A – 5 l

- Détergent liquide, alcalin, 5 l pour le traitement automatique des instruments dentaires.**
- Convient pour les instruments dentaires, pas pour les instruments rotatifs
 - Adapté aux séquences de processus des laveurs-désinfecteurs Miele
 - Protection élevée des matériaux/contre la corrosion pour les instruments en inox
 - Exempt de tensio-actifs
 - Exempt d'additifs oxydants



ProCare Dent 10 MA – 5 l

- Détergent liquide, légèrement alcalin, 5 l pour le traitement automatique des instruments dentaires et rotatifs.**
- Convient particulièrement pour les instruments rotatifs
 - Adapté aux séquences de processus des laveurs-désinfecteurs Miele
 - Très doux pour les matériaux
 - Contient des enzymes
 - Vérifier la compatibilité avec l'aluminium anodisé avant utilisation



ProCare Dent 11 A – 1 kg

- Détergent en poudre, alcalin, 1 kg pour le traitement automatique des instruments dentaires.**
- Convient pour les instruments dentaires, pas pour les instruments rotatifs
 - Adapté aux séquences de processus des laveurs-désinfecteurs Miele
 - Excellente compatibilité avec les matériaux
 - Exempt d'additifs oxydants
 - Protection contre la corrosion pour les instruments et les plateaux en inox

Produits chimiques ProCare

ProCare Dent

ProCare Universal



ProCare Dent 11 A – 10 kg

- Détergent en poudre, alcalin, 10 kg pour le traitement automatique des instruments dentaires.**
- Convient pour les instruments dentaires, pas pour les instruments rotatifs
 - Adapté aux séquences de processus des laveurs-désinfecteurs Miele
 - Excellente compatibilité avec les matériaux
 - Exempt d'additifs oxydants
 - Protection contre la corrosion pour les instruments et les plateaux en inox

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
ProCare Dent 10 A – 5 l	Détergent liquide, alcalin, 5 l pour le traitement automatique des instruments dentaires.	12786440	66912201V1	4029577157975
ProCare Dent 10 MA – 5 l	Détergent liquide, légèrement alcalin, 5 l pour le traitement automatique des instruments dentaires et rotatifs.	12680640	66913204V1	4029577158101
ProCare Dent 11 A – 1 kg	Détergent en poudre, alcalin, 1 kg pour le traitement automatique des instruments dentaires.	12786510	66911101V1	4029577157968
ProCare Dent 11 A – 10 kg	Détergent en poudre, alcalin, 10 kg pour le traitement automatique des instruments dentaires.	12786530	66911201V1	4029577157944

ProCare Dent – Produits chimiques pour les laveurs-désinfecteurs Miele

Aperçu des produits



ProCare Dent 30 C – 1 l [type 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l pour le traitement automatique des instruments dentaires et rotatifs.

- Convient particulièrement pour les instruments rotatifs
- Adapté aux séquences de processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Bonne compatibilité avec les matériaux, sans phosphates
- Neutralise les résidus alcalins transportés
- À base d'acide citrique
- Plus facile à ajouter dans le doseur de porte grâce au bec verseur



ProCare Dent 30 C – 5 l

Agent neutralisant, acide, 5 l pour le traitement automatique des instruments dentaires et rotatifs.

- Convient particulièrement pour les instruments rotatifs
- Adapté aux séquences de processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Bonne compatibilité avec les matériaux, sans phosphates
- Neutralise les résidus alcalins transportés
- À base d'acide citrique



ProCare Dent 30 P – 1 l [type 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l pour le traitement automatique des instruments dentaires.

- Convient pour les instruments dentaires, pas pour les instruments rotatifs
- Adapté aux séquences de processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Élimine la décoloration et les salissures solubles dans l'acide
- Neutralise les résidus alcalins transportés
- À base d'acide phosphorique
- Plus facile à ajouter dans le doseur de porte grâce au bec verseur



ProCare Dent 30 P – 5 l

Agent neutralisant, acide, 5 l pour le traitement automatique des instruments dentaires.

- Convient pour les instruments dentaires, pas pour les instruments rotatifs
- Adapté aux séquences de processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Élimine la décoloration et les salissures solubles dans l'acide
- Neutralise les résidus alcalins transportés
- À base d'acide phosphorique



ProCare Dent 40 – 1 l [type 1]

Produit de rinçage, 1 l, pour le traitement automatique des instruments dentaires et rotatifs.

- Convient aux instruments dentaires et rotatifs
- Adapté aux séquences de processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Améliore et accélère le séchage
- Neutralise les résidus alcalins transportés
- Plus facile à ajouter dans le doseur de porte grâce au bec verseur

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
ProCare Dent 30 C – 1 l [type 1]	Agent neutralisant, acide, 1 l pour le traitement automatique des instruments dentaires et rotatifs.	12796290	66915203V1	4029577158057
ProCare Dent 30 C – 5 l	Agent neutralisant, acide, 5 l pour le traitement automatique des instruments dentaires et rotatifs.	12796300	66915303V1	4029577158033
ProCare Dent 30 P – 1 l [type 1]	Agent neutralisant, acide, 1 l pour le traitement automatique des instruments dentaires.	12796350	66914203V1	4029577158002
ProCare Dent 30 P – 5 l	Agent neutralisant, acide, 5 l pour le traitement automatique des instruments dentaires.	12796360	66914303V1	4029577157982
ProCare Dent 40 – 1 l [type 1]	Produit de rinçage, 1 l, pour le traitement automatique des instruments dentaires et rotatifs.	12796390	66917103V1	4029577158095

ProCare Universal – Nettoyage et entretien des appareils pour les appareils Miele Professional



ProCare Universal 61 – 6 kg

Sel régénérant, 3 x 2 kg, pour une régénération optimale de l'adoucisseur intégré.

- Prévient l'entartrage et protège les charges



ProCare Universal 70 ST – 750 ml

Produit de lavage universel, légèrement alcalin, 750 ml, pour l'élimination en douceur des résidus de graisse et des salissures.

- Haute concentration efficace pour un résultat de lavage optimal
- Excellent pouvoir de dissolution des huiles et des graisses
- Très doux pour les matériaux
- Recommandé pour les appareils en inox Miele Professional et Steelco
- Récompensé par l'Écolabel européen
- Emballage recyclable



ProCare Universal 77 A – 500 g

Nettoyant pour machines, alcalin, 500 g pour l'élimination des résidus d'amidon tenaces.

- Élimination des dépôts de graisse
- Réduction des odeurs
- Spécialement conçu pour les appareils Miele Professional



ProCare Universal 81 C – 250 g

Détartrant pour appareil, acide, 250 g pour l'élimination des dépôts calcaires tenaces.

- Élimination des dépôts de silicates
- Prolonge la durée de vie des résistances
- Spécialement conçu pour les appareils Miele Professional

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
ProCare Universal 61 – 6 kg	Sel régénérant, 3 x 2 kg pour une régénération optimale de l'adoucisseur intégré.	9195780	66916102EU1	4002515075319
ProCare Universal 70 ST – 750 ml	Nettoyant multi-fonctions, légèrement alcalin, 750 ml pour l'élimination en douceur des résidus graisseux et des salissures.	12938290	66917702V1	4002516954507
ProCare Universal 77 A – 500 g	Nettoyant pour machines, alcalin, 500 g pour l'élimination des dépôts d'amidon tenaces.	12456030	66921701V1	4002516771524
ProCare Universal 81 C – 250 g	Détartrant pour appareils, acide, 250 g pour l'élimination des dépôts calcaires tenaces.	12456130	66920601V1	4002516770862

ProCare Universal – Nettoyage et entretien des appareils

pour les appareils Miele Professional



CK/1 DIN 51

Clé pour bidon permettant d’ouvrir les bidons ProCare de 5 l, 10 l et 20 l.

- Clé manuelle robuste et durable
- Ouverture et fermeture faciles des bidons de produit sans forcer
- Utilisable des deux côtés



DTD 2

Bac collecteur pour le positionnement sûr des bidons de produit ProCare.

- Espace pour deux bidons de produit ProCare
- Emplacement sûr pour les bidons de 5 l et 10 l de la série ProCare
- Vidange résiduelle optimale du bidon de produit grâce à l’inclinaison
- Convient pour l’utilisation dans un meuble contigu



DV 1 DIN 51

Robinet de vidange pour verser facilement les produits liquides ProCare.

- Dosage rapide et facile sans gaspillage
- Bouchon à visser DIN 51 pour les bidons de produit ProCare de 5 l et 10 l
- Levier souple pour une ouverture et une fermeture faciles



MB1 250

Verre doseur, 250 ml, pour le dosage facile des produits ProCare.

- Verre doseur empilable avec poignée solide
- Imprimé avec une échelle en ml par incréments de 5 ml
- Pour le dosage précis des produits liquides et en poudre

Commandez les produits ProCare via votre réseau de distribution ou directement sur notre boutique en ligne : www.miele-professional.fr/p/s/

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
CK/1 DIN 51	Clé pour bidon permettant d’ouvrir facilement des bidons de produit ProCare de 5 l, 10 l et 20 l.	11851600	66990002EU1	4002516480839
DTD 2	Bac collecteur pour le positionnement sûr des bidons de produit ProCare.	10695460	61910001D	4002515933695
DV1 DIN51	Vanne de vidange pour verser facilement les produits liquides ProCare.	12594480	59713001V1	4002516815440
MB1 250	Verre doseur, 250 ml, pour le dosage facile des produits ProCare.	12594330	59712001V1	4002516805953

ProCare Dent – Produits chimiques pour les laveurs-désinfecteurs Miele

Informations techniques complémentaires

Désignation du produit	Propriétés du produit	Application principale et salissures	Compatibilité avec les matériaux
Lavage			
ProCare Dent 10 MA	• Très doux pour les matériaux • Contient des tensio-actifs, des alcalis et des enzymes • Convient particulièrement pour les instruments rotatifs	Application principale : cabinets dentaires	Convient pour : les instruments standard et rotatifs, l'aluminium anodisé doit faire l'objet d'un test préalable pour la compatibilité
● Légèrement alcalin		Salissures : élimination du sang et des résidus organiques	
ProCare Dent 10 A	• Exempt d'oxydants et de tensio-actifs • Convient pour les instruments standard (pas pour les instruments rotatifs) • Contient des phosphates	Application principale : cabinets dentaires	Convient pour : les instruments standard, les instruments et les plateaux en inox
● Alcalin		Salissures : élimination du sang et des résidus organiques	Ne convient pas pour : les instruments rotatifs
ProCare Dent 11 A	• Très doux pour les matériaux • Contient des tensio-actifs et des phosphates • Convient pour les instruments standard (pas pour les instruments rotatifs)	Application principale : cabinets dentaires	Convient pour : les instruments standard, les instruments et les plateaux en inox
● Alcalin		Salissures : élimination du sang et des résidus organiques	Ne convient pas pour : les instruments rotatifs
Neutralisation			
ProCare Dent 30 C	• Doux à l'usage • À base d'acide citrique • Bonne compatibilité avec les matériaux • Exempt de tensio-actifs et de phosphates • Convient particulièrement pour les instruments rotatifs	Application principale : cabinets dentaires	Convient pour : les instruments standard et rotatifs, l'aluminium anodisé
● Acide		Salissures : élimination des dépôts calcaires et des contaminations solubles dans l'acide	
ProCare Dent 30 P	• Hautes performances • À base d'acide phosphorique • Exempt de tensio-actifs • Excellentes propriétés de rinçage • Convient pour les instruments standard (pas pour les instruments rotatifs)	Application principale : cabinets dentaires	Convient pour : les instruments standard
● Acide		Salissures : élimination des dépôts calcaires et des contaminations solubles dans l'acide	Ne convient pas pour : les instruments rotatifs, les métaux non ferreux, l'aluminium anodisé et les pièces chromées et nickelées
Rinçage final			
ProCare Dent 40	• Pour un séchage amélioré • Prévention des taches d'eau • Convient pour les instruments standard et rotatifs	Application principale : cabinets dentaires	Convient pour : les instruments standard et rotatifs
● Acide		Salissures : neutralisation des résidus alcalins et du bain lessiviel	

ProCare Dent – Produits chimiques pour les laveurs-désinfecteurs Miele

Recommandé pour le traitement des instruments dentaires

Laveur-désinfecteur




PWD 8682, PWD 8682 C et PWD 8692 avec 2 ou 3 pompes ET un compartiment de dosage du produit de rinçage		PWD 8531 avec 2 pompes (AUCUN compartiment de dosage du produit de rinçage)	
Type d'instrument			
Traitement de routine des instruments standard		Traitement de routine des instruments standard et rotatifs	
Programme			
Vario TD Dental		Vario TD Dental	
Produit de lavage			
ProCare Dent 10 A (liquide) ou ProCare Dent 11 A (poudre)		ProCare Dent 10 MA (liquide)	
Agent neutralisant			
ProCare Dent 30 P		ProCare Dent 30 C	
Produit de rinçage			
ProCare Dent 40		ProCare Dent 40	



Sécurité supplémentaire pour le travail quotidien en cabinet dentaire

Solutions pour les contrôles de routine lors du traitement des instruments dentaires

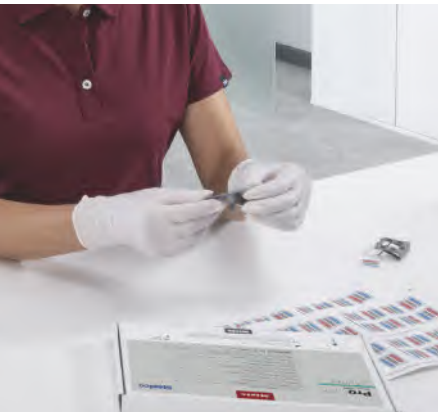

ProCare Sure I-PM

- Avantages d'un seul coup d'œil :**
- Sécurité au quotidien grâce à un contrôle supplémentaire du traitement en machine
 - Positionnement facile dans la cuve grâce à un support en plastique robuste
 - Comparaison simple avant/après sur la base de bandelettes colorées et d'une valeur de référence
 - Documentation rapide grâce aux indicateurs autocollants
 - Qualité Miele éprouvée

ProCare Protein Check

- Avantages d'un seul coup d'œil :**
- Le moyen le plus rapide de contrôler la présence de protéines
 - Test de détection des résidus de protéines à l'issue de la désinfection thermique
 - Preuve de la présence de résidus sur les instruments
 - Application précise à l'aide de la tige d'indicateur
 - Temps de maintien court de 3 minutes

ProCare Protein Check et ProCare Sure I-PM



Le ProCare Sure I-PM s'utilise pendant la **mise en service et la validation**

Le benchmark sert d'indicateur de processus spécifique au client (incluant les produits chimiques, la qualité de l'eau). Aucune corrélation directe avec l'efficacité du nettoyage.

ProCare Sure I-PM

Comparaison visuelle avec le ProCare Sure I-PM **après** traitement

ProCare Protein Check

Permet un contrôle visuel des protéines résiduelles **après un traitement validé en laveur-désinfecteur**



Sécurité supplémentaire pour le travail quotidien en cabinet dentaire

Solutions pour les contrôles de routine lors du traitement des instruments dentaires



ProCare Sure I-PM
Indicateur de processus, feuilles d'indicateurs pour la surveillance visuelle de routine durant les processus de nettoyage et de désinfection.

- Sécurité supplémentaire dans l'utilisation courante
- Facile à manipuler grâce aux indicateurs autocollants
- 192 indicateurs par unité de conditionnement
- Documentation complète avec le formulaire en téléchargement PDF



ProCare Sure H-01
Support en plastique pour indicateurs ProCare Sure I-PM.

- Support en plastique robuste pour un positionnement simple



Kit de démarrage ProCare Sure I-PM
Indicateur de processus, kit de démarrage pour la surveillance visuelle de routine durant les processus de nettoyage et de désinfection.

- Sécurité supplémentaire dans l'utilisation courante
- Facile à manipuler grâce aux indicateurs autocollants
- 2 supports en plastique et 64 indicateurs individuels par unité de conditionnement
- Documentation complète avec le formulaire en téléchargement PDF

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
ProCare Sure I-PM	Indicateur de processus, bandelettes indicatrices pour la surveillance visuelle de routine durant les processus de nettoyage et de désinfection.	11577000	68915101D	4002516364702
ProCare Sure H-01	Support en plastique pour le maintien d'indicateurs ProCare Sure I-PM.	11576830	68915201D	4002516364719
ProCare Sure I-PM Starter	Indicateur de processus, kit de démarrage pour la surveillance visuelle de routine durant les processus de nettoyage et de désinfection.	11577150	68915301D	4002516364696



Stérilisateurs compacts

Appareils

CUBE

PST 1710, PST 2210

CUBE X

PST 1720, PST 2220

Composants



Stérilisateurs compacts

Avantages Miele



Fonctionnement simple

Le grand écran tactile couleur et une structure intuitive des menus rendent le travail quotidien dans un cabinet plus simple, plus rapide et plus efficace.



Durée de cycle des programmes

Le Cube X se distingue par des durées de cycle réduites, garantit une durée de vie prolongée des instruments et offre des économies d'énergie significatives. Grâce à la technologie brevetée EcoDry, les temps de séchage sont adaptés aux charges.



Transmission sécurisée des données

Traçabilité facile grâce à une sauvegarde automatique des protocoles de charges sur une mémoire USB flash. La communication via Wi-Fi est une autre option. Cela permet un transfert facile des données vers d'autres systèmes logiciels.



Gestion individuelle des utilisateurs pour plusieurs utilisateurs

Si nécessaire, les utilisateurs contrôlant et approuvant les cycles de stérilisation CUBE X peuvent être enregistrés de façon numérique. En outre, l'authentification de l'utilisateur (saisie d'un code PIN) peut être réglée avant le démarrage du programme, pour la libération de la charge et/ou avant l'impression des étiquettes.



Programme S-Fast pour pièces à main

Pour un traitement rapide des instruments non emballés. Les instruments solides non emballés, ainsi que les turbines dentaires et les contre-angles, peuvent être stérilisés dans le programme S-Fast en seulement 13 minutes.



Alimentation en eau

Automatiquement en raccordant à un système de traitement de l'eau ou manuellement par le biais d'un réservoir d'eau.



Compatible avec Miele MOVE

En association avec Miele MOVE, les données des stérilisateurs compacts CUBE peuvent être gérées efficacement. La solution numérique offre une interface utilisateur intuitive avec une traçabilité complète et une aide à la résolution directe.



Intervalles de maintenance prolongés

Une maintenance est uniquement nécessaire tous les 5 ans ou au plus tard après 4000 cycles.

Stérilisateurs compacts

Appareil posable
CUBE, CUBE X



CUBE – Stérilisateur à la vapeur de classe B

- Volume de la chambre 17 ou 22 l
- Capacité : jusqu’à 5 plateaux (3 plateaux, cadre de maintien convertible et support de plateaux fournis)
- Facilité d’utilisation grâce à l’écran tactile couleur
- Réglage pratique des programmes
- Confort d’utilisation grâce à une conception ergonomique
- Traçabilité via USB, Wi-Fi (en option)
- Alimentation en eau flexible : automatiquement en raccordant à un système de traitement de l’eau ou manuellement par le biais d’un réservoir d’eau

Articles	Habillage extérieur	Largeur de l'appareil	Raccordement électrique et calibre des fusibles	Réf. mat.	Numéro d'article	EAN
PST 1710	AW	465 mm	200–240 V AC 50/60 Hz 10 A	11363240	63171000INT	9010532002459
PST 2210	AW	465 mm	200–240 V AC 50/60 Hz 10 A	11368180	63221000INT	9010532002626

Articles	Habillage extérieur	Largeur de l'appareil	Raccordement électrique et calibre des fusibles	Réf. mat.	Numéro d'article	EAN
PST 1720	AW	465 mm	200–240 V AC 50/60 Hz 10 A	11368190	63172000INT	9010532001865
PST 2220	AW	465 mm	200–240 V AC 50/60 Hz 10 A	11368200	63222000INT	9010532002299

Maintenance : tous les cinq ans ou au plus tard après 4000 cycles.



CUBE X – Stérilisateur à la vapeur de classe B

- Volume de la chambre 17 ou 22 l
- Capacité : jusqu’à 5 plateaux (5 plateaux, cadre de maintien convertible et support de plateaux fournis)
- Facilité d’utilisation grâce à l’écran tactile couleur
- Réglage pratique des programmes, par ex. démarrage programmé
- Confort d’utilisation grâce à une conception ergonomique
- Traçabilité via USB, Ethernet, Wi-Fi (en option)
- Alimentation en eau flexible : automatiquement en raccordant à un système de traitement de l’eau ou manuellement par le biais d’un réservoir d’eau
- Durées de cycles plus courtes grâce à la technologie EcoDry
- Programme S-Fast pour pièces à main
- Gestion individuelle des utilisateurs pour plusieurs utilisateurs
- Assistance moderne à la maintenance via l’écran de l’appareil

Caractéristiques techniques

CUBE, CUBE X

		PST 1710	CUBE PST 2210	PST 1720	CUBE X PST 2220
Modèle et conception					
Appareil posable		◆	◆	◆	◆
Habillage extérieur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Verrouillage de porte électrique		◆	◆	◆	◆
Capacité					
Instruments [kg]		4,5	5,5	4,5	6
Textiles [kg]		1,5	2	1,5	2
Cassettes, réservoirs [kg]		9	9	9	9
Programmes et durées de cycle*					
Programmes [nombre]		3	3	4	4
134 °C Universal [min]	Vide	43,5	46,5	22,5	22,5
Durée de maintien : 5,5 min	Pleine charge	52,5	56,5	42,5	46,5
121 °C Universal [min]	Vide	65	66	35	35
Durée de maintien : 20,5 min	Pleine charge	74	77	62	67
134 °C Prions [min]	Vide	42	42	38	38
Durée de maintien : 20,5 min	Pleine charge	67	70	59	63
Programme S-Fast [min]	Vide	–	–	13	13
Durée de maintien : 3,5 min	2 kg	–	–	20	21
Test de vide [min]		19	20	17	18
Test Helix B&D [min]		23	24	21	21
Commandes					
Écran tactile couleur		◆	◆	◆	◆
Taille de l’écran en pouces		4,3	4,3	4,3	4,3
Boutons d’accès direct		◆	◆	◆	◆
Affichage du temps restant		◆	◆	◆	◆
Affichage de déroulement de programme		◆	◆	◆	◆
Identification de l’utilisateur individuel		–	–	◆	◆
Mémoire des cycles [nombre de cycles]		400	400	400	400
Indicateur de service automatique		◆	◆	◆	◆
Options de mise en réseau					
Interface USB		2	2	5	5
Interface LAN		–	–	1	1
Wi-Fi (option)		◆	◆	◆	◆
Alimentation en eau externe					
Consommation d’eau [l/charge]		0,1–0,6	0,1–0,6	0,3–0,7	0,3–0,7
Vanne de remplissage d’eau automatique		◆	◆	◆	◆
Pression d’eau nécessaire [bar]		2–8,6	2–8,6	2–8,6	2–8,6
Débit [l/min]		0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5
Température d’arrivée d’eau maximale [°C]		35	35	35	35
Raccordement électrique					
200–240 V AC ; 50/60 Hz		◆	◆	◆	◆
Fusible [A]		10	10	10	10
Consommation [kW]		2,0–2,4	2,0–2,4	2,0–2,4	2,0–2,4
Chambre de stérilisation					
Volume total [l]		17	22	17	22
Volume total, Ø [mm]		250	250	250	250
Volume total, profondeur [mm]		362	440	362	440
Espace utile de la cuve H/l/P [mm]		195 x 195 x 312	195 x 195 x 400	195 x 195 x 312	195 x 195 x 400
Soupape de surpression [bar]		2,6	2,6	2,6	2,6
Thermostats de sécurité [°C]		180	180	180	180
Filtre bactériologique [µm]		0,3	0,3	0,3	0,3
Générateur vapeur					
Soupape de surpression [bar]		5	5	5	5
Thermostats de sécurité [°C]		230	230	230	230
Dimensions, poids					
Dimensions extérieures : H/l/P [mm]		452 x 465 x 634	452 x 465 x 634	452 x 465 x 634	452 x 465 x 634
Espace minimal requis H/l/P [mm]		502 x 565 x 450	502 x 565 x 450	502 x 565 x 450	502 x 565 x 450
Espace d’orifice de remplissage H/l/P [mm]		452 x 532 x 357	452 x 532 x 357	452 x 532 x 357	452 x 532 x 357
Poids à vide [kg]		42,5	44	46	47,5
Agréments et normes					
CE 0051 2017/745 (MDR), 2014/68/EU, EN 13060, CEI 61010-1, CEI 61010-2-040, CEI 61326-1, CEI 61770					

* Les durées de cycles peuvent varier selon le type de charge, le temps de séchage et l’alimentation en eau et en électricité
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Dispositifs médicaux non remboursables par la Sécurité Sociale.

Composants pour CUBE et CUBE X

PST 1710, PST 2210, PST 1720, PST 2220



APST 003
Plateau aluminium, pour instruments ou articles poreux, petite taille.
• Perforé pour une perméabilité optimale à la vapeur
• Stabilité élevée associée à un poids faible
• Convient pour PST 1710 et PST 1720
• H 19,5, l 186, P 287 mm



APST 004
Plateau aluminium, pour instruments ou articles poreux, grande taille.
• Perforé pour une perméabilité optimale à la vapeur
• Stabilité élevée associée à un poids faible
• Convient pour PST 2210 et PST 2220
• H 19,5, l 186, P 379 mm



APST 005
Support de plateau, pour retirer les plateaux aluminium en toute sécurité.
• Poignée en plastique

Composants pour CUBE et CUBE X

PST 1710, PST 2210, PST 1720, PST 2220



Système de traitement de l’eau Plug & Pure – La solution compacte pour une alimentation en eau déminéralisée de haute qualité

Le système de traitement de l’eau Plug & Pure peut être directement raccordé aux stérilisateurs compacts CUBE et CUBE X. Il assure une alimentation en eau déminéralisée de haute qualité grâce au principe d’échange d’ions.

- Avantages du système de traitement de l’eau Plug & Pure :
- Qualité de l’eau constamment élevée et conforme aux normes
 - Remplacement des cartouches en quelques secondes seulement
 - Aucun outil supplémentaire n’est nécessaire
 - Installation pratique sur pieds ou support mural



APST 000
Système de traitement de l’eau Plug & Pure pour l’alimentation en eau déminéralisée.
• Se compose d’un kit de raccordement, d’une tête de filtre et d’une cartouche filtrante
• Tête de filtre innovante, permettant un remplacement rapide et facile
• Stable et doux pour les surfaces : pieds réglables en plastique
• Support mural inclus pour un montage facile sur un mur
• Qualité de l’eau élevée en permanence
• H 476, l 124, P 123 mm




APST 001
Cartouche de remplacement, pour le système de traitement de l’eau APST 000, pour l’alimentation en eau déminéralisée.
• Dimensions compactes pour un rangement ordonné dans un meuble bas
• H 469, l 123, P 123 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d’art.	EAN
APST 003	Plateau aluminium, pour instruments ou articles poreux, petit.	11377310	68900003D	4002516297055
APST 004	Plateau aluminium, pour instruments ou articles poreux, grand.	11377330	68900004D	4002516299448
APST 005	Grille pour plateau, pour retirer en toute sécurité les plateaux aluminium.	11377340	68900005D	4002516298199

Article	Description	Référence mat.	N° d’art.	EAN
APST 000	Système de traitement de l’eau Plug & Pure, pour fournir de l’eau déminéralisée.	11401510	68900009D	4002516297031
APST 001	Cartouche de rechange pour le système de traitement de l’eau APST 000, pour fournir de l’eau déminéralisée.	11401750	68900001D	4002516266495

Composants pour CUBE et CUBE X

PST 1710, PST 2210, PST 1720, PST 2220

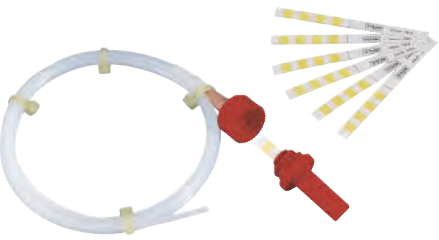

ZS 150-1
Test Helix, pour contrôler les processus sur les stérilisateurs compacts.

- Test de pénétration de vapeur avec indicateur chimique
- Affichage des résultats avec un changement de couleur
- 1 dispositif d'épreuve du procédé, 250 indicateurs
- H 22, l 117, P 177 mm



APST 006
Joint de porte, pour assurer l'étanchéité de la chambre sous pression.

- Doit être remplacé après 800 cycles de stérilisation



APST 007
Microfiltre, pour éliminer la contamination bactériologique de l'air ambiant.

- Facile à remplacer en façade des stérilisateurs compacts
- Doit être remplacé après 400 cycles de stérilisation



APST 008
Filtre, pour capturer les particules de poussière à l'intérieur de l'appareil.

- Cassette compacte coulissante pour un remplacement facile
- Doit être remplacé après 400 cycles de stérilisation



APST 002/1
Clé USB Wi-Fi, pour la mise en réseau simple des stérilisateurs compacts avec les réseaux Wi-Fi.

- Facile à connecter sur un port USB de l'appareil
- Transmission des données de processus à un appareil avec fonction Wi-Fi

Pour les éléments de traçabilité, voir à partir de la page 90.

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
ZS 150-1	Test Helix, pour contrôler de manière optimale le processus du stérilisateur compact.	9910260	68915002D	4002515540381
APST 006	Joint de porte, pour assurer l'étanchéité de la chambre sous pression.	11377350	68900006D	4002516298205
APST 007	Microfiltre, pour éliminer la contamination bactériologique de l'air ambiant.	11377360	68900007D	4002516298311
APST 008	Filtre, pour capturer les particules de poussière à l'intérieur de l'appareil.	11377370	68900008D	4002516256397
APST 002/1	Clé USB Wi-Fi, pour la mise en réseau simple des stérilisateurs aux réseaux Wi-Fi.	12141160	68900012D	4002516677215





Portail Internet Miele MOVE avec traçabilité

La solution de numérisation des données relatives aux appareils et aux processus dans les cabinets



Miele MOVE Connect
Abonnement pour les premiers pas dans la gestion numérique d'appareils Miele Professional.

- Données de consommation significatives*
- Transparence sur l'état de l'appareil et mises à jour automatiques
- Données d'exploitation claires et traçabilité générale
- Assistance complète à distance
- Aperçu personnalisé et notifications utiles
- Mise en réseau illimitée des appareils et nombre illimité d'utilisateurs
- Utilisation gratuite de toutes les fonctions de base



Miele MOVE MedDent+
Abonnement pour la gestion numérique des appareils Miele Professional avec une traçabilité complète.

- Tous les avantages de Miele MOVE Connect pour un nombre illimité d'utilisateurs
- Traçabilité complète avec validation de données à caractère personnel
- Transparence accrue grâce aux données préparées visuellement
- Protocoles pour la preuve d'hygiène, comme l'exige la loi
- Durée de conservation numérique garantie de trois ans

Pour en savoir plus sur Miele MOVE :



www.miele-move.fr

Solutions numériques

Portail Internet Miele MOVE avec traçabilité

Segosoft Miele Edition

Autres éléments de traçabilité

Modules de communication

* La disponibilité des données de consommation dépend du type d'appareil.

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
Miele MOVE Connect	Miele MOVE – Accédez gratuitement à la gestion numérique des appareils Miele Professional.	12804200	-	4002516887850
Miele MOVE MedDent+	Miele MOVE – MedDent+ (abonnement annuel/cabinet) pour la gestion numérique des appareils Miele Professional avec traçabilité.	12804270	-	4002516887867

Système de traçabilité Segosoft Miele Edition

Une approche certifiée de la sécurité

Miele

Segosoft®
Miele Edition
Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition

Miele

SegoAssign Plus
Miele Edition
Sterile Goods Management

Lizenz/License card

APS 101 Sego

- Segosoft Miele Edition (licence), pour la mise en réseau d'un appareil.**
- Édition contrôlée par l'utilisateur de protocoles de traitement pour tous les appareils
 - Protection contre la manipulation grâce à la signature numérique avancée
 - Produit tourné vers l'avenir en matière d'exigences réglementaires
 - Logiciel de traçabilité seulement avec un cachet de qualité
 - ServiceCard garantit la conformité avec la législation sur les dispositifs médicaux
 - H 1, l 86, P 55 mm



APH 596

- Étiquettes, à utiliser sur des imprimantes Segolabel APH 550 Sego.**
- 1 rouleau de 1000 étiquettes pour imprimante Segolabel
 - Chaque étiquette est dotée d'une seconde surface adhésive avec une couche séparatrice

APS 102 Sego

- SegoAssign Plus, pour la mise en réseau de Segosoft avec un système interne de gestion de patients**
- Pour une attribution rapide, facile et sans papier des cycles aux patients
 - ServiceCard garantit la conformité avec la législation sur les dispositifs médicaux
 - La fourniture de services inclut une carte de licence
 - Pour le transfert de données sans papier
 - H 1, l 86, P 55 mm



APH 595

- Ruban de couleur, à utiliser sur des imprimantes à étiquettes APH 550 Sego.**

Système de traçabilité Segosoft Miele Edition

Une approche certifiée de la sécurité



APH 110 Net500

- Convertisseur réseau Segosoft, pour la mise en réseau des appareils avec une interface série.**
- Convertit des données sérielles (RS 232) vers un protocole réseau (TCP/IP)
 - Séparation galvanique de tous les raccordements, protection contre les surtensions
 - Power over Ethernet (PoE) activé
 - Pour une utilisation avec Segosoft Miele Edition
 - Éléments fournis : bloc d'alimentation enfichable (1,4 m)
 - H 31, l 109, P 90 mm

- Pré-requis système pour tous les logiciels**
- Vitesse du processeur d'au moins 3 GHz, 4 GHz ou plus recommandée
 - Graphisme SVGA avec un écran de 21" 1024 x 768 px ou plus grand, HD 1920 x 1080 px recommandé
 - RAM de 4 Go minimum, 8 Go recommandés
 - Disque dur avec au moins 256 Go de mémoire libre, 500 Go ou plus recommandés
 - 2 ports USB min., 3 ports recommandés, interface réseau, accès Internet
 - Systèmes d'exploitation : Windows 10, Windows 11
 - Adobe Acrobat Reader, version 11.08 ou supérieure
 - Système de sauvegarde recommandé
- Téléchargement du logiciel**
- <http://www.miele.de/pro/sego>

- Service supplémentaire requis auprès du partenaire de service Miele : ServiceCard et services (obligatoire pour Segosoft Miele Edition!)**
- Mise à jour de la signature numérique prolongeant la validité juridique
 - Assistance téléphonique, mises à jour du logiciel
 - Frais annuels nets forfaitaires par cabinet : 247,25 € (hors SegoAssign Plus)
 - Frais annuels nets forfaitaires par cabinet : 339,25 € (SegoAssign Plus inclus)
- Remarque : validité légale des signatures numériques dans Segosoft Miele Edition conformément au BSI (Bureau fédéral allemand pour la sécurité de l'information). La ServiceCard procure une extension de cette validité légale. (Frais annuels par cabinet : 247,25 € (hors SegoAssign Plus))**

¹ Service supplémentaire requis : ServiceCard (maintenance/assistance du logiciel)

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APS 101 Sego	Segosoft Miele Edition (licence), pour connecter un appareil.	10019160	68813002D	4002515570708
APS 102 Sego	SegoAssign Plus, pour connecter Segosoft à un système interne de gestion de patients.	10106600	68814101D	4002515604106
APH 595	Bande de transfert de couleur pour les imprimantes d'étiquettes Sego PRT 200.	7951520	68816101D	4002514940625
APH 596	Étiquettes à utiliser avec une imprimante Segolabel APH 550 Sego (PRT 200).	7951530	68816201D	4002514940632

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APH 110 Net500	Convertisseur réseau Segosoft pour la mise en réseau des appareils avec une interface série à un réseau.	9687440	68815902D	4002515388464

Système de traçabilité Segosoft Miele Edition

Autres éléments de traçabilité



APH 301
Câble de raccordement, pour connecter un appareil doté d'une interface série à un PC.

- Compatible avec Miele PWD 853x, PG 858x/9x avec XKM RS232 10 Med
- Compatible avec de nombreux appareils de Melag, Sirona, W&H et Hawo
- Câble croisé, longueur 3 m



APH 302
Câble de raccordement, pour connecter un appareil doté d'une interface série à un PC.

- Compatible avec des appareils de Sirona et W&H ; Câble null modem, longueur 3 m



APH 303
Câble de rallonge, 3 m, pour l'extension des câbles de raccordement APH 301 et APH 302.



APH 304
Câble de rallonge, 5 m, pour l'extension des câbles de raccordement APH 301 et APH 302.



APH 305
Câble de rallonge, 10 m, pour l'extension des câbles de raccordement APH 301 et APH 302.

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APH 301	Câble pour le raccordement d'un appareil avec interface série à un PC.	7951420	68815201D	4002514940526
APH 302	Câble pour le raccordement d'un appareil avec interface série à un PC.	7951410	68815101D	4002514940519
APH 303	Câble de 3 m, pour l'extension des câbles de raccordement APH 301 et APH 302.	7951430	68815301D	4002514940533
APH 304	Câble de 5 m, pour l'extension des câbles de raccordement APH 301 et APH 302.	7951440	68815401D	4002514940540
APH 305	Câble de 10 m, pour l'extension des câbles de raccordement APH 301 et APH 302.	7951450	68815501D	4002514940557

Système de traçabilité Segosoft Miele Edition

Autres éléments de traçabilité



APH 406
Câble réseau, pour une connexion réseau, longueur 3 m.

- Câble de catégorie 6
- Couleur : argenté transparent



APH 407
Câble réseau, pour une connexion réseau, longueur 5 m.

- Câble de catégorie 6
- Couleur : argenté transparent



APH 408
Câble réseau croisé, pour une liaison directe au PC, longueur 3 m.

- Câble de catégorie 6
- Couleur : blanc
- Utilisé pour la liaison directe des appareils Miele
- Utilisé pour la connexion réseau de stérilisateurs Melag



APH 409
Câble réseau croisé, pour une liaison directe au PC, longueur 5 m.

- Câble de catégorie 6
- Couleur : blanc
- Utilisé pour la mise en réseau des stérilisateurs Melag
- Utilisé pour la liaison directe des appareils Miele

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APH 406	Câble réseau, pour une connexion au réseau, longueur 3 m.	7951470	68815701D	4002514940571
APH 407	Câble réseau, pour une connexion au réseau, longueur 5 m.	7951480	68815705D	4002514940588
APH 408	Câble réseau croisé, pour une liaison directe au PC, longueur 3 m.	7951490	68815801D	4002514940595
APH 409	Câble réseau croisé, pour une liaison directe au PC, longueur 5 m.	7951500	68815805D	4002514940601

Autres éléments de traçabilité



APH 510 PRT 110

Imprimante de rapports des protocoles de traitement.

- Imprimante matricielle avec ruban couleur
- Compatible avec tous les laveurs-désinfecteurs Miele, à l'exception des modèles Expert-Line PWD 868x/9x et PWD 8682 C
- H 157, l 160, P 239 mm



APH 530

Câble de raccordement, pour une connexion ininterrompue à l'imprimante.

- Compatible avec l'imprimante de rapports APH 510 PRT 110
- Longueur: 10 m



APH 592

Ruban couleur pour imprimante de rapports APH 510 PRT 110.

- Ruban couleur pour imprimante matricielle



APH 591

Bobine de papier pour imprimantes de rapports APH 510 PRT 110.

- 5 bobines de papier par paquet
- Largeur: 76 mm
- H 79, l 76, P 79 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
APH 510 PRT110	Imprimante pour l'impression des rapports de traitement.	11053310	68817004D	8809166679332
APH 530	Câble de raccordement, pour une connexion ininterrompue à l'imprimante.	6095260	68817201D	4002513532609
APH 592	Ruban de transfert couleur pour l'imprimante de protocoles APH 510 PRT 110.	11053500	68817005D	8809166675907
APH 591	Rouleau de papier pour imprimante de protocoles APH 510 PRT 110.	9063410	68817003D	4002515000038

Composants : modules de communication

Mise en réseau d'appareils et traçabilité



XKM 3200 WL LMD 86

Module de communication, pour la mise en réseau du PWD 868x/9x avec Miele MOVE, Segosoft ou d'autres logiciels de documentation.

- Mise en réseau de pointe au service Cloud Miele
- Transmission sécurisée via Ethernet
- Interface REST avec fourniture de données au format JSON
- Fonctionnement flexible sur des réseaux locaux
- Jusqu'à 30 protocoles de traitement sont stockés dans l'appareil
- Longueur du câble d'alimentation électrique: 1,5 m; possibilité d'extension du câble
- H 39, l 88, P 110 mm



XKM RS 232 10 Med

Module de communication avec interface série (RS232) pour la mise en réseau avec une imprimante.

- Compatible avec PG 858x/9x
- Mémoire tampon circulaire pour 25 protocoles de traitement max.
- Distinction entre les protocoles courts et les protocoles longs
- Vitesse de transmission: 38 kBit/s max.
- Longueur du câble d'alimentation électrique: 1,5 m; possibilité d'extension jusqu'à 15 m
- H 39, l 88, P 110 mm



APST 002/1

Clé USB Wi-Fi, pour la mise en réseau simple des stérilisateurs compacts avec les réseaux Wi-Fi.

- Facile à connecter sur un port USB de l'appareil
- Transmission des données de processus à un appareil avec fonction Wi-Fi
- H 10, l 25, P 69 mm

Article	Description	Référence mat.	N° d'art.	EAN
XKM 3200 WL LMD86	Module de communication pour les appareils de génération PLW/PWD 868x ou 869x pour ExpertLine pour la connexion à Miele MOVE, Segosoft ou d'autres logiciels.	12611070	68822104D	4002516866527
XKM RS 232 10 Med	Module de communication avec interface série (RS232) pour raccorder une imprimante.	10444420	68822002D	4002515832394
APST 002/1	Clé USB Wi-Fi pour la mise en réseau simple des stérilisateurs avec les réseaux Wi-Fi.	12141160	68900012D	4002516677215

Traçabilité

Vue d'ensemble

Traçabilité							
		Liaison directe entre un PC et un appareil		Connexion via le réseau du cabinet			Imprimante
		Option 1 :	Option 2 :	Option 3 :	Option 4 :	Option 5 :	
		Connexion d'un PC à un appareil via une interface série	Connexion d'un PC à un appareil avec un module de communication (Ethernet, Wi-Fi) ou Wi-Fi intégré	Connexion réseau à un appareil avec interface série	Connexion réseau à un appareil avec interface réseau d'appareil (Ethernet, Wi-Fi)	Connexion réseau à des appareils avec modules de communication XKM 3200 WL LMD 86, XKM 3200 WL LMD ou XKM 3000 L Med	
		Par ex. Miele Laveur-désinfecteur PWD 853x	Par ex. Miele CompactLine/Expert-Line PWD 868x/9x (éventuellement avec XKM 3200 WL LMD86)	Par ex. Miele Laveur-désinfecteur PWD 853x	Par ex. Miele CompactLine/ExpertLine PWD 868x/9x/stérilisateur compact CUBE, CUBE X	Par ex. Miele CompactLine/ExpertLine PWD 868x/9x (avec XKM 3200 WL LMD 86) ou laveur-désinfecteur PG 858x/9x	Par ex. Miele Laveur-désinfecteur PG 858x/9x (avec XKM RS232 10 Med)
Solution de numérisation Miele MOVE	Référence mat.						
Miele MOVE Connect pour PWD 868x/9x (éventuellement avec XKM 3200 WL LMD 86), PG 858x/9x (XKM 3200 WL LMD) et CUBE/CUBE X	12804200 12804270				X	X (pas avec XKM 3000 L Med)	
Segosoft Miele Edition	Référence mat.						
APS 101 Sego – Segosoft Miele Edition (licence) ¹	10019160	X	X	X	X	X	
APH 301 – Câble de raccordement, sérial, 3 m	7951420	X (selon modèle)		X (selon modèle)			
APH 302 – Câble de raccordement, sérial, 3 m	7951410	X (selon modèle)		X (selon modèle)			
APH 100 – Convertisseur industriel de série	9574000	X (en option avec deux appareils)					
APH 303 – Câble de rallonge, 3 m pour câble de raccordement	7951430	En option					
APH 304 – Câble de rallonge, 5 m pour câble de raccordement	7951440	En option					
APH 305 – Câble de rallonge, 10 m pour câble de raccordement	7951450	En option					
APH 110 Net500 – Convertisseur réseau (RS 232 vers RJ 45)	9687440			X			
APH 406 – Câble réseau, 3 m (connexion réseau)	7951470			X (selon la longueur nécessaire)	X (selon la longueur nécessaire)	X (selon la longueur nécessaire)	
APH 407 – Câble réseau, 5 m (connexion réseau)	7951480			X (selon la longueur nécessaire)	X (selon la longueur nécessaire)	X (selon la longueur nécessaire)	
APH 408 – Câble réseau, croisé, 3 m (liaison directe au PC)	7951490		X (selon la longueur nécessaire)				
APH 409 – Câble réseau, croisé, 5 m (liaison directe au PC)	7951500		X (selon la longueur nécessaire)				
APH 510 PRT 110 – Imprimante, interface série	11053310						X
APH 530 – Câble d'imprimante 10 m, série, pour imprimante APH 510 PRT 110	6095260						X
APH 531 – Adaptateur null modem pour le câble d'imprimante	9573970						X
Prise RJ 45	7076891					En option (si une rallonge est nécessaire. Longueur du câble du module XKM 1,5 m.)	
X = obligatoire, *service supplémentaire nécessaire : ServiceCard, maintenance du logiciel							



Article	Page
A 102	43
A 105/1	43
A 151	43
A 315/1	51
A 317	48
A 800	63
A 801	44
A 803	45
A 804	63
A 812	47
A 813/1	65
A 814/1	65
A 815	65
A 816	46
A 817	46
A 818	46
A 819	47
A 822	61
A 830/1	64
A 832	46
A 833	45
A 834	46
A 836	45
A 838	63
A 865	45
ADS 1	44
ADS 2	44
ADS 3	44
APH 100	98
APH 110 Net500	93
APH 301	94
APH 302	94
APH 303	94
APH 304	94
APH 305	94
APH 406	95
APH 407	95
APH 408	95
APH 409	95
APH 510 PRT 110	96
APH 530	96
APH 531	98
APH 591	96
APH 592	96
APH 595	92
APH 596	92
APS 101 Sego	92
APS 102 Sego	92
APST 000	87
APST 001	87
APST 002/1	88
APST 003	86
APST 004	86
APST 005	86
APST 006	88
APST 007	88
APST 008	88
APWD 060	41
APWD 061	41

Article	Page
APWD 062	54
APWD 063	60
APWD 064	60
APWD 067	60
APWD 068	60
APWD 069	61
APWD 070	60
APWD 071	60
APWD 072	61
APWD 073	61
APWD 217	62
APWD 325	59
APWD 326	59
APWD 328	59
APWD 329	51
APWD 331	57
APWD 332	57
APWD 333	57
APWD 334	57
APWD 335	57
APWD 336	57
APWD 337	58
APWD 338	58
APWD 339	58
APWD 646	62
APWD 907	62
AUF 1	44
AUF 2	44
CM/1	69
CK/1 DIN 51	74
DOS K 85 Comfort	66
DOS K 85/1 Comfort	66
DOS K 85 flex	66
DOS K 85/1 flex	66
DTD 2	74
DV 1 DIN 51	74
E 130	52
E 131/1	50
E 143	65
E 146	59
E 147/1	48
E 197	64
E 198	49
E 315/1	69
E 316	69
E 336	46
E 337/1	48
E 339/1	49
E 363	52
E 378	52
E 379	53
E 430/1	48
E 441/1	48
E 468	50
E 473/2	64
E 476	45
E 491	64
E 520	48
E 521/2	65

Article	Page
E 522/1	64
E 523	49
E 801/1	64
E 802/1	64
E 806/1	49
E 807	49
FP 20	45
Prise RJ 45	98
LP 2800/1	68
MB1 250	74
Miele MOVE Connect	91
Miele MOVE MedDent+	91
ProCare Dent 10 A – 5 l	71
ProCare Dent 10 MA – 5 l	71
ProCare Dent 11 A – 1 kg	71
ProCare Dent 11 A – 10 kg	71
ProCare Dent 30 C – 1 l [type 1]	72
ProCare Dent 30 C – 5 l	72
ProCare Dent 30 P – 1 l [type 1]	72
ProCare Dent 30 P – 5 l	72
ProCare Dent 40 – 1 l [type 1]	72
ProCare Protein Check	77
ProCare Sure H-01	78
ProCare Sure I-PM	78
Kit de démarrage ProCare Sure I-PM	78
ProCare Universal 61	73
ProCare Universal 70 ST – 750 ml	73
ProCare Universal 77 A – 500 g	73
ProCare Universal 81 C – 250 g	73
PST 1710	84
PST 1720	84
PST 2210	84
PST 2220	84
PWD 7121	33
PWD 7122	33
PWD 8531	12
PWD 8682	26
PWD 8682 C	18
PWD 8682 CD	26
PWD 8692	26
SK/1	68
UfZ/1	68
UG 30–60/60–85	67
UG 30–90/60–85	67
UG 50-64	67
VE P 2000/1	69
VE P 2800/1	68
XKM 3000 L Med	98
XKM 3200 WL LMD	98
XKM 3200 WL LMD 86	97
XKM RS 232 10 Med	97
ZS 150-1	88

Explication des abréviations – Dentaire	
AD	Raccordement à l’eau déminéralisée (Aqua Destillata)
AE	Habillage extérieur en inox
AW	Habillage extérieur blanc
BW	Blanc brillant
C	Compact
CLST	Inox
CM	Conductimètre
DC	Vanne de vidange pour refroidissement par eau
DC 10	Canne d’aspiration avec détection niveau de remplissage, 10 l
DC 5	Canne d’aspiration avec détection niveau de remplissage, 5 l
DOS	Dosage
DP	Pompe de vidange
DS 10	Canne d’aspiration avec détection de jauge vide, 10 l
DS 5	Canne d’aspiration avec détection de jauge vide, 5 l
DSN	Pompe de dosage
DST	Troisième pompe de dosage
DT	Variante dentaire
DV	Vanne de vidange
DWC	Raccordement pour eau déminéralisée
EL	Chauffage électrique
FAD	Conduit d’évacuation d’air vers la façade
GD	Porte vitrée
HP	Pompe à chaleur
HP P	Pompe à chaleur au propane
i	Intégré
IMS	Système de surveillance indépendant (deux sondes de température redondantes)
LAN	Interface Ethernet intégrée
LD	Dosage liquide
LW	Blanc lotus
OIP	Une pompe intégrée
PA	Bandeau
PD	Dosage du détergent en poudre
Kit LAN	Kit composé d’un appareil et d’un module LAN (module Ethernet)
Kit Wi-Fi	Kit composé d’un appareil et d’un module Wi-Fi (DataDiary)
SST	Inox
U	Appareil encastrable
UL	Composants certifiés pour les USA/ le CAN
WB	Habillage extérieur blanc/noir
WF	Sans façade
WS	Adoucisseur d’eau
HW	Raccordement à l’eau chaude
XXL	Cuve XXL

Miele & Cie. KG
www.miele-professional.fr

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein
B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex

Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44
E-mail : advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)
Tél. : 01 49 39 44 78
E-mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)
Tél. : 01 49 39 44 88
E-mail : support.technique@miele.fr