

Reinigungsmittel

Verwendung:

Flüssigkonzentrat, alkalisch. Zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

ProCare Dent 10 A unterstützt die Entfernung organischer Anschmutzungen wie z. B. Blut und Speichel und verhindert deren Redeposition. Es wird empfohlen, Reste von Kompositen, Zement und Abdruckmasse vor dem Aushärten grob zu entfernen.

ProCare Dent 10 A ist nicht für die Reinigung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Hierfür empfehlen wir den Flüssigreiner *ProCare Dent 10 MA*.

Qualitätsmerkmal:

ProCare Dent 10 A erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.



Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Produkteigenschaften:


- Hoher Material- und Korrosionsschutz für Instrumente und Trays aus Edelstahl.
- Frei von Oxidationsmitteln und Tensiden.

Anwendung und Dosierung:

ProCare Dent 10 A ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Thermo-Desinfektoren.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe.
- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Anwendungskonzentration: 3 ml/l
- Programmwahl: Vario TD
- Mindestdosiertemperatur: $\geq 40^\circ\text{C}$

Programmablauf:

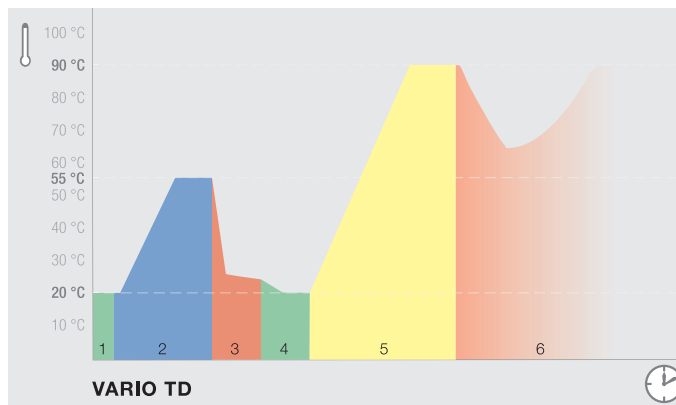

Verfahrensablauf

Vario TD:

- 1 Vorspülen**
Kaltwasser (enthärtet), ohne Aufheizen, ohne Prozesschemikalien
- 2 Reinigen**
Kalt- / Warmwasser (enthärtet), mit Aufheizen, mit *ProCare Dent 10 A*
- 3 Neutralisieren**
Kalt- / Warmwasser (enthärtet), ohne Aufheizen, mit *ProCare Dent 30 P*
- 4 Zwischenspülen**
Kalt- / Warmwasser (enthärtet), ohne Aufheizen
- 5 Thermische Desinfektion**
bei $> 90^\circ\text{C}$ für 5 Minuten inkl. Schlusspülung
- 6 Trocknen**

Die Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspülen. Beim Einsatz in Miele Professional Thermo-Desinfektoren ist dies bei korrekter Anwendung (z. B. korrektes Einsortieren des Spülgutes) durch das Vario TD Programm gegeben. Eine Verifizierung erfolgt durch die Messung der Leitwerterhöhung im Schlusspülgang im Rahmen der Inbetriebnahme oder Routinewartung des Thermo-Desinfektors.

Es wird der Einsatz von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen, um Beläge und Wasserflecken zu vermeiden.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Bedienungsanweisungen der Miele Professional Thermo-Desinfektoren sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

ProCare Dent 10 A

Reinigungsmittel


Technische Daten:

- Dichte (20 °C): ca. 1,5 g/cm³
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 3 ml/l: ca. 11,6

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- 15 % bis 30 % Phosphate

Lagerhinweise:

- Einzuhaltende Lagertemperatur: -15 °C bis 30 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar.
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol 

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Dent 10 A	5 l Kanister
Kanisterschlüssel	für 5 l, 10 l und 20 l Kanister
DTD2 Auffangschale	für 5 l und 10 l Kanister

Kontaktdaten:**Deutschland**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxemburg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 497 11 25
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/de/professional

Österreich

Miele Ges.m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel.: +43 50 800-0
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/p

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 15 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/

Italien

Miele Italia G.m.b.H.
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/index.htm

**Deutschland**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de