

ProCare Lab 10 MA

Détergent

Utilisation :

Concentré liquide alcalin. Pour le nettoyage automatisé de la verrerie de laboratoire et des ustensiles de laboratoire dans les laveurs de laboratoire de Miele Professional.

Principales applications :

ProCare Lab 10 MA est destiné à un usage général dans les laboratoires médicaux, biologiques et chimiques.

Propriétés du produit :

- Nettoyant multi-usages présentant une bonne compatibilité avec les matériaux et offrant une bonne performance de nettoyage sur les salissures organiques telles que le sang, les protéines et les résidus de milieux de culture.
- Ne contient pas d'oxydants ni de tensio-actifs.
- Peut être utilisé dans toutes les plages de dureté de l'eau.

Convient pour : l'inox, la verrerie de laboratoire¹, la céramique, les matières plastiques² (PE, PP, PVDF, PTFE)

Convient sous conditions pour : l'aluminium et les métaux non ferreux (contrôles préalables nécessaires)

Ne convient pas pour : les métaux légers, les alliages de métaux légers, l'aluminium anodisé


Utilisation et dosage :

ProCare Lab 10 MA est formulé pour être utilisé dans les processus des laveurs de laboratoires de Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à la pompe de dosage.
- Il convient d'utiliser des systèmes de dosage appropriés.
- Concentration de l'application : La quantité de dosage dépend du degré de salissure et doit être comprise entre 2 ml/l et 4 ml/l.
- Au cours de l'étape du programme de neutralisation acide, l'entraînement alcalin est neutralisé à l'aide de *ProCare Lab 30 P* ou de *ProCare Lab 30 C*.
- Température minimale de dosage : $\geq 15^{\circ}\text{C}$, température maximale recommandée pendant l'utilisation : $\leq 95^{\circ}\text{C}$

Déroulement de programme :

Exemple basé sur un programme de laboratoire universel.

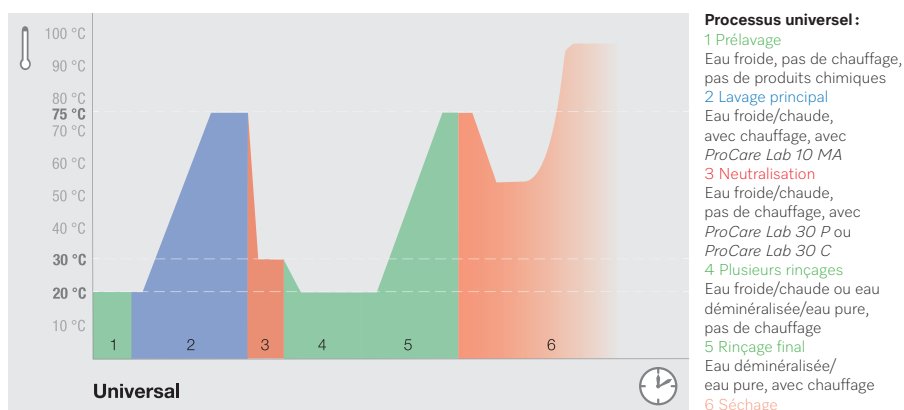

Remarque :

- La solution de lavage *ProCare Lab 10 MA* doit être entièrement rincée à l'eau (déminéralisée de préférence).
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant le changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage, y compris les tuyaux d'aspiration.
- Respecter les éventuelles recommandations de nettoyage émises par les fabricants de verrerie de laboratoire.
- L'utilisation d'eau déminéralisée est recommandée pour le rinçage final, afin d'éviter toute trace d'eau.
- Il convient de respecter les modes d'emploi des laveurs de laboratoire de Miele Professional.
- Uniquement pour un usage professionnel!

¹Types de verre et ²plastiques adaptés au nettoyage alcalin à la machine conformément aux instructions du fabricant.

ProCare Lab 10 MA

Détergent

Caractéristiques techniques :

- Densité (à 20 °C) : env. 1,5 g/cm³
- Valeur de pH (déterminée avec de l'eau déminéralisée, à 20 °C), 2 ml/l à 4 ml/l : env. 11,6 à 11,8

Ingrédients selon le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents :

- 15 % à 30 % de phosphates

Informations sur le stockage :

- Température de stockage : entre -15 °C et 30 °C
- Peut être utilisé pendant 3 ans dans des conditions de stockage appropriées.
- Date limite d'utilisation : sur l'étiquette à côté du symbole de sablier 

Consignes de sécurité et mises en garde :

Consultez les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele, indiqués ci-dessous.

Éliminez uniquement les contenants vides et fermés. Élimination des restes de produit : sur la fiche de données de sécurité.

Toutes les informations fournies dans ce document sont actualisées et correctes à notre connaissance. Cela ne dispense toutefois pas l'utilisateur d'effectuer ses propres essais et expériences. Ces informations ne peuvent pas être considérées comme une garantie légale des caractéristiques et propriétés du produit.

Unités d'emballage et accessoires :

Désignation	Unité de conditionnement
ProCare Lab 10 MA	Bidons de 5 l et 10 l
Clé pour bidon	Pour bidons de 5 l, 10 l et 20 l
Bac collecteur DTD2	Pour bidons de 5 l et 10 l

Coordonnées :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Luxembourg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel.: +352 49711-20/22
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Tel.: +33 1 49394444
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Canada

Miele Limited
161 Four Valley Drive
VAUGHAN
Ontario L4K 4V8
KANADA
Tel.: +1 833 696 4353
customercare@miele.ca
www.miele.ca



Allemagne

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.com/fr/