

**Miele**



# Wählen Sie Ihren Experten. Gewinnen Sie ein Teammitglied.

Analytische Reinheit Ihrer Laborgläser –  
mit unserer ExpertLine.

Miele Professional. Immer Besser.

**ExpertLine**



**Für jede Branche**  
und Fachrichtung

**15.000**  
getestete Betriebsstunden

 **Glastür & Kammerbeleuchtung\***



**Verlässliche Qualität  
für beste Ergebnisse**

Unsere ExpertLine Laborspüler garantieren Ihnen analysenreine Laborglasreinigung & -trocknung auf höchstem Niveau für kontinuierlich verlässliche Ergebnisse.

**EASYLOAD**

Flexibel, schnell und hocheffizient

Ersatzteile erhältlich bis zu

**15 Jahre**

nach Einstellung der Geräteproduktion.



**Nachhaltig**

dank optimierter Programme

**Intuitive** und **schnelle**  **Touch-Bedienung**



**Passende  
Trocknungsoptionen  
je Anwendungsfall**

Von der AutoOpen Funktion bis zur DryPlus Heißlufttrocknung bietet unser Experte verschiedene Optionen.

Digitale Vernetzung dank



**Miele MOVE  
Connect**

**Hervorragende und effektive Reinigungsleistung bei hohen Kapazitäten**

Der Spüldruck wird auf die jeweiligen Reinigungsanforderungen angepasst – hoher Druck ermöglicht die Entfernung von hartnäckigen Anschmutzungen, während niedriger Druck die gleichmäßige Benetzung des Laborglases sicherstellt.



Mehr zur  
ExpertLine  
[www.miele.at/  
pro/expertline-lab](http://www.miele.at/pro/expertline-lab)

**Endlich ein flexibles  
Teammitglied,  
das gerne reinigt!**  
Überzeugen Sie sich  
von den Highlights  
der ExpertLine.

# Ihr effizientes Teammitglied.

Intuitive Bedienung dank Farb-Touch-Display und wirtschaftlicher Betrieb auch für hohe Kapazitäten auf kompaktem Raum.

## Intuitive Bedienung

Das intuitive Farb-Touch-Display sorgt für schnellen Zugriff auf favorisierte Programme. Dabei können individuelle Einstellungen vorgenommen werden und der Programmstatus wird gut sichtbar und leicht verständlich angezeigt.

## Schnelle Einsatzbereitschaft

Auch die Inbetriebnahme der Geräte wurde optimiert, sodass diese schnell und einfach möglich ist. Und sollte es zu Unterbrechungen kommen, ist ExpertLine darauf ausgelegt, dass Services dank der intelligenten und optimierten Positionierung von zentralen Komponenten schnell und einfach durchgeführt werden können.

## Effektive Reinigungsleistung

Durch die drehzahlvariable Heizpumpe kann der Spüldruck auf die jeweiligen Reinigungsanforderungen angepasst werden – hoher Druck ermöglicht die Entfernung von hartnäckigen Anschmutzungen, während niedriger Druck ressourcenschonend die gleichmäßige Benetzung des Laborglases sicherstellt. Verschiedene Sensoren kontrollieren zudem die einwandfreie Funktion von Sprüharmen und des Spüldrucks.

## Optimaler Überblick

Dank der optionalen Glastür und Kammerbeleuchtung lässt sich der Reinigungsprozess noch leichter überwachen und Laborglas schnell und komfortabel beladen.





# Ihr langlebiges und nachhaltiges Teammitglied.

Für uns ist Langlebigkeit nicht nur ein Wort. Deswegen ist ExpertLine auch auf 15.000 Betriebsstunden getestet und bis zu 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit machen Reparaturen auch noch weit nach Serienauslauf möglich.

Sparsame und auf den jeweiligen Anwendungsfall ausgelegte Programme, kurze Laufzeiten und ressourcenschonende Technologien – all dies führt zu einem geringen Verbrauch von Wasser, Strom und Reinigungsmitteln und schont somit die Umwelt.



# Ihr flexibles Teammitglied.

Um allen Anforderungen der Laborglasreinigung gerecht zu werden, unterstützt Sie das flexible Zubehörsystem EasyLoad – es macht die Reinigung deutlich schneller, einfacher und hocheffizient.

In Bezug auf das Thema Trocknung bietet unser Experte Optionen wie die AutoOpen Funktion und DryPlus Heißlufttrocknung.



# Ihr internationales und digitales Teammitglied.

Die einfache Sprachauswahl macht die Modelle der ExpertLine zu Ihrem internationalen Experten im Team. Für reibungslose Abläufe unterstützen How-to-Sequenzen, die im Display gezeigt werden.

Dank der Verbindung mit Miele MOVE Connect können Gerätedaten jederzeit von jedem Ort eingesehen und Arbeitsläufe optimiert werden. Außerdem haben Sie Zugang zu Geräte-Updates und erhalten Auswertungen zum Reinigungsprozess. Für eine direkte Serviceunterstützung gibt es eine Schnittstelle zum Kundendienst, die wichtige Informationen übermittelt, um Zeit und Aufwand zu sparen.



# Wählen Sie Ihren Experten.

Alle Experten bieten eine maximale Effizienz durch hohe Kapazitäten und ressourcensparende Reinigungsleistung mit folgenden Highlights:



Großes, intuitives Farb-Touch-Display



Flüssigdosierung mit optionaler Füllstandserkennung



Umfassendes Programmpaket



Volle Konnektivität: WLAN als Standard, LAN optional



Kammerbeleuchtung für noch komfortableres Beladen



Einfach QR-Code scannen und ExpertLine entdecken.  
[www.miele.at/pro/expertline-lab](http://www.miele.at/pro/expertline-lab)



## ExpertLine PLW 8683 mit EcoDry Trocknung

Unsere EcoDry Trocknung verfügt über die AutoOpen Funktion, wodurch nach Programmende Restfeuchte entweichen kann, Gläser schneller abkühlen und somit die Entladung zeitnah erfolgen kann.

## ExpertLine PLW 8693 mit DryPlus Heißlufttrocknung für beste Trocknungsergebnisse

Unsere DryPlus Heißlufttrocknung sorgt für beste Trocknungsergebnisse auch bei engvolumigem Glas. Auch hier gewährleistet die AutoOpen Funktion zusätzlich ein besseres Entweichen der Restfeuchte und somit ein schnelleres Abkühlen des Laborglases.




## ExpertLine PLW 8683 CD mit zusätzlichem Stauraum für Reinigungsmittel und Glastür

Dieses Gerät bietet neben der DryPlus Heißlufttrocknung samt AutoOpen Funktion zusätzlich komfortablen Stauraum für Reinigungsmittel im Seitenschrank. Die Glastür ermöglicht Ihnen zudem eine leichte Überwachung des Reinigungsprozesses.



## Miele 360PRO.

Für jedes Labor eine maßgeschneiderte Lösung.

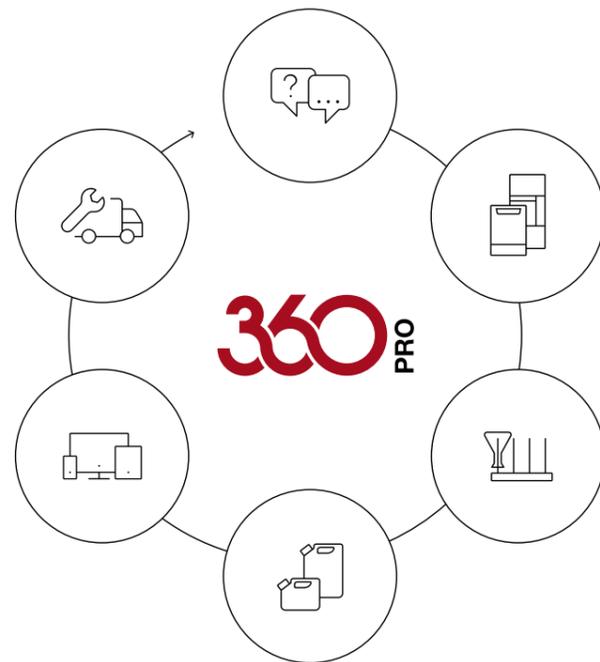

### Präzision ist eine Verantwortung. Die uns antreibt.

Wir verstehen, dass Präzision eine zentrale Verantwortung für Labore aller Fachrichtungen ist. Um Sie darin bestmöglich zu unterstützen, bieten wir 360PRO. Unser ganzheitliches System mit perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen aus einer Hand. Von der Planung bis zur Nachhaltigkeit, vom Zubehör bis zur Vernetzung, von Reinigungsmitteln bis zur Wartung, einschließlich der optimalen Laborspüler. Wir sind für Sie da, damit Sie sich voll und ganz auf perfekte Ergebnisse fokussieren können.



Mehr zu Miele 360PRO  
[www.miele.at/pro/lab](http://www.miele.at/pro/lab)

## Nachhaltiger Anspruch, ausgezeichnetes Design.

### Gut für Ihr Team. Noch besser für den Planeten.

„Immer Besser“ ist seit 1899 unsere Philosophie. Sie treibt uns an morgen besser zu sein, als wir es gestern waren. Sie motiviert uns jeden Tag bessere, intelligentere Geräte zu entwickeln. Auch ExpertLine setzt neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit. So werden beispielsweise dank 15 Jahren Ersatzteilverfügbarkeit Betriebskosten gesenkt und der ökologische Fußabdruck verkleinert oder durch 15.000 getestete Betriebsstunden eine extreme Langlebigkeit erreicht. Neu ausgestattet mit einer digitalen Bedienungsanleitung als abfallfreie Alternative.

### Die Miele ExpertLine ist stolzer Gewinner des iF Design Award 2024.

*„Wir freuen uns über die erneuten Auszeichnungen, die unseren Premiumanspruch an Ästhetik und Design nach außen sichtbar unterstreichen.“*

Andreas Enslin, Vice President Miele Design Center



## Damit Sie rundum geschützt sind.

Unser Service heißt PROtect und vereint umfassende Serviceleistungen, maximale Budgetkontrolle und eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Wir beraten Sie transparent und branchenspezifisch, koordinieren Termine und garantieren die Verfügbarkeit passender Ersatzteile – auch 15 Jahre nach Serienauslauf.



Mehr zu PROtect  
[www.miele.at/pro/protect](http://www.miele.at/pro/protect)

**Miele**



# Nichts ersetzt einen **persönlichen Kontakt.**

Kontaktieren Sie uns oder Ihren Fachhandelspartner gerne, um noch mehr über Ihr neues Teammitglied zu erfahren – ganz einfach per Telefon oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite.

**Telefon:** +43 (0) 50 800 600



Mehr zur Miele ExpertLine  
und zum Kontaktformular  
[www.miele.at/pro/expertline-lab](http://www.miele.at/pro/expertline-lab)