

Miele




Setzen Sie auf Effizienz. Kompakt gedacht.

Entdecken Sie CompactLine –
die clevere, platzoptimierte Lösung
für eine effiziente und intuitive
Instrumentenaufbereitung.





Integrierte Schublade
mit optimiertem Stauraum

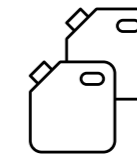

Platz für 2x5-Liter-Kanister für Prozesschemikalien + 1 Flasche

Intuitive und **schnelle**  **Touch-Bedienung**



Für eine Vielzahl von
Fachgebieten



Schnelle Programme

Gebaut, um **nachhaltig** zu sein. Optimierte Programme.

Nachhaltig konzipiert, um länger zu halten – mit Ersatzteilen, die mindestens 15 Jahre nach Produktionsende verfügbar sind. Der Ressourcenverbrauch passt sich an die Bedürfnisse der einzelnen Zyklen an.

Entdecken Sie eine neue Dimension der Hygiene.

Alles in einem Gerät.



**Miele MOVE
MedDent+**



Mehr über CompactLine
www.miele.at/pro/compactline-med

Sechs Gründe, warum CompactLine die richtige Wahl für Sie ist

01 **Optimiert und kompakt**

CompactLine ist die ideale Lösung für Praxen mit geringerem Instrumentenaufkommen und bietet eine effiziente Aufbereitung in einem platzsparenden Design. Es verfügt über eine integrierte Lagerung und Ausgabe für Prozesschemikalien und bietet einen einfachen Zugang zu den Kanistern für zusätzlichen Komfort. Die CompactLine bietet sowohl Leistung als auch Wert und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen Ihrer Praxis mit dem Komfort eines Einsteigergeräts.



02

Schnell und intuitiv

Die CompactLine liefert schnelle Ergebnisse. Das 7-Zoll-Farb-Touch-Display bietet einen einfachen Zugang zu Ihrem bevorzugten Programm, während die animierte Anleitung auf dem Bildschirm bei der grundlegenden Wartung und der Bedienung hilft. Eine Animation mit großen Symbolen auf dem Bildschirm zeigt auch den Programmstatus und die Chargenfreigabe auf dem Display an und sorgt für einen reibungslosen und problemlosen Betrieb.

03

Bequem und flexibel

CompactLine verbessert die Arbeitsabläufe durch Beleuchtung im Inneren der Kammer, die für klare Sicht beim Be- und Entladen sorgt. Die speziell entwickelten Komponenten und Einsätze eignen sich für verschiedene Disziplinen und ermöglichen eine gründliche Aufbereitung aller Instrumente. Die Bediensprache lässt sich über eine Sensortaste auf dem Display schnell einstellen und bietet eine nahtlose Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer Praxis.

04

Leistungsstark und zuverlässig

Erleben Sie überlegene Reinigungsleistung. Die drehzahlvariable Pumpe der CompactLine passt den Spüldruck an die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Zyklusphasen an. Integrierte Sensoren überwachen die Funktion der Sprüharme und den Spüldruck und gewährleisten so eine zuverlässige Leistung. Mehrstufige Filter sorgen zudem für zusätzliche Sicherheit. Die CompactLine erfüllt alle relevanten internationalen Normen, einschließlich EN ISO 15883, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.



05

Nachhaltig und langlebig

Mit 15.000 Betriebsstunden getestet, garantiert CompactLine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ersatzteile bleiben mindestens 15 Jahre nach Produktionsende verfügbar. Die wirtschaftliche Programmgestaltung des Systems optimiert die Effizienz durch kurze Laufzeiten und spart Wasser, Energie und Chemikalien. Mit digitaler Betriebsanleitung und umweltfreundlicher Verpackung verbindet CompactLine Spitzentechnologie mit Nachhaltigkeit.

06

Intelligent und servicefreundlich

Genießen Sie die nahtlose Integration in Ihr Praxisnetzwerk, um eine schnelle und einfache Einrichtung zu ermöglichen. CompactLine bietet eine sichere Prozessdokumentation mit individuell einstellbaren Zugriffsrechten für mehr Kontrolle. Dank Miele MOVE MedDent+ können Sie von jedem beliebigen Ort aus auf die Gerätedaten zugreifen und im Falle von Fehlern direkte Serviceanrufe erhalten. Außerdem erleichtert der einfache Zugang zu den Komponenten die Wartung und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb.

Ein kompakter Überblick

Die CompactLine ist ein effizientes, benutzerfreundliches Reinigungssystem. Es bietet schnelle, hygienische Reinigung und Desinfektion mit fortschrittlichen Funktionen für optimierte Abläufe, die sichere und effektive Ergebnisse gewährleisten.

Schublade für Prozesschemikalien

- Push2Open für einfachere Handhabung
- Ausgestattet mit 3 Dosierpumpen für flüssige Prozesschemikalien
- Dosierlanze mit Leerstandserkennung für mehr Prozesssicherheit und einfaches Nachbestellen von Prozesschemikalien

Optimierte Kammer

- Ergonomische Türhöhe für eine komfortable Bedienung
- Kammerbeleuchtung für gute Sichtbarkeit
- Leistungsstarke, drehzahlvariable Pumpe für effiziente Reinigung
- Nahtloses Laserschweißen für ein höheres Maß an Hygiene

Intuitives Farb-Touch-Display

- Sichtbare Statussymbole
- Chargenfreigabe direkt am Bedienfeld zur Unterstützung des Arbeitsablaufs
- Animierte Anleitungen zur Selbsthilfe für Routineverfahren

Konnektivität und Prozessdokumentation

- WiFi im Bedienfeld integriert, inklusive LAN
- Mit Miele MOVE MedDent+ können Gerätedaten eingesehen werden zu jeder Zeit und von jedem Ort aus, was eine Prozessoptimierung ermöglicht
- Zugriff auf Maschinen-Updates und volle Transparenz der Prozessdaten

Effiziente Programme

- Schnelle, spezialisierte Programme für viele medizinische Fachgebiete.
- EcoDry und AutoOpen für effizientes Trocknen
- Weitere Programme und Startvorbahl-Option



Geeignet für eine Vielzahl medizinischer Fachbereiche



Dank einer breiten Palette von Komponenten, die speziell für verschiedene Arten von Instrumenten entwickelt wurden, ist die CompactLine ideal für Fachleute aller medizinischen Disziplinen sowie für multidisziplinäre Teams. Dank eines flexiblen Korbsystems kann jede Beladung optimiert werden, um die volle Auslastung der Maschine zu gewährleisten. So können Sie Zeit, Kosten und Ressourcen sparen.

Beispielkonfigurationen im neuen Korb APWD 153


(Mat.-Nr. 12537450):




Gynäkologie



Podologie

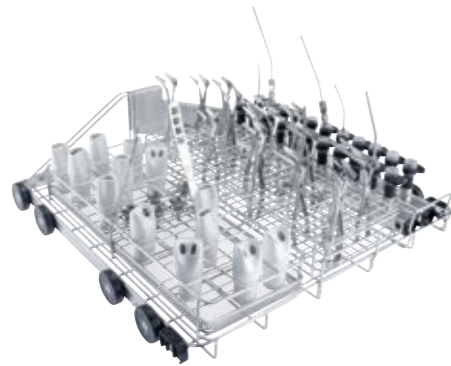

HNO

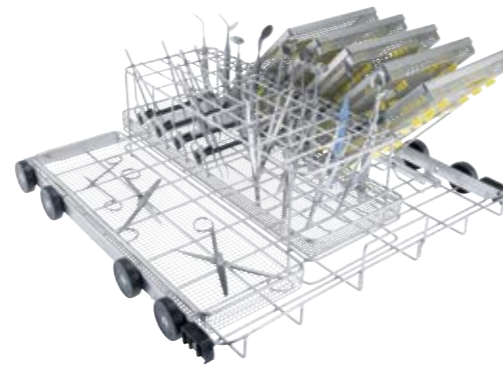

Dermatologie

Die perfekte Synergie

Die innovativen neodisher® Reinigungs- und Desinfektionsprodukte von Dr. Weigert sind perfekt auf die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele Professional abgestimmt. Im Zusammenspiel mit den CompactLine-Programmen werden hervorragende Reinigungsergebnisse erzielt und dabei gleichzeitig die Instrumente geschont und deren Lebensdauer erhöht. Entdecken Sie das gesamte Sortiment, von Reinigungs- und Neutralisationsmitteln über Klarspüler bis hin zu Lösungen für Routinekontrollen und Gerätewartung.



Reinigungs-/Desinfektionsgerät	PWD 8682 C [MD DST LAN]
Standgerät mit Deckel	◆
Farbe	weiß
Materialnummer	12949700
Umwälzpumpe [Qmax. l/min]	500
Steuerung/Programme	
TouchControl/Anzahl Programme	13
Freie Programmplätze	5
AutoClose - automatische Türverriegelung	◆
LEDs zur Spülraumbeleuchtung	2
Summer, akustisches Signal bei Programmende	◆
Ethernet-Kommunikationsmodul	◆
WiFi-Kommunikationsmodul	◆
Wasseranschlüsse	
1x Kaltwasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaug sicher nach EN 1717)	◆
1x AD-Wasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaug sicher nach EN 1717)	◆
1x Warmwasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaug sicher nach EN 1717)	◆
Anzahl Zulaufschläuche 1/2" mit 3/4"-Verschraubung, L = ca. 2,0 m	3
Ablaufpumpe Ø 22, Förderhöhe: max. 100 cm	◆
Waterproofsystem (WPS)	◆
Elektroanschluss	
3 N AC 400 V 50 Hz umbaubar auf AC 230V 50Hz, Anschlusskabel ca. 2,0 m, 5 x 2,5 mm ² inkl. CEE-Stecker"	◆
Heizung [kW]	8,5
Umwälzpumpe [kW]	0,8
Gesamtanschluss [kW]	9,3
Absicherung [A]	3 x 16
Dosiereinrichtungen	
1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger (Länge der Flex-Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	◆
1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel (Länge der Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	◆
1 Dosierpumpe für Klarspüler (Länge der Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	◆
Wasserenthärter	
für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C	◆
Dampfkondensator	
Sprühnebel	◆
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	835/600/600
Spülraummaße H/B/T [mm]	400/536/523
Nutzmaß Unterkorb H/B/T [mm]	280/490/498
Gewicht [kg]	81
Maße Schublade	
Nutzfläche H/B/T [mm] für 2 x 5 L Kanister	240/305/285
Nutzfläche H/B/T [mm] für 1 x 1 L Flasche	240/160/125
Außenverkleidung	
Lotosweiß (LW)	◆
Edelstahl (SST)	
Normkonformität	
DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-040, EN 61326 -1	◆
Prüf- und Kennzeichen	
IP 21	◆
CE 0297	◆
EU 2017/745 (MDR)	◆



Schutz verdient den besten Service.

Reparaturen und Ersatzteile

Unser Ziel ist es, Unterbrechungen schnellstmöglich zu beheben. Wir sind für Sie da, koordinieren Termine und bieten Ihnen die Verfügbarkeit der richtigen Ersatzteile – auch mindestens 15 Jahre nach Produktionsende Ihres Geräts.

Regelmäßiger Service

Um Unterbrechungen in Ihrer täglichen Arbeit vorzubeugen, ist die regelmäßige, präventive Wartung unerlässlich. Wählen Sie eines unserer Servicepakete und profitieren Sie von einem langfristigen Schutz für Ihre Geräte

Inspektionen und Wartung

Regelmäßige Überprüfung der Prozessparameter erhöhen die Betriebssicherheit und gewährleisten einen hohen Standard der Reinigungsergebnisse. Wir beraten Sie auch gerne über die optimale Wartung von Geräten.



Unser Dienst heißt PROtect

PROtect verbindet umfassende Dienstleistungen, maximale Budgetkontrolle und eine lückenlose Ersatzteilversorgung. Unser professionelles Team erledigt Servicearbeiten schnell und zuverlässig, um eine optimale Installation und ständige Betriebsbereitschaft zu gewährleisten.



Erfahren Sie mehr über PROtect www.miele.at/pro/protect

Innovatives Design trifft auf Umweltverantwortung.

Bei der Entwicklung der CompactLine stand die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Ihre ressourceneffizienten Programme minimieren den Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch, während die anpassbaren Einstellungen für optimale Leistung sorgen. Auf Langlebigkeit und langfristige Nutzung ausgelegt, lässt sich CompactLine sehr einfach reparieren. Durch die lange Lebensdauer wird Abfall reduziert und ein dauerhafter Wert für Ihre Praxis geschaffen.



Mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Miele Professional www.miele.at/pro/nachhaltigkeit



Miele



Nichts ersetzt den **persönlichen Kontakt.**

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die beste Lösung für die Bedürfnisse Ihrer Praxis zu finden.

Telefon: +43 (0) 50 800 600



Mehr über CompactLine und
zum Kontaktformular
www.miele.at/pro/compactline-med