

Miele

Effizient, sicher und nachhaltig
**Das Miele EasyStore
Tray- und Containersystem**

Miele Professional. Immer Besser.

EasyStore



Das Miele Tray- und Containersystem unterstützt Sie bei der schnellen, nachhaltigen und effizienten Aufbereitung und Lagerung Ihrer Instrumentensets. Die verschiedenen Größen der Siebtrays und Sterilcontainern sind perfekt aufeinander abgestimmt, um einen reibungslosen Workflow – von der Patientenbehandlung bis zur Lagerung – zu gewährleisten.



Die Vorteile des Miele EasyStore Systems

- ✓ **Zeitersparnis**
Kein Einzelverpacken der Instrumente in Sterilisierfolie
- ✓ **Kosteneinsparung**
Keine wiederkehrenden Kosten für Verpackungsmaterial
- ✓ **Nachhaltigkeit**
Der Bedarf an Sterilisierfolie wird deutlich verringert. Wiederverwendbares System.
- ✓ **Schutz für Personal**
Schutz vor Kontamination und Stichverletzung während der Beladung und des Transports

- ✓ **Werterhalt**
Schonung der Instrumente durch Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- ✓ **Effizienter Workflow**
Standardisierter Prozess und optimierte Organisation der Instrumente
- ✓ **Hohe Sicherheit**
Einfache Dokumentation durch Barcodeschilder und Scanner
- ✓ **Hohe Lebensdauer**
Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien



Reinigung von Instrumentensets


- Besonders schnelle und einfache Platzierung der Trays im Gerät
- Optimale Nutzung der Gerätekapazität durch speziellen Einsatz
- Spezieller Einsatz für Trays ermöglicht die höchste Beladungskapazität am Markt
- Aufbereitung von bis zu 18 Trays pro Charge

Reinigung & Desinfektion

Schnelle und einfache Platzierung der Trays im Gerät

Abräumen & Entsorgen
Sicherheit für Personal durch einfachen und geschlossenen Transport benutzter Instrumente

Bereitstellen & Behandeln
Schnelle Bereitstellung und optimale Organisation der Instrumente für die Behandlung

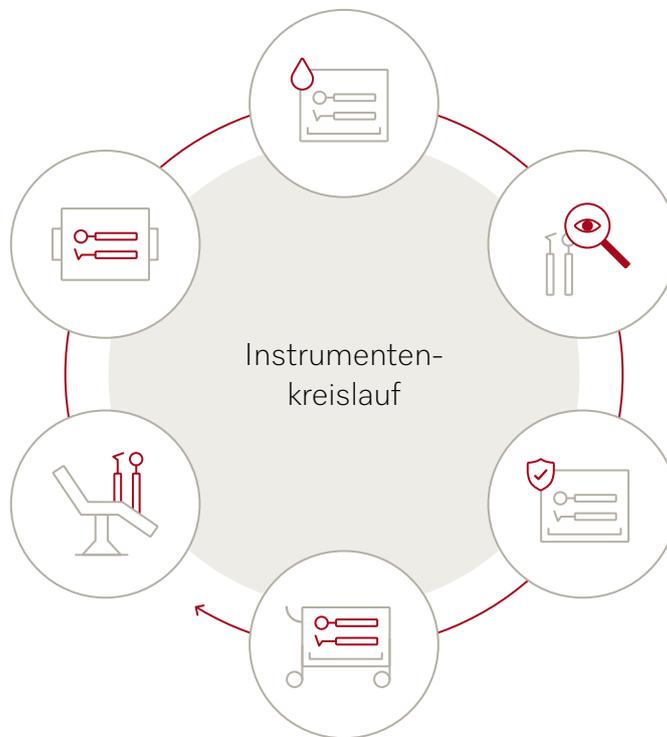

Kontrollieren, Pflegen & Verpacken

Einsparung von Zeit und Folienabfall durch Platzierung der Trays in den Containern

Sterilisation & Freigabe

Einfache und sichere Beladung der Sterilcontainer in den Autoklaven.

Lagerung

Sterile Lagerung der Instrumente



Sterilisation von Instrumentensets

- Einfache und sichere Beladung der Sterilcontainer
- Kein Zerkratzen der Sterilisationskammer durch spezielle, drehbare Halterung
- Aufbereitung von bis zu 3 APWD 334 Sterilcontainer oder bis zu 2 APWD 335 Sterilcontainer



APWD 331

Siebtray flach, mit 3 Silikonstegen

- Passend in Sterilcontainer APWD 334
- H/B/T: 30 x 125 x 188 mm

Mat.-Nr. 12752230



APWD 332

Siebtray flach, mit 5 Silikonstegen

- Passend in Sterilcontainer APWD 334
- H/B/T: 30 x 176 x 273 mm

Mat.-Nr. 12752360



APWD 333

Siebtray hoch, mit 3 Silikonstegen

- Passend in Sterilcontainer APWD 335
- H/B/T: 41 x 176 x 273 mm

Mat.-Nr. 12752420



APWD 334

Sterilcontainer zur Aufnahme von flachen Siebtrays

- Zur Aufnahme von 1 x APWD 331 oder 1 x APWD 332
- H/B/T: 46 x 190 x 312 mm

Mat.-Nr. 12752500



APWD 335

Sterilcontainer zur Aufnahme von flachen oder hohen Siebtrays

- Zur Aufnahme von 1 x APWD 333 oder 1 x APWD 332
- H/B/T: 65 x 190 x 312 mm

Mat.-Nr. 12752580



APWD 336

Dauerfilter für bis zu 1000 Zyklen

- Erzielen gute Trocknungsergebnisse im Container
- Widerstandsfähig und langlebig
- 2 Stück pro Packung
- Zur Anwendung im APWD 334 und APWD 335

Mat.-Nr. 12752660



APWD 337

Halter für Kennzeichnungsschilder

- In einer Größe von H/B 18 x 56 mm
- Zur Anwendung im APWD 334 und APWD 335

Mat.-Nr. 12752730



APWD 338

Verschlussplomben mit Indikator

- Um ungewolltes Öffnen nach der Dampfsterilisation zu verhindern
- Indikator für die Dampfsterilisation nach EN ISO 11140-1 Klasse 1
- 100 Stück pro Packung

Mat.-Nr. 12566280



APWD 339

Verschlussplomben

- Um ungewolltes Öffnen nach der Dampfsterilisation zu verhindern
- 100 Stück pro Packung

Mat.-Nr. 12566300



Trays

- Optimale Reinigungsergebnisse durch große Perforation und minimalen Spülschatten
- Ideale Anordnung & sichere Fixierung der Instrumente im Tray
- Flexible anpassbare Silikonstege
- Komfortables Öffnen und Schließen mit einer Hand
- Wasserabfluss für ideale Trocknungsergebnisse



Sterilcontainer

- Keimdichter Verschluss des Deckels
- Schnelle und sterile Deckelabnahme
- Spannverschlüsse als praktische Deckelgriffe
- Gleichbleibender Verschluss durch integrierte Federn im Griff
- Filterschnellhalterung zum einfachen Wechsel des Dauerfilters



Highlights des Miele EasyStore Systems



Zeitersparnis



Kosteneinsparung



Nachhaltigkeit

* Die Einsparungen beziehen sich auf das Beladen und Verpacken von Instrumenten mit Miele EasyStore im Vergleich zur Handhabung einzelner Instrumente. Die Kosteneinsparungen wurden am Beispiel von 120 Instrumenten pro Zyklus, zwei Zyklen pro Tag, einschließlich der Investitionskosten für Miele EasyStore, berechnet.

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Verkauf

Telefon: +43 (0) 50 800 600
E-Mail: vertrieb-professional@miele.at
www.miele-professional.at

Serviceannahme

Telefon: +43 (0) 50 800 600
E-Mail: kundendienst-professional@miele.at

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierte Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel