


Miele

ProCare Dent

Produits chimiques pour le nettoyage
et le traitement des instruments dentaires

Miele Professional. Immer Besser. (Toujours mieux.)

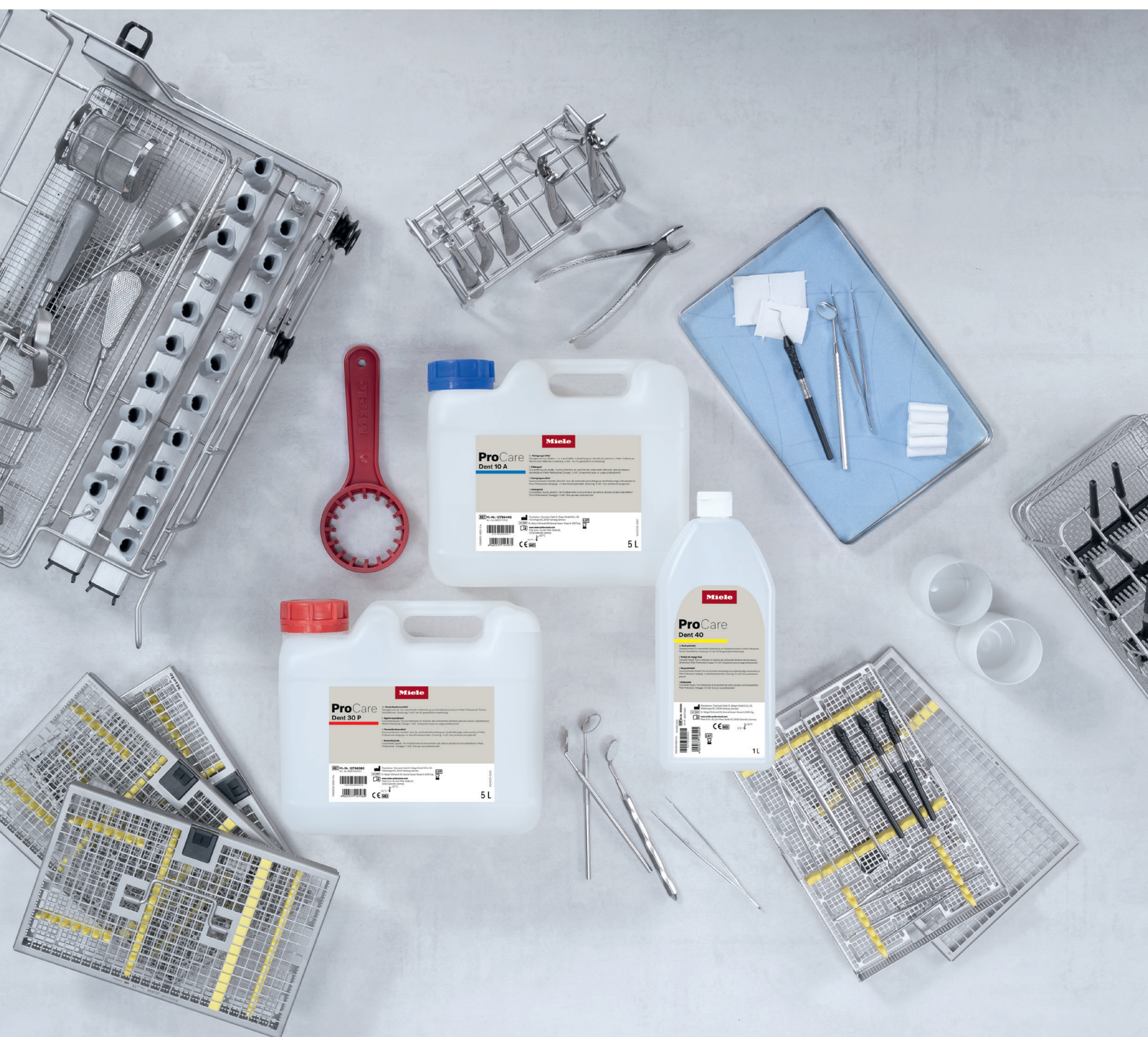

ProCare Dent

Détergent



Le multitalent pour une utilisation quotidienne dans les cabinets

ProCare Dent 10 MA

Détergent liquide non dangereux, légèrement alcalin

- Pour le traitement automatique d'instruments dentaires et des pièces à main
- Parfaitement adapté aux processus et aux charges de nettoyage des laveurs d'instruments dentaires et des laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Excellente préservation des matériaux
- Particulièrement adapté aux matériaux sensibles
- Nettoyage rapide et complet grâce aux enzymes
- Conditionnement : 5 litres
- No. de mat.: 12680720

Le professionnel des salissures

ProCare Dent 10 A

Détergent liquide, alcalin

- Pour le traitement automatique d'instruments dentaires
- Parfaitement adapté aux processus et aux charges de nettoyage des laveurs et des laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Excellente préservation des matériaux
- Protection contre la corrosion pour les instruments et les plateaux en inox
- Peu de résidus – sans tensio-actifs
- Utilisation sûre – sans additifs oxydants
- Conditionnement : 5 litres
- No de mat.: 12786490



ProCare Dent

Agent neutralisant



Neutralisation en douceur des instruments sensibles

ProCare Dent 30 C

Agent neutralisant, acide

- Pour le traitement automatique d'instruments dentaires et des pièces à main
- Parfaitement adapté aux processus et aux charges de nettoyage des laveurs d'instrument dentaires et les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Bonne compatibilité avec les matériaux
- Respectueux de l'environnement, ne contient pas de phosphates
- Élimine de manière fiable les résidus des étapes de nettoyage précédentes et neutralise les résidus alcalins restants
- À base d'acide citrique
- Conditionnement : 5 litres
- No de mat. : 12796330



Neutralisation puissante pour les instruments standard

ProCare Dent 30 P

Agent neutralisant, acide

- Pour le traitement automatique d'instruments dentaires
- Parfaitement adapté aux processus et aux charges de nettoyage des laveurs d'instruments dentaires et les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Élimine la décoloration et les salissures solubles dans l'acide
- Élimine de manière fiable les résidus des étapes de nettoyage précédentes et neutralise les résidus alcalins restants
- À base d'acide phosphorique
- Conditionnement : 5 litres
- No de mat. : 12796380

ProCare Dent

Agent de rinçage



Séchage rapide, résultats sans résidus

ProCare Dent 40

Produit de rinçage, acide

- Pour le traitement automatique d'instruments dentaires et des pièces à main
- Parfaitement adapté aux processus et aux charges de nettoyage des laveurs d'instruments dentaires et des laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Améliore et accélère le séchage
- Élimine de manière fiable les résidus des étapes de nettoyage précédentes et neutralise les résidus alcalins restants
- Conditionnement : 1 litre
- No de mat. : 12796420



Pour une finition sûre après le nettoyage :

Les agents neutralisants et les produits de rinçage ProCare Dent garantissent une élimination fiable des résidus de détergents et préparent parfaitement les instruments à la désinfection thermique. Qu'ils soient doux avec l'acide citrique ou puissants avec l'acide phosphorique, les produits sont précisément adaptés aux exigences des instruments en question. Le produit de rinçage complète le processus et assure un séchage rapide et sans taches – pour des résultats de nettoyage hygiéniques qui impressionnent.

Produits et accessoires supplémentaires



ProCare Universal 61 Sel régénérant

- Pour une réactivation optimale de l'adoucisseur d'eau intégré
- Prévient le dépôt calcaire et protège les charges
- Conditionnement : 6 kg
- No.de mat : 9195780



ProClean Check Indicateurs de nettoyage (Canada uniquement)

- Vérification routinière des cycles de nettoyage dans les laveurs automatiques et les laveurs-désinfecteurs
- Test des résidus après nettoyage ou la désinfection thermique
- La couche organique disparaît lorsque le nettoyage efficace
- 200 indicateurs par boîte
- Fonctionne avec le support ProClean Check (recommandé : 2 par machine)
- No. de mat. indicateur ProClean Check : 97200392
- No. de mat. support ProClean Check : 97200393



CK/1 DIN 51 Clé pour bidon

- Pour ouvrir facilement les bidons de produit ProCare de 5, 10 et 20 litres
- Permet d'ouvrir aisément les bidons fermés mécaniquement
- Robuste et durable
- Utilisable des 2 côtés
- No. de mat. : 11851600



DTD 2 Bac d'égouttage

- Accueil en toute sécurité des bidons de produit ProCare de 5 et 10 litres
- Offre de la place pour 2 bidons de produit
- Vidange résiduelle des bidons de produit grâce à l'angle d'inclinaison
- Destiné à un stockage dans un meuble contigu
- No. de mat. : 10695460



Les appareils appropriés

Notre laveur d'instruments dentaires Miele Professional PWA 8672, ainsi que nos laveurs-désinfecteurs PWD 8682 et PWD 8692 (Canada uniquement), sont parfaitement adaptés aux produits Pro-Care Dent. Qu'il s'agisse de 2 ou 3 pompes de dosage, nous vous proposons la technologie adaptée à vos besoins.

Pour le traitement des instruments standard et des pièces à main d'une manière qui est fiable et efficace.



PROtect : un service prévisible

- **Travailler pour vous :** notre équipe de service Miele Professional vérifie régulièrement votre appareil – pour des processus sûrs et une qualité documentée.
- **Validation facilitée :** ProCare Dent et l'appareil Miele Professional vous offrent une solution qui peut être validée facilement et de manière fiable.



Miele Limité Canada
www.miele-professional.ca