

Laveurs-désinfecteurs dentaires PWD 8682



Pour une grande variété
**des instruments
dentaires**

Testé pour

15 000

heures de fonctionnement

Pièces de rechange disponible jusqu'à

15 ans

après l'arrêt de la production.



Durable

grâce à une utilisation intelligente
des ressources et à des programmes
personnalisés, pompe à chaleur à
vitesse variable et dosage précis..



Contrôle des infections avec une **qualité fiable.**

Grâce à leur conception et à leurs programmes polyvalents, les laveurs-
désinfecteurs permettent d'atteindre le plus haut niveau d'hygiène.

Touches sensibles  **intuitives** et **rapides**

Réduction de la charge de travail.


Lavage minutieux pour toutes les applications médicales avec plus de 40 paniers, inserts
et adaptateurs.



Le lavage des instruments à l'aide de solutions professionnelles
automatisées réduit le risque de blessures du personnel lors
de la manipulation d'instruments tranchants. Le risque de
contamination est ainsi réduit au sein de votre clinique, ce qui
contribue à créer un environnement sûr pour tous.



En savoir plus :
[www.miele.ca/pro/
pwd86Dent](http://www.miele.ca/pro/pwd86Dent)

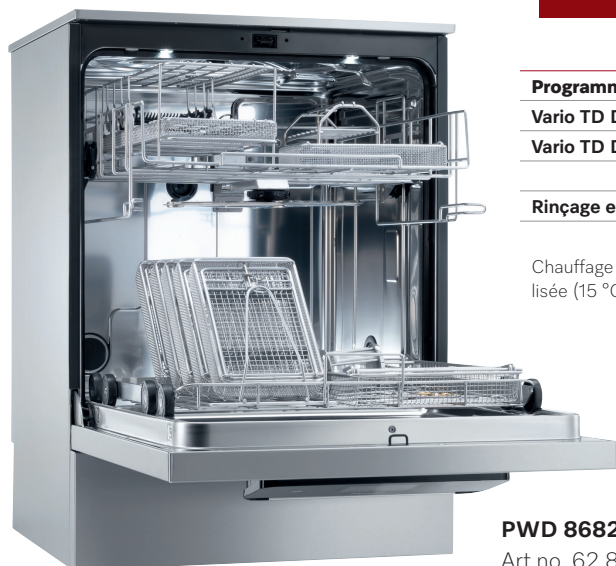

Programme	Durée du programme [min]	Consommation d'eau [l]	Énergie [kWh]
Vario TD Dental	48	19	1,5
Vario TD Dental +	60	27	1,6
Rinçage eau froide	6	10	0,01

Chauffage : 5,4 kW (2 CA 208 V 60 Hz), raccordement à l'eau froide (15 °C), à l'eau chaude et à l'eau déminéralisée (15 °C)

Trouvez les composants :



PWD 8682 208V | 240V

Art.no. 62 8682 22 NAM | 62 8682 24 NAM

Dimensions

Dimensions externes H x L x P [mm (po)]	820 x 598 x 598 (32 1/4 x 23 9/16 x 23 9/16)
Dimensions de la cuve H x L x P [mm (po)]	520 x 530 x 474 (20 1/2 x 20 7/8 x 18 11/16)
Volume usable de la cuve [l (pi.cu)]	145 (5,12)

Raccordement électrique

Standard	2CA 208V ou 240V 60Hz 30A avec NEMA L6-30P. Une prise NEMA L6-30R est requise sur place.
Alternative.	3CA 208V ou 240V 60Hz 20A

Systèmes de dosage

1 doseur de produit de rinçage dans la porte	◆
1 pompe de dosage pour détergents liquides	◆
1 pompe de dosage pour l'agent neutralisant	◆

Module de dosage externe

DOS K 85 Flex ou DOS K85/1 Flex (pas détection de niveau)	1
DOS K 85 Comfort or DOS K85/1 Comfort (détection de niveau)	1

Installation

Eau froide	1x 3/4po MGHT sur place / Débit 7,5 l/min / Pression du raccordement à l'eau 200–1000 kPa
Eau chaude	1x 3/4po MGHT 3/4 po sur place / Débit 7,5 l/min / Pression du raccordement à l'eau 200–1000 kPa
Eau déminéralisée	1x 3/4po MGHT sur place / Débit 7,5 l/min / Pression du raccordement à l'eau 200–1000 kPa
Vidange	1x 3/4po Connexion à barbes sur place / Débit 16 l/min
Pompe de vidange	Ø 22, hauteur de refoulement max. : 100 cm




Transport

Dimensions H x L x P [mm (po)]	940 x 675 x 745 (36 1/4 x 26 7/16 x 29 3/16)
Poids [kg (lbs)]	74 (163)

Certifications

Santé Canada, dispositif médical classe II ◆

Plus d'informations disponibles sur notre site Web, dans les schémas d'installation et dans les caractéristiques techniques.

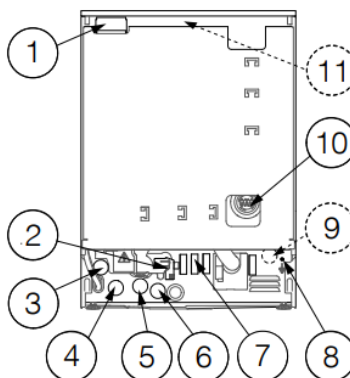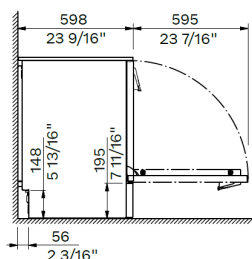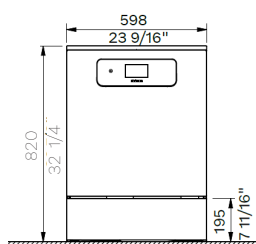

Légende:

- 1 Connexion réseau
- 2 Vidange
- 3 Eau déminéralisée
- 4 Eau froide
- 5 Câble de connexion électrique
- 6 Eau chaude
- 7 Distribution externe, connexion à l'alimentation électrique
- 8 Liaison équipotentielle
- 9 Arrivée d'eau avec pompe (en option)
- 10 Dosage externe, connexion pour tuyau de distribution
- 11 Contact sans potentiel (en option)

Mesures en mm, sauf indication contraire