



**Miele**

# Von den Hygiene- Experten.

Für die Dental-  
Experten.

ExpertLine – unsere neue Produktlinie  
für die zuverlässige Aufbereitung Ihrer Instrumente.



**So wird Sicherheit  
zur Praxis.  
In jeder Praxis.  
Mit ExpertLine.**

**Miele**




Für eine Vielzahl von  
**zahnärztlichen  
Instrumenten**

**15.000**  
getestete Betriebsstunden



**Glastür & Kammerbeleuchtung\***

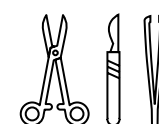

**Infektionskontrolle mit verlässlicher Qualität**

Die neuen Geräte der ExpertLine erreichen dank ihres Designs und ihrer vielseitigen Programme ein Höchstmass an Hygiene.

Ersatzteile erhältlich bis zu

**15 Jahre**

nach Einstellung der Maschinenproduktion.



**Nachhaltig**

durch intelligente Ressourcennutzung  
und individualisierbare Programme.

**Intuitive und schnelle**  **Touch-Bedienung**



**Passende  
Trocknungsoptionen  
je Anwendungsfall**

Von der AutoOpen Funktion bis  
zur DryPlus-Heisslufttrocknung  
bietet unser Experte verschiedene  
Optionen.

Digitale Vernetzung dank



**Miele MOVE  
Connect**

**Hervorragende und effektive Reinigungs- und Desinfektionsleistung  
bei hohen Kapazitäten**

Der Spüldruck wird auf die jeweiligen Reinigungsanforderungen angepasst –  
von der Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, hin zur gleichmässigen  
Benetzung des Spülguts.



Mehr zur ExpertLine  
[www.miele.ch/  
pro/pwd86-dent](http://www.miele.ch/pro/pwd86-dent)

\* modellabhängig

# Effizienz für jedes Team.

Entdecken Sie die Effizienz der Instrumentenaufbereitung mit ExpertLine und verbessern Sie die Hygiene in Ihrer Praxis.

## Intuitive Bedienung

Das intuitive Farb-Touch-Display sorgt für schnellen Zugriff auf favorisierte Programme. Dabei können individuelle Einstellungen vorgenommen werden und der Programmstatus wird gut sichtbar und leicht verständlich angezeigt.

## Bestens unterstützt

Bei Bedarf unterstützen How-to-Sequenzen, die im Display gezeigt werden, um beispielsweise Filter zu wechseln oder Teile zu reinigen. Das reduziert Ausfallzeiten und sorgt für reibungslose Abläufe.


## Smarte Reinigung und Desinfektion

Die grosse Kammer mit 2 Spülebenen arbeitet in perfekter Synergie mit Einsätzen, die für alle Arten von Dental-Instrumenten ausgelegt sind. Die ExpertLine fasst 44 Hohlkörperinstrumente + Instrumentensets\* für bis zu 160 Patienten in einer einzigen Charge.

Der spaltfreie Spülraum sorgt für ein hygienisches Innenleben, da sich Schmutz nicht ablagern kann. Verschiedene Sensoren kontrollieren die einwandfreie Funktion von Sprüharmen und des Spüldrucks. Mehrstufige Filter für mehr Sicherheit und vieles mehr – Expertise bis in jedes kleinste Detail bietet ExpertLine.

## Durchblick behalten

Dank der Kammerbeleuchtung und modellabhängigen Glastür lässt sich der Reinigungs- und Desinfektionsprozess noch leichter überwachen und Spülgut schnell und komfortabel beladen.

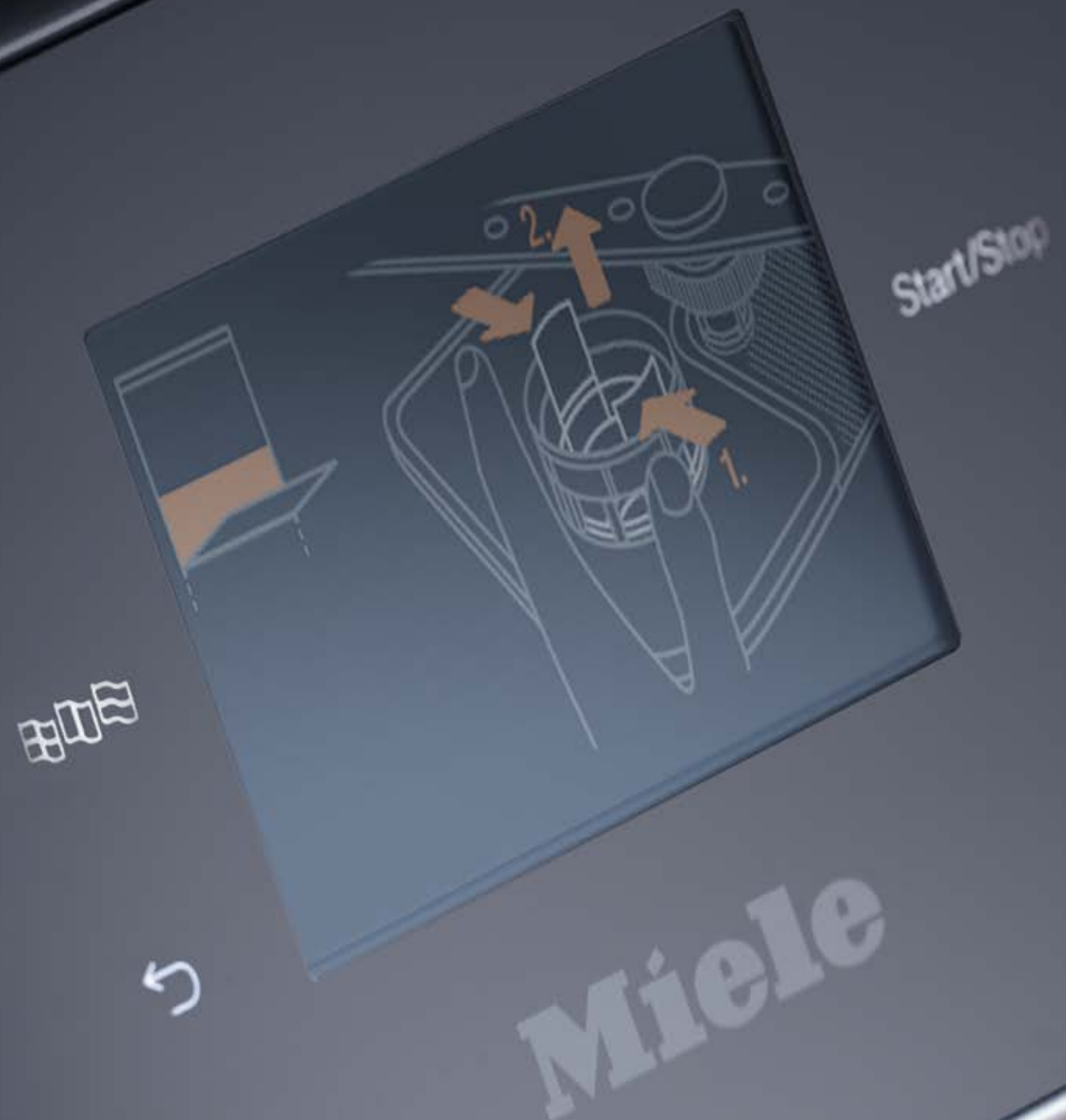





# Eine nachhaltige Ergänzung für Ihr Team.

Die innovative Pumpe mit variabler Geschwindigkeit ermöglicht sowohl Wasser- als auch Energieeinsparungen, indem sie den Wasserdruck in jeder Phase des Reinigungszyklus an den variablen Bedarf anpasst.

Sparsame und auf den jeweiligen Anwendungsfall ausgelegte Programme, kurze Laufzeiten und ressourcenschonende Technologien – all dies führt zu einem geringen Verbrauch von Wasser, Strom und Prozesschemikalien und schont somit die Umwelt.

**Miele**

Allgemeine Zahnmedizin




## Flexibilität für alle Teams.

Das modulare Korbkonzept bietet volle Flexibilität, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Speziell für verschiedene Disziplinen entwickelte Einsätze und Körbe ermöglichen die gründliche Desinfektion aller Arten von Instrumenten. Auch für die Trocknung bietet ExpertLine verschiedene Möglichkeiten, von der AutoOpen-Funktion bis zur DryPlus-Heisslufttrocknung.

Implantologie und MKG



Kieferorthopädie

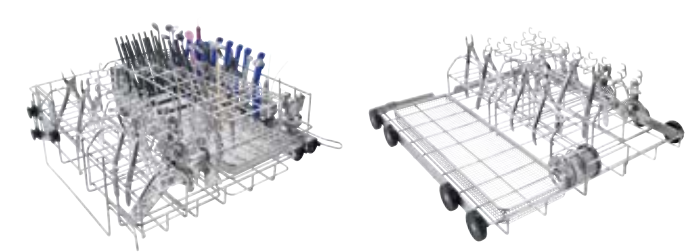

## Ein internationaler und digitaler Zugewinn.

Die einfache Sprachauswahl macht die Modelle der ExpertLine zu Ihrem internationalen Experten im Team. Für reibungslose Abläufe unterstützen How-to-Sequenzen, die im Display gezeigt werden.

Dank der Verbindung mit Miele MOVE Connect können Maschinendaten jederzeit von jedem Ort eingesehen und Arbeitsläufe optimiert werden. Ausserdem haben Sie Zugang zu Maschinen-Updates und erhalten Auswertungen zum Reinigungsprozess. Für eine direkte Serviceunterstützung gibt es zudem eine Schnittstelle zum Kundendienst, die wichtige Informationen übermittelt, um Zeit und Aufwand zu sparen. Über Miele MOVE MedDent+ erhalten Sie Zugang zu einer erweiterten Prozessdokumentation.



# Lernen Sie die Hygiene-Experten kennen.

Alle Experten bieten eine maximale Effizienz durch hohe Kapazitäten und ressourcensparende Reinigungsleistung mit folgenden Highlights:



Grosses, intuitives  
Farb-Touch-Display




Flüssigdosierung mit Füllstands-  
erkennung



Umfassendes  
Programmpaket



Volle Konnektivität: WLAN und LAN  
als Standard

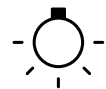

Kammerbeleuchtung für  
noch komfortableres Beladen



Vollständige Dokumentation und Chargen-  
freigabe direkt auf dem Display



## ExpertLine PWD 8682 DT mit EcoDry Trocknung und Glastüroption

Unsere EcoDry Trocknung verfügt über die AutoOpen-Funktion, wodurch nach Programmende Restfeuchte entweichen kann, Instrumente schneller abkühlen und somit die Entladung zeitnah erfolgen kann. Die Glastürvariante ermöglicht Ihnen zudem eine leichte Überwachung des Reinigungs- und Desinfektionsprozesses.



## ExpertLine PWD 8692 DT mit DryPlus-Heisslufttrocknung für beste Trocknungsergebnisse

Unsere DryPlus-Heisslufttrocknung sorgt für beste Trocknungsergebnisse auch bei Hohlkörperinstrumenten. Auch hier gewährleistet die AutoOpen-Funktion ein besseres Entweichen der Restfeuchte und somit ein schnelleres Abkühlen der Dentalinstrumente.



Mehr zur ExpertLine  
[www.miele.ch/pro/pwd86-dent](http://www.miele.ch/pro/pwd86-dent)






# Miele 360PRO.

## Die ganzheitliche Systemlösung.

### Präzision ist eine Verantwortung. Die uns antreibt.

Wir wissen, dass Hygiene im zahnmedizinischen Bereich eine wichtige Rolle spielt. Um Sie bestmöglich zu unterstützen, bieten wir 360PRO. Unser ganzheitliches System mit perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen aus einer Hand. Von der Beratung bis zur Nachhaltigkeit, vom Komponenten bis zur Vernetzung, vom Reinigungsmittel bis zur Wartung, einschliesslich des optimalen Geräts: Wir sind für Sie da, damit Sie sich ganz auf Ihre Patienten konzentrieren können.

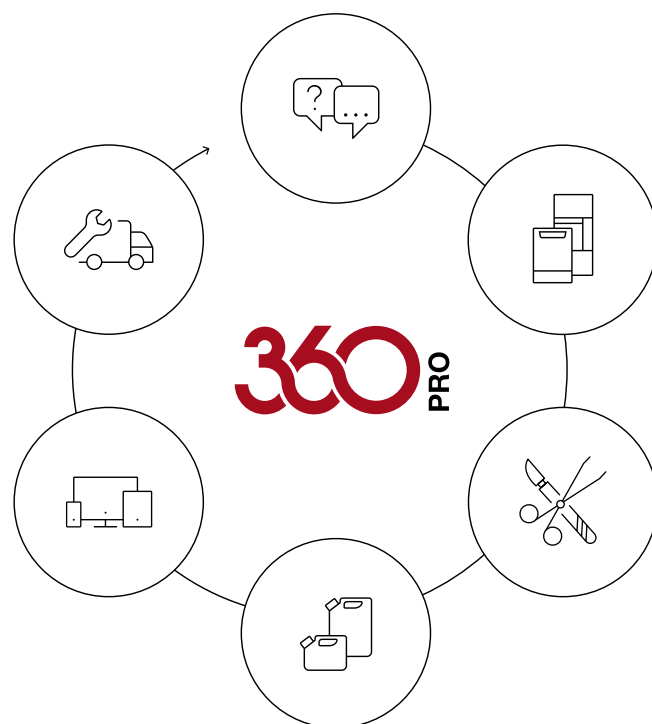

Mehr zu  
Miele 360PRO Dental  
[www.miele.ch/pro/dental](http://www.miele.ch/pro/dental)

**Miele**

## Nachhaltiger Anspruch, ausgezeichnetes Design.

### Gut für Ihr Team. Noch besser für den Planeten.

„Immer Besser“ ist seit 1899 unsere Philosophie. Sie treibt uns an morgen besser zu sein, als wir es gestern waren. Sie motiviert uns jeden Tag bessere, intelligentere Geräte zu entwickeln. Auch ExpertLine setzt neue Massstäbe im Bereich Nachhaltigkeit. So werden beispielsweise dank 15 Jahren Ersatzteilverfügbarkeit Betriebskosten gesenkt und der ökologische Fussabdruck verkleinert oder durch 15.000 getestete Betriebsstunden eine extreme Langlebigkeit erreicht. Neu ausgestattet mit einer digitalen Bedienungsanleitung als abfallfreie Alternative.

### Die Miele ExpertLine ist stolzer Gewinner des iF Design Award 2024.

*„Wir freuen uns über die erneuten Auszeichnungen, die unseren Premiumanspruch an Ästhetik und Design nach aussen sichtbar unterstreichen.“*

Andreas Enslin, Vice President Miele Design Center



## Damit Sie rundum geschützt sind.

Unser Service heisst PROtect und vereint umfassende Serviceleistungen, maximale Budgetkontrolle und eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Wir beraten Sie transparent und branchenspezifisch, koordinieren Termine und garantieren die Verfügbarkeit passender Ersatzteile – auch 15 Jahre nach Serienauslauf.



Mehr zu PROtect  
[www.miele.ch/pro/protect](http://www.miele.ch/pro/protect)

**Miele**  
**PROtect**

# Nichts ersetzt einen **persönlichen Kontakt.**

Kontaktieren Sie uns gerne, um noch mehr über die ExpertLine zu erfahren – ganz einfach per Telefon oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite.

**Telefon: 0848 551 670**

Mo. – Fr. 08:00 – 17:00 Uhr



Mehr zur Miele ExpertLine  
[www.miele.ch/pro/pwd86-dent](http://www.miele.ch/pro/pwd86-dent)