

Miele



Misez sur l'efficacité. Pensé de manière compacte.


Découvrez CompactLine —
la solution intelligente et optimisée en
termes d'espace pour un traitement
efficace et intuitif des instruments.





Découvrez une nouvelle dimension de l'hygiène.
Le tout dans un seul appareil.

Tiroir intégré avec espace de rangement optimisé

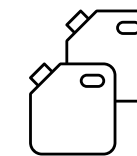

De la place pour deux bidons de 5 L de produits chimiques + 1 bouteille

Utilisation tactile  **intuitive** et **rapide**



Pour un grand nombre de **domaines**



Programmes rapides

Construit pour être **durable**. Programmes optimisés.

Conçu de manière durable pour durer plus longtemps – avec des pièces de rechange disponibles au moins 15 ans après la fin de la production. La consommation de ressources s'adapte aux besoins de chaque charge.



**Miele MOVE
MedDent+**



En savoir plus sur CompactLine
www.miele.ch/pro/compactline-med

Six raisons

justifiant le choix
de CompactLine
dans votre cas

01

Optimisé et compact

CompactLine est la solution idéale pour les cabinets qui traitent peu d'instruments et offre un traitement efficace dans un design peu encombrant. Il dispose d'un stockage et d'une distribution intégrés pour les produits chimiques de traitement et offre un accès facile aux bidons de produits pour plus de commodité. Le CompactLine offre à la fois performance et valeur et répond aux besoins exigeants de votre cabinet avec le confort d'un appareil d'entrée de gamme.



02

Rapide et intuitif

CompactLine dispose d'un programme rapide. L'écran tactile couleur de 7 pouces permet d'accéder facilement à votre programme préféré, tandis que les instructions animées à l'écran vous guident pour la maintenance de base et le dépannage. Une animation avec de grandes icônes à l'écran indique également l'état du programme et la libération des lots sur l'écran, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et sans problème.

03

Confortable et flexible

CompactLine améliore les processus de travail grâce à l'éclairage à l'intérieur du compartiment, qui assure une vision claire lors du chargement et du déchargement. Les composants et compléments spécialement conçus conviennent à différentes disciplines et permettent un traitement approfondi de tous les instruments. La langue d'utilisation peut être réglée rapidement à l'aide d'une touche sensitive sur l'écran et offre une adaptation parfaite aux besoins de votre cabinet.

04

Puissant et fiable

Découvrez des performances de nettoyage supérieures. La pompe à vitesse variable du CompactLine adapte la pression de lavage aux exigences de chaque phase du cycle. Des capteurs intégrés surveillent la fonction des bras de lavage et la pression de lavage, garantissant ainsi des performances fiables. Des filtres à plusieurs niveaux assurent en outre une sécurité supplémentaire. CompactLine répond à toutes les normes internationales pertinentes, y compris la norme EN ISO 15883, pour que vous n'ayez aucun souci à vous faire.



05

Écologique et durable

Testé pendant 15'000 heures de fonctionnement, CompactLine garantit longévité et fiabilité. Les pièces de rechange restent disponibles pendant au moins 15 ans après l'arrêt de la production. La programmation économique du système optimise l'efficacité grâce à des durées de programme courtes et permet d'économiser de l'eau, de l'énergie et des produits chimiques. Avec un mode d'emploi numérique et un emballage respectueux de l'environnement, CompactLine allie technologie de pointe et durabilité.

06

Intelligent et facile à entretenir

Profitez d'une intégration transparente dans le réseau de votre cabinet pour une configuration rapide et facile. CompactLine offre une traçabilité sécurisée des processus avec des droits d'accès personnalisables pour un meilleur contrôle. Grâce à Miele MOVE MedDent+, vous pouvez accéder aux données de l'appareil depuis n'importe quel endroit et profiter d'appels directs avec le service après-vente en cas d'anomalie. En outre, l'accès facile aux composants simplifie la maintenance et garantit un fonctionnement sans problème.

Un aperçu concis

CompactLine est un système de nettoyage efficace et facile à utiliser. Il offre un nettoyage et une désinfection rapides et hygiéniques, avec des fonctions avancées pour des déroulements optimisés qui garantissent des résultats sûrs et efficaces.

Tiroir pour produits chimiques

- Push2Open pour une manipulation plus facile
- Équipé de deux ou trois pompes de dosage pour produits chimiques liquides
- Canne d'aspiration avec détection de jauge vide pour une plus grande sécurité du processus et un réapprovisionnement facile des produits chimiques

Compartment optimisé

- Hauteur de porte ergonomique pour une utilisation confortable
- Éclairage de la cuve pour une visibilité approfondie
- Pompe puissante à vitesse variable pour un nettoyage efficace
- Soudage laser lisse pour un niveau d'hygiène supérieur

Écran tactile couleur intuitif

- Symboles visibles de l'état
- Validation des lots directement sur le panneau de commande pour faciliter le flux de travail
- Instructions animées pour des procédures de routine en toute autonomie

Connectivité et traçabilité

- Wi-Fi intégré au panneau de commande, réseau local en option
- Avec Miele MOVE, les données des appareils MedDent+ peuvent être consultées à tout moment et en tout lieu, ce qui permet d'optimiser les processus
- Accès aux mises à jour des appareils et transparence totale des données de processus

Des programmes efficaces


- Programmes rapides et spécialisés dans de nombreux domaines médicaux.
- Technologie EcoDry et AutoOpen pour un séchage efficace
- Autres programmes et option de démarrage différé



Convient à un grand nombre de domaines médicaux

Grâce à une large gamme de composants spécialement conçus pour différents types d'instruments, le CompactLine est idéal pour les professionnels de toutes les disciplines dentaires ainsi que pour les équipes multidisciplinaires. Grâce à un système de paniers flexible, chaque chargement peut être optimisé afin de garantir une pleine utilisation de l'appareil. Vous pouvez ainsi économiser du temps, de l'argent et des ressources.

Exemples de configurations dans le nouveau panier APWD 153 (réf. mat.: 12537450)

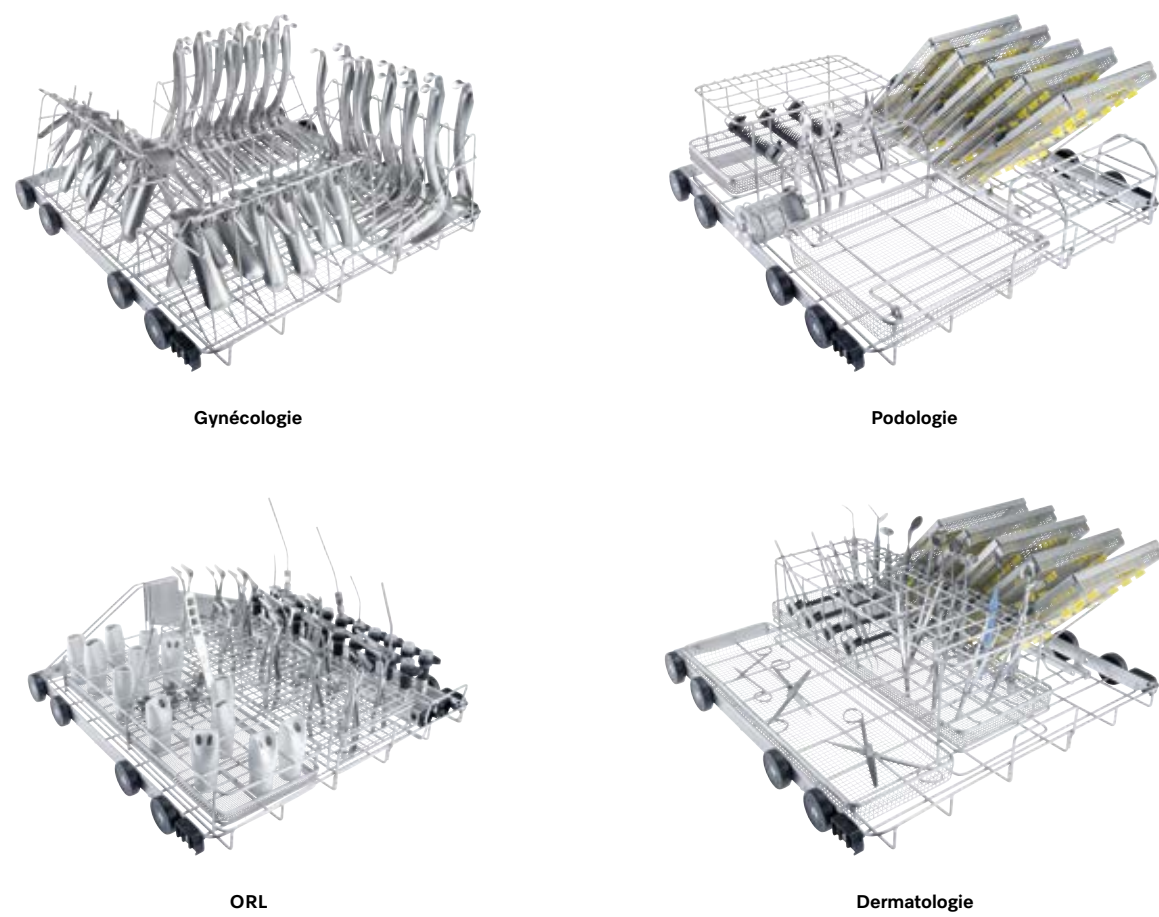

La synergie parfaite

La gamme de produits chimiques ProCare Med, spécialement développée pour les laveurs-désinfecteurs de Miele Professional, fournit, en interaction avec les programmes du CompactLine, d'excellents résultats de nettoyage et de désinfection tout en préservant les instruments et leur durée de vie. Découvrez l'ensemble de la gamme, des produits de nettoyage et de neutralisation aux solutions de contrôle de routine et de maintenance des appareils, en passant par les produits de rinçage.



Découvrez ProCare Med
www.miele.ch/pro/procare-med



Laveur-désinfecteur	PWD 8682 C [DT DST LAN]
Appareil à pose libre avec couvercle	◆
Couleur	Blanc
Numéro de matériel	12949690
Pompe de circulation [Qmax. l/min]	500
Commande/Programmes	
TouchControl/Nombre de programmes	10
Emplacements de programme libres	5
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	◆
LED pour l'éclairage de la cuve	2
Alarme, signal sonore à la fin du programme	◆
Module de communication Ethernet	◆
Module de communication Wi-Fi	◆
Raccordements à l'eau	
1 x eau froide, pression du raccordement à l'eau 2,0 à 10 bar (200–1'000 kPa) (protection contre le reflux, selon EN 1717)	◆
1 x eau déminéralisée, pression du raccordement à l'eau 2,0–10 bar (200–1'000 kPa) (protection contre le reflux, selon EN 1717)	◆
1 x eau chaude, pression du raccordement à l'eau 2,0 à 10 bar (200–1'000 kPa) (protection contre le reflux, selon EN 1717)	◆
Nombre de tuyaux d'arrivée d'eau 1/2" avec raccord 3/4", L = env. 2,0 m	3
Pompe de vidange Ø 22, hauteur de refoulement : 100 cm max.	◆
Système Waterproof (WPS)	◆
Raccordement électrique	
3 N CA 400 V 50 Hz transformable en CA 230 V 50 Hz, câble d'alimentation secteur env. 2,0 m, 5 x 2,5 mm², fiches CEE comprises	◆
Chauffage [kW]	8,5
Pompe de circulation [kW]	0,8
Puissance totale de raccordement [kW]	9,3
Fusible [A]	3 x 16
Dispositifs de dosage	
Une pompe de dosage pour détergent liquide (longueur de la lance d'aspiration Flex: 217 mm, utilisable pour des hauteurs de bidon jusqu'à 202 mm)	◆
Une pompe de dosage pour agents neutralisants (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des hauteurs de bidon jusqu'à 202 mm)	◆
Une pompe de dosage pour produit de rinçage (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des hauteurs de bidon jusqu'à 202 mm)	◆
Adoucisseur d'eau	
Pour de l'eau froide et de l'eau chaude jusqu'à 65 °C	◆
Condenseur de vapeur	
Brumisateur	◆
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures H/L/P [mm]	835/600/600
Dimensions de la cuve H/L/P [mm]	400/536/523
Dimensions utiles du panier inférieur H/L/P [mm]	280/490/498
Poids [kg]	81
Dimensions du tiroir	
Surface utile H/L/P [mm] pour deux bidons de produit de 5 L	240/305/285
Surface utile H/L/P [mm] pour une bouteille de 1 L	240/160/125
Habillage extérieur, au choix	
Blanc lotus (LW)	◆
Inox (SST)	◆
Conformité aux normes	
DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-040, EN 61326-1	◆
Labels de conformité	
IP 21	◆
CE 0297	◆
UE 2017/745 (MDR)	◆



Miele



La protection mérite les meilleurs services.

Réparations et pièces de rechange

Notre objectif est de remédier aux interruptions le plus rapidement possible. Nous sommes à votre disposition pour coordonner les rendez-vous et vous offrons la disponibilité des pièces de rechange appropriées, même au moins 15 ans après l'arrêt de la production de votre appareil.

Un service régulier

Pour éviter les interruptions dans votre travail quotidien, une maintenance préventive régulière est indispensable. Choisissez l'une de nos formules de service et bénéficiez d'une protection à long terme pour vos appareils.

Inspections et maintenance

Le contrôle régulier des paramètres de processus augmente la sécurité de fonctionnement et garantit des résultats de nettoyage optimaux. Nous vous conseillons également volontiers sur la maintenance optimale des appareils.



Notre service s'appelle PROtect

PROtect combine des prestations de services complètes, un contrôle maximal du budget et un approvisionnement sans faille en pièces de rechange. Notre équipe de professionnels effectue les travaux d'entretien et de maintenance rapidement et de manière fiable afin de garantir une installation optimale et une disponibilité constante.



En savoir plus sur PROtect
www.miele.ch/pro/protect

Un design innovant allié à une **responsabilité environnementale.**

La durabilité a été au cœur du développement du CompactLine. Ses programmes économes en ressources minimisent la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques, tandis que ses réglages personnalisables garantissent des performances optimales. Conçu pour une longue durée de vie et une utilisation à long terme, CompactLine est très facile à réparer. Sa longue durée de vie permet de réduire les déchets et de créer une réelle valeur durable pour votre cabinet.



En savoir plus sur le thème de la durabilité chez Miele Professional
www.miele.ch/pro/durabilite



Rien ne remplace un **contact personnel.**

Nous sommes impatients de travailler avec vous afin de trouver
la meilleure solution pour les besoins de votre cabinet.

Téléphone: 0848 551 670

Lu. – Ven. 08 h 00 – 17 h 30



En savoir plus sur CompactLine et nous contacter
www.miele.ch/pro/compactline-med