

Miele



L'efficienza prima di tutto. Compatto e versatile.

Scopri CompactLine – la soluzione intelligente e ottimizzata in termini di spazio per una preparazione efficiente e intuitiva degli strumenti.






Scoprite una nuova dimensione dell'igiene.

Tutto in un apparecchio.

Cassetto integrato
con spazio di stoccaggio
ottimizzato

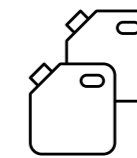

Spazio per 2 taniche da 5 litri per prodotti chimici + 1 flacone

Comando Touch  **intuitivo e veloce**



Per tutte le specializzazioni odontoiatriche



30 minuti per un trattamento efficiente degli strumenti

Realizzato per essere **sostenibile**. Programmi ottimizzati.

Progettato in modo sostenibile per durare più a lungo, con pezzi di ricambio disponibili per almeno 15 anni dopo la fine della produzione. I consumi si adattano alle esigenze dei singoli carichi.



**Miele MOVE
MedDent+**



Ulteriori informazioni su CompactLine
www.miele.ch/pro/compactline-dent

Sei ragioni, per cui CompactLine è la scelta giusta

01 Ottimizzato e compatto

CompactLine è la soluzione ideale per gli studi con un volume limitato di strumenti perché offre un trattamento efficiente con un design salvaspazio. È dotato di stoccaggio e distribuzione integrati per i prodotti chimici e offre un facile accesso alle taniche per una maggiore comodità. CompactLine offre prestazioni e valore e soddisfa i requisiti più esigenti del vostro studio con la comodità di un dispositivo entry-level.



02

Rapido e intuitivo

CompactLine dispone di un programma rapido per manipoli e turbine dentali dritte e connettori angolari che consente di ottenere risultati in 30 minuti. Il display touch a colori da 7 pollici consente di accedere facilmente ai programmi preferiti, mentre la guida animata sullo schermo aiuta nella manutenzione di base e nell'utilizzo. Un'animazione con grandi icone sullo schermo mostra anche lo stato del programma e il rilascio del carico sul display, assicurando un funzionamento fluido e senza problemi.

03

Confortevole e flessibile

CompactLine migliora i processi di lavoro grazie all'illuminazione all'interno della camera, che garantisce una chiara visibilità durante le operazioni di carico e scarico. I componenti e gli inserti appositamente sviluppati sono adatti a diverse discipline e consentono un trattamento completo di tutti gli strumenti. La lingua dei comandi può essere impostata rapidamente tramite un tasto sensore sul display e offre una personalizzazione perfetta per le esigenze del vostro studio.

04

Potente e affidabile

Sperimentate prestazioni di pulizia superiori. La pompa a velocità variabile di CompactLine adatta la pressione di lavaggio ai requisiti delle singole fasi del ciclo. I sensori integrati monitorano la funzione dei bracci irroratori e la pressione di lavaggio per garantire prestazioni affidabili. I filtri multistadio garantiscono inoltre una maggiore sicurezza. CompactLine soddisfa tutti gli standard internazionali pertinenti, compresa la norma EN ISO 15883, per darvi una serenità ancora maggiore.



05

Sostenibile e durevole

Testato per 15'000 ore di funzionamento, CompactLine garantisce durata e affidabilità. I pezzi di ricambio rimangono disponibili per almeno 15 anni dopo la fine della produzione. Il design ragionato dei programmi ottimizza l'efficienza grazie a durate del programma brevi e consente di risparmiare acqua, energia e prodotti chimici. Grazie alle istruzioni d'uso digitali e all'imballaggio ecologico, CompactLine combina tecnologia all'avanguardia e sostenibilità.

06

Intelligente e facile da usare

L'integrazione perfetta nella rete del vostro studio medico consente una configurazione rapida e semplice. CompactLine offre una tracciabilità dei processi sicura, con diritti di accesso personalizzabili per un maggiore controllo. Grazie a Miele MOVE MedDent+, è possibile accedere ai dati dell'apparecchio da qualsiasi luogo e ricevere chiamate di assistenza dirette in caso di errore. Inoltre, la facilità di accesso ai componenti semplifica la manutenzione e garantisce un funzionamento regolare.

Tutto quello che serve

CompactLine è un sistema di pulizia efficiente e facile da usare. Offre una pulizia e disinfezione rapida e igienica con funzioni avanzate per processi ottimizzati che garantiscono risultati sicuri ed efficaci.

Cassetto per i prodotti chimici

- Push2Open per una maggiore maneggevolezza
- Equipaggiato con 2 o 3 pompe di dosaggio per prodotti chimici liquidi
- Tubicino di aspirazione con sensore del vuoto per una maggiore affidabilità del processo e un facile riordino dei prodotti chimici

Camera ottimizzata

- Altezza ergonomica della porta per un comodo utilizzo
- Illuminazione della vasca di lavaggio per una visibilità completa
- Potente pompa a velocità variabile per una pulizia efficace
- Saldatura laser senza saldature per un livello di igiene superiore

Display touch a colori intuitivo

- Simboli di stato visibili
- Rilascio del carico direttamente sul pannello comandi per facilitare il flusso di lavoro
- Guide animate di auto-aiuto per le procedure di routine



Connettività e tracciabilità dei processi

- WiFi integrato nel pannello comandi, LAN opzionale
- Con Miele MOVE, i dati degli apparecchi MedDent+ possono essere visualizzati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, il che consente di ottimizzare i processi
- Accesso agli aggiornamenti della macchina e piena trasparenza dei dati di processo


Programmi efficienti

- Pulizia e disinfezione di 22 manipoli e connettori angolari e turbine di 30 minuti
- Tecnologia EcoDry e AutoOpen per un'asciugatura efficiente
- Programmi aggiuntivi e opzione di avvio ritardato

Adatto a tutte le specializzazioni odontoiatriche

Grazie a un'ampia gamma di componenti sviluppati appositamente per diversi tipi di strumenti, CompactLine è ideale per i professionisti di tutte le discipline odontoiatriche e per i team multidisciplinari. Grazie a un sistema flessibile di cestelli, ogni carico può essere ottimizzato per garantire il pieno utilizzo della macchina. Questo può farvi risparmiare tempo, costi e risorse.

Esempi di configurazioni nel nuovo cestino APWD 153 (codice materiale: 12537450)

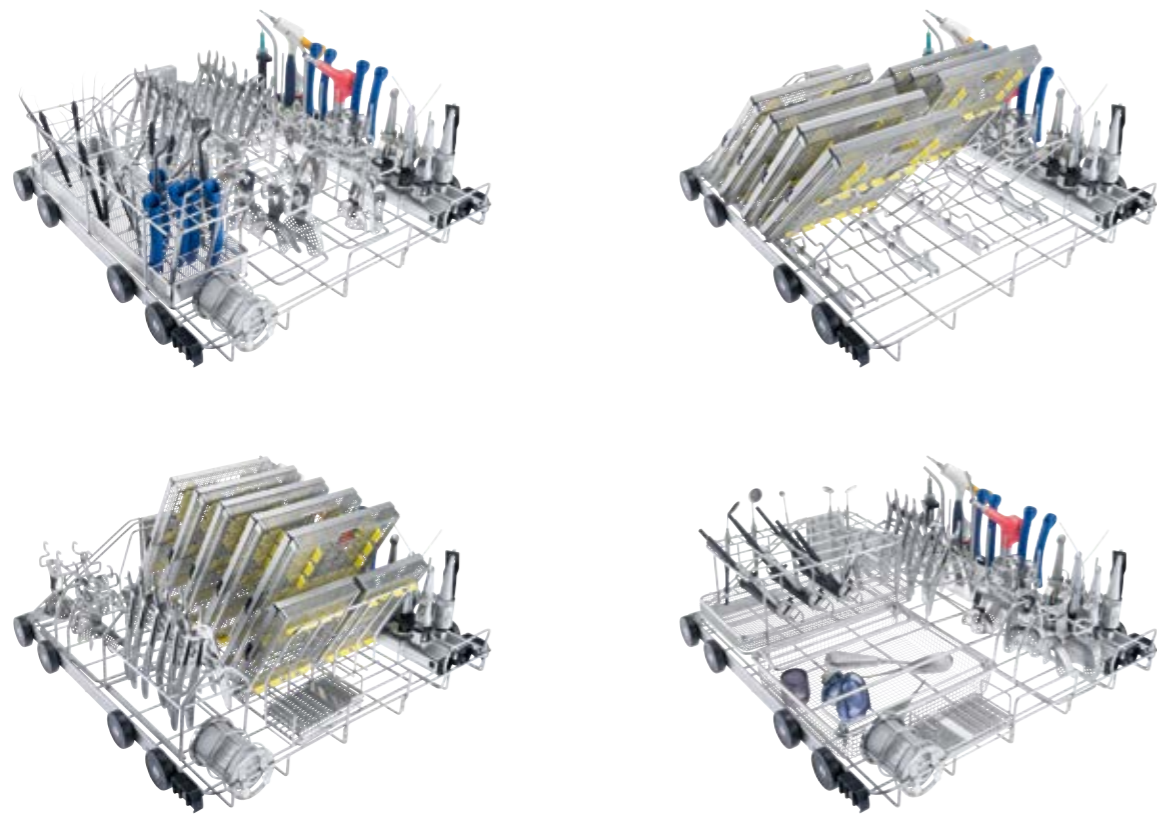

Apparecchio per lavaggio e disinfezione	PWD 8682 C [DT DST LAN]
Apparecchio da posizionamento libero con coperchio	◆
Colore	Bianco
Numero materiale	12949690
Pompa di circolazione [Qmax. l/min]	500
Comandi/Programmi	
TouchControl/numero programmi	8
Posti programma liberi	5
AutoClose: blocco dello sportello automatico	◆
LED per l'illuminazione della vasca di lavaggio	2
Segnale acustico a fine programma	◆
Modulo di comunicazione Ethernet	◆
Modulo di comunicazione WiFi	◆
Allacciamenti idrici	
1x acqua fredda 2,0–10 bar pressione dell'acqua in afflusso (200–1000 kPa) (protezione dal riflusso secondo EN 1717)	◆
1x acqua demineralizzata 2,0–10 bar pressione dell'acqua in afflusso (200–1000 kPa) (protezione dal riflusso secondo EN 1717)	◆
1x acqua calda 2,0–10 bar pressione dell'acqua in afflusso (200–1000 kPa) (protezione dal riflusso secondo EN 1717)	◆
Numero tubi di afflusso idrico 1/2" con raccordo 3/4", L = ca. 2,0 m	3
Pompa di scarico Ø 22, prevalenza: max. 100 cm	◆
Waterproof-System (WPS)	◆
Allacciamento elettrico	
3 N AC 400 V 50 Hz convertibile in AC 230 V 50 Hz, cavo di alimentazione ca. 2,0 m, 5 x 2,5 mm ² incl. spina allacciamento CEE	◆
Riscaldamento [kW]	8,5
Pompa di circolazione [kW]	0,8
Potenza massima assorbita [kW]	9,3
Amperaggio del fusibile [A]	3 x 16
Dispositivi di dosaggio	
1 pompa di dosaggio per detergente liquido (lunghezza del tubicino di aspirazione Flex: 217 mm, utilizzabile per taniche di altezza fino a 202 mm)	◆
1 pompa di dosaggio per l'agente neutralizzante (lunghezza del tubicino di aspirazione: 217 mm, utilizzabile per taniche di altezza fino a 202 mm)	◆
1 pompa di dosaggio per brillantante (lunghezza del tubicino di aspirazione: 217 mm, adatto a taniche di altezza fino a 202 mm)	◆
Addolcitore acqua	
per acqua fredda e acqua calda fino a 65 °C	◆
Condensatore del vapore	
Nebulizzatore	◆
Massa, peso	
Misure esterne H/L/P [mm]	835/600/600
Misure vasca di lavaggio [H x L x P in mm]	400/536/523
Dimensioni utili cesto inferiore H/L/P [mm]	280/490/498
Peso [kg]	81
Dimensioni del cassetto	
Area utilizzabile H/L/P [mm] per 2 taniche da 5 litri	240/305/285
Area utilizzabile H/L/P [mm] per 1 flacone da 1 litro	240/160/125
Rivestimento esterno, a piacere	
Bianco loto (LW)	◆
Acciaio inossidabile (SST)	◆
Conformità alle norme	
DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-040, EN 61326-1	◆
Marchi di controllo e contrassegni	
IP 21	◆
CE 0297	◆
EU 2017/745 (MDR)	◆

La sinergia perfetta

La chimica di processo ProCare Dent, sviluppata appositamente per i termidisinfettori Miele Professional, offre risultati di pulizia e disinfezione eccezionali in combinazione con i programmi di CompactLine, proteggendo al contempo gli strumenti e la loro durata. Scoprite l'intera gamma, dai detergenti e agenti neutralizzanti ai brillantanti e alle soluzioni per i controlli di routine e la manutenzione degli apparecchi.



Maggiori informazioni su ProCare Dent
www.miele.ch/pro/procare-dent

Scheda di confronto

Compact/Expert/SlimLine

CompactLine

PWD 8682 C



ExpertLine

PWD 8682



SlimLine

PWD 7121



Modello apparecchio	CompactLine	ExpertLine	SlimLine
Sportello in vetro			✓
Termodisinfettore	✓	✓	✓
Destinatari			
Dental	✓	✓	✓
Settore medico	✓	✓	
Dimensioni dello studio	S	M	L
Professionisti/dentisti fino a	1-3	3-8	8-12
Frequenza di utilizzo al giorno	1-3	1-4	3-4
Dimensioni della camera/livelli di lavaggio	1	2	3
Capacità per carico			
Strumenti cavi fino a	22	44	66
Set di pazienti** fino a	80	160	160
Vassoio (grande) fino a	10	18	44
Programma breve per strumenti cavi	30 min	n.a.	n.a.
Posizionamento dei prodotti chimici	Integrato nel cassetto	Esterno	Integrato nell'armadio tecnico
Asciugatura	EcoDry	Tecnologia EcoDry/asciugatura attiva (a seconda del tipo di dispositivo)	Asciugatura attiva
Connettività	LAN/WLAN	LAN/WLAN	LAN/WLAN/USB
Tracciabilità dei processi			
Stampante di rete	✓	✓	
Miele MOVE (a seconda dell'interfaccia)	✓	✓	✓
Interfaccia di processo	✓	✓	✓

** Il set paziente è composto da uno specchietto, una sonda e un paio di pinzette



Il design innovativo incontra la responsabilità ambientale.

La sostenibilità è stata al centro dello sviluppo della CompactLine. I programmi a basso consumo di risorse riducono al minimo il consumo di acqua, energia e sostanze chimiche, mentre le impostazioni personalizzabili garantiscono prestazioni ottimali. Progettato per la durata e l'utilizzo a lungo termine, CompactLine è molto facile da riparare. La lunga durata riduce gli sprechi e crea un valore nel tempo per il vostro studio.



Maggiori informazioni sulla sostenibilità di Miele Professional
www.miele.ch/pro/nachhaltigkeit



Fiducia nel marchio Miele

Miele Professional offre prestazioni e qualità di alto livello. Il 97% dei clienti acquisterebbe nuovamente da Miele e si fida della nostra eccellenza quotidiana. I principali produttori di strumenti raccomandano Miele per un trattamento sicuro e igienico che garantisce la compatibilità dei materiali e conserva il valore degli strumenti.



Miele



Niente sostituisce il **contatto umano.**

Saremo lieti di lavorare insieme per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze.

Tel.: 0848 551 670

Lun–Ven 08:00–17:30



Maggiori informazioni su CompactLine e contatti
www.miele.ch/pro/compactline-dent