

Miele






V dokonalé souhře

Nová laboratorní myčka

SlimLine

Miele Professional. Immer Besser.



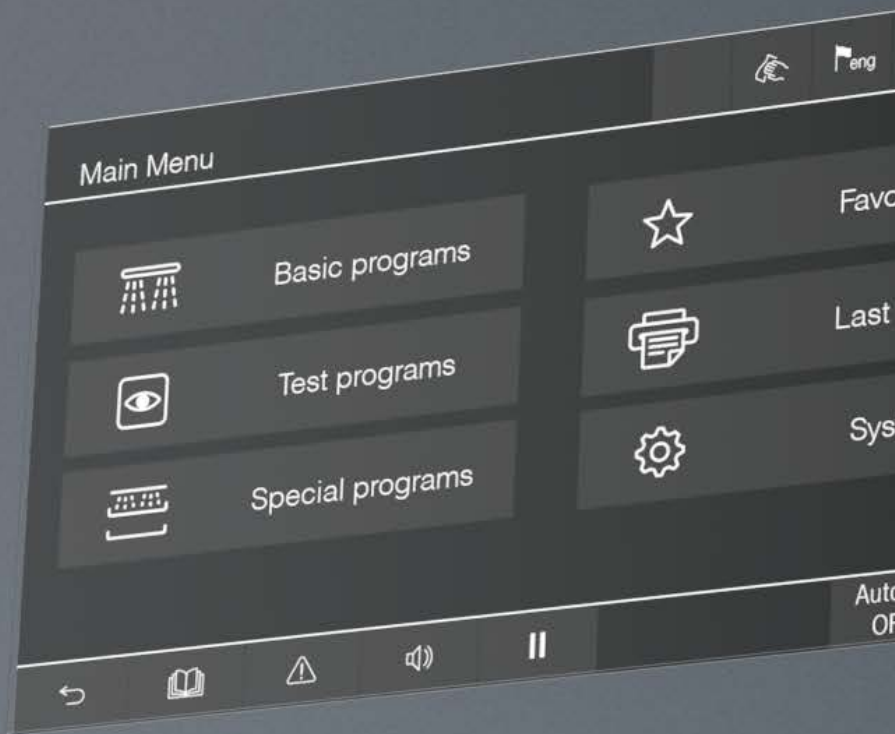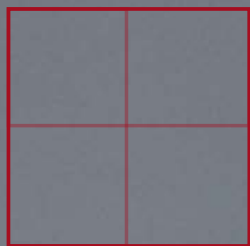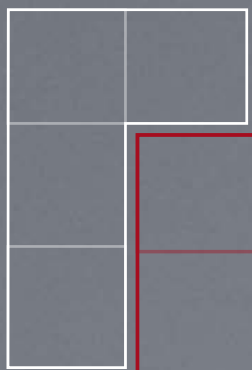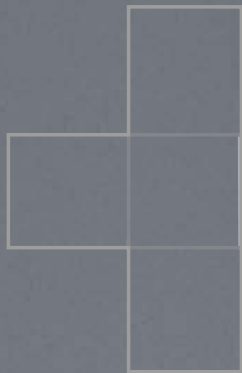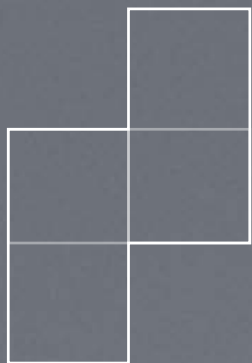


V dokonalé souhře

Nová laboratorní myčka SlimLine

Nové laboratorní myčky SlimLine řady PLW 7111 nastavují nové měřítko výkonu a uživatelského komfortu. Zcela nově vyvinutý systém mytí má zřetelně vyšší výkon ve srovnání s předchozí řadou a kromě toho může díky čerpadlu s variabilními otáčkami přizpůsobit výkon a spotřebu vody náplni.

Vysoce kvalitní barevný dotykový displej v kombinaci s inovativním, vícebarevným osvětlením komory umožňuje intuitivní plnění a snadný přehled o celém procesu.

Systém EasyLoad je nyní k dispozici i v přístrojích SlimLine; usnadňuje plnění a podporuje uživatele při správném umísťování laboratorního skla. Díky inteligentnímu využití mycího prostoru systému EasyLoad lze zvýšit kapacitu např. pro lahvičky o objemu 100 ml o více než 50 % oproti předchozí řadě.

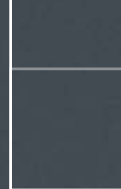

Chytrá, důkladná a kompaktní

Novou generaci laboratorních myček SlimLine jsme dokázali ještě vylepšit v oblasti manipulace s předměty a využití mycího prostoru. Osvědčený systém SmartLoad nabízí použití až tří výsuvných košů, které lze pružně připojit k mycímu okruhu ve čtyřech různých úrovních. Tak lze realizovat různé kombinace výšek uložení.

Tento systém jsme dále vylepšili, takže nyní je možné používat všechny koše ve všech úrovních. Odpadá rozlišování mezi koši na dvířkách a koši na teleskopických výsuvkách. Nyní jsou ve všech úrovních teleskopické výsuvy, což vede k větší flexibilitě při plnění.

Kompaktní rozměry přístroje při velké kapacitě mycího prostoru

- malá zástavbová plocha se šířkou pouhých 650 mm
- možné 3 úrovně s injektorovými tryskami
- i pro velké lahve o objemu až 50 litrů
- 196 pipet a 108 lahví (250 ml) v jedné šarži

Úspora zdrojů a času

Výkonný a inteligentní systém čerpání s čerpadlem s variabilními otáčkami pro:

- maximální výkon, pokud je to nutné
- úsporu vody, pokud je to možné





SlimLine
Design



SmartLoadPlus
3 racks
4 levels



**Adaptive
Speed**
Washing




Speed
Heated
Tank



Digital
Services

EASYLOAD

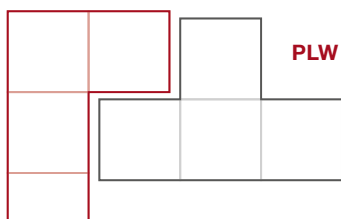


PLW 7111

Připraveno pro digitální síť

- připraveno na propojení s Miele Cloud Service (MOVE)
- přímý přístup na přístrojová a výkonová data
- vyšší disponibilita přístroje díky diagnostice na dálku

Intuitivní a bezpečná obsluha

- inteligentní řídicí jednotka se 7palcovým barevným dotykovým displejem, optimalizovanými programy a volným paměťovým místem pro 20 programů
- snadné a účinné čištění
- USB rozhraní (integrováno v čelní stěně přístroje)
- připraveno na propojení se softwarem pro dokumentování procesů

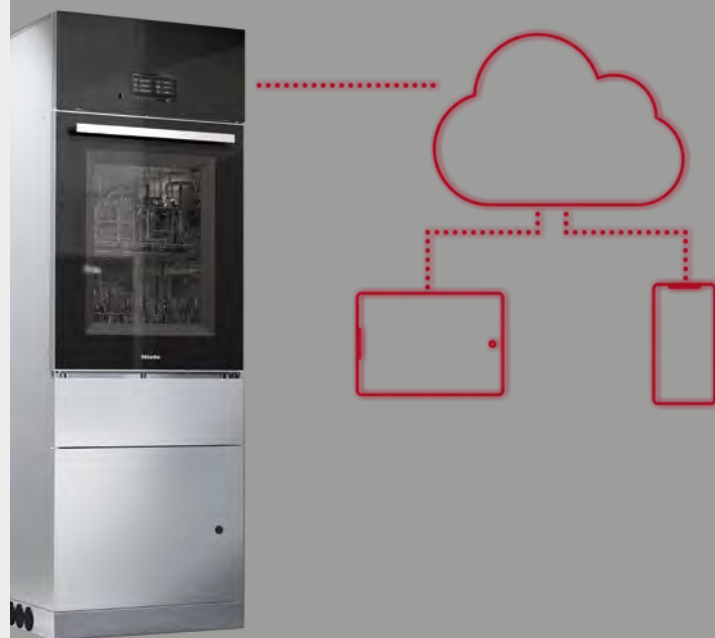


Vizuální kontrola mycího prostoru

- kontrola procesu díky celoskleněným dvířkům
- snadné rozpoznání stavu přístroje díky trojbarevnému osvětlení komory
- automatické uzamčení dvířek

Důkladné a účinné procesy čištění

- mycí komora, rotor a sítko v nádrži z kvalitní nerezové oceli 1.4404/316L (elektrolyticky leštěné)
- kontrola vodivosti pro vysokou kvalitu procesů*
- jemný filtr HEPA H14 pro sterilní sušící vzduch
- integrovaný změkčovač vody*
- vyhříváná nádrž pro zkrácené časy šarží*

*podle modelu

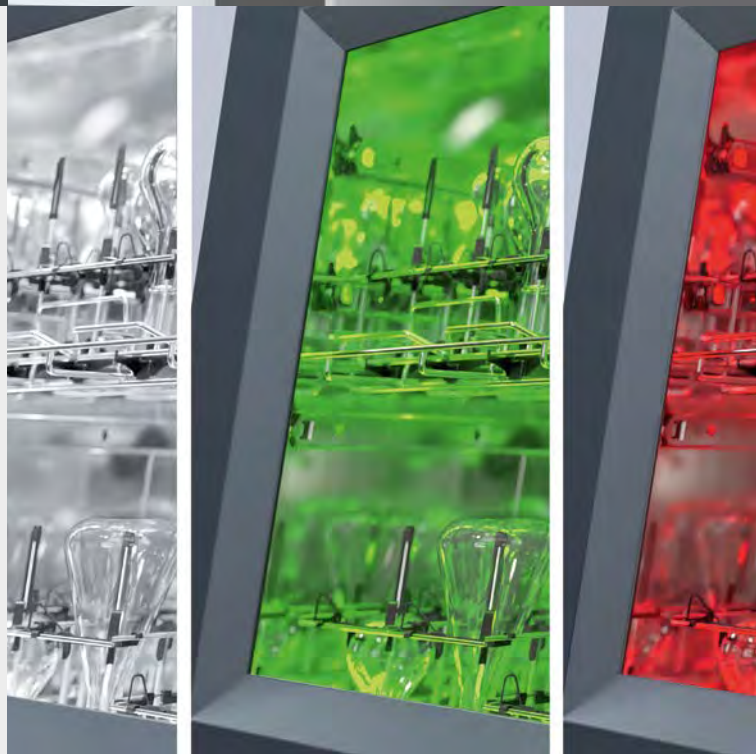

EasyLoad – rychlé naplnění a vysoce efektivní využití mycího prostoru

EASYLOAD

Nová přídržná mřížka

Dodatečnou stabilitu poskytuje nová přídržná mřížka. V případě potřeby ji lze nasadit na příslušný injektorový modul, kde spolehlivě udrží i obzvláště velké laboratorní sklo ve vzpřímené, vůči materiálu šetrné poloze.


Důkladné čištění novými injektorovými tryskami

Nové injektorové trysky zaručují důkladné vyčištění uvnitř i v případě, že dno laboratorního skla dosedá na špičku trysky. Nová podložka obepíná injektorovou lištu modulu nebo koše tak, že šetří dostupnou výšku a redukuje výkyvy mytých předmětů.

Systém EasyLoad znamená účinnost a komfort

- nový systém injektorového mytí pro všechny běžné injektorové moduly a mnoho dalších mycích košů
- optimální využití stávající výšky prostoru
- obzvláště rychlé a jednoduché umístění předmětů k mytí
- důkladné vyčištění vnitřku skleněných předmětů nejrůznějších tvarů a velikostí
- stabilita a maximální šetrnost vůči materiálu při mytí
- injektorové trysky k dostání ve 3 průměrech a 6 délkách
- speciálně přizpůsobené plastové držáky a podložky
- injektorové moduly s 8, 18 nebo 32 injektory
- přídržné mřížky pro 8, 18 nebo 32 pozic injektorů

nová přídržná mřížka

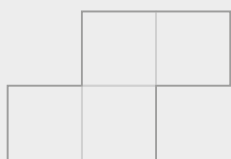

nová injektorová tryska





Rozšíření kapacity ve srovnání s předchozím modelem PLW 6111

Lahve 250 ml	84	108	+ 29 %
	PLW 6111	PLW 7111	
Lahve 100 ml	126	192	+ 52 %
	PLW 6111	PLW 7111	
Pipety	121	196	+ 62 %
	PLW 6111	PLW 7111	

Nová laboratorní myčka PLW 7111 SlimLine


Informace

Laboratorní myčka SlimLine		PLW 7111	
Vnější rozměry [šířka × výška × hloubka mm]		650, 1 941, 700	
Rozměry mycího prostoru [šířka × výška × hloubka mm]		570, 717, 590	
Užitný objem [l]		241	
Koncepce plnění		regálový systém s max. 3 koši na 4 různých pozicích	
Programy		20 volných programových míst v paměti*	
Volba programu		7" barevný dotykový displej	
Vybavení		Vybavení (dle modelu) Elektrický ohřev Elektrický/parní ohřev Přehřívací nádrž Vypouštěcí ventil Vypouštěcí čerpadlo Sušení vč. filtru HEPA H14 Kondenzátor par Změkčovač vody Snímač vodivosti Tiskárna Vybavení pro znečištění olejem Chlazení odpadní vody Snímač úniku Čerpadlo DEMI vody	
Jednodveřový přístroj			•
Celoskleněná vyklápěcí dvířka			•
Trojbarevné osvětlení komory s indikací stavu			•
Materiál komory			1.4404/316L
Dávkovací čerpadla [počet]			2
Čerpadlo s variabilními otáčkami			•
Připojky vody			TV, SV, DEMI
Elektrické připojení 3N AC 400 V, 50 Hz			•
Celkový příkon [kW]			10
USB port			•
Kapacita procesních chemikálií			3× 5 litrů
Rozhraní Ethernet			•
Kapacita šarží		Volitelné moduly přístroje Bezpotenciálové kontakty Místo pro odběr vzorků Další dávkovací čerpadla	
Laboratorní lahve 100 ml			192
Laboratorní lahve 250 ml			108
Laboratorní lahve 1 000 ml			32
Pipety			196


Přehled typů

		Ohřev		Vybavení											Informace pro objednávku		
Typ	Připojení	Elektro	Elektro/pára	Sušení	Kondenzátor par	Vypouštěcí čerpadlo	Vypouštěcí ventil	Změkčovač	Přehřívací nádrž	Tiskárna	Snímač vodivosti	Vybav. pro olej. znečiš.	Chlazení odpadní vody	Snímač úniku	Čerpadlo DEMI vody	Č. mat.	Č. výr.
PLW 7111 [S-1012]	3N AC 400 V/50 Hz	•	--	•	•	--	--	•	--	--	--	--	--	--	--	11870950	62711101DAC
PLW 7111 [S-1013]	3N AC 400 V/50 Hz	•	--	•	•	--	--	•	--	--	•	--	--	--	--	11870960	62711102DAC
PLW 7111 [S-1017]	3N AC 400 V/50 Hz	•	--	•	•	•	--	•	•	--	--	--	--	--	--	11870970	62711103DAC
PLW 7111 [S-1021]	3N AC 400 V/50 Hz	•	--	•	•	•	--	•	•	--	•	--	--	--	--	11870980	62711104DAC
PLW 7111 [S-1026]	3N AC 400 V/50 Hz	•	--	•	•	•	--	•	•	--	•	•	--	--	--	11870990	62711105DAC

Koše

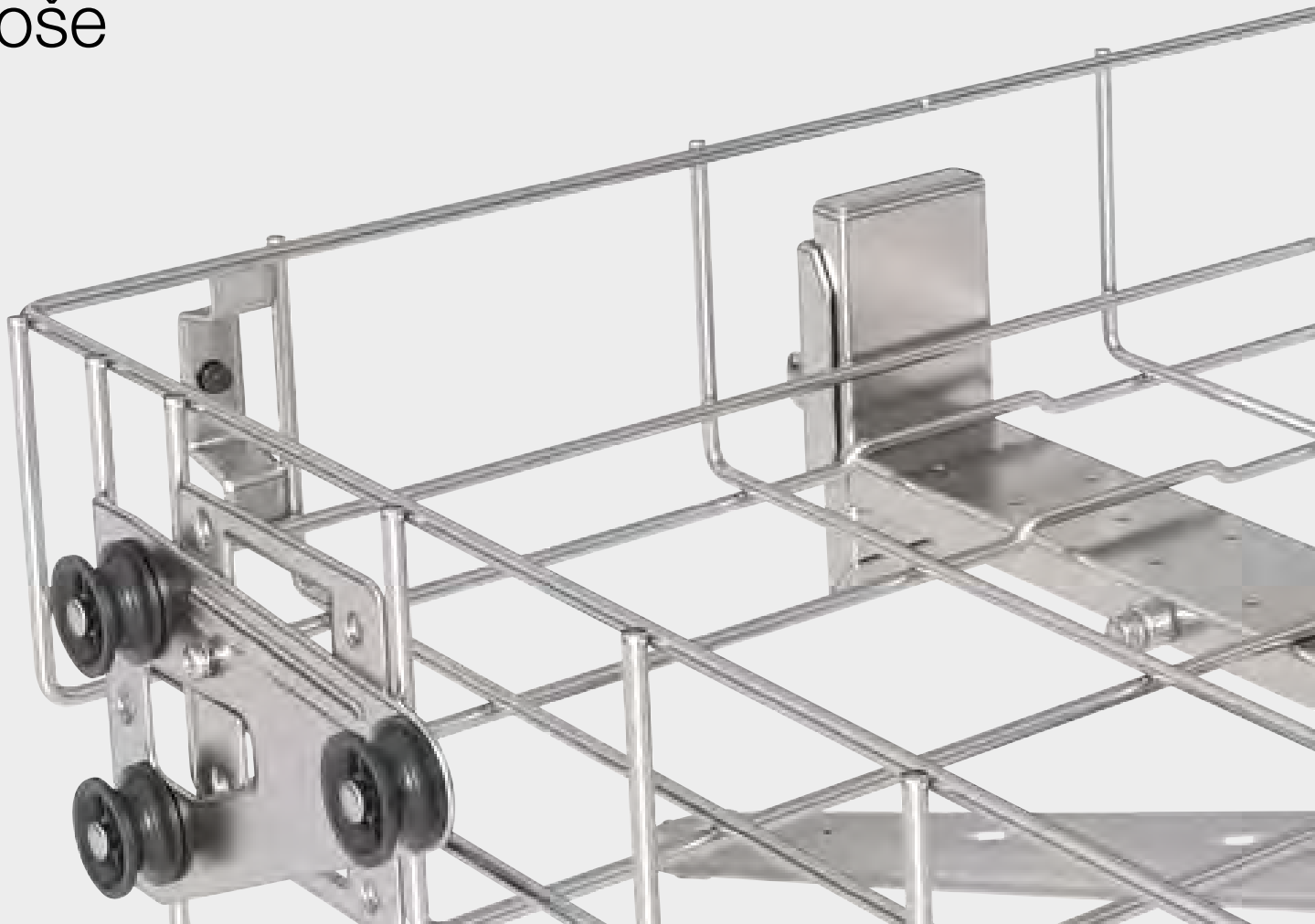


Koše | pro PLW 7111

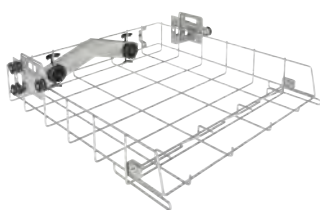


APLW 106 koš

- koš se dvěma přípojkami modulů
 - pro uložení až dvou injektorových modulů nebo nástavců
 - lze používat v úrovni 1 až 4
 - automatické uzavření přípojek, při nepoužívání
 - rozměry pro osazení: šířka 507 mm, hloubka s nasazenou fixační příčkou 439 mm, bez fixační příčky 525 mm, výška závisí na použité pozici a dalších nasazených koších
 - v 151, š 560, h 621 mm
- č. m. 11854610

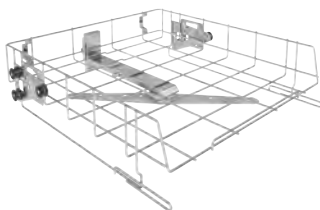

APLW 107 koš


- zepředu otevřený
 - pro optimální uložení nástavců
 - lze nasadit do úrovně 2 až 4
 - s vestavěným ostřikovacím ramenem
 - rozměry pro osazení: šířka 507 mm, hloubka 545 mm, výškově nastavitelné ± 30 mm, výška závisí na použité pozici a dalších nasazených koších
 - v 151, š 560, h 621 mm
- č. m. 11854290

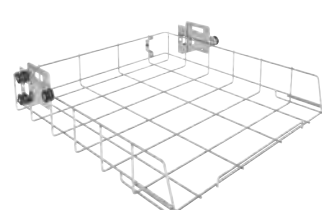

APLW 152 koš

- pro uložení různých nástavců
 - lze nasadit do úrovně 1
 - rozměry pro osazení: šířka 507 mm, hloubka 545 mm, výška závisí na použité pozici a dalších nasazených koších
 - v 151, š 560, h 596 mm
- č. m. 11854310

Rozměry pro osazení a příklady konfigurací

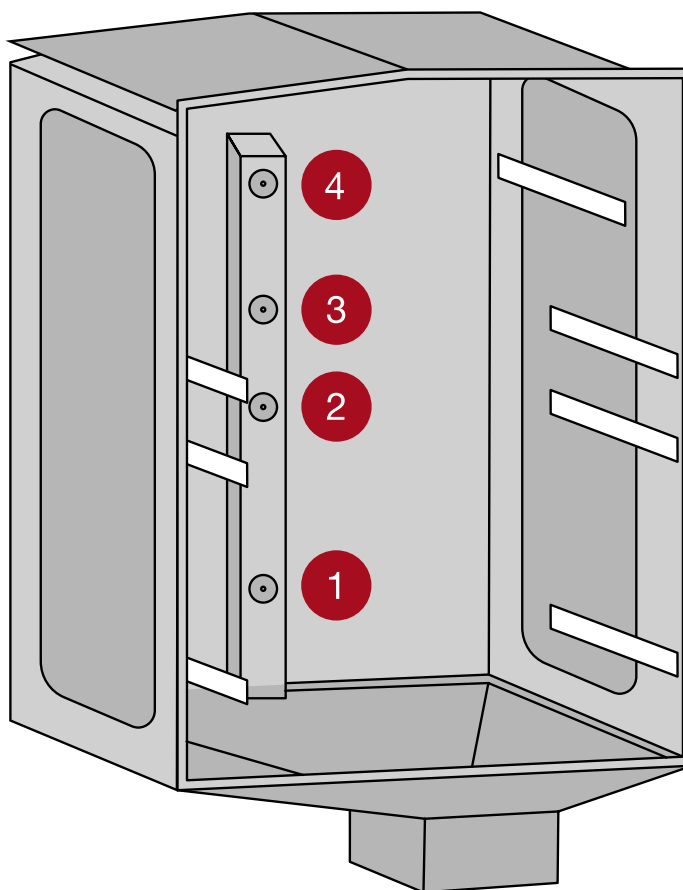

	Příprava s ostříkovacím ramenem (3 úrovně)		Příprava s ostříkovacím ramenem (2 úrovně)		Smíšená příprava s ostříkovacím ramenem a injektorovými tryskami (3 úrovně)	
	Koš	Výška plnění [mm]	Koš	Výška plnění [mm]	Koš	Výška plnění [mm]
Úroveň 4	APLW 107	158 ± 30	-	278 ± 30	APLW 107	158 ± 30
Úroveň 3	-	178 ± 30	APLW 107		-	244 ± 30
Úroveň 2	APLW 107		-	354 ± 30	APLW 106	
Úroveň 1	APLW 152	234	APLW 152		APLW 106	210

	Příprava s injektorovými tryskami ¹ (3 úrovně)		Příprava s injektorovými tryskami ⁴ (2 úrovně)	
	Koš	Výška plnění [mm]	Koš	Výška plnění [mm]
Úroveň 4	APLW 106	224	-	344
Úroveň 3	-	220	APLW 106	
Úroveň 2	APLW 106		-	330

Moduly



Injektorové moduly pro laboratorní sklo | pro použití s košem A 106



A 300/3 modul 2 × 4

- pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních lahví, odměrných baněk a odměrných válců (250–1 000 ml)
 - 4× injektorová tryska A 840, 4× injektorová tryska A 841
 - v 228, š 208, h 479 mm
- č. m. 11116900



A 301/5 modul 3 × 6

- pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních lahví, odměrných baněk a odměrných válců (50–250 ml)
 - 9× injektorová tryska A 842, 9× injektorová tryska A 843
 - v 203, š 229, h 493 mm
- č. m. 11116950




A 302/3 modul 4 × 8

- pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních lahví, odměrných baněk a odměrných válců (25–100 ml)
 - 16× injektorová tryska A 844, 16× injektorová tryska A 845
 - v 143, š 240, h 477 mm
- č. m. 11116960




A 860 přídržná mřížka 2 × 4

- pro větší šetrnost a lepší vystředění mytých předmětů
 - lze používat s modulem A 300/3 a A 300/2
- č. m. 11056800

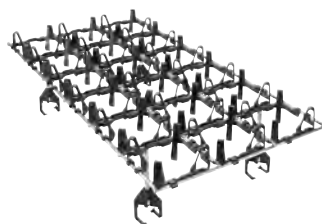

A 861 přídržná mřížka 3 × 6

- pro větší šetrnost a lepší vystředění mytých předmětů
 - lze používat s modulem A 301/5 a A 301/4
- č. m. 11056810

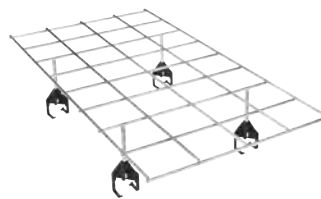


A 862 přídržná mřížka 4 × 8

- pro větší šetrnost a lepší vystředění mytých předmětů
 - lze používat s modulem A 302/3 a A 302/2
- č. m. 11056820




A 300/2 modul 2 × 4 (neosazený)

- pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních lahví, odměrných baněk a odměrných válců
 - až pro 8 injektorových trysek (zvláště vhodné pro Ø 6 mm, např. A 840 nebo A 841, jiné průměry možné dle případu použití)
 - v 73, š 133, h 475 mm
- č. m. 11056770

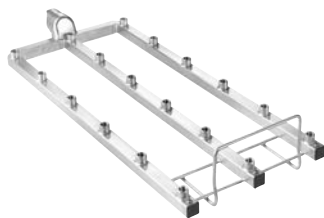

A 301/4 modul 3 × 6 (neosazený)

- pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních lahví, odměrných baněk a odměrných válců
 - až pro 18 injektorových trysek (zvláště vhodné pro Ø 4 mm, např. A 842 nebo A 843, jiné průměry možné dle případu použití)
 - v 73, š 173, h 475 mm
- č. m. 11056780

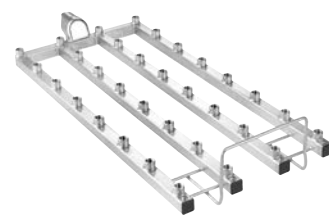

A 302/2 modul 4 × 8 (neosazený)


- pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních lahví, odměrných baněk a odměrných válců
 - až pro 32 injektorových trysek (zvláště vhodné pro Ø 2,5 mm, např. A 844 nebo A 845, jiné průměry možné dle případu použití)
 - v 73, š 195, h 475 mm
- č. m. 11056790

Injektorové moduly pro pipety, vialky, odměrné válce, viskozimetry a pro velké laboratorní sklo | pro použití s košem APLW 106




A 303 modul/pipety

- pro uložení např. 98 odměrných a nedělených pipet
 - výška přídržného rámu 150 mm
 - v 185, š 225, h 471 mm
 - výška osazení bez horního koše: 450 mm (se spodním košem A 150)
 - nelze nasadit do PG 8504
 - 1 ks lze nasadit do spodního koše A 150
- č. m. 9862560

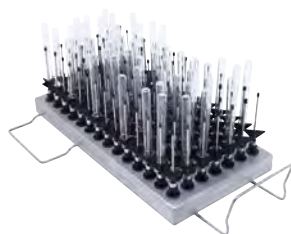


A 304 modul/vialky

- pro uložení 98 kusů úzkohrdlého skla, např. centrifugačních zkumavek, vialek, zkumavek nebo mikronádobek automatických dávkovačů
 - v 130, š 222, h 471 mm
 - vždy 1 ks lze použít v horním koši A 100 nebo spodním koši A 150
- č. m. 9862570

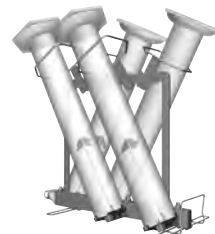


A 306/1 modul/odměrné válce

- pro uložení laboratorního skla, zejména velkoobjemových odměrných válců
 - kapacita: čtyři odměrné válce o objemu 1–2 l, vysoký tvar
 - vhodný pro 2 odměrné válce o objemu 1–2 l, nízký tvar, a dva odměrné válce, vysoký tvar
 - max. výška plnění 500 mm
 - snazší plnění díky otočným podložkám
 - dosedací a opěrné plochy potažené Rilsanem
 - 2 ks lze nasadit do spodního koše A 150
 - v 418, š 235, h 471 mm
- č. m. 11035210

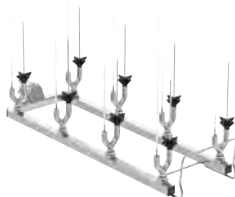

A 312 modul/viskozimetry

- pro přípravu až 8 viskozimetrů
 - s 8 speciálními tryskami A 867
 - rozteč trysek 118 mm do šířky, 118 mm do hloubky
 - v 395, š 164, h 475 mm
- č. m. 11054470

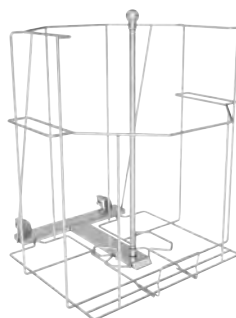


APLW 215 modul

- pro optimální uložení laboratorního skla s velkým objemem a lahví až do 50 litrů
 - lze používat v úrovni 1
 - v 532, š 505, h 526 mm
- č. m. 11853940




A 313 modul

- pro přípravu laboratorního skla velkého objemu
 - pomocí injektorů A 846, A 847 a A 848 lze přizpůsobit různým druhům laboratorního skla:
 - laboratorní lahve od 2 l do 10 l
 - kulaté baňky od 2 l do 6 l
 - Erlenmeyerovy baňky od 2 l do 5 l
 - odměrné baňky od 2 l do 5 l
 - podle průměru pro 2 nebo 3 myté předměty
 - v 361, š 255, h 614 mm
- č. m. 11055970

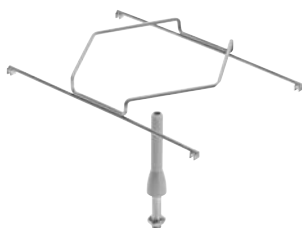

A 847 injektor

- pro Erlenmeyerovy baňky do 5 l
 - pro použití v modulu A 313 nebo A 612
 - délka trysky 127 mm, Ø 10 mm, průměr podložky šestiúhelníku 142 mm
- č. m. 11025600

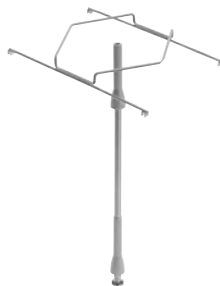

A 848 injektor


- pro odměrné baňky do 5 l
 - pro použití v modulu A 313 nebo A 612
 - délka trysky 350 mm, Ø 10 mm, průměr podložky šestiúhelníku 142 mm
- č. m. 11025610



A 846 injektor

- pro laboratorní lahve do 10 l a kulaté baňky do 6 l
 - pro použití v modulu A 313 nebo A 612
 - délka trysky 127 mm, délka celkem s držákem 158 mm, Ø 10 mm
- č. m. 11025590

Trysky

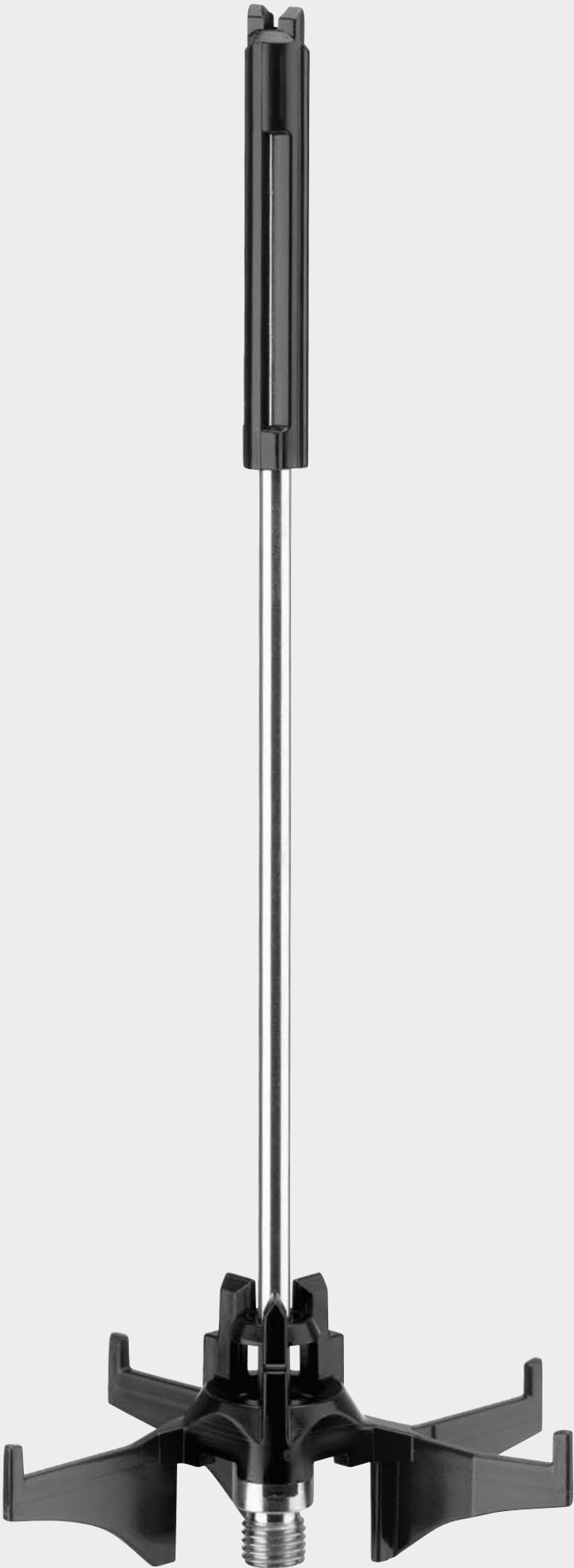

Injektorové trysky



A 840

- pro mytí předmětů s šířkou otvoru 12–85 mm
 - průměr uzávěru nahoře: 11 mm
- Injektorová tryska Ø 6 × 130 mm (1 ks)
č. m. 11056100

A 840/1

- Injektorová tryska Ø 6 × 130 mm (5 ks)
č. m. 11112600

A 840/2

- Injektorová tryska Ø 6 × 130 mm (10 ks)
č. m. 11113160

A 840/3

- Injektorová tryska Ø 6 × 130 mm (20 ks)
č. m. 11113170



A 843

- pro mytí předmětů s šířkou otvoru 10–70 mm
 - průměr uzávěru nahoře: 9 mm
- Injektorová tryska Ø 4 × 185 mm (1 ks)
č. m. 11056440

A 843/1

- Injektorová tryska Ø 4 × 185 mm (5 ks)
č. m. 11113720

A 843/2

- Injektorová tryska Ø 4 × 185 mm (10 ks)
č. m. 11113730

A 843/3

- Injektorová tryska Ø 4 × 185 mm (20 ks)
č. m. 11113760



A 841

- pro mytí předmětů s šířkou otvoru 12–85 mm
 - průměr uzávěru nahoře: 11 mm
- Injektorová tryska Ø 6 × 210 mm (1 ks)
č. m. 11056190

A 841/1

- Injektorová tryska Ø 6 × 210 mm (5 ks)
č. m. 11113130

A 841/2

- Injektorová tryska Ø 6 × 210 mm (10 ks)
č. m. 11113140

A 841/3

- Injektorová tryska Ø 6 × 210 mm (20 ks)
č. m. 11113150



A 844

- pro mytí předmětů s šířkou otvoru 6–55 mm
 - průměr uzávěru nahoře: 5 mm
- Injektorová tryska Ø 2,5 × 80 mm (1 ks)
č. m. 11056600

A 844/1

- Injektorová tryska Ø 2,5 × 80 mm (5 ks)
č. m. 11115470

A 844/2

- Injektorová tryska Ø 2,5 × 80 mm (10 ks)
č. m. 11115500

A 844/3

- Injektorová tryska Ø 2,5 × 80 mm (20 ks)
č. m. 11115520



A 842

- pro mytí předmětů s šířkou otvoru 10–70 mm
 - průměr uzávěru nahoře: 9 mm
- Injektorová tryska Ø 4 × 90 mm (1 ks)
č. m. 11056330

A 842/1

- Injektorová tryska Ø 4 × 90 mm (5 ks)
č. m. 11113590

A 842/2

- Injektorová tryska Ø 4 × 90 mm (10 ks)
č. m. 11113630

A 842/3

- Injektorová tryska Ø 4 × 90 mm (20 ks)
č. m. 11113670



A 845

- pro mytí předmětů s šířkou otvoru 6–55 mm
 - průměr uzávěru nahoře: 5 mm
- Injektorová tryska Ø 2,5 × 125 mm (1 ks)
č. m. 11056670

A 845/1

- Injektorová tryska Ø 2,5 × 125 mm (5 ks)
č. m. 11116120


A 845/2

- Injektorová tryska Ø 2,5 × 125 mm (10 ks)
č. m. 11116130

A 845/3

- Injektorová tryska Ø 2,5 × 125 mm (20 ks)
č. m. 11116140

Nástavce a další příslušenství

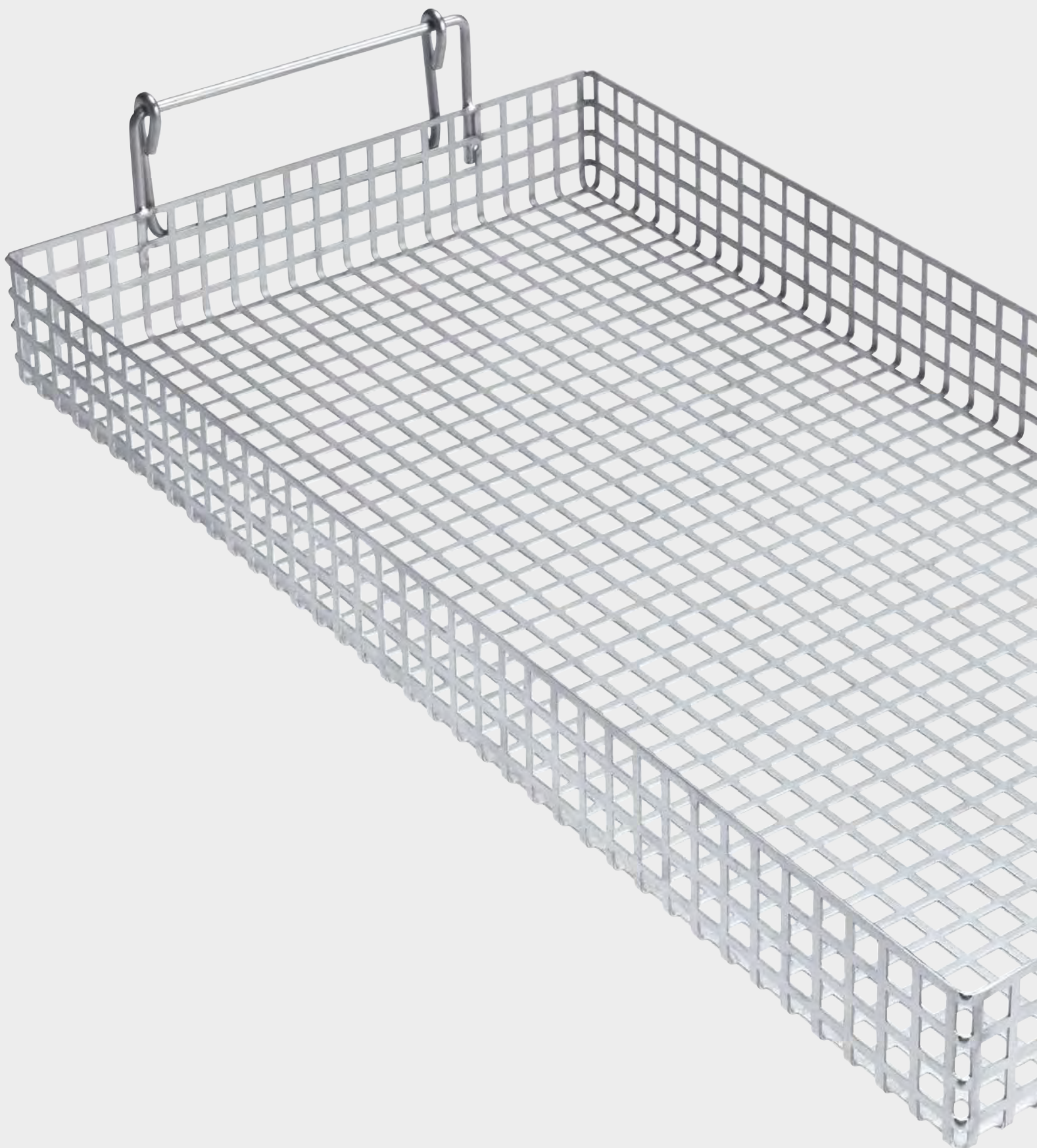

Nástavce pro zkumavky, trychtýře, kádinky, širokohrdlé sklo, odměrné válce | pro koše APLW 107 a APLW 152

E 103/1 nástavec 1/4

- pro cca 200 zkumavek do 12 x 75 mm
 - rozdělen do 6 přihrádek, včetně víka A 13
 - velikost ok 8 x 8 mm
 - v 102 (122), š 200, h 320 mm
- č. m. 6907630

E 104/1 nástavec 1/4

- jako E 103, ale pro zkumavky do 12 x 105 mm, včetně víka A 13
 - velikost ok 8 x 8 mm
 - v 132 (152), š 200, h 320 mm
- č. m. 6907640

E 105/1 nástavec 1/4

- jako E 103, ale pro zkumavky do 12 x 165 mm, včetně víka A 13
 - velikost ok 9 x 9 mm
 - v 192 (212), š 200, h 320 mm
- č. m. 6907650

E 139/1 nástavec 1/4

- jako E 103, ale pro zkumavky do 12 x 200 mm, včetně víka A 13
 - velikost ok 9 x 9 mm
 - v 223 (243), š 200, h 320 mm
- č. m. 6907660

E 106 nástavec 1/2

- pro uložení širokohrdlého skla, odměrných válců atd.
 - 10 pružných háčků, v 175 mm
 - 16 pružných háčků, v 105 mm, rozteč cca 60 mm
 - v 186, š 220, h 445 mm
- č. m. 3808310

APLW 038 nástavec

- nástavec s pružnými háčky na laboratorní sklo
 - 14 pružných háčků 175 mm
 - 14 pružných háčků 105 mm
 - v 185, š 195, h 450 mm
- č. m. 11104980

APLW 040 nástavec

- pro zkumavky
 - lze použít s víkem APLW 043
 - v 100, š 220, h 220 mm
- č. m. 11105000

E 106/1 nástavec 1/2

- s 26 malými pružnými háčky 105 mm, rozteč cca 60 mm
 - v 116, š 220, h 445 mm
- č. m. 3808320

E 106/2 nástavec 1/2

- se 13 velkými pružnými háčky 175 mm, rozteč cca 85 mm
 - v 186, š 220, h 445 mm
- č. m. 3808330

E 109 nástavec 1/2

- pro 21 kádinek do 250 ml
 - 21 x 3 příchytěk
 - v 155, š 230, h 460 mm
- č. m. 3808360

E 110 nástavec 1/2

- pro 10 kádinek 250 až 600 ml
 - 10 x 3 příchytěk
 - v 175, š 230, h 460 mm
- č. m. 3808390

E 111 nástavec 1/2

- pro 8 kádinek 600 až 1 000 ml
 - 8 x 3 příchytěk
 - v 205, š 230, h 460 mm
- č. m. 3808420

E 144 nástavec 1/2

- pro 18 kádinek do 250 ml
 - 18 x 3 příchytěk
 - v 131, š 200, h 445 mm
- č. m. 3808710

APLW 041 nástavec

- pro zkumavky
 - lze použít s víkem APLW 043
 - v 100, š 220, h 220 mm
- č. m. 11105010

APLW 042 nástavec

- pro zkumavky
 - pro použití s víkem APLW 043
 - v 202, š 220, h 220 mm
- č. m. 11105020

E 149 nástavec 1/4

- pro 80 zkumavek do 16 x 105 mm, včetně víka A 13
- 80 přihrádek 18 x 18 mm
- velikost ok dna 8 x 8 mm

Víko zakoupíte u servisní služby:

č. m. 05618390

- v 132 (152), š 200, h 320 mm
- č. m. 3808800

AK 12/1 nástavec 1/2

- pro uložení různých pomůcek, vhodný např. pro kádinky nebo trychtýře
 - flexibilní provedení úchytů
 - v 80 (120), š 229, h 445 mm
- č. m. 11131690

A 13 víko

- pro nástavce E 103, E 104, E 105 a E 139 jako náhradní výbava
 - z nerezové oceli
 - drátěné pletivo 1 mm, velikost ok 8 mm
 - obvodový rámeček 4 mm
- č. m. 3810200

A 14/1 víko

- s vyraženými otvory 8 x 8 mm
 - pokrývá polovinu nástavce AK 12/1
 - v 19, š 207, h 224 mm
- č. m. 11131560

APLW 043 víko

- kryt pro APLW 040, APLW 041 a APLW 042
 - v 15, š 205, h 205 mm
- č. m. 11105030

APLW 044 nástavec

- pro zkumavky
 - k rozdělení základní plochy
 - u APLW 040, APLW 041 a APLW 042
 - v 75, š 205, h 200 mm
- č. m. 11105040

Nástavce pro Petriho misky, podložní a hodinová sklíčka a mikrotitrační destičky | pro koše APLW 107 a APLW 152

E 118 nástavec 1/1

- pro 38 polovin Petriho misek o průměru 100 mm
- 38 držáků, výška 70 mm
- rozteč cca 26 mm
- v 120, š 460, h 445 mm
- č. m. 3830270

E 136 nástavec 1/1

- pro 56 polovin Petriho misek o průměru 100 mm
- 56 držáků, výška 70 mm
- rozteč cca 26 mm
- v 145, š 485, h 445 mm
- č. m. 3830280

E 137 nástavec 1/1 pro E 136

- pro 56 polovin Petriho misek o průměru 100 mm
- 56 držáků, výška 70 mm
- rozteč cca 26 mm
- v 95, š 485, h 445 mm
- č. m. 3830290

E 402 nástavec 1/2

- pro 44 hodinových sklíček o průměru 80–125 mm
- 23 příček, rozteč 15 mm
- v 53, š 200, h 445 mm
- č. m. 3830420

E 403 nástavec 1/2

- pro 105 hodinových sklíček o průměru 50–60 mm
- 36 příček, rozteč 9 mm
- v 35, š 200, h 445 mm
- č. m. 3830430

E 134 nástavec 1/2

- pro 210 podložních sklíček
- 210 příhrádek 26 x 11 mm, tloušťka drátu 3 mm
- v 73, š 200, h 445 mm
- č. m. 3808600

E 494 nástavec 1/2

- pro volné uložení 5 mikrotitračních destiček
- v 35, š 205, h 440 mm
- č. m. 6570920

APLW 039 nástavec

- vhodný pro 26 Petriho misek
- rozmezí mezi držáky 24 mm
- v 83, š 237, h 430 mm
- č. m. 11104990

Další příslušenství | pro koše APLW 107 a APLW 152

A 2 krycí síto 1/2

- kovový rám potažený Rilsanem a plastovým sítem
- pro nástavce 1/2
- 216 x 456 mm
- č. m. 3830460

A 3 krycí síto 1/4

- kovový rám potažený Rilsanem a plastovým sítem
- pro nástavce 1/4
- 206 x 206 mm
- č. m. 3830470

A 11/2 nástavec 1/1 podložní rám

- s vyraženými otvory 8 x 8 mm
- pro horní nebo spodní koš
- pokrývá celou plochu plnění koše
- nepoužívá se v PG 8536
- v 1, š 476, h 443 mm
- č. m. 11239130

A 12/2 nástavec 1/2 podložní rám

- s vyraženými otvory 8 x 8 mm
- pro horní nebo spodní koš
- pokrývá polovinu plochy plnění koše
- v 10, š 237, h 449 mm
- nepoužívá se v PG 8536
- č. m. 11238030

A 838 sada klíčů

- slouží pro nastavení výšky košů a montáž příp. demontáž injektorových trysek
- klíče Torx a ploché klíče vhodné pro všechny běžné horní koše, injektorové trysky a zavážecí vozíky
- č. m. 11054290

E 336 mycí pouzdro

- plastové, šroubovací
- pro uložení pipet (max. délka 445 mm) v injektorových vozících
- Ø 11 mm
- délka 121 mm
- č. m. 3809390

SD-B injektorová tryska pro butyrometry

- pro injektorový vozík E 331
- délka 240 mm včetně závitů, Ø 4 x 140 mm plus navařená plochá tryska, Ø 1,5 x 100 mm
- č. m. 3583540

E 362 zaslepovací šroub

- závit M 8 x 1, pro uzavření šroubení injektorových vozíků
- č. m. 3809630

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 139

Servis tel.: 543 553 741-5
Servisní služba Miele:
800 MIELE1 (800 643 531)

Immer Besser

Od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik řídí jasnou filozofií: Immer Besser – Vždy lepší. Tento výstižný slogan je základem pro příslovečnou kvalitu, trvalou udržitelnost a inovativnost značky „Made in Germany“. Příslib, který dává profesionálním uživatelům jistotu, že se rozhodli pro správný výrobek.

Vynikající

Nekompromisní spolehlivost výrobků a služeb je důvodem, proč uživatelé volí pravidelně Miele jako nejlepší a nejdůvěryhodnější značku. Renomovaná vyznamenání, jako jsou ceny MX Award, iF a reddot Design Awards i Německá cena za trvale udržitelný rozvoj, dokládají vynikající pozici Miele také s ohledem na design, kvalitu a šetrné nakládání se zdroji.

Kompetentní

Už po desetiletí Miele Professional vyvíjí a vyrábí s mimořádnou důkladností kvalitní prádelenské přístroje, myčky a mycí a dezinfekční automaty. Pečlivě sladěné příslušenství, komplexní poradenství a pohotový servis umožňují za pomoci přístrojů Miele dosáhnout vždy optimálního výkonu a hospodárnosti.

Miele Professional na internetu

- podrobné informace týkající se technických údajů, vybavení a příslušenství
- ke stažení prospekty ke všem skupinám výrobků a oblastem použití
- www.miele.cz