

ProCare Sure I-PM: helppo silmämääräinen testi lisäturvaksi



Auttaa valvomaan


prosessiturvallisuutta:

ProCare Sure I-PM -prosessi-indikaattorit antavat lisätietoa pesu- ja desinfiointikoneen prosesseista. Tämä testi vakuuttaa ennen kaikkea nopeudellaan ja tehokkuudellaan.

Kaikki samalta toimittajalta

Kehitetty päivittäiseen käyttöön: Ammattimaiseen instrumenttien puhdistukseen tarkoitettu System4Dent täyttää tiukat vaatimukset, joita instrumenttien kierrolle asetetaan. Uudet prosessien lisävalvontaan tarkoitetut prosessi-indikaattorit täydentävät tätä hammaslääkäri-asetelmää järjestelmämme.

- Pesu, desinfiointi ja sterilointi: Innovatiiviset pesu- ja desinfiointikoneet valinnaisine varusteineen. Tehokkaat pienet höyryautoklaavit kaikenlaisten instrumenttien nopeaan ja turvalliseen sterilointiin.
- Prosessikemikaalit ja prosessi-indikaattorit: Rääätälöidyt prosessikemikaalit kaikkien instrumenttien perusteelliseen ja hellävaraiseen puhdistukseen ja indikaattorit prosessien lisävalvontaan.
- Prosessidokumentointi: Älykkäät dokumentointiohjelmit huolehtivat aukottomasta ja todennettavissa olevasta prosessidokumentoinnista.
- Asiakaspalvelu: Myös neuvonta, rahoitus, huolto ja validointi edustavat parasta Miele-laatua.

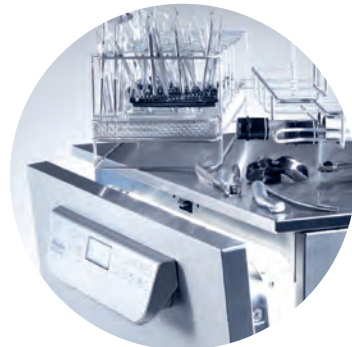




Edut lyhyesti:


- Pesu- ja desinfiointikoneen prosessien lisävalvonta parantaa turvallisuutta.
- Helppo asettaa pesutilaan tukevan muovipidikkeen avulla.
- Helppo ennen/jälkeen-vertailu väripalkkien ja asetettujen viitearvojen avulla.
- Indikaattoritarrat nopeuttavat dokumentointia.
- Testattua Miele-laatua.

Tuote	Kuvaus	Mat.nro
ProCare Sure I-PM, indikaattoriarkki	Sisältää 6 indikaattoriarkkia x 16 kaksois-indikaattoria ja käyttöohjeen	11 577 000
ProCare Sure H-01, pidike	Sisältää 1 tukevan muovisen Miele-logolla varustetun pidikkeen	11 576 830
ProCare Sure I-PM, aloituspakkaus	Sisältää 2 indikaattoriarkkia x 16 kaksoisindikaattoria, 2 muovista pidikettä ja käyttöohjeen	11 577 150


Pikakäyttöohje

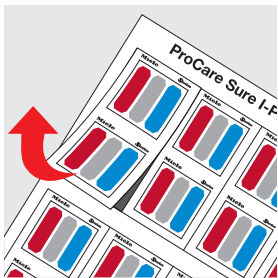


1. Irrota kaksoisindikaattori arkista. Älä koske väripalkkeihin hikisin tai desinfiointiaineella käsitellyin sormin. Tartu indikaattoreihin Miele & Steelco -tekstillä varustetusta reunasta.

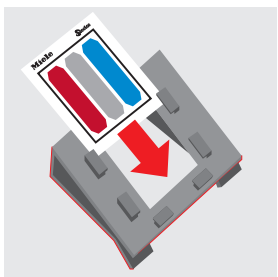


2. Pujota prosessi-indikaattori pidikkeeseen niin päin, että tekstireuna jää ylös ja väripalkit osoittavat eteen.

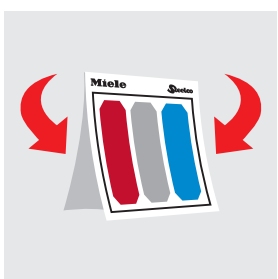

3. Taita indikaattori katkoviivan kohdalta, jos käytät sitä kaksoisindikaattorina. Painatuksen tulee osoittaa ulospäin.
Jos käytät vain yhtä indikaattoria, leikkaa kaksoisindikaattori poikki katkoviivaa pitkin.

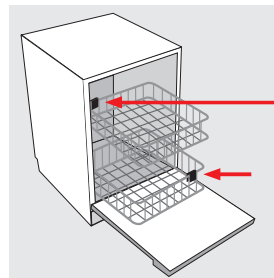

4. Jos käytössä on kaksi pesutasoa, aseta yksi prosessi-indikaattori kumpankin tasoon.
Jos käytössä on vain yksi pesutaso, aseta indikaattorit diagonaalisesti, toinen tason etuosaan ja toinen sen takaosaan

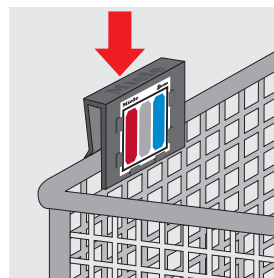

5. Yleensä indikaattoripidikkeet saa asennettua instrumentteja sisältävään verkkokoriin tai ylä-/alakoriin