



Miele

**Kun desinfioitavaa
on paljon.**

Ja tilaa vain vähän.

SlimLine — uusi ergonominen ratkaisu
hammashuollon instrumenttien koneelliseen käsittelyyn

SlimLine

PWD 7121 ja PWD 7122



Vain 650 mm kapea SlimLine vie erittäin vähän tilaa, mutta tarjoaa reilusti käyttökapasiteettia, 252 litraa. Koneen kolmelle tasolle mahtuu joustavasti erilaisia koreja ja telineitä. Niissä voit pestä ja desinfioida jopa 66 onttoa instrumenttia, 24 instrumenttikasettia, 3 verkkokoria ja muita instrumentteja yhdellä kertaa.

**Täydellinen
yhdistelmä:**
erinomainen
suorituskyky
ja vähäinen
tilantarve.

Enemmän kuin tilaihme.

SlimLine yhdellä silmäyksellä.

Maksimoi hammaslääkärinvastaanottosi tehokkuus. SlimLine-koneet ovat oivallinen ratkaisu, kun käytettävissä oleva tila halutaan hyödyntää optimaalisesti. Luotettavat tulokset, helppo käyttää.

Tehokas

- Kompakti, leveys vain 650 mm
- Tilava pesukammio ja 3-tasoinen vaunu, jossa tilaa hammashoidon instrumenteille ja koreille
- Lyhyet ohjelma-ajat tehokkaan ja älykkään nopeussäätöisen pumpun ansiosta
- Tarvittaessa erittäin suorituskykyinen
- Säästää vettä aina mahdollisuuksien mukaan
- Ohjelma-aikoja entisestään lyhentävä lämmitetty tankki*

* Vaihtelee malleittain

Ergonominen

- Ergonominen täyttökorkeus vaivattomaan täyttöön ja tyhjennykseen
- Automaattinen kemikaalien annostus koneen sisällä säilytettävistä kanistereista
- Nopea ja helppo konfiguroida yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi

Joustava

- Joustava ohjaus, helposti yksilöllisten tarpeiden mukaan muokattavat ohjelmat
- 20 vapaata ohjelmapaikkaa
- Eri täyttövaihtoehtoja yhden peruskorin ja siihen asetettavien moduulien ja telineiden avulla
- Joustava kemikaalien käyttö, koneen sisällä tilaa kolmelle 5 litran kanisterille
- 2-luukkuinen vaihtoehto saatavana, malli PWD 7122

Intuiitiivinen

- Älykäs 7" värillinen kosketusnäyttö, optimoidut ohjelmat ja 20 vapaata ohjelmapaikkaa
- Näyttö on helppo pitää puhtaana
- Ohjelmoitu prosessidokumentointiohjelmistoja varten
- Ohjelmoitu liitettäväksi Miele Cloudiin (Miele MOVE)




Tutustu lähemmin.

Desinfiointia täysin uudella tasolla.

Helppokäyttöiset varusteet, kuten joustava korijärjestelmä, tukevat sinua arjen töissä. Kun vaunu on jaettu kolmeen tasoon, moduulit ja telineet voidaan järjestää siihen monella tavalla, joten se mukautuu helposti tarpeisiisi.

Vaihtoehto: Kaksiluukkuinen **PWD 7122**

SlimLine PWD 7122:ssa on kaksi luukku. Näin täyttö- ja purku-puoli voidaan erottaa toisistaan, jolloin erotat epäpuhtaan ja puhtaan puolen toisistaan hygieenisesti.

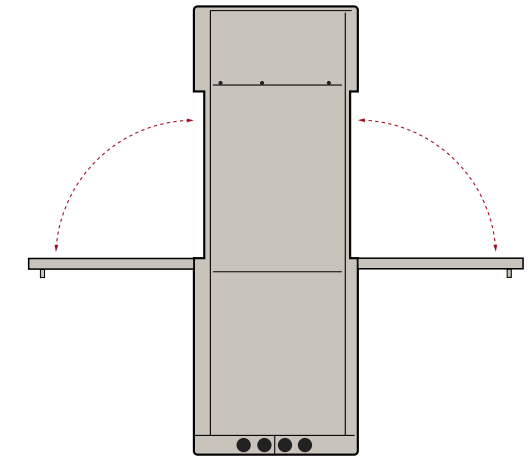

Täyttöesimerkkejä, **AWD 217**



- 66 onttoa instrumenttia
- 160 instrumenttisarjaa
- 6 hammashoidon instrumenttikasettia
- 18 jäljennöslusikkaa
- 3 verkkokoria
- 3 pientä kannellista koria pienille osille



- 66 onttoa instrumenttia
- 18 hammashoidon instrumenttikasettia
- 14 pihdit
- 3 verkkokoria
- 3 pientä kannellista koria pienille osille





Miele

PWD 7121

PWD 7122

Yleiset tiedot

Ulkomitat [leveys x korkeus x syvyys mm]	650, 1940, 700	650, 1940, 700
Kammion mitat [leveys x korkeus x syvyys mm]	570, 717, 590	570, 717, 590
Käyttötilavuus [litraa]	252	252
Täyttötapa	Vaunu, jossa tilaa moduuleille ja telineille	Vaunu, jossa tilaa moduuleille ja telineille
Ergonominen täyttökorkuus	♦	♦
Ohjelmat	Vario TD Dental Service	Vario TD Dental Service
Vapaita ohjelmapaikkoja	20	20
Ohjelmavalinta	7" kosketusnäyttö	7" kosketusnäyttö

Ominaisuudet

Yksiluukkuinen malli	♦	–
Kaksiluukkuinen malli	–	♦
Saranallinen lasiluukku (luukut)	♦	♦
Kammion valaistus	♦	♦
Kammion mateiaali	1.4404/316L (elektrolyysikiillotettu)	1.4404/316L (elektrolyysikiillotettu)
Ilmakuivaus	♦	♦
HEPA H14 -suodatin	♦	♦
Höyrykondensaattori	♦	♦
Poistopumppu	♦	♦
Annostuspumppuja [määrä]	2	2
Nopeussäätöinen pumppu	♦	♦
Vesiliitännät	LV, KV, DI	LV, KV, DI
Sähköliitäntä 3N AC 400 V, 50 Hz	♦	♦
Kokonaisnimellisteho [kW]	10,1	10,1
WLAN	♦	♦
USB-portti	♦	♦
Ethernet-liitäntä	♦	♦
Pesuainekapasiteetti	3 x 5 litraa	3 x 5 litraa
Vuotoanturi	♦	♦

Ominaisuudet (vaihtelevat malleittain)

Esilämmitystankki	♦	♦
Johtokykymittari	♦	♦
Integroitu vedenpehmennin	♦	♦

Valinnaiset moduulit

Potentiaalivapaat kontaktit	♦	♦
Ylimääräinen annostuspumppu (-pumput)	♦	♦
Demineralisoidun veden lisäpumppu	♦	♦
Johtokykymittari	♦	♦
Poistoveden jäähdytys	♦	♦

Kapasiteetti (esimerkkejä)


66 onttoa instrumenttia 24 verkkokoria, 18 jäljennöslusikkaa 3 verkkokoria	♦	♦
6 onttoa esinettä, 160 instrumenttisarjaa, 18 jäljennöslusikkaa 3 verkkokoria	♦	♦

Miele 360PRO.

Räätälöity ratkaisu vastaanotollesi.

Tarkkuus on velvollisuus. Se motivoi meitä.

Tiedämme, että instrumenttien koneellinen käsittely on keskeistä kaikenlaisilla hammashoidon vastaanotoilla. Haluamme tukea sinua tässä työssä tarjoamalla käyttöösi 360PROn, kokonaisvaltaisen järjestelmän, jossa saat kaiken tarvittavan samalta toimittajalta. Suunnittelusta keskeisiin ratkaisuihin, varusteista verkotukseen, kemikaaleista kunnossapitoon ja työvaatteiden pesuun: me olemme aina käytettävissäsi, jotta voit rauhassa keskittyä potilaisiisi.

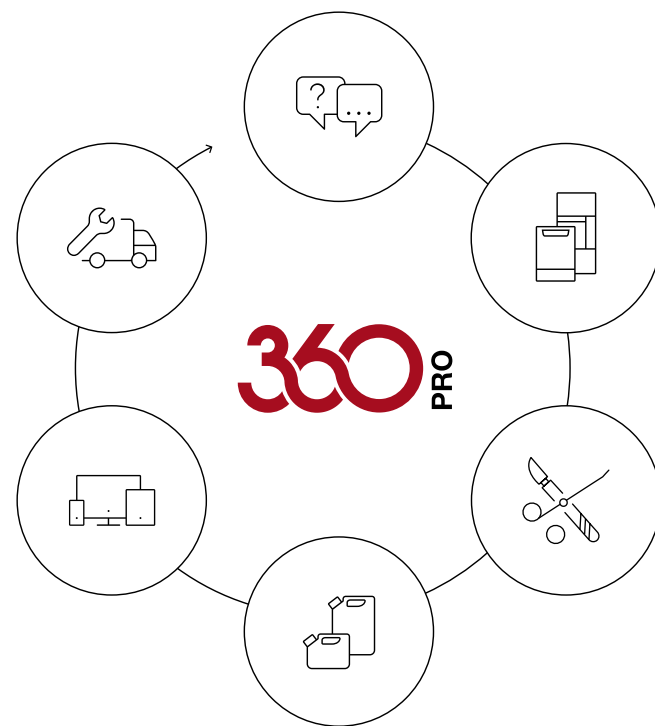

Lisätietoa
Miele 360PROsta
hammashuoltoon



Kattava suoja.

PROtect-huoltoratkaisuissamme yhdistyvät kattavat huoltopalvelut, tiukka budjetinvalvonta sekä sujuva varaosapalvelu. Tarjoamme avointa, oman alasi mukaista neuvontaa, huolehdimme toimenpiteiden aikataulutuksesta ja takaamme varaosien saatavuuden, jopa 15 vuoden ajan konemallisi valmistuksen päättymisen jälkeen.



Lisätietoa
PROtectista

Miele

Kestäviä ratkaisuja ja erinomaista muotoilua.

Hyvä asia tiimillesi, vielä parempi planeetalle.

“Immer besser” (yhä paremmin) on ollut mottomme vuodesta 1899. Se ohjaa meitä pyrkimään päivä päivältä paremmiksi. Joka päivä se motivoi meitä kehittämään parempia ja älykkäämpiä ratkaisuja. Esimerkiksi se, että varaosia on saatavissa 15 vuoden ajan konemallin tuotannon päätymisen jälkeen, pitää käyttökulut pieninä ja pienentää ekologista jalanjälkeä. Koneiden testaaminen 15 000 käyttötuntia varten takaa niiden pitkän käyttöiän. Ja koska koneidemme mukana toimitetaan nykyään digitaaliset käyttöohjeet, niistäkään ei synny jätettä.



Lue lisää: Vastuullisuus ja
MIELE Professional

Mikään ei voi korvata **henkilökohtaista palvelua.**

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää uudesta tilaihmeestämme –
soita tai täytä yhteydenottolomake verkkosivuillamme.

Puhelin: 09 875 97 500

Ma-pe klo 8–16



Lisätietoja Miele SlimLine-koneista
ja yhteydenottolomake